



Снабжение
Медицинских
Учреждений



<http://medtehural.ru/>

Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнёры!

Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений, косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте, являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы. Компания "Медицинские Технологии Урала" находится в городе Екатеринбурге. Город равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и эффективного партнера!

*ООО "Медицинские Технологии Урала", желает Вам
Здоровья и Процветания на долгие года*

*Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется
любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением
температурного режима.*

Мы заботимся о безопасности Вашего груза! Сотрудничая с нами,

Вы делаете правильный выбор!





КАТАЛОГ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ)

Выбор цвета

- Расцветка Chromascop® 5
Расцветка A-D с ультрасветлыми цветами Bleach

Зубы

- Пластмассовые зубы 7
Расцветка SR PHONARES® II
SR Phonares® II
SR Phonares® II Typ
SR Phonares® II Lingual
Живые форм-карты зубов SR PHONARES® II
SR Vivodent® DCL
SR Vivodent® Plus DCL
SR Postaris® DCL
SR Orthotyp® DCL
Расцветка SR Vivodent® PE
Фронтальные зубы SR Vivodent® PE
Боковые зубы SR Orthotyp® PE
SR Vivodent®
SR Orthotyp® 12
Принадлежности
Шкаф для зубов
Шкаф для зубов SR PHONARES®
Таблица комбинирования зубов 13

Протезирование

- Материалы 16
IvoBase® High Impact
IvoBase® Hybrid
SR Ivoclar® High Impact
Пластмасса горячей полимеризации SR Ivoclar®
SR Ivoclar® Elastomer
ProBase® Hot
ProBase® Cold
SR Triplex® Hot
SR Triplex® Cold
Вспомогательные материалы 24
Light Tray
SR Ivoclar®
Сепарационная жидкость Separating Fluid
Centric Tray

Приборы для протезирования

- Технологическое оборудование 26
Инжектор IvoBase® Injector
Артикуляторы 28
Stratos® 100
Stratos® 200
Stratos® 300
Принадлежности для артикуляторов 29
Набор принадлежностей «Индивидуальный» (для Stratos® 200)
Суставные вставки
Набор принадлежностей «Индивидуальный» (для Stratos® 100, 300)
Набор принадлежностей «Средние параметры» (для Stratos® 100, 200, 300)
FH-переходное устройство
2 1/2 двумерная калотта
Трехмерная калотта
Резцовые подставки
Держатель моделей
Фиксаторы центральной окклюзии
Stratos® Адаптор для подключения дуг других производителей
Чемодан для артикулятора Stratos®
Оборудование для регистрации окклюзии 32
Система универсальной трехмерной трансферной дуги UTS 3D
UTS 3D-принадлежности
Опорные штифты UTS тип II
Gnathometer M тип 2

Облицовочные материалы

- Полиметилметакрилат 34
SR Ivoclar®
Изолирующая жидкость SR® Separating Fluid
Лабораторные композиты 39
SR Nexco®
SR Adoro®
Сплавы SR Adoro®
SR Chromasit®
SR Принадлежности 59

- SR® Link
Ретенционный адгезив SR® Retention Adhesive
Микроретенционные перлы SR® Micro Retention Beads
Макроретенционные перлы SR® Macro Retention Beads
Модель-сепаратор SR® Model Separator
SR® Gel
Универсальная полировочная паста Universal Polishing Paste
SR® Composiv
Моделировочные инструменты SR® Modelling Instruments
Универсальный держатель
Одноразовая кисточка
Одноразовые губки
Канюли
Колпачки для канюль
Пластина для замешивания малая SR® Mixing Plate (small)
Блок для замешивания малый SR® Mixing Pad (small)

Временные конструкции

- Система Telio 63
Стартовый набор Telio® CAD for CEREC® Starter Kit
Блоки Telio® CAD for CEREC® and inLab®
Стартовый набор Telio® Lab Starter Kit
Базовый набор Telio® Lab Basic Kit
Telio® Lab LC Veneer Kit
Telio® CS C&B
Telio® CS Link
Telio® CS Cem Implant
Telio® CS Desensitizer
Telio® CS Inlay
Telio® CS Onlay

Металлокерамика

- Фтор-апатитовая леицитная стеклокерамика 69
IPS d.SIGN®
Базовый набор IPS d.SIGN® Basic Kit
Дип-дентины IPS d.SIGN® Deep Dentin
Плечевые массы IPS d.SIGN® Margin
Ультрасветлые массы IPS d.SIGN® Bleach BL
Импульсные массы IPS d.SIGN® Impulse
Десневые массы IPS d.SIGN® Gingiva
Порошковые красители IPS d.SIGN® Essence
Красители IPS d.SIGN® Stains
Красители IPS d.SIGN® Shade
Флюоресцентный опакер IPS d.SIGN® Opaquer F
Жидкость для опакера IPS d.SIGN® Opaquer Liquid
Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS d.SIGN® Margin Build-Up Liquid
Жидкость для глазури и красителей IPS d.SIGN® Glaze and Stain Liquid
Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid Medium
Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid Light
Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid Premium
Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid Optimum 1
Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid Optimum 2
Силер для моделей IPS® Model Sealer
Силер для плечевых масс IPS® Margin Sealer
Сепарационная жидкость для керамики с бращем IPS® Ceramic Separating Liquid with Brush
Бокс для материалов IPS d.SIGN®
Расцветки IPS d.SIGN®
Сплавы IPS d.SIGN 84
d.SIGN® – привлекательная программа сплавов
Леицитная металлокерамика 87
Стартовый набор IPS InLine® One Starter Kit
Базовый набор IPS InLine® One Basic Kit
IPS InLine® One Denticisal
Базовый набор IPS InLine® Basic Kit
Стартовый набор IPS InLine® Trial Kit
Набор дип-дентинов IPS InLine® Deep Dentin Kit
Набор плечевых масс IPS InLine® Margin Kit
Набор ультрасветлых цветов IPS InLine® Bleach Kit BL
Набор импульсных масс IPS InLine® Impulse Kit
Набор красителей IPS InLine® System Shade / Stains Kit
Набор десневых масс IPS InLine® Gingiva Kit

- Базовый набор IPS InLine® PoM Basic Kit
Стартовый набор IPS InLine® PoM Trial Kit
IPS InLine® PoM Заготовки
IPS InLine® PoM Массы Touch Up
Опакер F IPS InLine® System Opaquer F
Корректировочная масса IPS InLine® System Add-On 690°C/1274°F
Жидкость для опакера IPS InLine® System Opaquer Liquid
Жидкость для плечевых масс IPS InLine® Margin Build-Up Liquid
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine® System Glaze and Stains Liquid
Моделировочная жидкость IPS InLine® System Build-Up Liquid L
Моделировочная жидкость IPS InLine® System Build-Up Liquid P
Расцветка IPS InLine®
Бокс для материалов IPS InLine® System
Силер для моделей IPS® Model Sealer
Силер для плечевых масс IPS® Margin Sealer
Сепарационная жидкость для керамики с бращем IPS® Ceramic Separating Liquid with Brush
Сплавы IPS InLine®

- Керамика на основе полевого шпата 106
IPS Classic® / IPS Classic® V
Опакер IPS Classic® / IPS Classic® V Opaquer
Интенсивный опакер IPS Classic® / IPS Classic® V Intensive Opaquer
Десневой опакер IPS® Gingiva Opaquer
Низкотемпературный опакер IPS® Lowraque IPS® Lowraque V
Низкотемпературный интенсивный опакер IPS® Lowraque Intensiv
Низкотемпературный десневой опакер IPS® Lowraque Gingiva
Плечевая масса IPS® Margin / IPS® Margin V
Интенсивная плечевая масса IPS® Margin Intensiv
Опак-дентин IPS® Opaque Dentin / IPS® Opaque Dentin V
Дентин IPS Classic® / IPS Classic® V Dentin
Массы режущего края IPS Classic® / IPS Classic® V Incisal
Опаловые массы режущего края IPS Classic® Oral-Incisal
Прозрачная масса IPS Classic® / IPS Classic® V Transparent
Импульсные массы IPS® Impulse
Эффект-масса IPS® Effect
Десневая масса IPS® Gingiva
Десневой модификатор IPS® Gingiva Modifier
Дентиновые красители IPS® Shade / IPS® Shade V
Красители IPS® Stains-P
Корректировочная масса IPS Classic® Correction Powder
Глазуровочная паста IPS Classic® Glaze Paste
Жидкость для глазури и красителей IPS Classic® Glaze and Stain Liquid
Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS® Margin Build-Up Liquid
Моделировочная жидкость IPS Classic® Build-Up Liquid L
Моделировочная жидкость IPS Classic® Build-Up Liquid N
Моделировочная жидкость IPS Classic® Build-Up Liquid S
Силер для моделей IPS® Model Sealer
Силер для плечевых масс IPS® Margin Sealer

Безметалловая керамика

- IPS e.max® 120
Базовый набор IPS e.max® Press Basic Kit A-D
Базовый набор IPS e.max® Press Abutment Solutions Basic Kit A-D
Стартовый набор IPS e.max® Press Starter Kit A-D
Набор заготовок IPS e.max® Press Impulse Ingot Kit
Заготовки IPS e.max® Press HO
Заготовки IPS e.max® Press MO
Заготовки IPS e.max® Press LT
Заготовки IPS e.max® Press HT
Заготовки IPS e.max® Press Impulse
Опакеры IPS e.max® Press Opaquer
Набор IPS e.max® Abutment Solutions Cem Kit
Базовый набор IPS e.max® ZirPress Basic Kit
Заготовки IPS e.max® ZirPress MO
Заготовки IPS e.max® ZirPress LT
Заготовки IPS e.max® ZirPress HT

Заготовки IPS e.max® ZirPress Gingiva		
Базовый набор IPS e.max® ZirCAD для inLab® Basic Kit		
Блоки IPS e.max® ZirCAD для inLab®		
Базовый набор IPS e.max® CAD for inLab® Basic Kit A-D		
Базовый набор IPS e.max® CAD-on for inLab® Basic Kit A-D		
Набор для кристаллизации IPS e.max® CAD Crystallization Kit		
Блоки IPS e.max® CAD for inLab® MO / C14		
Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® LT / I 12 и C 14 Blocks		
Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® HT / I 12 и C 14 Blocks		
Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® Impulse / C 14 Blocks		
Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® HT / V 40 Blocks		
Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® LT / C 16 Blocks		
Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® LT / V32 Blocks		
IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® Abutment Solutions: блоки MO A 14 и LT A 16		
Блоки IPS e.max® CAD for Everest® MO / C14 Blocks		
Блоки IPS e.max® CAD for Everest® LT / C14 Blocks		
Блоки IPS e.max® CAD for Everest® HT / C14 Blocks		
Красители IPS e.max® CAD Crystall./Shades		
Красители IPS e.max® CAD Crystall./Stains		
Пастообразная глазурь IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Paste		
Глазурь-спрей IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Spray		
Жидкость для глазури IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Liquid		
Корректировочная масса IPS e.max® CAD Crystall./Add-On, Жидкость для корректировочной массы Add-On Liquid		
Тререр и пины для кристаллизации IPS e.max® CAD Crystallization Tray, Pins		
IPS e.max® CAD Crystall./Connect		
Корректировочная масса IPS e.max® CAD Crystall./Add-On Connect, Жидкость для корректировочной массы Add-On Liquid		
Базовый набор IPS e.max® Ceram Basic Kit		
Стартовый набор IPS e.max® Ceram Trial Kit		
Набор циркониевых подслоев IPS e.max® Ceram ZirLiner Kit		
Набор плечевых масс IPS e.max® Ceram Margin Kit		
Набор дип-дентинов IPS e.max® Ceram Deep Dentin Kit		
Набор импульсных масс IPS e.max® Ceram Impulse Kit		
Набор порошковых красителей IPS e.max® Ceram Essence Kit		
Набор красителей IPS e.max® Ceram Shade Kit		
Набор ультрасветлых цветов IPS e.max® Ceram Bleach Kit BL		
Набор десневых масс IPS e.max® Ceram Gingiva Kit		
Циркониевый подслои IPS e.max® Ceram ZirLiner		
Плечевые массы IPS e.max® Ceram Margin		
Дип-дентин IPS e.max® Ceram Deep Dentin		
Дентин IPS e.max® Ceram Dentin		
Масса режущего края/ Транспа-масса режущего края IPS e.max® Ceram Incisal/ Transpa Incisal		
Транспа-масса IPS e.max® Ceram Transpa		
Импульсная масса окклюзионного дентина IPS e.max® Ceram Impulse Occlusal Dentin		
Импульсная мамелоновая масса IPS e.max® Ceram Impulse Mamelon		
Импульсная масса кромки режущего края IPS e.max® Ceram Impulse Incisal Edge		
Импульсная опаловая эффект-масса IPS e.max® Ceram Impulse Opal Effect		
Импульсная транспа-масса IPS e.max® Ceram Impulse Transpa		
Специальная импульсная масса режущего края IPS e.max® Ceram Impulse Special Incisal		
Импульсная масса режущего края Inter IPS e.max® Ceram Impulse Inter Incisal		
Импульсная пришеечная транспа-масса IPS e.max® Ceram Impulse Cervical Transpa		
Ультрасветлые массы IPS e.max® Ceram Bleach BL		
Десневые массы IPS e.max® Ceram Gingiva		
Порошкообразные красители IPS e.max® Ceram Essence		
Красители IPS e.max® Ceram Shade		
Глазурь IPS e.max® Ceram Glaze		
Корректировочные массы IPS e.max® Ceram Add-On		
Моделировочная жидкость для циркониевого подслоя IPS e.max® Ceram ZirLiner Build-Up Liquid		
Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS e.max® Ceram Margin Build-Up Liquid		
Моделировочная жидкость IPS e.max® Ceram Build-Up Liquid		
Жидкость для глазури и красителей IPS e.max® Ceram Glaze and Stain Liquid		
Стартовый набор муфельной системы IPS® 300 г Starter Kit		
Муфельная система IPS		
Силиконовые кольца IPS®		
Стержень из оксида алюминия IPS AloX Plunger		
Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS AloX Plunger Separator		
Цанги для заготовок IPS® Ingot Tongs		
Жидкость IPS e.max® Press Invex Liquid		
Расцветки IPS e.max®		
Упаковка IPS e.max®		
<i>Система IPS Empress®</i>	166	
IPS Empress®		
Базовый набор IPS Empress® Esthetic Basic Kit		
Заготовки IPS Empress® Esthetic		
Базовый набор IPS Empress® CAD для inLab® Basic Kit		
Стартовый набор IPS Empress® CAD for inLab Trial Kit		
Блоки IPS Empress® CAD for CEREC® and inLab® HT		
Блоки IPS Empress® CAD for CEREC® and inLab® LT Мультиблоки IPS Empress® CAD for CEREC® and inLab® Multi Blocks		
Пробные блоки IPS Empress® CAD for CEREC® and inLab®		
Набор универсальных красителей IPS Empress® Universal Shade/Stains Kit		
Универсальные красители IPS Empress® Universal Shades		
Универсальные красители режущего края IPS Empress® Universal Shades Incisal		
Универсальные красители IPS Empress® Universal Stains		
Универсальная глазуровочная паста IPS Empress® Universal Glaze Paste и Универсальная жидкость для глазури и красителей Glaze and Stain Liquid		
Универсальная глазурь-спрей IPS Empress® Universal Glazespray		
Набор IPS Empress® Veneer Kit		
Пасты Wash IPS Empress® Esthetic Veneer Wash-Pasten		
Опаловая масса режущего края IPS Empress® Esthetic Veneer Incisal Opal		
Масса режущего края IPS Empress® Esthetic Veneer Incisal		
Модификатор цвета IPS Empress® Esthetic Veneer Chroma Modifier		
Осветлитель IPS Empress® Esthetic Veneer Brightener		
Прозрачные массы IPS Empress® Esthetic Veneer Transparent		
Корректировочная масса IPS Empress® Add-On		
Моделировочная жидкость IPS Empress® Esthetic Veneer Build-Up Liquid		
Муфельная система IPS Empress®		
Силиконовые кольца IPS® Silicone Ring		
Стержень из оксида алюминия IPS Empress® AloX Plunger		
Одноразовый поршень IPS Empress® One-Way Plunger		
Расцветки IPS Empress®		
Упаковка IPS Empress®		
<i>Система цельнокерамических корневых штифтов и восстановление культи</i>	180	
CosmoPost®		
Заготовки IPS Empress® Cosmo		
<i>Пластмассовый блок CAD/CAM</i>	181	
IPS AcryCAD®		
<i>Паковочные массы</i>	182	
Паковочная масса IPS Empress® Esthetic Speed		
Жидкость для паковочной массы IPS Empress® Esthetic Speed		
IPS® PressVEST		
IPS® PressVEST Speed		
<i>IPS Принадлежности</i>	184	
Контрольный шаблон IPS® Sprue Guide		
Универсальный тререр IPS® UniTray		
Муфельная система IPS®		
Силиконовые кольца IPS®		
Муфельная цанга IPS® Investment Ring Tongs		
Пинцет		
Шпатель IPS® Spatula		
Кисточки для моделирования		
Культевой материал IPS® Natural Die Material		
IPS® Natural Die Material Kit Promo		
Расцветка культевых материалов IPS® Natural Die Material		
Лабораторный контрастный спрей IPS® Contrast Spray Labside		
Фиксирующая паста IPS® Object Fix Flow / IPS® Object Fix Putty		
Фиксация		188
<i>Сочетание материалов</i>		
Протравливающий гель IPS®		
Ceramic Etching Gel		
Monobond Plus		
Total Etch		
ExcITE® DSC		
Syntac® и Heliobond		
Variolink® II		
Variolink® II Try-In		
Variolink® Veneer		
Variolink® Veneer Try-In		
Multilink® Hybrid Abutment		
Multilink® Automix		
SpeedCEM®		
Vivaglass® CEM		
Оборудование		192
<i>Для лабораторных композитов</i>		
Ivomat® IP3		
Резервуар Ivomat®		
Настенный держатель Ivomat® Wallfixator Quick		
Lumamat® 100		
Тестовый набор L100		
<i>Оборудование для обработки керамики</i>		195
Programat® P310		
Programat® P510		
Керамическая печь Programat® P700/G2		
Вакуумный насос VP4		
Вакуумный насос VP3 easy		
Набор принадлежностей Programat® Accessories Set 2		
Тререр в комплекте Programat® Firing Tray Kit		
Опорные штифты для тререра Metal Pins for Firing Tray		
Набор для контроля температуры 2 Temperature Checking Set 2		
Тестовая серебряная проба		
Набор автоматического температурного контроля Automatic Temperature Checking Set «ATK2»		
Шпильцы		
Держатель щипцов Programat®		
USB Загрузочный кабель		
Набор для модернизации EP 600 Combi Upgrade Kit		
Карта памяти EP 600 Combi Program Memory Card 1		
Набор автоматического температурного контроля Automatic Temperature Checking Set 1 (ATK1)		
ATK 1 Пробы		
ATK 1 Контактные штифты / Керамические цоколи Programat® EP 3000 G2		
Programat® EP 5000 G2		
Решетка для охлаждения опок		
Набор автоматического температурного контроля Automatic Temperature Checking Set «ATK2»		
Programat® S1		
Столик для спекания Programat® S1 Sinter Tray		
Вилка-держатель для столика спекания Programat® S1 Sinter Tray Fork		
Набор для контроля температуры Programat® S1 Temperature Checking Set		
Стартовый набор набора для контроля температуры Programat® S1 Temperature Checking Set Starter Kit		
Лоток для спекания Sintramat		
Sintramat® ZrO ₂ Дробь		
Ivomix®		

Расцветка Chromascop®

Шкала Chromascop служит инструментом для определения цвета различных продуктов фирмы Ivoclar Vivadent. Это позволяет просто и удобно комбинировать эти продукты в пределах одной цветовой системы.

Благодаря логичному распределению отдельных цветов шкала Chromascop помогает определить цвет точно и эффективно. 20 основных цветов разделены на 5 наглядных вынимающихся цветовых групп.



Преимущества:

- удобство в работе
- логичное хроматическое построение цвета
- единый цветовой стандарт
- шкалу можно дезинфицировать

Форма поставки

Расцветка Chromascop	1 x	529479
----------------------	-----	--------

Расцветка A-D с ультрасветлыми цветами Bleach

Расцветка A-D с ультрасветлыми цветами Bleach служит инструментом для определения цвета зубов в соответствии с цветовыми системами A-D и Bleach.

16 базовых цветов цветовых групп А, В, С и D дополняются четырьмя ультрасветлыми цветами, начиная с Bleach BL 1 до BL 4, они ориентированы на практическую работу и являются идеальным рабочим инструментом для врача-стоматолога и зубного техника.



Преимущества:

- 16 цветов системы, известной уже многие годы
- 4 ультрасветлых цвета Bleach
- единый цветовой стандарт для продуктов фирмы Ivoclar Vivadent
- шкалу можно дезинфицировать
- шкалу можно автоклавировать

Форма поставки

Расцветка A-D

Комплект расцветок (16 и 4 цвета)	1 x	628587
Базовая расцветка (16 цветов)	1 x	628623
Цвета Bleach (4 цвета)	1 x	628605

Обзор продуктов в цветовых системах

	Chromascop	A-D	Bleach	PE
<i>Линии зубов</i>				
SR Phonares II		✓	✓	
SR Phonares II <i>Тур</i>		✓	✓	
SR Phonares II <i>Lingual</i>		✓	✓	
SR Vivodent DCL	✓	✓	✓	
SR Vivodent Plus DCL		✓	✓	
SR Postaris DCL	✓	✓	✓	
SR Orthotyp DCL		✓	✓	
SR Ortholingual DCL	✓ (11)	✓	✓	
SR Orthoplane DCL	✓ (11)	✓	✓	
SR Vivodent PE				✓
SR Orthotyp PE				✓
SR Orthosit PE				✓
SR Vivodent	✓			
SR Orthotyp	✓			
<i>Лабораторная пластмасса</i>				
Telio		✓	✓ (1)	
SR Ivocron	✓			
<i>Лабораторные композиты</i>				
SR Nexco		✓	✓ (2)	
SR Adoro	✓	✓		
SR Chromasit	✓			
SR Spectrasit	✓ (10)			
<i>Металлокерамика</i>				
IPS d.SIGN	✓	✓	✓	
IPS InLine One	✓	✓	✓	
IPS InLine	✓	✓	✓	
IPS InLine PoM	✓	✓	✓	
IPS Classic	✓	✓		
<i>Безметалловая керамика</i>				
IPS e.max	✓	✓	✓	
IPS Empress	✓	✓	✓	

Расцветка SR PHONARES® II

Зубы расцветки по форме, наслоению материала и цвету соответствуют фронтальным зубам SR Phonares® II. С ее помощью превосходно определяется цвет съемных реставраций с зубами SR Phonares в 16 цветах А–D и 2 цветах Bleach.



Эта расцветка служит для определения цвета зубов:

- SR Phonares II
- SR Phonares II Typ
- SR Phonares II Lingual

Форма поставки

Расцветка SR Phonares II	1 x	640738
Расцветка SR Phonares II с наименованием	1 x	640099

SR Phonares® II

SR Phonares II – это четырехслойные зубы, изготовленные в сложном технологическом процессе, для эстетичного съемного протезирования, соответствующего возрасту и другим особенностям пациента. Благодаря использованию гибридного композита последнего поколения с наполнителем эти зубы особенно подходят для полного и частичного протезирования, а также протезирования на имплантах, именно в тех случаях, когда к эстетике предъявляются самые высокие требования.



Преимущества:

- очень естественная эстетика
- новая концепция формы зубов
- максимально закрытая проксимальная область
- особенно простая постановка передних зубов благодаря расширенной пришеечной части

Форма поставки

Передние зубы SR Phonares II

- 16 цветов А–D, 2 цвета Bleach BL
- 18 для верхней челюсти, 6 для нижней челюсти

Цвета А–D и Bleach **гарнитур 6 шт. 639350**

SR Phonares® II Typ

Зубы SR Phonares II Typ изготовлены из того же гибридно-го композита последнего поколения с наполнителем, что и передние зубы. Форма полуанатомическая и предназначена для классического метода постановки. Выпускаются в цветах А–D и Bleach BL.



Преимущества:

- высокая резистентность к стираемости
- редуцированная базальная часть сокращает время на припасовку
- идеальны для закрытия абатментов имплантов и других элементов конструкции.

Форма поставки

Боковые зубы SR Phonares II Typ

- 16 цветов А–D, 4 цвета Bleach BL
- 3 для верхней челюсти, 3 для нижней челюсти

Цвета А–D и Bleach **гарнитур 8 шт. 639352**

SR Phonares® II *Lingual*

SR Phonares II *Lingual* изготовлены из того же гибридного композита последнего поколения с наполнителем, что и передние зубы. Форма предполагает лингвализированную постановку, поэтому подходят прежде всего для имплантологии. Выпускаются в цветах А–D и Bleach BL.



Преимущества:

- высокая резистентность к стираемости
- редуцированная базальная часть сокращает время на припасовку
- идеальны для закрытия абатментов имплантов и других элементов конструкции.

Форма поставки

Боковые зубы SR Phonares II *Lingual*

16 цветов А–D, 4 цвета Bleach BL

3 для верхней челюсти, 3 для нижней челюсти

Цвета А–D и Bleach

гарнитур 8 шт.

639351

Живые форм-карты зубов SR PHONARES® II

Эти форм-карты оснащены гарнитурами зубов одного цвета. Эти форм-карты являются идеальным вспомогательным средством при выборе зубов в присутствии пациента. Кроме того, их удобно использовать в лаборатории. Все имеющиеся формы разделены на группы.



Форма поставки

Живая форм-карта зубов SR Phonares II, цвет А2

Anterior с моделью Set-up	1 x	641068
Anterior без модели Set-up	1 x	641066
Posterior Typ и Lingual	1 x	641070

Живая форм-карта зубов SR Phonares II, цвет А3

Anterior с моделью Set-up	1 x	641056
Anterior без модели Set-up	1 x	641067
Posterior Typ и Lingual	1 x	641069

SR Vivodent® DCL

Линия фронтальных зубов SR Vivodent обладает превосходными эстетическими свойствами, кроме того, эти зубы выполнены из материала DCL (Double-Cross-Linked), выпускаются в 16 цветах A–D, 20 цветах Chromascop и 4 цветах Bleach. 24 верхних и 8 нижних A-форм находятся в вашем распоряжении.



Преимущества:

– улучшенные показатели стираемости, а также простое определение цвета при изготовлении комбинированных протезов.

Форма поставки

Фронтальные зубы SR Vivodent DCL

20 цветов Chromascop, 16 цветов A–D, 4 цвета Bleach BL
24 для верхней челюсти, 8 для нижней

Chromascop	гарнитур 6 шт.	611630
A–D и Bleach	гарнитур 6 шт.	564852

SR Vivodent® Plus DCL

В линии зубов SR Vivodent Plus DCL предлагаются наиболее ходовые на северо-американском рынке 18 форм зубов.



Преимущества:

– широкий ассортимент форм зубов верхней челюсти

Форма поставки

Фронтальные зубы SR Vivodent Plus DCL

16 цветов A–D, 4 цвета Bleach BL
18 для верхней челюсти

A–D и Bleach	гарнитур 6 шт.	591300
--------------	-----------------------	---------------

SR Postaris® DCL

SR Postaris DCL – это боковые зубы, соответствующие самым высоким требованиям, для изготовления полных и частичных зубных протезов. Дополнительно к цветам Chromascop эти высококачественные зубы выпускаются в 16 цветах A–D и Bleach. Широкий цветовой спектр позволяет еще точнее определить цвет. Зубы SR Postaris DCL предлагаются в 6 формах для верхней челюсти и 6 формах для нижней.



Преимущества:

– биофункциональная окклюзия со встроенным окклюзионным компасом
– беспрепятственные артикуляционные движения
– идеальные фиссурно-бугорковые соотношения зубов-антагонистов

Форма поставки

Боковые зубы SR Postaris DCL


20 цветов Chromascop, 16 цветов A–D, 4 цвета Bleach BL
6 для верхней, 6 для нижней челюсти

Chromascop	гарнитур 8 шт.	543104
A–D и Bleach	гарнитур 8 шт.	572073

SR Orthotyp® DCL

Линия боковых зубов SR Orthotyp DCL, до сих пор известная как идеальное дополнение к линии фронтальных зубов SR Vivodent, была оптимизирована благодаря использованию материала DCL (Double-Cross-Linked).

5 верхних и 5 нижних форм боковых зубов выпускаются в 16 цветах A–D и Bleach.

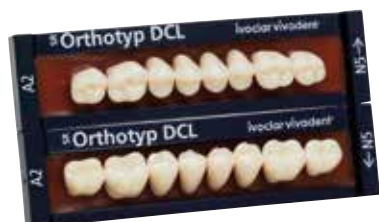

Преимущества:

- «специалист» для полного протезирования
- может использоваться также для частичного протезирования

Форма поставки

Боковые зубы SR Orthotyp DCL

16 цветов A–D, 4 цвета Bleach BL

5 для верхней челюсти, 5 для нижней челюсти

A–D и Bleach **гарнитур 8 шт. 565587**

Расцветка SR Vivodent® PE

Для определения цвета четырехслойных зубов PE служит расцветка SR Vivodent PE с 20-ю хроматически упорядоченными цветами зубов. Идеальный выбор для:

- фронтальных зубов SR Vivodent PE
- боковых зубов SR Orthotyp PE
- боковых зубов SR Orthosit PE



Форма поставки

Расцветка SR Vivodent PE **1 x 538318**

Фронтальные зубы SR Vivodent® PE

Фронтальные зубы SR Vivodent PE с эффектным жемчужным оттенком имеют высокие показатели прочности, плотности, химической прочности и стабильности цвета.



Преимущества:

- высокая эстетичность
- в первую очередь показаны для полных зубных протезов
- естественно окрашенная шейка зуба

Форма поставки

Фронтальные зубы SR Vivodent PE

20 цветов SR Vivodent PE

24 верхних, 8 нижних **гарнитур 6 шт. 504375**

Боковые зубы SR Orthotyp® PE

Эстетичные качественные боковые зубы Orthotyp подкупают своими функциональными фасетками стирания. Зубы SR Orthotyp PE выпускаются в формах для глубокого, перекрестного и нормального прикусов.



Преимущества:

- комбинируются с фронтальными зубами SR Vivodent PE
- в первую очередь показаны для полных зубных протезов
- зубы для глубокого, перекрестного и нормального прикусов.

Форма поставки

Боковые зубы SR Orthotyp PE

20 цветов SR Vivodent PE

по 5-N, 2-K, 2-T,

для верхней/нижней челюсти **гарнитур 8 шт. 522751**

SR Vivodent®

Живой внешний вид и хорошие химические свойства отличают линию фронтальных зубов SR Vivodent. Широкий выбор – 20 верхних и 8 нижних А-форм – базируется на уже зарекомендовавших себя анатомических формах фронтальных зубов Ivoclar Vivadent.



Преимущества:

- особенно хорошо подходят для полных и комбинированных съемных зубных протезов

Форма поставки

Фронтальные зубы SR Vivodent

20 цветов Chromascop

20 верхних, 8 нижних

гарнитур 6 шт. 540260

SR Orthotyp®

5 верхних и 5 нижних N-форм боковых зубов SR Orthotyp являются идеальным дополнением к фронтальным зубам SR Vivodent. Дизайн зубов основан на уже зарекомендовавшем себя принципе Orthotyp.



Форма поставки

Боковые зубы SR Orthotyp

20 цветов Chromascop

5 для верхней,

5 для нижней челюсти

гарнитур 8 шт. 540050

Шкаф для зубов

Элегантный и практичный дизайн шкафа для зубов Ivoclar Vivadent говорит сам за себя. Модульные шкафы для зубов выпускаются в трех размерах. Ящики можно оснащать по выбору гарнитурами для фронтальных или боковых зубов.

Выпускаются следующие размеры:

- Z4 = 4 ящика
- Z6 = 6 ящиков
- Z12 = 12 ящиков



Объем одного ящика

- 90 гарнитуров x 6 = 540 фронтальных зубов
- Vivoperl PE, SR Vivodent DCL, SR Phonares II, SR Vivodent PE, SR Vivodent
- 60 гарнитуров x 8 = 480 боковых зубов
- SR Phonares II Lingual, SR Phonares II Typ, SR Postaris DCL, SR Orthotyp DCL, SR Orthotyp PE, SR Orthosit PE

Форма поставки

Шкафы для зубов

Z4 (44 x 44,5 x 10,5 см)	4	540307
Z6 (44 x 44,5 x 15 см)	6	540308
Z12 (44 x 44,5 x 29 см)	12	540309
Ящик для шкафа		539132
Вставка в ящик	гарнитур 6 шт.	541651
	гарнитур 8 шт.	541652

Шкаф для зубов SR PHONARES®

Именно для линии зубов SR PHONARES фирмой Ivoclar Vivadent был сделан шкаф в цвете антрацит. В четырех его ящиках есть место для 180 гарнитуров фронтальных зубов и 120 гарнитуров боковых. Разумеется, этот шкаф можно использовать также для хранения других линий зубов Ivoclar Vivadent, т.к. вставки в ящики идентичны.



Форма поставки




Шкафы для зубов SR Phonares

Z4 (44 x 44,5 x 10,5 см)	4	628881
Стикер 3D Phonares II	1 x 8	628882
Ящик для шкафа антрацит	1	628868
Вставка в ящик белая	гарнитур 6 шт.	541651
	гарнитур 8 шт.	541652

SR Phonares®

		SR Phonares II		SR Phonares II	SR Phonares II	
		Верхняя челюсть	Нижняя челюсть	<i>Тип</i>	<i>Lingual</i>	
Small Малые	Soft	S61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3	
		S71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5	
		S81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3, LU5 / LL5	
	Bold	B61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3	
		B71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3	
		B81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3	
	Medium Средние	Soft	S62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5
			S72	L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
			S82	L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
Bold		B62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6	
		B72	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6	
		B82	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5	
Large Большие		Soft	S63	L54, L55	NU5 / NL5	LU6 / LL6
			S73	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
			S83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
	Bold	B63	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6	
		B73	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6	
		B83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6	

SR Vivodent® DCL		SR Postaris® DCL
Верхняя челюсть ■	Нижняя челюсть	
A 11	A 3	PU-1 / PL-1
A 12	A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
A 13	A 5	PU-2 / PL-2
A 14	A 7	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5
A 15	A 8	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4
A 16	A 9	PU-4 / PL-4
A 17	A 9	PU-4 / PL-4
A 66	A 7	PU-3 / PL-3 / PU-3.5 / PL-3.5
A 68	A 7	PU-3.5 / PL-3.5 / PU-4 / PL-4
A 69	A 7 / A 8	PU-4 / PL-4
Верхняя челюсть ▲	Нижняя челюсть	
A 22	A 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
A 24	A 2	PU-2 / PL-2
A 24 B	A 4 / A 5	PU-2 / PL-2
A 25	A 9	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5
A 26	A 7	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4
A 27	A 8	PU-4 / PL-4
A 41	A 3 / A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
A 42	A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
A 44	A 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5
Верхняя челюсть ●	Нижняя челюсть	
A 32	A 3 / A 5	PU-1.5 / PL-1.5, PU-2 / PL-2
A 36	A 7	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5
A 37	A 7 / A 8	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4
A 54	A 5	PU-2 / PL-2, PU-3 / PL-3
A 56	A 7 / A 8	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5

Фронтальные зубы		Боковые зубы					
верхние	нижние	P Пластмасса DCL Partial	N- Пластмасса Нормальная окклюзия	K- Пластмасса Перекрестная окклюзия	T- Пластмасса Глубокая окклюзия	L- Пластмасса DCL Лингвальная окклюзия	M- Пластмасса DCL Monoplane
 A 11	A 3	PU-1 / PL-1	N 3	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 12	A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 13	A 5	PU-2 / PL-2	N 3 / N 5	K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 14	A 6 / A 7	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 15	A 8	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5	MU5 / ML5
**A 16	A 9	PU-4 / PL-4	N 6	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5 LU6 / LL6	MU5 / ML5 MU6 / ML6
A 17	A 9	PU-4 / PL-4	N 6	K 4	T4	LU5 / LL5 LU6 / LL6	MU5 / ML5 MU6 / ML6
A 66	A 5 / A 7	PU-3 / PL-3 / PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 68	A 7	PU-3.5 / PL-3.5 / PU-4 / PL-4	N 4 / N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
**A 69	A 7 / A 8	PU-4 / PL-4	N 4 / N 6	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5 LU6 / LL6	MU5 / ML5 MU6 / ML6
 A 22	A 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 24	A 2	PU-2 / PL-2	N 2	K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 24 B	A 4 / A 5	PU-2 / PL-2	N 2	K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 25	A 9	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 4	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
**A 26	A 7	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 27	A 8	PU-4 / PL-4	N 4	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 41	A 3 / A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
A 42	A 5	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 44	A 3	PU-1 / PL-1, PU-1.5 / PL-1.5	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4	LU3 / LL3	MU3 / ML3
 A 32	A 3 / A 5	PU-1.5 / PL-1.5, PU-2 / PL-2	N 3 / N 5	K 2 / K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 36	A 7	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
**A 37	A 7 / A 8	PU-3.5 / PL-3.5, PU-4 / PL-4	N 5	K 4	T4 / T6	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 54	A 5	PU-2 / PL-2, PU-3 / PL-3	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5
A 56	A 7 / A 8	PU-3 / PL-3, PU-3.5 / PL-3.5	N 5	K 4	T4	LU5 / LL5	MU5 / ML5

SR Vivodent DCL | SR Vivodent PE | SR Vivodent | SR Orthotyp PE | SR Orthosit PE | SR Orthotyp

**Формы зубов A16, A26, A37, A69 выпускаются только для линий зубов SR Vivodent DCL и SR Vivodent PE.

IvoBase® High Impact

IvoBase High Impact сочетает в себе высокое качество пластмасс горячей полимеризации и удобство обработки автополимеризатов, создавая при этом новый класс протезных пластмасс. Материал, базирующийся на PMMA, обрабатывается в инжекторе IvoBase Injector. Соответствует нормам EN ISO 20795-1.



Преимущества:

- высокая ударопрочность и прочность на разрыв
- прецизионная точность благодаря компенсации усадки
- очень малое содержание остаточных мономеров < 1% (благодаря функции RMR*)
- превосходная связь с пластмассовыми зубами
- сильный блеск базальной части
- материал предварительно дозирован в капсулах
- время полимеризации: 50 минут

Цвета:

Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); Preference;
С повышенной опакостью: Pink-V Implant; Preference Implant;
34-V

* Функция сокращения содержания остаточных мономеров в инжекторе IvoBase Injector

Форма поставки

IvoBase-расцветка	1 x	628894
Стандартный набор IvoBase High Impact Standard Kit		
IvoBase High Impact Полимер	20 x 30 г	
Мономер	20 x 20 мл	
Воронка	22 x	
Восковые части	22 x	
Воздухоотводный фильтр	22 x	
Separating Fluid	1 x 60 мл	
Шпатель	1 x	
Pink		628889
Pink-V		628890
Preference		628891
Pink-V Implant		628892
Preference Implant		628893
34-V		640933

Принадлежности

Восковые части	22 x	628918
----------------	-------------	---------------

IvoBase® Hybrid

IvoBase Hybrid сочетает в себе высокое качество пластмасс горячей полимеризации и удобство обработки автополимеризатов, создавая при этом новый класс протезных пластмасс. Материал, базирующийся на PMMA, обрабатывается в инжекторе IvoBase Injector. Соответствует нормам EN ISO 20795-1.



Преимущества:

- прецизионная точность благодаря компенсации усадки
- очень малое содержание остаточных мономеров < 1% (благодаря функции RMR*)
- превосходная связь с пластмассовыми зубами
- сильный блеск базальной части
- материал предварительно дозирован в капсулах
- время полимеризации: всего лишь 35 минут

Цвета:

Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); Preference; Clear
С повышенной опаковостью: Pink-V Implant; Preference Implant;

* Функция сокращения содержания остаточных мономеров в инжекторе IvoBase Injector

Форма поставки

IvoBase-расцветка 1 x **628894**

Стандартный набор IvoBase Hybrid Standard Kit

IvoBase Hybrid Полимер	20 x 34 г	
Мономер	20 x 20 мл	
Воронка	22 x	
Восковые части	22 x	
Воздухоотводный фильтр	22 x	
Separating Fluid	1 x 60 мл	
Шпатель	1 x	
Pink		628883
Pink-V		628884
Preference		628885
Pink-V Implant		628886
Preference Implant		628887
Clear		628888

Принадлежности

Восковые части	22 x	628918
----------------	------	---------------

SR Ivocap® High Impact

Дозированный протезный материал SR Ivocap High Impact обладает неизменно высоким качеством благодаря чистому гомогенному смешиванию в смесителе Cap Vibrator. Материал соответствует нормам EN ISO 20795-1.



Преимущества:

- высокая ударопрочность и прочность на разрыв
- прецизионная точность без завышений прикуса
- превосходная связь с пластмассовыми зубами
- оптимальная полируемость
- проверенная опытом техника литья под давлением
- может полимеризоваться в инжекторе IvoBase Injector

Цвета:

Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); US-L; US-P; S; Preference; US-D

Новые цвета с повышенной опакостью: Pink-V Implant и Preference Implant

Форма поставки

Расцветка SR Ivocap	1 x	202147
----------------------------	------------	---------------

Стартовый набор SR Ivocap High Impact Trial Kit

SR Ivocap High Impact Полимер	10 x 20 г	
Мономер	10 x 30 мл	
Воронка	20 x	
Бумажные вкладыши	10 x	
Pink		531405
Pink-V		531452
Preference		579303
Pink-V Implant		629095
Preference Implant		629096

Стандартный набор SR Ivocap High Impact Standard Kit

SR Ivocap High Impact Полимер	50 x 20 г	
Мономер	50 x 30 мл	
Воронка	100 x	
Бумажные вкладыши	50 x	
Пакет для протезов	100 x	
Pink		531396
Pink-V		531451
S		531404
US-L		531402
US-P		531403
Preference		559615
US-D		578936
Pink-V Implant		629097
Preference Implant		629288

Принадлежности

Плавающие шарики большие	1000 x	530633
Инъекционные воронки	50 x	530615

Пластмасса горячей полимеризации SR Ivocap®

Пластмасса горячей полимеризации SR Ivocap превосходно подходит для изготовления жестких окклюзионных шин, ортодонтических аппаратов или прозрачных небных пластин в ортопедической стоматологии. Материал соответствует нормам EN ISO 20795-1.



Преимущества:

- высокая прозрачность
- может полимеризоваться в инжекторе IvoBase Injector

Цвета:

Clear (прозрачный)

Форма поставки

Стартовый набор SR Ivocap Trial Kit 530211

SR Ivocap Полимер	10 x 20 г
Мономер	10 x 30 мл
Воронка	10 x
Бумажные вкладыши	10 x

Стандартный набор SR Ivocap Standard Kit 530205

SR Ivocap Полимер	50 x 20 г
Мономер	50 x 30 мл
Воронка	100 x
Бумажные вкладыши	50 x
Пакет для протезов	100 x

SR Ivocap® Elastomer

Эта дозированная пластмасса была разработана специально для изготовления позиционеров, защиты зубов у спортсменов и мягких окклюзионных шин.



Преимущества:

- удобство и комфорт в ношении
- высокая эластичность и прочность на разрыв
- нейтральный вкус и запах
- может полимеризоваться в инжекторе IvoBase Injector

Цвета:

Clear (прозрачный)

Форма поставки

Стандартный набор SR Ivocap Elastomer Standard Kit 530221

SR Ivocap Elastomer Полимер	10 x 20 г
SR Ivocap Elastomer Мономер	10 x 17,5 мл

ProBase® Hot

Пластмасса ProBase Hot устанавливает новый стандарт качества в обработке, точности, стабильности формы и цвета у пластмасс горячей полимеризации для изготовления протезов. Материал соответствует нормам EN ISO 20795-1.



Показания:

- полные съемные зубные протезы
- частичные и комбинированные съемные зубные протезы
- покрывные зубные протезы
- перебазировки
- зубные протезы с опорой на имплантаты

Преимущества:

- для различных способов полимеризации при технике паковки
- удобство в работе
- стабильность формы и цвета

Цвета:

Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); S; US-L; US-P; 36 P; 36 P-V; Clear (прозрачный)

Новый цвет с повышенной опакостью: Pink-V Implant

Форма поставки

Расцветка ProBase 1 x 531543

Стартовый набор ProBase Hot Trial Kit

ProBase Hot полимер	1 x 100 г
ProBase Hot мономер	1 x 50 мл
Дозировочная система ProBase	1 x
Изолирующая пленка	20 x

Pink	531458 AN
Pink-V	531459 AN
S	531460 AN
US-L	531791 AN
US-P	531792 AN
36 P	536262 AN
36 P-V	536263 AN
Clear	531461 AN
Pink-V Implant	629296 AN

Стандартный набор ProBase Hot Standard Kit

ProBase Hot полимер	2 x 500 г
ProBase Hot мономер	1 x 500 мл
Изолирующая пленка	100 x

Принадлежности для работы:

стакан для смешивания 1 x, шпатель для смешивания 1 x,

Pink	531462 AN
Pink-V	531463 AN
S	531464 AN
US-L	531793 AN
US-P	531794 AN
36 P	536264 AN
36 P-V	536265 AN
Clear	531466 AN
Pink-V Implant	629091 AN

Лабораторный набор ProBase Hot Lab Kit

ProBase Hot полимер	5 x 500 г
ProBase Hot мономер	1 x 1000 мл
Изолирующая пленка	100 x

Pink	531467 AN
Pink-V	531468 AN
S	531469 AN
US-L	531795 AN
US-P	531796 AN
36 P	536266 AN
36 P-V	536267 AN
Clear	531470 AN

Refill ProBase Hot Полимер 2 x 500 г

Pink	531474
Pink-V	531476
S	531478
36 P	536268
36 P-V	536269
Clear	531480
Pink-V Implant	629093 AN

Refill ProBase Hot Полимер 5 x 500 г

Pink	531475
Pink-V	531477
S	531479
36 P	536270
36 P-V	536271
Clear	531481

Refill ProBase Hot Полимер 10 x 500 г

Pink	531535
Pink-V	531744
US-L	531797
US-P	531798
36 P	536272
36 P-V	536273

Refill ProBase Hot Полимер 20 x 500 г

Pink	531536
Pink-V	531745
US-L	531799
US-P	531800
36 P	536274
36 P-V	536275

Refill ProBase Hot Мономер 500 мл

1000 мл	531472
2 x 1000 мл	531537
4 x 1000 мл	531538

Дозировочная система ProBase 1 x 531533

Стакан для замешивания / Шпатель 1 x 531534

Пластиковый контейнер для полимера Hot на 500 г 1 x 531450

ProBase® Cold

Пластмасса холодной полимеризации ProBase Cold отличается превосходными свойствами текучести и моделируемости. Она может применяться при работе техникой литья и паковки. Благодаря отличным свойствам материала протезы из этой пластмассы сохраняют стабильную форму в течение длительного времени.

Материал соответствует нормам EN ISO 20795-1.



Форма поставки

Расцветка ProBase	1 x	531543
Стартовый набор ProBase Cold Trial Kit		
ProBase Cold Полимер	1 x 100 г	
ProBase Cold Мономер	1 x 50 мл	
Дозировочная система ProBase	1 x	
Pink		531486 AN
Pink-V		531487 AN
S		531488 AN
US-L		531490 AN
US-P		531491 AN
36 P		536278 AN
36 P-V		536279 AN
Clear		531489 AN
Preference		578934 AN
US-D		578935 AN
Pink-V Implant		629289 AN
Preference Implant		629290 AN
Стандартный набор ProBase Cold Standard Kit		
ProBase Cold Полимер	2 x 500 г	
ProBase Cold Мономер	1 x 500 мл	
Дозировочная система ProBase		
Принадлежности для работы:		
Набор для рабочего места 1 x ,		
стакан для смешивания с крышкой 1 x ,		
шпатель для смешивания 1 x ,		
Pink		531492 AN
Pink-V		531493 AN
S		531494 AN
US-L		531496 AN
US-P		531497 AN
36 P		536280 AN
36 P-V		536281 AN
Clear		531495 AN
Preference		563541 AN
US-D		578941 AN
Pink-V Implant		629291 AN
Preference Implant		629292 AN
Лабораторный набор ProBase Cold Lab Kit		
ProBase Cold Полимер	5 x 500 г	
ProBase Cold Мономер	1 x 1000 мл	
Pink		531498
Pink-V		531499
S		531500
US-L		531502
US-P		531503
36 P		536282
36 P-V		536283
Clear		531501 AN
Preference		578952
US-D		578953

Показания:

- починки
- частичные и комбинированные съемные зубные протезы
- перебазировки
- полные съемные зубные протезы

Преимущества:

- удобство в применении
- стабильность формы и цвета
- возможность работы различными техниками

Цвета:

Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); S; US-L; US-P; 36 P; 36 P-V; clear; Preference; US-D

Новые цвета с повышенной опакостью: Pink-V Implant и Preference Implant

Refill ProBase Cold Полимер	1 x 500 г	
Pink		531508
Pink-V		531509
S		531510
US-L		531512
US-P		531513
36 P		536284
36 P-V		536285
Clear		531511
Refill ProBase Cold Полимер	2 x 500 г	
Pink		531514
Pink-V		531515
S		531516
US-L		531518
36 P		536286
36 P-V		536287
Clear		531517
Preference		563542
Pink-V Implant		629294 AN
Preference Implant		629295 AN
Refill ProBase Cold Полимер	5 x 500 г	
Pink		531520
Pink-V		531521
S		531522
36 P		536288
36 P-V		536289
Clear		531523
Refill ProBase Cold Полимер	10 x 500 г	
Pink		531539
Pink-V		531746
36 P		536290
36 P-V		536291
Refill ProBase Cold Полимер	20 x 500 г	
Pink		531540
Pink-V		531747
S		531552
US-L		536331
36 P		536292
36 P-V		536293
Preference		578940
Refill ProBase Cold Мономер	500 мл	531505
	1000 мл	531506
	2 x 1 л	531541
	4 x 1 л	531542
Дозировочная система ProBase	1 x	531533
Стакан для замешивания / Шпатель	1 x	531534
Пластиковый контейнер для полимера Cold на 500 г	1 x	531449

SR Triplex® Hot

Пластмасса SR Triplex Hot подкупает своей точностью прилегания, а также стабильностью цвета и формы. Материал соответствует нормам EN ISO 20795-1.



Показания:

- полные съемные зубные протезы
- частичные съемные зубные протезы
- комбинированные зубные протезы
- покрывные зубные протезы
- перебазировка
- протезирование на имплантатах

Преимущества:

- применяется при работе техникой паковки
- удобство в работе
- цветовая адаптация к ProBase и SR Ivocap

Цвета:

Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); 36 P-V; выпускается отдельная цветовая шкала

Форма поставки

Расцветка SR Triplex	1 x	541894
-----------------------------	------------	---------------

Стартовый набор SR Triplex Hot Trial Kit

SR Triplex Hot Полимер	1 x 100 г	
SR Triplex Hot Мономер	1 x 50 мл	
Дозировочная система SR Triplex	1 x	
Pink		541403
Pink-V		541404

Стандартный набор SR Triplex Hot Standard Kit

SR Triplex Hot Полимер	2 x 500 г	
SR Triplex Hot Мономер	1 x 500 мл	
Дозировочная система SR Triplex	1 x	
Pink		541405
Pink-V		541406

Refill SR Triplex Hot Полимер

	2 x 500 г	
Pink		541413
Pink-V		541414

Refill SR Triplex Hot Полимер

	20 x 500 г	
Pink		541417
Pink-V		541418

Refill SR Triplex Hot Мономер

	0,5 л	541428
--	--------------	---------------

Дозировочная система SR Triplex

	1 x	541654
--	------------	---------------

Пластиковый контейнер (пустой) для полимера на 1000 г

	1 x	541653
--	------------	---------------

SR Triplex® Cold

Пластмасса холодной полимеризации SR Triplex Cold проста в работе и обладает оптимальной текучестью. Материал соответствует нормам EN ISO 20795-1.



Показания:

- частичные съемные зубные протезы
- комбинированные зубные протезы
- перебазировки
- починки

Преимущества:

- удобство в работе
- цветовая палитра, согласованная с SR Ivoclar и ProBase

Цвета:


Pink (розовый); Pink-V (розовый-V); 36 P-V; выпускается отдельная цветовая шкала

Форма поставки

Расцветка SR Triplex	1 x	541894
Стартовый набор SR Triplex Cold Trial Kit		
SR Triplex Cold Полимер	1 x 100 г	
SR Triplex Hot Мономер	1 x 50 мл	
Дозировочная система SR Triplex	1 x	
Pink		541432
Pink-V		541433
36 P-V		550107
Стандартный набор SR Triplex Cold Standard Kit		
SR Triplex Cold Полимер	2 x 500 г	
SR Triplex Hot Мономер	1 x 500 мл	
Дозировочная система SR Triplex	1 x	
Pink		541434
Pink-V		541435
36 P-V		547062
Refill SR Triplex Cold Полимер		
Pink	2 x 500 г	541439
Pink-V		541440
36 P-V		547064
Refill SR Triplex Cold Полимер		
Pink	10 x 500 г	541441
Pink-V		541442
36 P-V		547065
Refill SR Triplex Cold Мономер		
	0,5 л	541445
Дозировочная система SR Triplex		
	1 x	541654
Пластиковый контейнер (пустой) для полимера на 1000 г		
	1 x	541653

Light Tray

Light Tray – светополимеризующийся материал для простого изготовления индивидуальных ложек. Благодаря оптимизированной реакции полимеризации в вашем распоряжении находится значительно больше времени для моделирования.

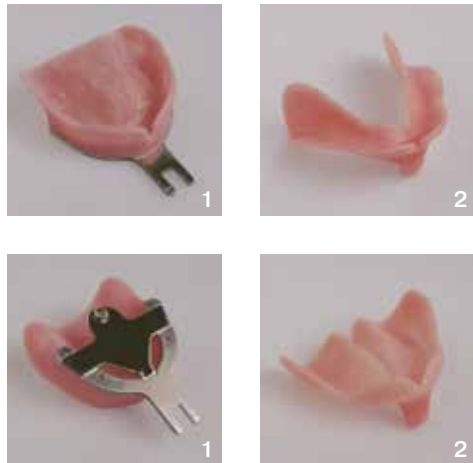

Показания:

- высокая точность
- высокая стабильность
- быстрая и чистая обработка
- экономичность благодаря возможности повторно использовать остатки
- точная адаптация

Цвета:

Natur, Pink

Форма поставки

Стандартный набор Light Tray Standard Kit

Пластины, цвет Pink	50 x	
Пластины, цвет Natur	50 x	
Natur		560409
Pink		560440

SR Ivolen®

Материал для ложек, отличающийся стабильностью формы и разнообразной областью применения, не прилипает к инструментам, характеризуется оптимальной фазой отверждения. Его можно использовать со всеми слепочными материалами с применением адгезива.

Показания:

- легко адаптируется и дополняется
- высокая точность

Цвета:

Бежевый



Форма поставки

Стандартный набор SR Ivolen Standard Kit 530359

SR Ivolen Порошок	2 x 500 г	
SR Ivolen Жидкость	1 x 500 мл	
Мерник	1 x	
Мерная ложка	1 x	
Стакан для смешивания	1 x	

Refill SR Ivolen Порошок 530363

	10 x 500 г	530364
	20 x 500 г	530365

Refill SR Ivolen Жидкость 530367

	1 x 2500 мл	530368
--	-------------	--------

Сепарационная жидкость Separating Fluid

Сепарационная жидкость Separating Fluid обладает прекрасными изолирующими свойствами, благодаря которым обеспечивается оптимальная изоляция и гладкая поверхность у всех протезных материалов фирмы Ivoclar Vivadent.



Показания:

- изолирование гипс / протезный базисный материал
- изолирование гипс / гипс

Форма поставки

Сепарационная жидкость

Separating Fluid	1 x 500 г	530348
	1 x 1000 мл	530349
	1 x 5 л	530350

Centric Tray

Centric Tray – это слепочная ложка для определения центрального соотношения челюстей у пациента, позволяющая экономить время врача при полном и частичном протезировании.



Показания:

- простое и точное определение центрального соотношения
- является предметом многократного использования, экономит время и деньги
- применяется как в полном, так и в частичном съемном протезировании

Форма поставки

Centric Tray	559166
Centric Tray	1 x
Стандартные фиксаторы	3 x
Ретенционные фиксаторы	3 x

Инжектор Ivobase® Injector

Инжектор Ivobase® Injector позволяет выполнять полностью автоматизированное инъецирование и полимеризацию специальных пластмасс на основе PMMA, которые согласованы с системой. Химическая усадка пластмассы полностью компенсируется – благодаря запатентованному управлению температурой в кювете и нагревательному устройству. Это позволяет изготавливать протезы очень высокой точности. Прибор был разработан специально для материала Ivobase, с его помощью можно достигать великолепных результатов. Инжектор Ivobase Injector можно также использовать с уже известным материалом Ivosar.

Технические данные:

- Номинальное напряжение: 110-120 В /200-240 В
- Номинальная частота тока: 50 Гц-60 Гц
- Допустимые колебания напряжения: +/- 10%
- Размеры:
 - глубина: 400 мм
 - ширина: 340 мм
 - высота: 560 мм
- Максимальная температура: 300 °С
- Вес: 35,6 кг



Преимущества:

- прибор „все-в-одном“, простой и быстрый ввод в эксплуатацию
- управляемая полимеризационная усадка для достижения высочайшей точности
- не требуется подключения воды и сжатого воздуха (plug and play)
- компактный, современный и эргономичный дизайн, прибор занимает мало места.
- OSD-указатели: с большого расстояния можно определить, какой рабочий этап выполняет прибор
- нажатие на клавишу RMR позволяет существенно сократить содержание остаточных мономеров
- USB-подключение для обновления программного обеспечения через ПК/интернет
- прямой нагрев кюветы без использования водяной бани позволяет проводить полимеризацию без сопровождения водяным паром, мешающим пользователю.
- прибор удобен в сервисном обслуживании, замена нагревательных элементов проста благодаря съемной крышке.
- прибор оснащен различными программами Ivoclar Vivadent и резервными программами.

Форма поставки

Ivobase Injector	110-240 В / 50-60 Гц	628518
Инжектор Ivobase Injector		1 x
сетевой кабель		1 x
загрузочный кабель USB		1 x
набор кюветы		2 x
термоперчатка		1 x
набор для контроля температуры		1 x
гарантийный талон		1 x
инструкция		1 x
различные принадлежности		

Ivobase® Набор кюветы

Набор кюветы Ivobase состоит из кюветы с запирающим бюгелем и других принадлежностей, которые необходимы для заправки.

- a) кювета с запирающим бюгелем
- b) крышка кюветы
- c) центрирующая вставка
- d) формователь канала „полный“
- e) формователь канала „наполовину“
- f) вспомогательные принадлежности для распаковки



Форма поставки

Набор кюветы Ivobase	639959
Кювета	1 x
Запирающий бюгель	2 x
Крышка кюветы	1 x
Центрирующая вставка	1 x
Формователь канала „полный“	1 x
Формователь канала „наполовину“	1 x
Вспомогательные принадлежности для распаковки	1 x

IvoBase® Набор для контроля температуры


Набор для контроля температуры IvoBase включает в себя все необходимое для проверки температуры в инжекторе IvoBase.



Форма поставки

IvoBase Набор для контроля температуры	639960
IR-термометр	1 x
Набор точек измерения	1 x

IvoBase® Набор для контроля температуры Refill

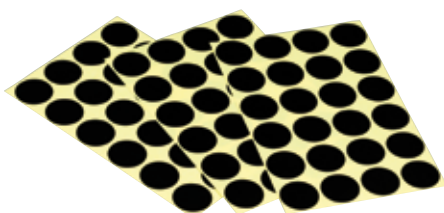

Форма поставки

IvoBase Набор для контроля температуры Refill	640877
Набор точек измерения	3 x

IvoBase® Термоперчатка

Используя термоперчатку, можно безопасно доставать еще горячую кювету из инжектора IvoBase Injector.



Форма поставки

IvoBase Термоперчатка	1 x	639961
------------------------------	------------	---------------

Stratos® 100

Stratos 100 – биофункциональный артикулятор со средними значениями углов для различных несложных зуботехнических реконструкций. Эргономичный дизайн и компактная конструкция на стойках обеспечивают легкую и рациональную работу. Stratos 100 – это идеальный артикулятор для постановки зубов фирмы Ivoclar Vivadent в соответствии с концепцией Биофункциональной Системы Протезирования (BPS®).



Преимущества:

- затвор блокировки центральной окклюзии
- разделяемые верхняя и нижняя рамы
- оптимизированный шарнирный механизм с углом сагиттального суставного пути 30° и углом Беннетта 30° или 15°
- совместим с системами Split-cast
- фиксация протрузионного положения

Форма поставки

Stratos 100 **576820**

Stratos 100	1 x
Резцовая подставка 0°	1 x
Указатель резцовой точки	1 x
Ретенционные цокольные пластины	1 x
Защитный кожух от гипса	1 x

Stratos® 200

Stratos 200 – это биофункциональный артикулятор, который может быть универсально использован благодаря своим разнообразным опциям. Его эргономичный дизайн с компактной конструкцией на стойках обеспечивает удобную и рациональную работу. Базовое оснащение включает дополнительные протрузионные вставки 30° или 15° для неподвижной или вращаемой шарнирной оси, вставки угла Беннетта 30°, одну резцовую подставку 0°, а также одну угловую опорную ножку.



Преимущества:

- затвор блокировки центральной окклюзии
- разделяемые верхняя и нижняя рамы
- оптимизированный шарнирный механизм со сменными вставками Беннетта / протрузионными вставками.
- совместим с системами Split-cast
- боковой сдвиг 0-1,5 мм
- фиксация протрузионного положения

Форма поставки

Stratos 200 **536381**

Stratos 200	1 x
Протрузионные вставки 30°	2 x
Вставки Беннетта 30°	2 x
Резцовая подставка 0°	1 x
Указатель резцовой точки	1 x
Ретенционные цокольные пластины	2 x
Защитный кожух от гипса	1 x
Опорная ножка	2 x

Stratos® 300

Stratos 300 – это биофункциональный индивидуально настраиваемый артикулятор, у которого все углы шарнира могут плавно изменяться без необходимости замены каких-либо элементов. Stratos 300 идеально подходит для выполнения сложных зуботехнических реставраций, при изготовлении которых необходимо индивидуально настраивать суставные углы. Его эргономичный дизайн с компактной конструкцией на стойках обеспечивает удобную и рациональную работу.



Преимущества:

- затвор блокировки центральной окклюзии
- разделяемые верхняя и нижняя рамы
- оптимизированный шарнирный механизм с плавно изменяемыми значениями углов
 - Угол протрузии 0°-60°
 - Угол ретрузии 35°
 - Угол Беннетта 0°-30°
 - Боковой сдвиг 0-1,5 мм
- Фиксация протрузионного положения 0-4 мм
- Возможность работы по индивидуальным и средним параметрам
- совместим с системами Split-cast

Форма поставки

Stratos 300 **576821**

Stratos 300	1 x
Резцовая подставка 0°	1 x
Указатель резцовой точки	1 x
Ретенционные цокольные пластины	2 x
Защитный кожух от гипса	1 x

Набор принадлежностей «Индивидуальный»

(для Stratos 200)

A) Держатель инструментов

Фиксирующая деталь для опоры прикусной вилки.

E) Указатель плоскости

При индивидуальной установке моделей в Stratos 200 указывает референтную плоскость артикулятора

F) Опора прикусной вилки

Поддерживает прикусную вилку лицевой дуги и препятствует ее смещению вниз при установке моделей в артикулятор Stratos 200.



G) SE-переходное устройство

Это приспособление избавляет от необходимости отправлять зубному технику лицевую дугу целиком. Для установки моделей в артикулятор Stratos 200 в лаборатории требуется только регистрационное сочленение лицевой дуги.

H) Резцовые подставки

15°, 30°, 0° индивидуальная

K) Набор суставных вставок

Протрузионные вставки: 15°, 20°, 25°, 35°, 40°, 45°, 60°
Вставки Беннета: 15°

Форма поставки

Набор принадлежностей «Индивидуальный»

(для Stratos 200)

536383

Набор суставных вставок:

Протрузионные вставки 15°, 20°, 25°, 35°, 40°, 45°, 60°	по 2 x
Вставки Беннета 15°	2 x
Резцовые подставки 15°, 30°	по 1 x
Резцовая подставка для индивидуальных путей скольжения	1 x
Держатель инструментов	1 x
Указатель плоскости	1 x
Переходное устройство	1 x
Опора прикусной вилки	1 x

Форма поставки

Набор суставных вставок (для Stratos 200)

536384

Протрузионные вставки 15°, 20°, 25°, 35°, 40°, 45°, 60°	по 2 x
Вставки Беннета 15°	2 x

Суставные вставки

(для Stratos 200)



Набор принадлежностей «Индивидуальный»

(для Stratos 100, 300)

A) Держатель инструментов

Фиксирующая деталь для опоры прикусной вилки.

E) Указатель плоскости

При индивидуальной установке моделей в Stratos указывает референтную плоскость артикулятора

F) Опора прикусной вилки

Поддерживает прикусную вилку лицевой дуги и препятствует ее смещению вниз при установке моделей в артикулятор Stratos.



G) SE-переходное устройство

Это приспособление избавляет от необходимости отправлять зубному технику лицевую дугу целиком. Для установки моделей в артикулятор Stratos в лаборатории требуется только регистрационное сочленение лицевой дуги.

H) Резцовые подставки

15°, 30°, 0° индивидуальная

Форма поставки

Набор принадлежностей «Индивидуальный»

(для Stratos 100, 300)

590221

Указатель плоскости	1 x
Опора прикусной вилки	1 x
Переходное устройство	1 x
Резцовые подставки 15°, 30°	по 1 x
Резцовая подставка для индивидуальных путей скольжения	1 x
Держатель инструментов	1 x

Набор принадлежностей «Средние параметры» (для Stratos® 100, 200, 300)

А) Держатель инструментов

Служит для закрепления балансира, установочного столика, двухмерной калотты и опоры прикусной вилки.

В) Балансир

Позволяет сориентировать модель с зубами и без зубов по отношению к треугольнику Бонвилля.



С) Двухмерная калотта

Для правильной постановки зубов по средним значениям с учетом кривых Шпее и Вилсона.

Д) Установочный столик

Для простой установки по средним параметрам моделей с зубами относительно треугольника Бонвилля.

Форма поставки

Набор принадлежностей «Средние параметры»

(для Stratos® 100, 200, 300)

536382

Держатель инструментов	1 x
Установочный столик	1 x
Балансир	1 x
Двухмерная калотта	1 x

FN-переходное устройство

Применяется для переноса трехмерных регистратов лицевой дуги в артикуляторы Stratos относительно франкфуртской горизонтали (FN)



Форма поставки

FN-переходное устройство	1 x	543468
---------------------------------	------------	---------------

2 1/2 двухмерная калотта

Для идеальной постановки зубов моделей по средним значениям с использованием линии зубов Trio.



Форма поставки

2 1/2 двухмерная калотта	1 x	613560
---------------------------------	------------	---------------

Трехмерная калотта

Необходима для правильной постановки зубов с учетом кривых Шпее и Вилсона при индивидуально установленных в артикулятор моделях с помощью лицевой дуги UTS 3D.



Важно:

Эта принадлежность не входит в набор принадлежностей «Индивидуальный».

Форма поставки

Трехмерная калотта	1 x	536398
---------------------------	------------	---------------

Резцовые подставки

L = резцовая подставка 15°

N = резцовая подставка 30°

M = индивидуальная резцовая подставка

(входят в набор принадлежностей «Индивидуальный»).



Форма поставки

Резцовые подставки

15°	1 x	536391
30°	1 x	536392
индивидуальная	5 x	536393

Держатель моделей

1) Ретенционная цокольная пластина

2) Магнитная цокольная пластина с формователем цоколя

3) Защитный кожух от гипса



Форма поставки

Магнитная цокольная пластина	2 x	536403
	10 x	536404
Ретенционная цокольная пластина	10 x	536405
	50 x	536406
Защитный кожух от гипса	5 x	536408
Опорная ножка	1 x	536409

Фиксаторы центральной окклюзии

Фиксаторы центральной окклюзии для Stratos 100, 200, 300.



Форма поставки

Фиксаторы центральной окклюзии	10 x	583672
--------------------------------	------	--------

Stratos® Адаптор для подключения дуг других производителей

С помощью этой принадлежности можно подключать к артикуляторам Stratos трансферные/лицевые дуги других производителей (необходим соединительный штифт).



Форма поставки

Stratos Адаптор для подключения дуг других производителей		593851
Левая часть	1 x	
Правая часть	1 x	

Чемодан для артикулятора Stratos®

Надежный чемодан из алюминия защищает артикуляторы Stratos при транспортировке от загрязнений и повреждений.



Преимущества:

- прочный корпус (алюминиевый)
- компактный
- достаточно места для артикулятора Stratos (с моделями) и принадлежностей
- металлическая бирка для чемодана в комплекте
- замок

Форма поставки

Чемодан для артикулятора Stratos	1 x	583673
----------------------------------	-----	--------

Система универсальной трехмерной трансферной дуги UTS 3D

Эта система позволяет зарегистрировать положение челюстей относительно черепа/сустава и индивидуально установить модели в артикуляторе Stratos. Универсальная трансферная дуга настраивается по франкфуртской горизонтали (FH) и камперовской плоскости (CE). Гибкая модульная конструкция позволяет использовать эту трансферную дугу практически со всеми доступными на рынке артикуляторами.



Преимущества:

- трехмерное регистрационное сочленение всего с одним тисочным винтом для быстрой и точной фиксации.
- легкая конструкция из углеволокна для большего комфорта
- сменные дезинфицируемые ушные упоры
- сменный носовой упор

Форма поставки

Универсальная трехмерная трансферная дуга UTS 3D		593710
Регулируемый носовой упор	1 x	
Указатель срединной сагиттальной плоскости	1 x	
Указатель референтной плоскости (CE / FH)	1 x	
Фиксирующие штифты	2 x	
Ушные упоры	2 x	
Регистрационный шарнир	1 x	
Прикусная вилка	1 x	
Носовая прокладка	10 x	

UTS 3D-принадлежности

3D-регистрационный шарнир

Трехмерный регистрационный шарнир может использоваться с трехмерной трансферной дугой UTS 3D и дугой UTS (старая версия). Для этого он снабжен мультифункциональным переходником для трехмерной прикусной вилки и прикусной вилки старой версии.



Форма поставки

Трехмерный регистрационный шарнир	1 x	594566
-----------------------------------	-----	--------

Прикусная вилка

- Трехмерная прикусная вилка «S»
- Трехмерная прикусная вилка




Форма поставки

Трехмерная прикусная вилка «S»	5 x	601119
Трехмерная прикусная вилка	5 x	594567

Носовые прокладки

- Набор зеленых носовых прокладок (средней твердости)
- Набор синих носовых прокладок (мягких)

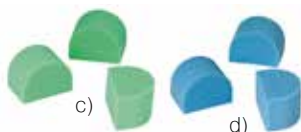

Форма поставки

Набор носовых прокладок		
зеленые = средней твердости	5 x	561265
синие = мягкие	5 x	561266

Опорные штифты UTS тип II

Для прямого индивидуального переноса моделей с помощью трансферной лицевой дуги в артикулятор.



Форма поставки

Опорные штифты UTS тип II	536400
Базовая часть	1 x
Штифты	2 x

Gnathometer M тип 2

Внутриротное регистрационное устройство по проф. Бёттгеру для оптимального определения положения прикуса у беззубых пациентов. Позволяет быстро и легко контролировать соотношение челюстей по записи готического угла.



Преимущества:

- Функциональный оттиск и определение центрального соотношения в одно посещение.
- Возможность стерилизовать и многократно использовать
- Возможность подключения к трехмерной лицевой дуге UTS 3D

Форма поставки

Gnathometer M тип 2 (комплект)	1 x	530484
---------------------------------------	------------	---------------

SR Ivocron®

SR Ivocron – это высококачественный облицовочный материал на основе полиметилметакрилата для изготовления коронок, мостовидных протезов и временных конструкций, который выпускается в 20 цветах цветовой шкалы Chromascop, обеспечивающих живой внешний вид протезов из этого материала.

SR Ivocron идеально подходит ко всем продуктам фирмы Ivoclar Vivadent, окрашенных по цветовой шкале Chromascop.

Индивидуальный выбор техники работы позволяет создавать естественные пластмассовые облицовки (горячая техника/техника прессования), а также изготавливать временные конструкции с длительным сроком ношения и фиксировать зубы протезов (холодная техника). При создании качественной облицовки с длительным сроком службы оптимальным является сочетание адгезива SR Link и облицовочного материала SR Ivocron.

Показания:

Холодная техника (техника литья)

- изготовление временных конструкций на короткий и средний срок, также в сочетании с Vectris
- фиксация приточенных искусственных зубов на бюгельных протезах
- починки

Горячая техника (техника послойного нанесения)

- облицовка коронок и мостовидных протезов
- изготовление временных конструкций на длительный срок, также в сочетании с Vectris

Техника прессования (техника кюветы)

- облицовка коронок и мостовидных протезов

Преимущества

- три различных способа полимеризации
- небольшой компактный набор
- универсальная область показаний



Форма поставки

Стартовый набор SR Ivocron Trial Kit Cold 603281

SR Ivocron Дентин 210/2B	1 x 30 г
SR Ivocron Режущий край 2	1 x 30 г
SR Ivocron Опакер 2	1 x 5 г
Жидкость SR Ivocron Cold Liquid	1 x 30 мл

Стартовый набор SR Ivocron Trial Kit Hot 601513

SR Ivocron Дентин 210/2B	1 x 30 г
SR Ivocron Режущий край 2	1 x 30 г
SR Ivocron Опакер 15	1 x 5 г
Жидкость SR Ivocron Hot Liquid	1 x 30 мл

Стартовый набор SR Ivocron Trial Kit Press 601514

SR Ivocron Дентин 210/2B	1 x 30 г
SR Ivocron Режущий край 2	1 x 30 г
SR Ivocron Опакер 15	1 x 5 г
Жидкость SR Ivocron Press Liquid	1 x 30 мл

Базовый набор SR Ivocron Basic Kit Cold 549769

SR Ivocron Дентин 130/2A, 140/1C, 210/2B, 220/1D, 410/4A	по 1 x 30 г
SR Ivocron Режущий край 1, 2, 4	по 1 x 30 г
Интенсивные массы SR Ivocron Intensiv	

2, 4, 5, 6, 9	по 1 x 15 г
Жидкость SR Ivocron Cold Liquid	1 x 100 мл
SR Ivocron Separator	1 x 30 мл
SR Separating Fluid	1 x 30 мл
Расцветка Chromascop	1 x
Различные принадлежности	

Базовый набор SR Ivocron Basic Kit Hot 555326

SR Ivocron Дентин 130/2A, 140/1C, 210/2B, 220/1D, 410/4A	по 1 x 30 г
SR Ivocron Режущий край 1, 2, 4	по 1 x 30 г
SR Ivocron Опакер 12, 13, 14, 15	по 1 x 5 г
Жидкость SR Ivocron Hot Liquid	1 x 100 мл
Жидкость для опакера SR Ivocron Opaquer Liquid	1 x 30 мл
SR Ivocron Separator	1 x 30 мл
SR Микроретенционные перлы	1 x 15 г
SR Макроретенционные перлы	1 x 15 г
SR Ретенционный адгезив	1 x 20 мл
SR Separating Fluid	1 x 30 мл
Расцветка Chromascop	1 x
Различные принадлежности	

Жидкость SR Ivocron® Cold Liquid

Жидкость для холодной техники (техники литья).



Форма поставки

Жидкость SR Ivocron Cold Liquid	1 x 100 мл	550080
	1 x 500 мл	550081

Жидкость SR Ivocron® Hot Liquid

Жидкость для горячей техники (техники послойного нанесения).



Форма поставки

Жидкость SR Ivocron Hot Liquid	1 x 100 мл	550082
---------------------------------------	-------------------	---------------

Жидкость SR Ivocron® Press Liquid

Жидкость для техники прессования (техники кюветы).



Форма поставки

Жидкость SR Ivocron Press Liquid	1 x 100 мл	550083
---	-------------------	---------------

Дентин SR Ivocron® Dentin

Различные дентиновые массы всех цветов Chromascop для индивидуального формирования области дентина.



Форма поставки

SR Ivocron Dentin	1 x 30 г
110	549903
120	549904
130	549905
140	549906
210	549907
220	549908
230	549909
240	549910
310	549911
320	549912
330	549913
340	549914
410	549915
420	549916
430	549917
440	549918
510	549919
520	549920
530	549921
540	549922

SR Ivocron Dentin	1 x 100 г
110	549924
120	549925
130	549926
140	549927
210	549928
220	549929
230	549930
240	549931
310	549932
320	549933
330	549934
340	549935
410	549936
420	549937
430	549938
440	549939
510	549940
520	549941
530	549942
540	549943

Массы режущего края SR Ivocron® Incisal

Массы режущего края различных оттенков для завершающего оформления облицовок.



Форма поставки

SR Ivocron Массы режущего края Incisal 1 x 30 г	
1	549945
2	549946
3	549947
4	549948

SR Ivocron Массы режущего края Incisal 1 x 100 г	
1	549950
2	549951
3	549952
4	549953

Пришеечная масса SR Ivocron® Neck

Пришеечная масса для индивидуализации и создания «живой» шейки зуба.



Форма поставки

SR Ivocron Пришеечная масса Neck	1 x 30 г
110	549955
120	549956
130	549957
140	549958
210	549959
220	549960
230	549961
240	549962
310	549963
320	549964
330	549965
340	549966
410	549967
420	549968
430	549969
440	549970
510	549971
520	549972
530	549973
540	549974

Опакер SR Ivocron® Опаquer

SR Ivocron opakер цвета зуба закрывает металлический каркас и создает идеальную основу для эстетичной облицовки.



Форма поставки

Опакер SR Ivocron Опаquer	1 x 5 г
11	549988
12	549989
13	549990
14	549991
15	549992
16	549993
23	549994
24	549995
26	549996

Жидкость для опакера SR Ivocron® Опаquer Liquid

Жидкость, специально разработанная для опакера SR Ivocron Опаquer.



Форма поставки

Жидкость для опакера SR Ivocron Опаquer Liquid	1 x 30 мл	550078
	1 x 100 мл	550079

Интенсивные массы SR Ivocron® Intensiv

Интенсивные массы SR Ivocron Intensiv служат для изменения цвета реставраций SR Ivocron; с их помощью можно создавать индивидуальные особенности реставраций.



Форма поставки

Интенсивные массы SR Ivocron Intensiv 1 x 15 г

1 прозрачный	549977
2 белый	549978
4 желто-оранжевый	549980
5 светло-коричневый	549981
6 темно-коричневый	549982
7 розовый	549983
9 синий	549985

Десневая масса SR Ivocron® Gingiva

Десневая масса, точно имитирующая живую десну



Форма поставки

Десневая масса SR Ivocron Gingiva	1 x 100 г	549975
розовая		

Изолирующая жидкость SR® Separating Fluid

Изолирующая жидкость на альгинатной основе, применяется для изоляции пластмассы и гипса.



Форма поставки

SR Separating Fluid	1 x 30 мл	530346
----------------------------	------------------	---------------

SR Nexco® Paste

SR Nexco Paste – это лабораторный композит только светового отверждения с микропаловым наполнителем, подходит для изготовления протетических конструкций с каркасом и без каркаса.

С помощью этого материала достигается естественный внешний вид съемных и несъемных реставраций, а также десневой части. Толщина наносимого слоя не влияет на цвет реставрации.



SR Nexco® Paste Intro Kit

Набор SR Nexco Paste Intro Kit позволяет быстро освоить систему материалов SR Nexco. Содержащаяся в нем рабочая модель позволяет сразу же протестировать материал SR Nexco на реставрациях разных типов.



Форма поставки

Набор SR Nexco Paste Intro Kit A2	640398
Опакер SR Nexco Опаquer, Цвет: A2	1 x 2 мл
Лайнер SR Nexco Liner, Цвет: L2	1 x 2 мл
Маргинальная масса SR Nexco Paste Margin, Цвет: M2	1 x 2,5 г
Дентин SR Nexco Paste Dentin, Цвет: A2	1 x 2,5 г
Паста режущего края SR Nexco Paste Incisal, Цвет: I2	1 x 2,5 г
Моделировочная жидкость SR Modelling Liquid	1 x 5 мл
Гель SR Gel	1 x 30 мл
SR Connect	1 x 5 мл
Рабочая модель	1 x
Различные принадлежности	

Стартовый набор SR Nexco Paste Starter Kit A–D

Стартовый набор SR Nexco Paste Starter Kit содержит все необходимое для создания естественной эстетичной реставрации и покрывает цвета A2, A3, A3.5 и B2. Наряду с материалами для наложения SR Nexco, дентином, массой режущего края он включает в себя плечевые и эффект-массы, а также красители. Система связи SR Link, адгезив SR Connect и различные принадлежности также входят в набор.



Форма поставки

Стартовый набор SR Nexco Paste Starter Kit A–D	640399
Опакер SR Nexco Опаquer, Цвета: A2, A3, A3.5, B2	по 1 x 2 мл
Лайнер SR Nexco Liner, Цвета: L2, L3	по 1 x 2 мл
Маргинальная масса SR Nexco Paste Margin, Цвета: M2, M3	по 1 x 2,5 г
Дентин SR Nexco Paste Dentin, Цвета: A2, A3, A3.5, B2	по 1 x 2,5 г
Эффект-масса окклюзионный дентин SR Nexco Paste Effect Occlusal Dentin, Цвет: оранжевый	1 x 2,5 г
Эффект-масса SR Nexco Paste Effect Transpa, Цвет: прозрачный	1 x 2,5 г
Эффект-масса SR Nexco Paste Effect Opal, Цвет: E1	1 x 2,5 г
Красители SR Nexco Stains, Цвета: прозрачный, белый, оранжевый, красное дерево	по 1 x 1 мл
SR Nexco Pontic Fill	1 x 2,5 г
SR Link	1 x 5 мл
Моделировочная жидкость SR Modelling Liquid	1 x 5 мл
Гель SR Gel	1 x 30 мл
SR Connect	1 x 5 мл
Различные принадлежности	

Опакер SR Nexco Opaquer

Пастообразный opakер отличается высокой покрывающей способностью – также при нанесении тонкими слоями. Вместе с SR Link он обеспечивает оптимальное соединение металлического каркаса с облицовочными материалами SR Nexco.



Форма поставки

Опакер SR Nexco Opaquer	1 x 2 мл
A1	640430
A2	640431
A3	640432
A3.5	640433
A4	640434
B1	640435
B2	640436
B3	640437
B4	640438
C1	640439
C2	640440
C3	640441
C4	640442
D2	640443
D3	640444
D4	640445
BL3	640446
BL4	640447

Лайнер SR Nexco Liner

Лайнер является грунтом, наносимым на препарированный зуб при безметалловых реставрациях. Лайнер создает надежную связь между реставрацией, фиксирующим адгезивом и препарированным зубом, а также облицовочными материалами SR Nexco.



Форма поставки

Лайнер SR Nexco Liner	1 x 2 мл
L1	640476
L2	640477
L3	640478
L4	640479
L5	640480
BL	640481
прозрачный	640482
incisal (режущего края)	640483

SR Nexco Pontic Fill

Светоотверждаемая паста, специально предназначенная для заполнения области промежуточной части. Обладает большой глубиной полимеризации.



Форма поставки

SR Nexco Pontic Fill	1 x 2,5 г	640485
----------------------	-----------	--------

Маргинальная масса SR Nexco Paste Margin

Для усиления цвета в области шейки зуба служат пришеечные массы, которые даже при нанесении тонкими слоями оказывают сильное влияние на результат.



Форма поставки

SR Nexco Paste Margin	1 x 2,5 г
M1	640401
M2	640402
M3	640403
M4	640404
M5	640405

Дентин SR Nexco Paste Dentin

Дентины создают основу для А–D-наслоения и отличаются хорошими практическими свойствами.



Форма поставки

Дентин SR Nexco Paste Dentin	1 x 2,5 г
A1	640406
A2	640407
A3	640408
A3.5	640409
A4	640410
B1	640411
B2	640412
B3	640413
B4	640414
C1	640415
C2	640416
C3	640417
C4	640418
D2	640419
D3	640420
D4	640421
BL3	640422
BL4	640423

Масса режущего края SR Nexco Paste Incisal

Массы режущего края SR Nexco Paste Incisal адаптированы по цвету к режцовому краю живого зуба.



Форма поставки

Массы режущего края SR Nexco Paste Incisal	1 x 2,5 г
I1	640424
I2	640425
I3	640426
I4	640427
I5	640428
BL	640429

SR Nexco® Paste Effect

Широкое предложение эффект-масс служит для изменения и индивидуализации реставраций SR Nexco и других композитных реставраций.



Форма поставки

Окклюзионный дентин SR Nexco	
Paste Effect Occlusal Dentin	1 x 2,5 г
оранжевый	640448
коричневый	640449
Мамелонная эффект-масса SR Nexco	
Paste Effect Mamelon	1 x 2,5 г
светлый	640450
желто-оранжевый	640451
Эффект-масса Транспа SR Nexco	
Paste Effect Transpa	1 x 2,5 г
синий	640452
коричнево-серый	640453
оранжево-серый	640454
прозрачный	640459
Опаловая эффект-масса SR Nexco	
Paste Effect Opal	1 x 2,5 г
E1	640455
E2	640456
E3	640457
E4	640458

Красители SR Nexco Stains

Интенсивные пастообразные красители могут быть использованы для придания характерных особенностей всем покрытиям, а также протезным зубам.



Форма поставки

SR Nexco Stains	
	1 x 1 мл
прозрачный	640460
белый	640461
синий	640462
оранжевый	640463
красное дерево	640464
темно-бордовый	640465

Десневой опакер SR Nexco Gingiva Opaquer

Десневой опакер Gingiva Opaquer служит для оптимального покрытия и подготовки металлического каркаса к последующему нанесению десневых масс.



Форма поставки

Десневой опакер SR Nexco

Gingiva Opaquer	1 x 2 мл	640466
------------------------	-----------------	---------------

SR Nexco Paste Gingiva

Цвета десневых масс материала SR Nexco Paste согласованы с концепцией десневых масс Ivoclar Vivadent для материалов IPS InLine, IPS d.SIGN и IPS e.max Ceram. Таким образом, цветовое построение десны с живым внешним видом можно выполнять по одной и той же схеме.



Форма поставки

Десневые массы SR Nexco

Paste Gingiva	1 x 2,5 г	
G1		640467
G2		640468
G3		640469
G4		640470
G5		640471

Интенсивные десневые массы SR Nexco Paste Intensive Gingiva

Эти массы служат для дальнейшей индивидуализации при протезировании десны. Новинкой является желтоватый цвет Gingiva IG5.



Форма поставки

Интенсивные десневые массы SR Nexco

Paste Intensive Gingiva	1 x 2,5 г	
IG1		640472
IG2		640473
IG3		640474
IG4		640475
IG5		642319

Базовая десневая масса SR Nexco Paste Basic Gingiva

Дополнительно в рамках концепции десны выпускается новый цвет Basic Gingiva 34, который может использовать как базовый цвет десны.



Форма поставки

Базовая десневая масса SR Nexco

Basic Gingiva	1 x 2,5 г	
BG34		642453

SR® Connect



Форма поставки

SR Connect	1 x 5 мл	642236
------------	----------	--------

Моделировочная жидкость SR® Modelling Liquid



Форма поставки

Моделировочная жидкость SR Modelling Liquid	1 x 5 мл	640500
--	----------	--------

SR Nexco® Подставка под шприцы






Форма поставки

SR Nexco Подставка под шприцы (пустая)	1 x	642535
--	-----	--------



SR Adoro®

SR Adoro – это облицовочный композит с микронаполнителем световой/тепловой полимеризации для полных и частичных облицовок, с помощью которого можно выполнять реставрации на металлическом каркасе, а также безметалловые конструкции. Инновационная структура микронаполнителя материала обеспечивает высокую стойкость цвета и препятствует образованию налета, способствует более простому обтачиванию и полируемости реставрации и обуславливает великолепный блеск эмали готовой реставрации.

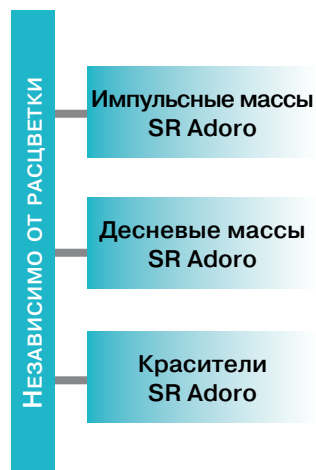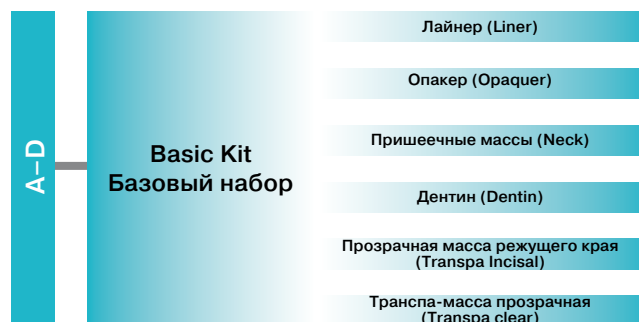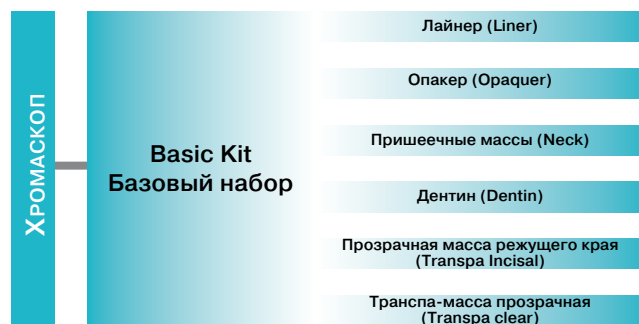

Базовый набор SR Adoro® Basic Kit

Тщательно подобранный базовый набор SR Adoro Basis-Sortiment содержит различные продукты, необходимые для создания живых и эстетичных композитных реставраций. Набор выпускается в ходовых цветах Chromascop и A–D и может быть расширен дополнительными наборами. К тому же, цветовая концепция материала SR Adoro соотносится с материалами IPS d.SIGN и IPS InLine, а также линией зубов SR.



Преимущества:

- консистенция, предотвращающая прилипание материала к инструменту
- удобство применения
- очень хорошая полируемость, блеск, аналогичный блеску живой эмали
- выразительная эстетика благодаря живому опаловому эффекту
- элегантный и практичный бокс для материалов

Форма поставки

Базовый набор SR Adoro Basic Kit Chromascop

573118

Лайнер SR Adoro Liner 050, 100, 200, 300, 400, 500, режущего края (incisal), прозрачный (clear)	по 1 x 2 мл
Опакер SR Adoro Opaquer 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510	по 1 x 2 мл
Пришеечные массы SR Adoro Neck 100, 200, 300, 400, 500	по 1 x 3 г
Дентиновые массы SR Adoro Dentine 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510	по 1 x 3 г
Массы режущего края SR Adoro Incisal 1, 2, 3	по 1 x 3 г
Транспа-масса SR Adoro Transpa прозрачная (clear)	1 x 3 г
SR Adoro Add-On Корректировочная масса цвет: нейтральный	1 x 3 г
SR Принадлежности:	
SR Link	1 x 5 мл
SR Гель	1 x 30 мл
SR Adoro Thermo Guard	1 x 175 г
SR Model Separator	1 x 10 мл
SR Ретенционный адгезив	1 x 20 мл
SR Микроретенции	1 x 15 мл
SR Макроретенции	1 x 15 мл
Универсальная полировочная паста	1 x 100 мл
Универсальные держатели	2 x
Одноразовые кисточки	1 x 50
Одноразовые губки	1 x 50
Канюли	5 x 10
Крышки для канюль	5 x 20
SR блок для замешивания малый	1 x
SR Пластина для замешивания малая	1 x
SR Инструмент для моделирования А (желтый)	1 x
SR Инструмент для моделирования В (красный)	1 x
SR Adoro расцветки опакеров, пришеечных масс, дентинов, масс режущего края /транспа-масс	по 1 x
Расцветка Chromascop	1 x

Базовый набор SR Adoro Basic Kit A–D

573120

SR Adoro Liner Лайнер 050, 100, 200, 300, 400, 500, режущего края (incisal), прозрачный (clear)	по 1 x 2 мл
SR Adoro Opaquer Опакер A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3	по 1 x 2 мл
SR Adoro Neck Пришеечные массы 1, 2, 3, 4, 5	по 1 x 3 г
SR Adoro Dentine Дентиновые массы A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3	по 1 x 3 г
SR Adoro Transpa Incisal Массы режущего края 1, 2, 3	по 1 x 3 г
SR Adoro Transpa Транспа-масса прозрачная (clear)	1 x 3 г
SR Adoro Add-On Корректировочная масса, цвет: нейтральный	1 x 3 г
SR Принадлежности:	
SR Link	1 x 5 мл
SR Гель	1 x 30 мл
SR Adoro Thermo Guard	1 x 175 г
SR Model Separator	1 x 10 мл
SR Ретенционный адгезив	1 x 20 мл
SR Микроретенции	1 x 15 мл
SR Макроретенции	1 x 15 мл
Универсальная полировочная паста	1 x 100 мл
Универсальные держатели	2 x
Одноразовые кисточки	1 x 50
Одноразовые губки	1 x 50
Канюли	5 x 10
Крышки для канюль	5 x 20
SR блок для замешивания малый	1 x
SR Пластина для замешивания малая	1 x
SR Инструмент для моделирования А (желтый)	1 x
SR Инструмент для моделирования В (красный)	1 x
SR Adoro расцветки опакеров A–D, пришеечных масс, дентинов A–D, масс режущего края /транспа-масс	по 1 x

Лайнер SR Adoro® Liner

Лайнер является грунтом, наносимым на препарированный зуб при безметалловых реставрациях. Лайнер создает оптимальную связь между реставрацией, фиксирующим адгезивом и препарированным зубом.



Форма поставки

Лайнер SR Adoro Liner	1 x 2 мл
050	572965
100	572966
200	572967
300	572968
400	572969
500	579249
clear (прозрачный)	573079
incisal (режущего края)	573080

Опакер SR Adoro® Opaquer

Пастообразный opakер в цветах Chromascop и A–D с хорошей стабильностью и очень высокой покрывающей способностью, также при нанесении тонким слоем, создает оптимальную связь с SR Link и облицовочным композитом.



Форма поставки

SR Adoro Опакер Chromascop	1 x 2 мл
110	572897
120	572898
130	572899
140	572900
210	572901
220	572902
230	572903
240	572904
310	572905
320	572906
330	572907
340	572908
410	572909
420	572910
430	572911
440	572912
510	572913
520	572914
530	572915
540	572916

SR Adoro Опакер A–D	1 x 2 мл
A1	572970
A2	572971
A3	572972
A3,5	572973
A4	572974
B1	572975
B2	572976
B3	572977
B4	572978
C1	572979
C2	572980
C3	572981
C4	572982
D2	572983
D3	572984
D4	572985

Пришеечные массы SR Adoro® Neck

Эти пришеечные массы были разработаны специально для комбинированных протезов и предназначены для согласования цвета композитной облицовки с зубами протеза. Их цвет аналогичен цвету шейки зуба расцветок Vivodent PE и A-D, поэтому они применяются с линиями зубов SR Phonares, SR Vivodent и SR Orthotur в цветах Chromascop и A-D.



Форма поставки

Пришеечная масса SR Adoro Neck	1 x 3 г
100	572917
200	572918
300	572919
400	572920
500	572921
1	572986
2	572987
3	572988
4	572989
5	572990

Дентиновые массы SR Adoro® Dentin

Дентиновые массы образуют основу цветов Chromascop и A-D. Интенсивность их цвета соответствует области их применения (реставрации на металлической основе либо безметалловые).



Форма поставки

SR Adoro Дентин Chromascop	1 x 3 г
110	572942
120	572943
130	572944
140	572945
210	572946
220	572947
230	572948
240	572949
310	572950
320	572951
330	572952
340	572953
410	572954
420	572955
430	572956
440	572957
510	572958
520	572959
530	572960
540	572961

SR Adoro Дентин A-D	1 x 3 г
A1	573008
A2	573009
A3	573010
A3,5	573011
A4	573012
B1	573013
B2	573014
B3	573015
B4	573016
C1	573017
C2	573018
C3	573019
C4	573020
D2	573021
D3	573022
D4	573023

Дип-дентины SR Adoro® Deep Dentin

Дип-дентины SR Adoro используются в тех случаях, когда место ограничено, и служат для создания основного цвета зуба.



Форма поставки

SR Adoro Дип-Дентин Chromascop	1 x 3 г
110	572922
120	572923
130	572924
140	572925
210	572926
220	572927
230	572928
240	572929
310	572930
320	572931
330	572932
340	572933
410	572934
420	572935
430	572936
440	572937
510	572938
520	572939
530	572940
540	572941

SR Adoro Дип-Дентин A-D	1 x 3 г
A1	572991
A2	572992
A3	572993
A3,5	572994
A4	572996
B1	572997
B2	572998
B3	572999
B4	573000
C1	573001
C2	573002
C3	573003
C4	573004
D2	573005
D3	573006
D4	573007

Массы режущего края SR Adoro® Incisal

Массы режущего края SR Adoro Incisal адаптированы по цвету и его интенсивности к режцовому краю живого зуба и основываются на цветовой шкале Chromascop.



Форма поставки

Массы режущего края SR Adoro Incisal	1 x 3 г
1	572962
2	572963
3	572964

Транспа-массы режущего края SR Adoro® Transpa-Incisal

Транспа-массы режущего края Transpa Incisal служат для наложения в области режущего края и базируются на цветовой системе A-D. Они менее светлые, но более транслюцентные, чем массы режущего края SR Adoro Incisal.



Форма поставки

Транспа-массы режущего края SR Adoro Transpa-Incisal	1 x 3 г
1	573024
2	573025
3	573026

Прозрачная транспа-масса SR Adoro® Transpa clear

Эта прозрачная масса Transpa clear имеет легкий опаловый эффект, благодаря которому можно легко воспроизводить высокотранслюцентные области, особенно в режущей трети, подобно тому, как они выглядят на живых зубах.



Форма поставки

Прозрачная масса SR Adoro Transpa	1 x 3 г
clear	573085

Корректировочная масса SR Adoro® Add-On

Масса, используемая для небольших корректировок после завершения работы над реставрацией. Корректировочная масса SR Adoro Add-On имеет среднее замутнение массы режущего края, короткое время работы и полимеризации и используется только для небольших корректировок, таких, как проксимальные контактные пункты и пришеечная область промежуточной части.



Форма поставки

Корректировочная масса SR Adoro Add-On	1 x 3 г
Цвет нейтральный	573086

SR Adoro® Thermo Guard

SR Adoro Thermo Guard – это паста на основе диэтиленгликоля/воды. Нанесением этой пасты на все незакрытые металлические поверхности достигается охлаждающий эффект, который минимизирует внутренние напряжения на границе между металлом и SR Adoro. Таким образом, SR Adoro Thermo Guard снижает риск возникновения микротрещин.



Форма поставки

SR Adoro Thermo Guard	1 x 175 г	594798
------------------------------	------------------	---------------

Импульсные массы SR Adoro

22 различных импульсных массы позволяют создавать индивидуальные эффекты, например, в области режущего края, на окклюзионной и пришеечной поверхностях. Их цвета аналогичны ходовым импульсным массам керамических систем IPS d.SIGN/IPS InLine.



Преимущества:

- превосходная стойкость и точность передачи цвета
- хорошие моделировочные свойства
- упрощение создания естественных эффектов

Форма поставки

Окклюзионный дентин		
SR Adoro Occlusal Dentin	1 x 3 г	
оранжевый		573027
коричневый		573028
Мамелоновые массы SR Adoro Mamelon 1 x 3 г		
светлый		573029
желто-оранжевый		573030
лососевый		573031
Опаловые эффект-массы SR Adoro Opal Effect		
1		573032
2		573033
3		573034
4		573035
5		573036
фиолетовый		573037
SR Adoro Incisal Edge	1 x 3 г	573038
Транспа-масса SR Adoro Transpa 1 x 3 г		
синий		573039
коричнево-серый		573040
оранжево-серый		573041
Специальные массы режущего края		
SR Adoro Special Incisal 1 x 3 г		
желтый		573049
серый		573050
SR Adoro Inter Incisal 1 x 3 г		
бело-голубой		573051
Пришеечные транспа-массы SR Adoro Cervical Transpa 1 x 3 г		
желтый		573052
оранжево-розовый		573053
хаки		573054
оранжевый		573055

Десневые массы SR Adoro

Индивидуальные, естественные десневые массы для использования при имплантологических работах. 5 базовых цветов покрывают широкий спектр цветов живой десны, которые используются индивидуально в сочетании с 4-мя интенсивными десневыми массами Intensiv Gingiva Massen, в зависимости от ситуации в полости рта пациента.



Преимущества:

- живые цвета десны
- индивидуализация благодаря использованию интенсивных масс
- расцветка соответствует десневым массам IPS d.SIGN, IPS InLine, IPS e.max Ceram
- цветовые оттенки от оранжевого до красноватого и синеватого

Форма поставки

Десневой опакер SR Adoro Gingiva Opaquer 1 x 2 мл

розовый	573056
---------	--------

Десневые массы SR Adoro Gingiva 1 x 3 г

1	573057
2	573058
3	573059
4	573060
5	573061

Интенсивные десневые массы SR Adoro Intensiv Gingiva 1 x 3 г

1	573062
2	573063
3	573064
4	573065

Красители SR Adoro

Готовые к использованию пастообразные красители выпускаются в 13 цветах и могут быть использованы для придания характерных особенностей всем покрытиям SR Adoro, а также протезным зубам.



Преимущества:

- широкий цветовой спектр
- готовые к использованию, уже замешанные цвета
- живые цветовые эффекты
- расцветка соответствует красителям Stains масс IPS d.SIGN, IPS InLine

Форма поставки

Refill SR Adoro Stains 1 мл

прозрачный	573066
белый	573067
синий	573068
красный	573069
желтый	573070
черный	573071
оранжевый	573072
серый	573073
хаки	573074
оливковый	573075
красное дерево	573076
темно-бордовый	573077
имитация трещины	573078

Расцветки SR Adoro®

В системе SR Adoro расцветки безусловно являются неотъемлемой частью концепции. Они выполнены в едином дизайне с расцветками IPS d.SIGN (держатели). Из соображений естественного преломления света образцам дентина была придана анатомичная форма. Остальные образцы имеют легкую клиновидную форму, чтобы транслюцентность отдельных масс была более наглядной. На передней стороне образцов выполнена структура, обратная сторона является гладкой. Это облегчает сравнение цвета с препарированной культией, а также с окрашенными цементами или адгезивами. Из соображений стабильности цвета образцы некоторых масс выполнены из керамики.



Форма поставки

Расцветки SR Adoro	по 1 x
Опакеры	605191
Опакеры А–D	605190
Пришеечные массы	573109
Дип-дентины	573110
Дип-дентины А–D	573111
Дентины	573112
Дентины А–D	573113
Массы режущего края / транспа-массы	609611
Импульсные массы	573115
Десневые массы	605192

Бокс для материалов SR Adoro®

Элегантный бокс для материалов является идеальным местом для упорядоченного хранения комплекта материалов SR Adoro.



Преимущества

- возможность индивидуального оснащения
- возможна отдельная поставка без материалов

Форма поставки

Бокс для материалов SR Adoro (пустой)	1 x	573104
---------------------------------------	-----	--------

Сплавы SR Adoro®

Оптимальная совместимость

Система материалов SR Adoro совместима с самыми разнообразными сплавами для коронок и мостовидных протезов, универсальными сплавами и сплавами для металлокерамики. В зависимости от клинической ситуации, показаний и личных предпочтений Вы можете выбрать сплав из широкого спектра. Вместе с проверенным на практике адгезивом SR Link для металла и композита вы сможете создать прочную связь между металлическим каркасом и облицовочным композитом SR Adoro.



Форма поставки

Оптимальная совместимость

Если Вам нужна более подробная информация о нашей программе сплавов, обратитесь к нашим представителям или непосредственно к нам.

Сплавы	Au	Pt	Pd	Ag
С высоким содержанием золота				
Academy Gold™	77.2	<1.0	-	12.7
Harmony™ PF	72.0	3.6	-	13.7
Academy Gold™ XH	70.7	3.6	-	13.7
С сокращенным содержанием золота				
Harmony™ X-Hard	68.3	2.9	3.6	10.0
XL-X™	62.8	-	3.9	16.1
Maxigold™	59.5	-	2.7	26.3
Midigold™ 50	50.0	-	3.5	35.0
Magenta™	50.0	-	6.5	21.0
Minigold™	40.0	-	4.0	47.0
Harmony™ 3	3.5	-	25.9	50.8
Универсальные сплавы				
BioUniversal™ PdF	71.1	9.2	-	11.7
	Co	Ni	Cr	Mo
Сплавы из неблагородных металлов				
IPS d.SIGN™ 30	60.2	-	30.1	<1.0
Pisces Plus	-	61.5	22.0	-
4all™	-	61.4	25.7	11.0



SR Chromasit®

SR Chromasit – это облицовочный материал с микронаполнителем, который полимеризуется под давлением при высокой температуре. Благодаря своим оптимальным свойствам SR Chromasit уже многие годы успешно используется в клинической практике. Консистенции готовых к использованию облицовочных масс согласованы между собой, поэтому дентин, масса режущего края, а также различные специальные массы наслаиваются в один этап, без промежуточной полимеризации.

SR Chromasit выпускается в цветах Chromascop.

Преимущества:

- превосходная полируемость
- экономичность
- возможность индивидуализации

SR® Chroma Link

SR Chroma Link создает на поверхности металла условия для оптимальной связи с пластмассой. Активные металлические частицы SR Chroma Link реагируют с оксидом металла и создают, таким образом, предпосылки для оптимальной связи.



Опакер SR Chromasit® Opaquer

Опакер горячей полимеризации SR Chromasit Opaquer реагирует с металлической поверхностью, подготовленной с помощью SR Chroma Link или SR Link, и покрывает металлический каркас слоем материала цвета зуба.



Интенсивный opakер SR Chromasit® Intensiv Opaquer

С помощью согласованных с opakером SR Chromasit Opaquer интенсивных цветов поверхности можно придать необходимый цвет уже на этапе опалового слоя.



Форма поставки

SR Chroma Link	1 x 15 мл	531861
-----------------------	------------------	---------------

Форма поставки

Опакер SR Chromasit Opaquer	1 x 5 г	
11		531862
12		531863
14		531864
15		531865
16		531866
23		531867
24		531868

Форма поставки

Интенсивный opakер SR Chromasit

Intensiv Opaquer	1 x 5 г	
1 – белый		531869
4 – коричневый		531872
5 – розовый		531873

Жидкость для опакера SR Chromasit® Opaquer Liquid

Эта жидкость служит для замешивания опакера SR Chromasit Opaquer.



Форма поставки

Жидкость для опакера SR Chromasit Opaquer Liquid		
	1 x 30 мл	531860
	1 x 100 мл	531876

Дентины SR Chromasit® Dentin

Дентины имеют цвета, соответствующие расцветке Chromascop, и совместимы с опакером SR Chromasit Opaquer. Также они идеально сочетаются с пластмассовыми зубами Ivoclar Vivadent.



Форма поставки

SR Chromasit Dentin	1 x 10 г
110	531804
120	531805
130	531806
140	531807
210	531808
220	531809
230	531810
240	531811
310	531812
320	531813
330	531814
340	531815
410	531816
420	531817
430	531818
440	531819
510	531820
520	531821
530	531822
540	531823

SR Chromasit Dentin	3 x 10 г
Упаковки 3 по 10 г содержат материалы, которые заправляются в пустые контейнеры SR Chromasit.	
110	531832
120	531833
130	531834
140	531835
210	531836
220	531837
230	531838
240	531839
310	531840
320	531841
330	531842
340	531843
410	531844
420	531845
430	531846
440	531847
510	531848
520	531849
530	531850
540	531851

Массы режущего края SR Chromasit® Incisal

Цвета масс режущего края были специально согласованы с расцветками Chromascop, SR Vivodent и цветами живого режущего края.



Форма поставки

Масса режущего края SR Chromasit Incisal		1 x 10 г
1		531824
2		531825
3		531826
4		531827
5		531828

Масса режущего края SR Chromasit Incisal		3 x 10 г
Упаковки по 10 г содержат материалы, которые заправляются в пустые контейнеры SR Chromasit.		
1		531852
2		531853
3		531854
4		531855
5		531856

Креативная масса режущего края SR Chromasit® Creative Incisal

Эти готовые к использованию массы режущего края, имеющие интенсивную окраску, дополняют креативные дентины Creative Dentin.



Форма поставки

Креативная масса режущего края SR Chromasit Creative Incisal		1 x 5 г
21	голубино-синий	531894

Красители SR Chromasit® Color

Эти красители имеют ту же основу, что и материал SR Chromasit. С помощью SR Chromasit Color можно изменить цвет уже полимеризованной облицовки из Chromasit.



Форма поставки

Красители SR Chromasit Color		1 x 2 г
D12	красно-бежевый	531879
D13	желто-бежевый	531880
D14	коричнево-бежевый	531881
D15	серо-бежевый	531882
M1	слоновая кость	531883
M3	медово-желтый	531885
M4	светло-коричневый	531886
M5	темно-коричневый	531887
S22	сине-прозрачный	531884

Интенсивные красители SR Chromasit® Intensiv

Эти интенсивные красители имеют ту же основу, что и материал SR Chromasit. SR Chromasit Intensiv применяются для окраски или изменения цвета масс SR Chromasit, полимеризующихся под давлением при высокой температуре.



Форма поставки

SR Chromasit Intensiv	1 x 2 г	
1 – белый		531888
6 – светло-коричневый		531892
9 – темно-коричневый		531893

Форма поставки

SR Chromasit Clear (прозрачный)	1 x 2 г	531878
---------------------------------	---------	--------

SR Chromasit® Fluid

Chromasit Fluid препятствует образованию ингибированного слоя во время полимеризации материала SR Chromasit. Его следует наносить на облицовку SR Chromasit перед каждой полимеризацией, полимеризовать, а затем полностью удалять.



Форма поставки

SR Chromasit Fluid	1 x 3 мл	531831
	4 x 3 мл	531857

SR® Link

SR Link – это удобная в использовании и быстрая система связи, базирующаяся на активных частицах металла и пластмассы, а также гидрофобных компонентах.



Форма поставки

SR Link	1 x 5 мл	545872
----------------	-----------------	---------------

Ретенционный адгезив SR® Retention Adhesive

Этот адгезив – связующий лак для фиксации микро- и макро-ретенционных перлов. Применение перлов зависит от наличия места.



Форма поставки

Ретенционный адгезив SR Retention Adhesive	1 x 20 мл	529498
---	------------------	---------------

Микроретенционные перлы SR® Micro Retention Beads Макроретенционные перлы SR® Macro Retention Beads

В зависимости от наличия места применяются ретенционные перлы двух различных размеров:

- микроретенционные перлы 200–300 мкм
- макроретенционные перлы 400–600 мкм



Форма поставки

Микроретенционные перлы SR Micro Retention Beads	1 x 15 г	529492
---	-----------------	---------------

Макроретенционные перлы SR Macro Retention Beads	1 x 15 г	529497
---	-----------------	---------------

Модель-сепаратор SR® Model Separator

SR Model Separator применяется для изоляции гипса от композитных облицовочных материалов.



Форма поставки

SR Model Separator	1 x 10 мл	573105
---------------------------	------------------	---------------

SR® Gel

Гель препятствует образованию ингибированного слоя во время полимеризации. Таким образом обеспечивается полная и надежная полимеризация поверхности.



Преимущество:

– простое применение с различными светоотверждаемыми материалами

Форма поставки

SR Gel	1 x 30 мл	573106
--------	-----------	--------

Универсальная полировочная паста Universal Polishing Paste

Универсальная полировочная паста превосходно подходит для быстрой финишной полировки пластмассовых и металлических реставраций, особенно протезов и покрытий из SR Adoro / SR Chromasit / SR Ivocron.



Форма поставки

Универсальная полировочная паста Universal Polishing Paste	1 x 100 мл	573660
---	------------	--------

SR® Compositiv

Compositiv – это идеальный светоотверждаемый композит с микронаполнителем цвета слоновой кости, который используется для оптимизации адгезии различных пластмассовых и композитных материалов.



Форма поставки

SR Compositiv	1 x 2,5 г	549821
---------------	-----------	--------

Моделировочные инструменты SR® Modelling Instruments

Три различных моделировочных инструмента облегчают адаптацию и моделирование композитных материалов.



Преимущества:

– 6 различных насадок для индивидуального моделирования
– незначительная прилипаемость материалов

Форма поставки

Моделировочные инструменты SR Modelling Instruments	по 1 x	
А (желтый)		573101
В (красный)		573102
С (синий)		573103

Универсальный держатель

Одноразовые кисточки и губки вставляются перед использованием в универсальный держатель.



Форма поставки

Универсальный держатель белый 1 x 573676

Одноразовая кисточка

Одноразовые кисточки служат для нанесения жидких материалов, например, опакеров, SR Link.



Форма поставки

Одноразовые кисточки 1 x 50 573095

Одноразовые губки

Хвостовики одноразовых губок были модифицированы таким образом, чтобы они фиксировались в универсальном держателе. Одноразовые губки служат для устранения ингибированного слоя после полимеризации.



Форма поставки

Одноразовые губки 1 x 50 573096

Канюли

Канюли для шприцев (с текучими материалами) предназначены для более точного дозирования и аккуратного нанесения.



Форма поставки

Канюли 1 x 10 573097

Колпачки для канюль

Колпачки для канюль предотвращают высыхание/полимеризацию материала в канюле и защищают его от загрязнения.



Форма поставки

Колпачки для канюль 1 x 20 573098

Пластина для замешивания малая SR® Mixing Plate (small)

Пластина для замешивания SR служит для замешивания компонентов композита. Светозащитная крышка продлевает рабочее время светоотверждаемых материалов.



Форма поставки

SR Пластина для замешивания малая 1 x 573100

Блок для замешивания малый SR® Mixing Pad (small)

Блок для замешивания SR используется для замешивания опакера, чтобы не очищать пластину для замешивания от остатков опакера.



Форма поставки

SR Блок для замешивания малый 1 x 573099

Telio® System

Telio – это системное решение для временных реставраций краткосрочного и длительного ношения, сопровождающее весь процесс лечения. Продукты Telio оптимально согласованы между собой по цвету и материально-техническим свойствам.

- **Telio CS**

Для врачей-стоматологов: самоотверждаемый материал для коронок и мостовидных протезов, дополняется материалом, снимающим гиперчувствительность, и фиксирующим компози- том двойного отверждения.

- **Telio CAD**

Для пользователей систем CAD/CAM: пластмассовые блоки для эффективного изготовления временных коронок и мостовидных протезов с использованием технологии CAD/CAM

- **Telio Lab**

Для пользователей систем CAD/CAM: пластмассовые блоки для эффективного изготовления временных коронок и мостовидных протезов с использованием технологии CAD/CAM

Все из одних рук

Telio – это системное решение для временных реставраций



Совместимо – просто – наглядно



Стартовый набор Telio® CAD for CEREC® Starter Kit

Стартовый набор Telio CAD Starter Kit включает в себя блоки, фиксирующий материал, материал для снятия чувствительности Desensitizer, а также различные принадлежности для врача-стоматолога при работе с системой CEREC.



Форма поставки

Telio CAD for CEREC Starter Kit		631697
Telio CAD for CEREC and inLab Блоки, В40 L		
Цвет: LT A1		2 x
Telio CAD for CEREC and inLab Блоки, В40 L		
Цвета: LT A2, LT A3		по 3 x
Telio CS Link Transparent		1 x 6 г
Telio CS Desensitizer		1 x 5 г
OptraPol Test Pack Тестовая упаковка		1 x
Различные принадлежности		

Блоки Telio® CAD for CEREC® and inLab®

Telio CAD – это блоки на основе PMMA для изготовления временных конструкций длительного ношения с использованием технологии CAD/CAM. По причине промышленного способа полимеризации блоки обладают высокой гомогенностью. Они не дают никакой полимеризационной усадки, на них не образуется ингибированный слой. Благодаря технологии CAD/CAM временная реставрация в любой момент может быть воспроизведена легко и просто. С помощью красителей и/или облицовочных масс можно провести окончательную оптимизацию реставрации.



Форма поставки

Telio CAD for CEREC and inLab LT B40L no 1 x 3		
LT BL 3		627718AN
LT A1		627719AN
LT A2		627720AN
LT A3		627721AN
LT A3,5		627722AN
LT B1		627723AN
Telio CAD for CEREC and inLab LT B40L no 1 x 9		
LT BL 3		627726AN
LT A1		627727AN
LT A2		627728AN
LT A3		627729AN
LT A3,5		627730AN
LT B1		627731AN
Telio CAD for CEREC and inLab LT B55 no 1 x 1		
LT BL 3		627818AN
LT A1		627819AN
LT A2		627820AN
LT A3		627821AN
LT A3,5		627822AN
LT B1		627823AN
Telio CAD for CEREC and inLab LT B55 no 1 x 3		
LT BL 3		627824AN
LT A1		627825AN
LT A2		627826AN
LT A3		627827AN
LT A3,5		627828AN
LT B1		627829AN

Стартовый набор Telio® Lab Starter Kit

Стартовый набор Telio Lab Starter Kit включает в себя базовый набор материалов Telio Lab. С его помощью можно изготавливать временные реставрации в цветах A2 и A3. Этот набор отлично подходит для того, чтобы сделать первые шаги в мир Telio Lab и выполнить свои первые реставрации.



Форма поставки

Стартовый набор Telio Lab Starter Kit A2/A3		628055
Опакер Telio Lab Оракер, Цвета: OP1, OP2	по 1 x 5 г	
Дентин Telio Lab Dentin, Цвета: A2, A3	по 1 x 25 г	
Режущий край Telio Lab Incisal, Цвета: T12, T13	по 1 x 25 г	
Пришеечная масса Telio Lab Neck, Цвета: N1, N2, N3	по 1 x 25 г	
Жидкость Telio Lab Cold Liquid	1 x 30 мл	
Жидкость для опакера Telio Lab Оракер Liquid	1 x 15 мл	

Базовый набор Telio® Lab Basic Kit

Telio Lab – это пластмасса (порошок и жидкость) для изготовления временных реставраций холодной техникой, согласованная с расцветкой A-D.

Базовый набор Telio Lab Basic Kit объединяет в себе комплект материалов для изготовления в лабораторных условиях временных коронок и мостовидных протезов.



Форма поставки

Базовый набор Telio Lab Basic Kit		628054
Опакер Telio Lab Оракер, Цвета: OP0, OP1, OP2	по 1 x 5 г	
Дентин Telio Lab Dentin, Цвета: BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1	по 1 x 25 г	
Режущий край Telio Lab Incisal, Цвета: T11, T12, T13	по 1 x 25 г	
Пришеечная масса Telio Lab Neck, Цвета: N1, N2, N3	по 1 x 25 г	
Жидкость Telio Lab Cold Liquid	1 x 100 мл	
Жидкость для опакера Telio Lab Оракер Liquid	1 x 30 мл	
SR Separating Fluid	1 x 30 мл	



Форма поставки

Опакер Telio Lab Opaquer	1 x 5 г			
OP0		628048		
OP1		628049		
OP2		628050		
OP3		628051		
Десневой (Gingiva)		628053		
Дентин Telio Lab Dentin	1 x 25 г			
A1		628060		
A2		628061		
A3		628062		
A3.5		628063		
A4		628064		
B1		628065		
B2		628066		
B3		628067		
B4		628068		
C1		628069		
C2		628070		
C3		628071		
C4		628072		
D2		628073		
D3		628074		
D4		628075		
Дентин Telio Lab Dentin	1 x 100 г			
A1		628076		
A2		628077		
A3		628078		
A3.5		628079		
A4		628080		
B1		628081		
B2		628082		
B3		628083		
B4		628084		
C1		628085		
C2		628086		
C3		628087		
C4		628088		
			D2	628089
			D3	628090
			D4	628091
			Транспа-масса режущего края	
			Telio Lab Transpa Incisal	1 x 25 г
			T11	628093
			T12	628094
			T13	628095
			Транспа-масса режущего края	
			Telio Lab Transpa Incisal	1 x 100 г
			T11	628096
			T12	628097
			T13	628098
			Пришеечная масса Telio Lab Neck	1 x 25 г
			1	628099
			2	628100
			3	628101
			4	628102
			Интенсивные массы Telio Lab Intensive	1 x 7 г
			белый	628103
			оранжевый	628104
			коричневый	628105
			Telio Lab Bleach	1 x 25 г
			BL3	628118
			Telio Lab Bleach	1 x 100 г
			BL3	628119
			Десневая масса Telio Lab Gingiva	1 x 100 г
			Жидкость для опакера	
			Telio Lab Opaquer Liquid	1 x 30 мл 628110
			Жидкость Telio Lab Cold Liquid	1 x 100 мл 628106
			Жидкость Telio Lab Cold Liquid	1 x 500 мл 628107

Telio® Lab LC Veneer Kit

Набор Telio Lab LC Veneer состоит из светоотверждаемых пастообразных масс режущего края и жидких красителей. Они используются для индивидуализации реставраций Telio. Наряду с техникой Cut-back их можно применять при восстановлении окклюзии и для создания придесневой части.



Форма поставки

Telio Lab LC Veneer Kit	632464
Транспа-масса режущего края Telio Lab LC Transpa Incisal, Цвета: 1, 2, 3	по 1 x 2,5 г
Транспа-масса Telio Telio Lab LC Транспа нейтральная	1 x 2,5 г
База Telio Telio Lab LC Base	1 x 2,5 г
Красители Telio Stains, цвета: синий, светло-желтый, белый, оранжевый	по 1 x 1,0 г
Корректировочная масса Telio Add-On Flow	1 x 1,6 г
Активатор Telio Activator	1 x 15 мл
SR Gel	1 x
SR Composiv	1 x
Транспа-масса режущего края	
Telio Lab LC Transpa Incisal	1 x 2,5 г
1	632383
2	632384
3	632385
Нейтральная (neutral)	632386
Красители Telio Stains	1 x 1 г
синий (blue)	632387
светло-желтый (light-yellow)	632458
белый (white)	632459
оранжевый (orange)	632460
Корректировочная масса	
Telio Add-On Flow	1 x 1,6 г 632462
Активатор Telio Activator	1 x 15 мл 632608

Telio® CS C&B

Telio CS C&B – это самоотверждаемый пастообразный композитный материал для изготовления высококачественных временных коронок и мостовидных протезов. Выпускается в пяти цветах: BL3, A1, A2, A3, A3.5. Telio CS C&B позволяет даже при конструкциях на несколько единиц добиваться высокой точности и отсутствия напряжений, т.к. наряду с высокой стабильностью материал дает незначительную полимеризационную усадку и очень мало впитывает воду.



Форма поставки

Telio CS C&B можно приобрести непосредственно у поставщика клинических продуктов.

Telio® CS Link

Telio CS Link – это временный композитный цемент двойного отверждения (светового и химического) для фиксации временных конструкций (максимальное время ношения 6 недель). Два прозрачных цвета А3 и Transparent позволяют выполнять эстетичную фиксацию. Telio CS Link не содержит эвгенола, поэтому он превосходно подходит в тех случаях, когда позднее предполагается адгезивно фиксировать постоянные цельно-керамические или композитные реставрации, изготовленные в лаборатории.



Форма поставки

Telio CS Link можно приобрести непосредственно у поставщика клинических продуктов.

Telio® CS Cem Implant

Самоотверждаемый композитный цемент с опциональной возможностью световой полимеризации для временной/полупостоянной фиксации на абатментах имплантов.

Показания:

- временная/полупостоянная фиксация супраструктур имплантов на абатментах из титана, золота и оксида циркония.



Преимущества:

- временная/полупостоянная фиксация временных и постоянных конструкций
- длительность ношения: 6 месяцев и более

Форма поставки

Telio CS Cem Implant можно приобрести непосредственно у поставщика клинических продуктов.

Telio® CS Desensitizer

Telio CS Desensitizer – это жидкость для снятия или уменьшения гиперчувствительности дентина или постоперативной чувствительности. Telio CS Desensitizer подходит для предварительного лечения и снятия чувствительности оголенных или обточенных поверхностей дентина (повязка для препарированных полостей и культей). Дентин можно обрабатывать перед фиксацией временных реставраций Telio, чтобы предотвратить или минимизировать гиперчувствительность.



Форма поставки

Telio CS Desensitizer можно приобрести непосредственно у поставщика клинических продуктов.

Telio® CS Inlay

Telio CS Inlay – это светоотверждаемый однокомпонентный материал для временных конструкций.

Показания:

- глубокое препарирование с параллельными стенками под вкладки типа Inlay
- обратимое закрытие шахты винта имплантов
- подкладочный материал для временных коронок и мостовидных протезов из поликарбоната или метакрилата.



Преимущества:

- хорошее увлажнение тканей зубов и отсутствие пятен
- незначительная полимеризационная усадка
- кариостатические и антибактериальные компоненты
- быстрое и простое применение, удаление одним куском
- светоотверждаемый однокомпонентный материал
- прилипает к зубу, а не к инструменту
- дополнительный временный цемент не нужен
- выпускается в двух различных цветах и формах поставки (шприцы и кавифилы)

Цвета:

Прозрачный и универсальный

Telio® CS Onlay

Telio CS Onlay – это светоотверждаемый однокомпонентный материал для временных конструкций.

Показания:

- большие и плоские полости с малоретенционным препарированием, например, под вкладки типа Onlay.



Преимущества:

- хорошее увлажнение тканей зубов и отсутствие пятен
- незначительная полимеризационная усадка
- кариостатические и антибактериальные компоненты
- быстрое и простое применение, удаление одним куском
- светоотверждаемый однокомпонентный материал
- прилипает к зубу, а не к инструменту
- дополнительный временный цемент не нужен
- выпускается в двух различных цветах и формах поставки (шприцы и кавифилы)

Цвета:

Прозрачный и универсальный


Форма поставки

Telio CS Inlay / Onlay можно приобрести непосредственно у поставщика клинических продуктов.



IPS d.SIGN®

Фтор-апатитовая лейцитная стеклокерамика подкупает своим живым внешним видом. Фтор-апатит входит в состав живых зубов и поддерживает такие их свето-оптические свойства, как транслюцентность, светлота, распределение света.

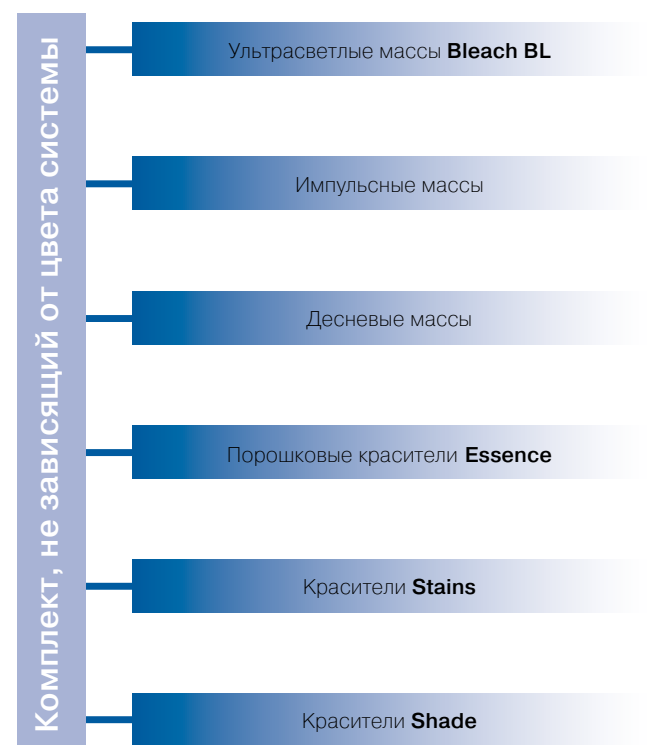

Базовый набор IPS d.SIGN® Basic Kit

Обширный базовый набор содержит различные материалы для создания превосходных реставраций из фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики, ничем не отличающихся от живых зубов. Набор выпускается в ходовых цветах Chromascop и A-D и может быть индивидуально дополнен.



Chromascop



A-D

Форма поставки

Базовый набор IPS d.SIGN Basic Kit Chromascop 556458

Пастообразный опакер IPS d.SIGN	по 1 x 3 г
Оракер Pastes 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510	
Интенсивный пастообразный опакер IPS d. SIGN Intensiv Opaquer Pastes	по 1 x 3 г
белый, фиолетовый, коричневый, режущего края	
Дентин IPS d.SIGN Dentin	по 1 x 20 г
130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510	
Массы режущего края 3 x	по 1 x 20 г
IPS d.SIGN Incisal S1, S2, S3	
Транспа-масса IPS d.SIGN Transpa	1 x 20 г
нейтральная	
Глазурь IPS d.SIGN Glaze	1 x 3 г
Корректировочная масса	1 x 20 г
IPS d.SIGN Add-On	
Моделировочные жидкости	по 1 x 60 мл
IPSD.SIGN Build-Up Liquid; Medium, Optimum 2	
Жидкость для опакера IPS d.SIGN	1 x 15 мл
Оракер Liquid Жидкость для глазури	1 x 15 мл
и красителей IPS d.SIGN Glaze and Stain Liquid	
Силер для моделей IPS Model Sealer	1 x 50 мл
Изолирующая жидкость для керамики	1 x 15 мл
с брашем	
IPS Ceramic Separating Liquid with brush	
Расцветка Chromascop	1 x
Расцветки IPS d.SIGN (опакеров,	по 1 x
дентинов, масс режущего края)	

Базовый набор IPS d.SIGN Basic Kit A-D 558195

Пастообразный опакер IPS d.SIGN	по 1 x 3 г
Оракер Pastes	
A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D2, D3	
Интенсивный пастообразный опакер	по 1 x 3 г
IPS d. SIGN Intensiv Opaquer Pastes	
белый, фиолетовый, коричневый, режущего края	
Дентин IPS d.SIGN Dentin	по 1 x 20 г
A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D2, D3	
Пришеечный дентин	1 x 20 г
IPS d.SIGN Cervical Dentin	
D2/D3	
Массы режущего края IPS d.SIGN Incisal	по 1 x 20 г
TS1, TS2, TS3	
Транспа-масса IPS d.SIGN Transpa	1 x 20 г
нейтральная	
Глазурь IPS d.SIGN Glaze	1 x 3 г
Корректировочная масса	1 x 20 г
IPS d.SIGN Add-On	
Моделировочные жидкости	по 1 x 60 мл
IPS d.SIGN Build-Up Liquid;	
Medium, Optimum 2	
Жидкость для опакера IPS d.SIGN	1 x 15 мл
Opaquer Liquid	
Жидкость для глазури и красителей	1 x 15 мл
IPS d.SIGN Glaze and Stain Liquid	
Силер для моделей IPS Model Sealer	1 x 50 мл
Изолирующая жидкость для керамики	1 x 15 мл

Преимущества

- поддержка свето-оптических свойств живых зубов
- пастообразные опакеры с высокой маскирующей способностью

с брашем

IPS Ceramic Separating Liquid with brush

Расцветки IPS d.SIGN (опакеров, дентинов, масс режущего края)

Стартовый набор IPS d.SIGN Trial Kit Chromascop 557242

Опакер IPS d.SIGN Opaquer 210	1 x 3 г
Дентин IPS d.SIGN Dentin 210	1 x 3 г
Масса режущего края IPS d.SIGN Incisal 2	1 x 3 г
Дип-дентин IPS d.SIGN Deep Dentin 210	1 x 3 г
Плечевая масса IPS d.SIGN Margin 210	1 x 3 г
Транспа-масса IPS d. SIGN Transpa	1 x 3 г
нейтральная	
Окклюзионный дентин IPS d.SIGN Occlusal Dentin	1 x 3 г
оранжевый	
Эффект-массы IPS d.SIGN Effect 1, 3	по 1 x 3 г
Мамелоновая масса IPS d.SIGN Mamelon	1 x 3 г
Светлая	
Глазурь IPS d.SIGN Glaze	1 x 3 г
Моделировочная жидкость	1 x 5 мл
IPS d.SIGN Build-Up Liquid Medium	
Жидкость для глазури и красителей	1 x 5 мл
IPS d.SIGN Glaze and Stain Liquid	
Моделировочная жидкость	1 x 5 мл
для плечевых масс	
IPS d.SIGN Margin Build-Up Liquid	
Расцветка масс IPS d.SIGN	1 x

Стартовый набор IPS d.SIGN Trial Kit A-D 558196

Опакер IPS d.SIGN Opaquer A3	1 x 3 г
Дентин IPS d.SIGN Dentin A3	1 x 3 г
Масса режущего края IPS d.SIGN Incisal TS2	1 x 3 г
Дип-дентин IPS d.SIGN Deep Dentin A3	1 x 3 г
Плечевая масса IPS d.SIGN Margin A3	1 x 3 г
Транспа-масса IPS d. SIGN Transpa	1 x 3 г
нейтральная	
Окклюзионный дентин IPS d.SIGN	1 x 3 г
Occlusal Dentin оранжевый	
Эффект-массы IPS d.SIGN Effect 1,3	по 1 x 3 г
Мамелоновая масса IPS d.SIGN Mamelon	1 x 3 г
Светлая	
Глазурь IPS d.SIGN Glaze	1 x 3 г
Моделировочная жидкость	1 x 5 мл
IPS d.SIGN Build-Up Liquid Medium	
Жидкость для глазури и красителей	1 x 5 мл
IPS d.SIGN Glaze and Stain Liquid	
Моделировочная жидкость	1 x 5 мл
для плечевых масс IPS d.SIGN Margin Build-Up Liquid	

Форма поставки

Опакер IPS d.SIGN Opaquer Chromascop 1 x 3 г

110	556460
120	556461
130	556462
140	556463
210	556464
220	556465
230	556466
240	556467
310	556468
320	556469
330	556470
340	556471
410	556472
420	556473
430	556474
440	556475
510	556476
520	556477
530	556478
540	556479

Опакер IPS d.SIGN Opaquer A-D 1 x 3 г

A1	558198
A2	558199
A3	558200
A3.5	558201
A4	558202
B1	558203
B2	558204
B3	558205
B4	558206
C1	558207
C2	558208
C3	558209
C4	558210
D2	558211
D3	558212
D4	558213

Интенсивный opakер IPS d.SIGN

Intensiv Opaquer	1 x 3 г	
белый		556480
фиолетовый		556481
коричневый		556482
режущего края		556483

Опакер F IPS d.SIGN Opaquer F 1 x 1 г 599632**Дентин IPS d.SIGN Dentin Chromascop 1 x 20 г**

110	556485
120	556486
130	556487
140	556488
210	556489
220	556490
230	556491
240	556492
310	556493
320	556494
330	556495
340	556496
410	556497
420	556498
430	556499
440	556500
510	556501
520	556502
530	556503
540	556504

Дентин IPS d.SIGN Dentin Chromascop 1 x 100 г

110	556506
120	556507
130	556508
140	556509
210	556510
220	556511
230	556512
240	556513
310	556514
320	556515
330	556516
340	556517
410	556518
420	556519
430	556520
440	556521
510	556522
520	556523
530	556524
540	556525

Форма поставки

Дентин IPS d.SIGN Dentin A-D	1 x 20 г
A1	558215
A2	558216
A3	558217
A3.5	558218
A4	558219
B1	558220
B2	558221
B3	558222
B4	558223
C1	558224
C2	558225
C3	558226
C4	558227
D2	558228
D3	558229
D4	558230

Дентин IPS d.SIGN Dentin A-D	1 x 100 г
A1	558232
A2	558233
A3	558234
A3.5	558235
A4	558236
B1	558237
B2	558238
B3	558239
B4	558240
C1	558241
C2	558242
C3	558243
C4	558244
D2	558245
D3	558246
D4	558247

Дентин IPS d.SIGN Dentin A-D	1 x 250 г
A1	563507
A2	563508
A3	563509
A3.5	563510
A4	563511
B1	563512
B2	563513
B3	563514
B4	563515
C1	563516
C2	563517
C3	563518
C4	563519
D2	563520
D3	563521
D4	563522

Пришеечный дентин IPS d.SIGN Cervical Dentin D2 / D3	1 x 20 г	558684
	1 x 100 г	558685
	1 x 250 г	563523

Масса режущего края IPS d.SIGN Incisal	1 x 20 г
1	556527
2	556528
3	556529

Масса режущего края IPS d.SIGN Incisal	1 x 100 г
1	556531
2	556532
3	556533

Транспа-масса режущего края IPS d.SIGN Transpa Incisal	1 x 20 г
TS-1	558249
TS-2	558250
TS-3	558251

Транспа-масса режущего края IPS d.SIGN Transpa Incisal	1 x 100 г
TS-1	558253
TS-2	558254
TS-3	558255

Транспа-масса режущего края IPS d.SIGN Transpa Incisal	1 x 250 г
TS-1	563524
TS-2	563525
TS-3	563526

Корректировочная масса IPS d.SIGN Add-On	1 x 20 г	556642
--	----------	--------

Глазуровочная паста IPS d.SIGN Glaze Paste	1 x 3 г	556643
--	---------	--------

Дип-дентины IPS d.SIGN® Deep Dentin

Дип-дентины IPS d.SIGN Deep Dentine позволяют достигать высоких эстетических результатов при малой толщине слоя. Особенно в случаях, когда имеется мало места, можно создавать более интенсивный и насыщенный цвет с помощью дип-дентинов IPS d.SIGN Deep Dentin.



Преимущества

- никакого изменения цвета по сравнению с основным цветом дентина
- повышенная opakовость и насыщенность цвета

Форма поставки

Дип-дентин IPS d.SIGN Deep

Дип-дентин IPS d.SIGN Deep Dentin Chromascope	1 x 20 г	
110		560502
120		560503
130		556536
140		556537
210		556538
220		556539
230		556540
240		560504
310		556541
320		560505
330		560506
340		560507
410		556542
420		556543
430		556544
440		560508
510		556545
520		560509
530		560510
540		560511

Дип-дентин IPS d.SIGN Deep

Дип-дентин IPS d.SIGN Deep Dentin A-D	1 x 20 г	
A1		560512
A2		558258
A3		558259
A3.5		558260
A4		560513
B1		560514
B2		558262
B3		558263
B4		560515
C1		560516
C2		560517
C3		558264
C4		560518
D2 / D3		558261
D4		560519

Плечевые массы IPS d.SIGN® Margin

С помощью плечевых масс IPS d.SIGN Margin формируется керамическое плечо в области уступа. Массы выпускаются в цветах Chromascop и A-D. Дополнительно предлагаются 4 интенсивных плечевых массы для создания специальных эффектов. Плечевая корректировочная масса Margin Add-On служит для окончательной коррекции плеча.



Преимущества:

- высокая прочность края и стойкость к разрушению
- превосходная стабильность при обжиге

Форма поставки

Плечевые массы

IPS d.SIGN Margin Chromascop	1 x 20 г
110	560520
120	560521
130	556551
140	556553
210	556554
220	556555
230	556556
240	560522
310	556557
320	560523
330	560524
340	560525
410	556558
420	556559
430	556560
440	560526
510	556561
520	560527
530	560528
540	560529

Плечевые массы

IPS d.SIGN Margin A-D	1 x 20 г
A1	560530
A2	558268
A3	558269
A3.5	558270
A4	560531
B1	560532
B2	558272
B3	558273
B4	560533
C1	560534
C2	560535
C3	558274
C4	560536
D2 / D3	558271
D4	560537

Интенсивные плечевые массы

IPS d.SIGN Intensiv Margin	1 x 20 г
желтый	556562
оранжевый	556563
оранжево-розовый	556564
корректировочный add-on	556565
опаковый	556566

Ультрасветлые массы IPS d.SIGN® Bleach BL

Четко выраженные цветовые оттенки позволяют соответствовать высочайшим требованиям современной «белой эстетики».



Форма поставки

Опакер IPS d.SIGN Opaquer Bleach BL	1 x 20 г	
BL1/BL2		602924
BL3/BL4		602925
Дентин IPS d.SIGN Dentin Bleach BL	1 x 20 г	
BL1		602953
BL2		602954
BL3		602955
BL4		602956

Масса режущего края IPS d.SIGN Incisal Bleach BL	1 x 20 г	602957
Плечевая масса IPS d.SIGN Margin Bleach BL	1 x 20 г	
BL1		602947
BL4		602948
Дип-дентин IPS d.SIGN Deep Dentin Bleach BL	1 x 20 г	
BL1		602950
BL4		602951
Корректировочная масса IPS d.SIGN Add-On Bleach BL	1 x 20 г	602958

Импульсные массы IPS d.SIGN® Impulse

Готовые к использованию Индивидуальные массы фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики упрощают создание естественных эффектов на реставрации.

Преимущества:

- превосходная моделируемость
- стабильность цвета, также после нескольких обжигов



Форма поставки

Окклюзионный дентин IPS d.SIGN Occlusal Dentin	1 x 20 г	
оранжевый		556587
коричневый		556588
Мамелоновая масса IPS d.SIGN Mamelon	1 x 20 г	
светлый		556575
желто-оранжевый		556576
лососевый		556577
Эффект-массы IPS d.SIGN Effect	1 x 20 г	
1		556594
2		556595
3		556596
4		556597
5		574564
фиолетовый		556598
Транспа-масса IPS d.SIGN Transpa	1 x 20 г	
голубой		556583
коричнево-серый		556584
оранжево-серый		556585
нейтральный		556586
нейтральный	1 x 100 г	563527
нейтральный	1 x 250 г	563528
Масса кромки режущего края Incisal Edge	1 x 20 г	556589

Яркий дентин IPS d.SIGN Brilliant Dentin	1 x 20 г	
желтый		556570
оранжевый		556571
белый		556572
Небный дентин IPS d.SIGN Palatal Dentin	1 x 20 г	
желтый		556573
красный		556574
Масса для вкраплений IPS d.SIGN Insert	1 x 20 г	
оранжевый		556578
серый		556579
Специальная масса режущего края IPS d.SIGN Special Incisal	1 x 20 г	
желтый		556581
серый		556582
Масса режущего края Inter IPS d.SIGN Inter Incisal	1 x 20 г	
бело-голубой		556580
Пришеечная масса режущего края IPS d.SIGN Cervical Incisal	1 x 20 г	
желтый		556590
оранжево-розовый		556591
хаки		556592
оранжевый		556593

Десневые массы IPS d.SIGN® Gingiva

5 десневых масс, визуально не отличающихся от живых тканей, могут использоваться в сочетании с 4-мя десневыми модификаторами, в зависимости от индивидуальной клинической ситуации. Цветовые оттенки – от оранжевого и красного до синеватого.



Преимущества:

- естественные цвета десны
- обширные возможности для имитации мягких тканей

Форма поставки

**Десневой опакер IPS d.SIGN
Gingiva Oraquer** 1 x 3 г 556623

Десневые массы IPS d.SIGN Gingiva 1 x 20 г

1	556615
2	556616
3	556617
4	556618
5	556802

Десневые модификаторы IPS d.SIGN

Gingiva Modifier 1 x 20 г

M1	556619
M2	556620
M3	556621
M4	556622

Порошковые красители IPS d.SIGN® Essence

Порошкообразные керамические красители IPS d.SIGN Essence можно смешивать с любой массой IPS d.SIGN для того, чтобы сделать цвет более интенсивным. Кроме того, красители IPS d.SIGN Essence отлично подходят для индивидуализации поверхности реставрации.



Преимущества:

- высокая термическая устойчивость и стойкость в полости рта
- подходят для смешивания с другими массами и для нанесения на поверхность реставрации.

Форма поставки

Красители IPS d.SIGN Essence 1 x 1 г

оранжевый	556626
желтый	556627
серый	556628
коричневый	556629

Красители IPS d.SIGN® Stains

Пастообразные интенсивные красители выпускаются в 14 различных цветах. Они служат для имитации характерных особенностей на керамической поверхности реставрации.



Преимущества:

- высокая термическая устойчивость и стойкость в полости рта
- паста, готовая к использованию
- с помощью 3 дополнительных цветов – базового синего, базового красного и базового желтого – можно создавать индивидуальные оттенки.

Форма поставки

Красители IPS d.SIGN Stains	1 x 1 г
базовый синий	556632
белый	556633
красное дерево	556634
хаки	556635
оранжевый	556636
серый	556637
ваниль	556638
имитация трещины	556639
оливковый	556640
желтый	556641
базовый желтый	561102
базовый красный	561103
черный	561104
темно-бордовый	561105

Красители IPS d.SIGN® Shade

С помощью 7 пастообразных красителей для дентина можно производить дополнительные корректировки цвета реставраций из IPS d.SIGN. Красители находятся в соответствии с 20-ю цветами Chromascop и 16-ю цветами A-D.



Преимущества:

- пасты, готовые к использованию
- согласованная цветовая концепция
- возможность быстрой корректировки цвета

Форма поставки

Красители IPS d.SIGN Shade	1 x 3 г
1 (110, 120, 130, A1, B1, B2)	561572
2 (140, 210, 220, 230, 240, A2, A3, A3,5)	561573
3 (310, 320, 330, B3, B4, D4)	561574
4 (340, 540, A4)	561575
5 (410, 420, C1, D2, D3)	561576
6 (430, 440, 510, C2, C3, C4)	561577
7 (520, 530)	561578

Флюоресцентный опакер IPS d.SIGN® Opaquer F

Вопрос флюоресцентности является спорной темой, которая много обсуждается. Поскольку природа не дает нам единого стандарта флюоресцентности, мы, тем не менее, хотим обеспечить неизменное качество своих материалов, поэтому с помощью опакера F пользователь имеет возможность усилить флюоресцентность, идущую из глубины реставрации.



Форма поставки

Флюоресцентный опакер		
IPS d.SIGN Opaquer F	1 x 1 г	599632

Жидкость для опакера IPS d.SIGN® Opaquer Liquid

Жидкость служит для минимального разбавления засохшего опакера. Не может применяться для замешивания пастообразных опакеров.



Форма поставки

Жидкость для опакера		
IPS d.SIGN Opaquer Liquid	1 x 15 мл	556645

Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS d.SIGN® Margin Build-Up Liquid

Жидкость служит для замешивания плечевых масс IPS d.SIGN Margin Massen.



Форма поставки

Моделировочная жидкость для плечевых масс		
IPS d.SIGN Margin Build-Up Liquid	1 x 60 мл	556648

Жидкость для глазури и красителей IPS d.SIGN® Glaze and Stain Liquid

Жидкость служит для создания необходимой консистенции таких материалов, как красители IPS d.SIGN Stains, IPS d.SIGN Shade, IPS d.SIGN Essence и глазури IPS d.SIGN Glaze.



Форма поставки

Жидкость для глазури и красителей	1 x 15 мл	556646
IPS d.SIGN Glaze and Stain Liquid		

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid Medium

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN Build-Up Liquid Medium 60 / 250 мл отлично подходит для замешивания масс IPS d.SIGN для работы техникой наслоения. Моделировочная жидкость Medium больше всего подходит техникам, которые предпочитают более длительное время работы и большую стабильность масс IPS d.SIGN. Таким образом, массы IPS d.SIGN можно наносить небольшими порциями без постоянного увлажнения. Более длительное рабочее время по сравнению с моделировочной жидкостью light требует большего времени закрытия печи при обжиге.



Форма поставки

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN Modellierliquid Medium

	1 x 60 мл	556644
	1 x 250 мл	558985

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid Light

Отлично подходит для замешивания небольших порций IPS d.SIGN при изготовлении маленьких реставраций или для второго дентинового и эмалевого обжига (корректировочного). Моделировочная жидкость Light подходит техникам, которые предпочитают менее влажную моделировку, без постоянного подсушивания, поскольку эта жидкость быстрее испаряется. Благодаря этому массы IPS d.SIGN хорошо обрабатываются одним инструментом.



Форма поставки

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN Modellierliquid Light

	1 x 60 мл	564045
	1 x 250 мл	564043

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid *Premium*

Подходит для замешивания масс IPS d.SIGN при изготовлении больших реставраций, когда требуется длительная пластичность и гладкая консистенция материала. Жидкость для моделирования Premium подходит техникам, предпочитающим влажную моделировку при сохранении высокой стабильности материала. Таким образом, можно работать с IPS d.SIGN без постоянного увлажнения, однако, требуется контролируемое высушивание в сочетании с увеличенным временем закрытия печи при обжиге.



Форма поставки

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN Build-Up Liquid Premium

	1 x 60 мл	564046
	1 x 250 мл	564044

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid *Optimum 1*

Эта моделировочная жидкость отлично подходит для замешивания масс IPS d.SIGN, имеет оптимизированные свойства при обжиге и дает минимально возможную усадку. Массы легко высушиваются и конденсируются, а их избыток легко снимается с помощью инструментов.



Форма поставки

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN Build-Up Liquid Optimum 1

	1 x 60 мл	575541
	1 x 250 мл	575542

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN® Build-Up Liquid *Optimum 2*

Эта моделировочная жидкость отлично подходит для замешивания масс IPS d.SIGN, имеет хорошие моделировочные свойства, оптимизированные свойства при обжиге и дает малую усадку. Жидкость подходит для точечного нанесения масс без постоянного высушивания.



Форма поставки

Моделировочная жидкость IPS d.SIGN Build-Up Liquid Optimum 2

	1 x 60 мл	575543
	1 x 250 мл	575545

Силер для моделей IPS® Model Sealer

Model Sealer служит для изоляции гипсовой модели от облицовочных масс. Model Sealer закрывает поры в гипсе и препятствует отсасыванию влаги из керамических масс.



Форма поставки

Силер для моделей IPS Model Sealer 1 x 50 мл 593401

Силер для плечевых масс IPS® Margin Sealer

Margin Sealer применяется для изоляции гипсового штампа при изготовлении керамического уступа из плечевых масс.



Форма поставки

**Силер для плечевых масс
IPS Margin Sealer 1 x 20 мл 593402**

Сепарационная жидкость для керамики с брашем IPS® Ceramic Separating Liquid with Brush

Изолирующая жидкость для нанесения на поверхности, которые были пропитаны силером для плечевых масс Margin Sealer или силером для моделей Model Sealer. Благодаря ей гарантируется чистое отделение керамической массы от гипсовой модели либо гипсового штампа.



Форма поставки

**Сепарационная жидкость для керамики с брашем
IPS Ceramic Separating Liquid 1 x 15 мл 593403**

Бокс для материалов IPS d.SIGN®

Привлекательный бокс для материалов IPS d.SIGN предусматривает достаточно места для хранения самых различных материалов. Он является идеальным приспособлением для хранения различных комплектов материала.



Преимущества


– возможность индивидуального оснащения

Форма поставки

Бокс для материалов IPS d.SIGN Materialbox	1 x	557684
---	------------	---------------

Расцветки IPS d.SIGN®

Образцы масс обожжены из оригинальных масс IPS d.SIGN в условиях, приближенных к условиям зуботехнической лаборатории, поэтому они соответствуют желаемому результату.

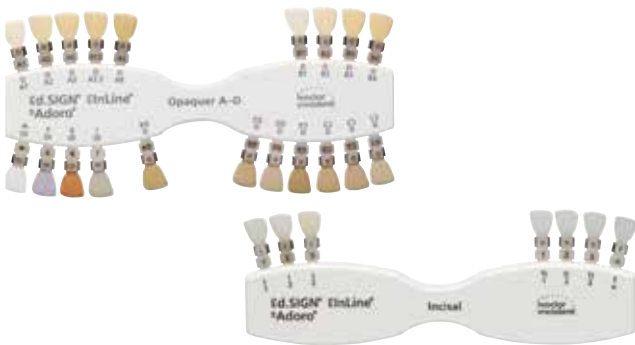

Форма поставки

Расцветки IPS d.SIGN	по 1 x
Опакеры	605191
Дентины	556652
Дип-дентины	605205
Плечевые массы	558280
Массы режущего края	609611
Импульсные массы 1	556656
Импульсные массы 2	556657
Десневые массы	605192
Ультрасветлые массы BL	602984
Опакеры А–D	605190
Дентины А–D	558278
Дип-дентины А–D	558279
Плечевые массы А–D	558280

d.SIGN® – привлекательная программа сплавов

Семь благородных и два неблагородных сплава составляют программу сплавов IPS d.SIGN. В ней присутствуют сплавы с высоким и низким содержанием золота, а также неблагородные сплавы. Все сплавы соответствуют требованиям международного стандарта ISO и идеально сочетаются с керамикой IPS d.SIGN.



Форма поставки


Если вам необходима более подробная информация о нашей программе сплавов, обратитесь к нашим представителям или непосредственно к нам. Обратите также внимание на наш обширный каталог сплавов.

В зависимости от страны предложение сплавов может варьироваться.

d.SIGN® 98

Дентальный сплав с высоким содержанием золота. Не содержит палладия, серебра и меди. Механические и физические свойства специально подобраны и соответствуют особенностям фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики IPS d.SIGN.

Состав в %:

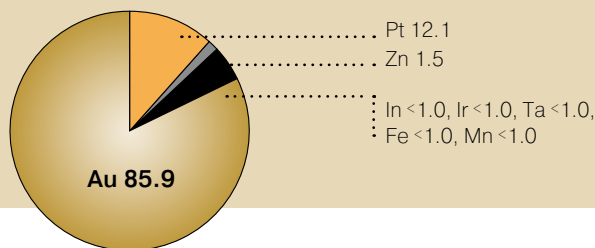

Преимущества

- не содержит палладия, серебра и меди
- золотисто-желтый оттенок
- светлая оксидная пленка
- широкая область показаний
- высокая биосовместимость

Показания:

Вкладки Onlay, частичные, одиночные, телескопические и конусные коронки, керамические коронки, корневые штифты, мостовидные протезы малой и большой протяженности, супраструктуры имплантантов, бюгельные протезы.


Технические данные:

Тип	4
Цвет	Очень желтый
Плотность (г/см ³)	18.9
Интервал плавления (°C)	1 055-1 170
КТР 25 °C - 500 °C	14.3
КТР 20 °C - 600 °C	14.6
Относительное удлинение (%)	8.0
Твердость по Виккерсу	220
0.2 % Предел текучести (МПа)	510

d.SIGN® 96

Дентальный сплав с высоким содержанием золота. Механические и физические свойства специально подобраны и соответствуют особенностям фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики IPS d.SIGN.

Состав в %:

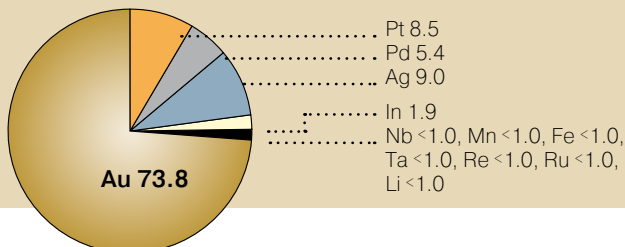

Преимущества

- повышенная термостойкость
- золотисто-желтый оттенок
- светлая оксидная пленка
- сертифицированная биосовместимость

Показания:

Вкладки Inlay/Onlay, частичные, одиночные, телескопические и конусные коронки, керамические коронки, корневые штифты, мостовидные протезы малой и большой протяженности.


Технические данные:

Тип	4
Цвет	желтый
Плотность (г/см ³)	16.7
Интервал плавления (°C)	1050 - 1170
КТР 25 °C - 500 °C	14.3
КТР 20 °C - 600 °C	14.5
Относительное удлинение (%)	14.0
Твердость по Виккерсу	215
0.2 % Предел текучести (МПа)	405

d.SIGN® 91

Экстратвердый дентальный сплав с сокращенным содержанием золота для металлокерамики. Механические и физические свойства специально подобраны и соответствуют особенностям фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики IPS d.SIGN.

Состав в %:

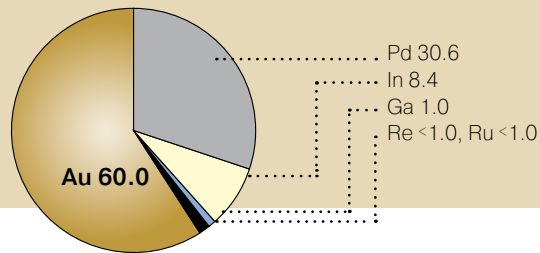

Преимущества

- не содержит серебра и меди
- экстратвердый
- широкая область показаний
- биосовместимость, подтвержденная сертификатом
- превосходные свойства текучести

Показания:

Вкладки Inlay/Onlay, частичные, одиночные, телескопические и конусные коронки, керамические коронки, корневые штифты, мостовидные протезы малой и большой протяженности, супраструктуры имплантантов, бюгельные протезы.


Технические данные:

Тип	4
Цвет	белый
Плотность (г/см³)	14.3
Интервал плавления (°C)	1175–1305
КТР 25 °C - 500 °C	14.2
КТР 20 °C - 600 °C	14.4
Относительное удлинение (%)	31.0
Твердость по Виккерсу	250
0.2 % Предел текучести (МПа)	500

d.SIGN® 84

Дентальный сплав, содержащий палладий, для металлокерамики. Механические и физические свойства специально подобраны и соответствуют особенностям фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики IPS d.SIGN.

Состав в %:

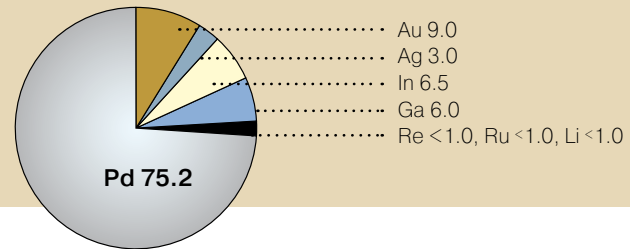

Преимущества:

- повышенная термостойкость
- хорошие свойства плавления и текучести
- простая обработка и полировка
- широкая область показаний
- биосовместимость, подтвержденная сертификатом

Показания:

Вкладки Inlay/Onlay, частичные, одиночные, телескопические и конусные коронки, керамические коронки, корневые штифты, мостовидные протезы малой и большой протяженности, супраструктуры имплантантов, бюгельные протезы.


Технические данные:

Тип	4
Цвет	белый
Плотность (г/см³)	11.3
Интервал плавления (°C)	1140–1335
КТР 25 °C - 500 °C	13.8
КТР 20 °C - 600 °C	14.0
Относительное удлинение (%)	29.0
Твердость по Виккерсу	295
0.2 % Предел текучести (МПа)	495

d.SIGN® 67

Дентальный сплав, содержащий палладий и серебро, для металлокерамики. Механические и физические свойства специально подобраны и соответствуют особенностям фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики IPS d.SIGN.

Состав в %:

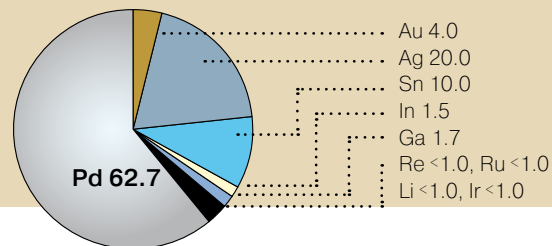

Преимущества:

- повышенная термостойкость
- хорошие свойства плавления и текучести
- простая обработка и полировка
- широкая область показаний
- биосовместимость, подтвержденная сертификатом

Показания:

Вкладки Inlay/Onlay, частичные, телескопические и конусные коронки, керамические коронки, корневые штифты, мостовидные протезы малой и большой протяженности, супраструктуры имплантантов, бюгельные протезы.


Технические данные:

Тип	4
Цвет	белый
Плотность (г/см³)	10.8
Интервал плавления (°C)	1150–1270
КТР 25 °C - 500 °C	13.9
КТР 20 °C - 600 °C	14.2
Относительное удлинение (%)	15.0
Твердость по Виккерсу	240
0.2 % Предел текучести (МПа)	545

d.SIGN® 59

Дентальный сплав, содержащий палладий и серебро, для металлокерамики. Механические и физические свойства специально подобраны и соответствуют особенностям фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики IPS d.SIGN.

Состав в %:

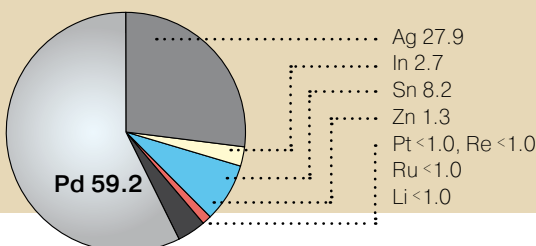

Преимущества:

- повышенная термостойкость
- экономичный благодаря низкой плотности
- светлая оксидная пленка
- простая обработка и полировка
- биосовместимость, подтвержденная сертификатом

Показания:

Вкладки Inlay/Onlay, частичные, одиночные, телескопические и конусные коронки, керамические коронки, корневые штифты, мостовидные протезы малой и большой протяженности, супраструктуры имплантантов, бюгельные протезы.


Технические данные:

Тип	4
Цвет	белый
Плотность (г/см³)	10.7
Интервал плавления (°C)	1230–1310
КТР 25 °C - 500 °C	14.5
КТР 20 °C - 600 °C	14.8
Относительное удлинение (%)	14.0
Твердость по Виккерсу	230
0.2 % Предел текучести (МПа)	490

d.SIGN® 53

Дентальный сплав для металлокерамики с содержанием палладия и серебра. Механические и физические свойства специально подобраны и соответствуют особенностям фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики IPS d.SIGN.

Состав в %:

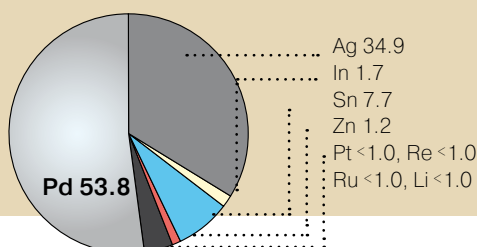

Преимущества:

- экономичность благодаря низкой плотности
- отличные свойства плавления и текучести
- светлая оксидная пленка
- согласован с IPS d.SIGN и другими традиционными керамическими массами
- сертифицированная биосовместимость

Показания:

Вкладки Onlay, частичные, одиночные, телескопические и конусные коронки, керамические коронки, корневые штифты, мостовидные протезы малой и большой протяженности, супраструктуры имплантантов, бюгельные протезы.


Технические данные:

Тип	4
Цвет	белый
Плотность (г/см³)	10.7
Интервал плавления (°C)	1180–1280
КТР 25 °C - 500 °C	14.8
КТР 20 °C - 600 °C	15.0
Относительное удлинение (%)	13.0
Твердость по Виккерсу	250
0.2 % Предел текучести (МПа)	545

d.SIGN® 30

Кобальт-хромовый дентальный сплав. Механические и физические свойства специально подобраны и соответствуют особенностям фтор-апатитовой лейцитной стеклокерамики IPS d.SIGN.

Состав в %:

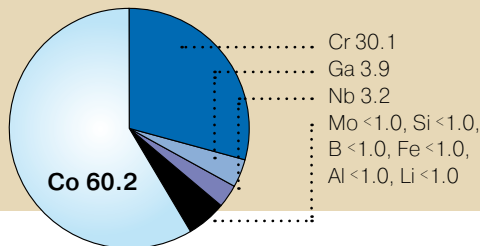

Преимущества:

- уменьшенная твердость
- легкое литье и обработка
- светлая оксидная пленка
- легкая распаковка
- сертифицированная биосовместимость

Показания:

Телескопические и конусные коронки, керамические коронки, корневые штифты, мостовидные протезы малой и большой протяженности, супраструктуры имплантантов, бюгельные протезы.

Технические данные:

Тип	5
Цвет	белый
Плотность (г/см³)	7.8
Интервал плавления (°C)	1145–1165
КТР 25 °C - 500 °C	14.5
КТР 20 °C - 600 °C	14.7
Относительное удлинение (%)	6.0
Твердость по Виккерсу	385
0.2 % Предел текучести (МПа)	520

IPS InLine® One

Однослойная металлокерамика

Оптимизируйте свой рабочий процесс и повысьте при этом продуктивность и экономичность вашей лаборатории. С помощью системы металлокерамики **IPS InLine** вы получаете гибкость, так необходимую в ежедневной работе, – начиная с простого наслоения и заканчивая сложнейшими высокоэстетичными облицовками.

После нанесения опакера вы можете выбрать в соответствии со своими личными предпочтениями и клиническими показаниями материал и способ исполнения работы:

IPS InLine One


Новая однослойная металлокерамика IPS InLine One, экономящая время, – для сплавов с КТР 13,8–15,0 x 10-6 К-1 (225–500 °С) позволяет эффективно и быстро выполнять наслоение. При небольших затратах вы достигаете хороших результатов.

IPS InLine


Традиционная металлокерамика IPS InLine – для сплавов с КТР 13,8–15,0 x 10-6К-1 (225–500 °С) – подкупает простой технологией работы и идеальной стойкостью цвета, а также стабильностью материала, сохраняющейся после обжига.

IPS InLine PoM

Новая керамика для напрессовывания на металл IPS InLine PoM – для сплавов с КТР 13,8–14,5 x 10-6К-1 (225–500 °С) – помогает создавать работы с напрессованными на металл керамическими массами с той же точностью, которая достигается при работе с цельной керамикой. Технология базируется на уже проверенной опытом и зарекомендовавшей себя технологии прессования, ходовых дентальных сплавах и хорошо известных приборах.

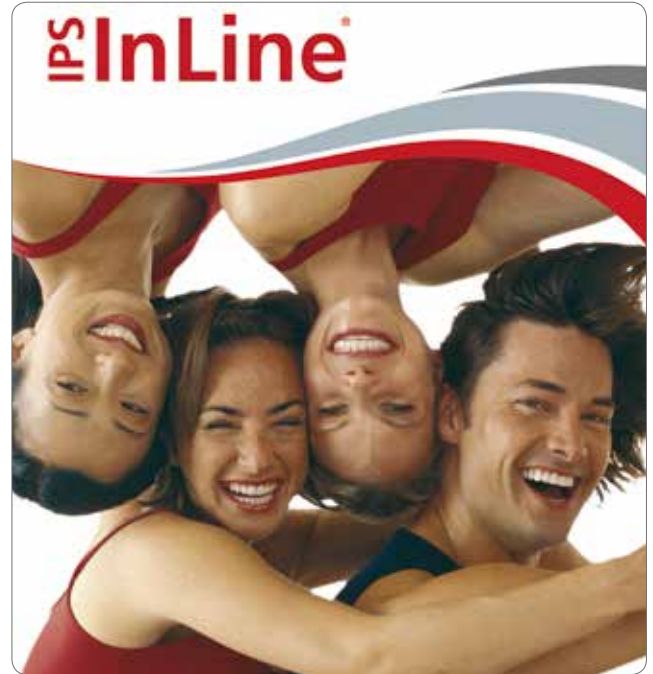

IPS InLine

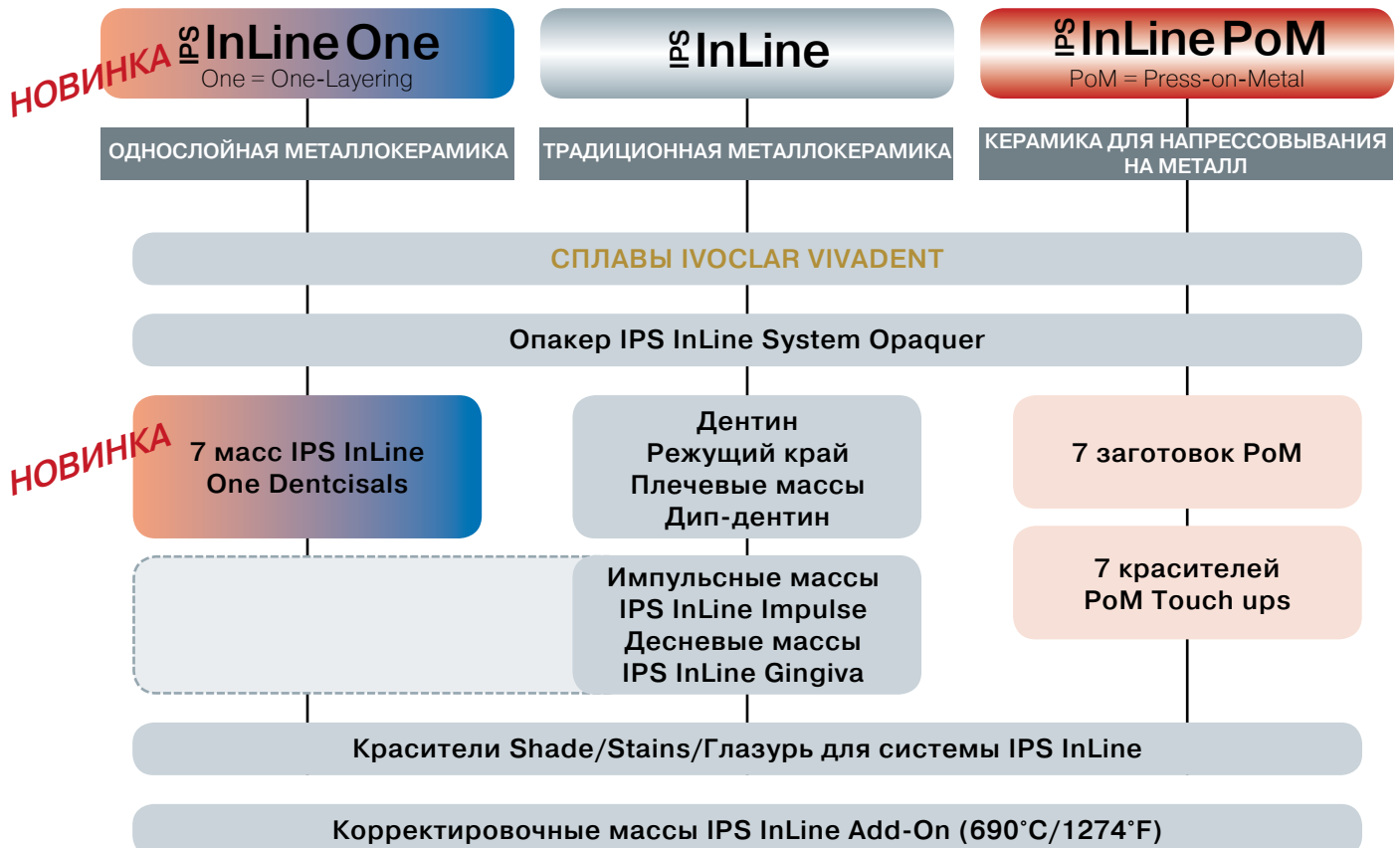

Стартовый набор **IPS InLine® One Starter Kit**

Стартовый набор IPS InLine One Starter Kit состоит из 7 компонентов, с помощью которых могут создаваться привлекательные реставрации. Достаточно одного взгляда на объем продуктов, чтобы понять, насколько экономично и быстро можно работать с IPS InLine One.



Форма поставки

Стартовый набор IPS InLine One Starter Kit Chromascop 120 631864

Опакер IPS InLine System Opaquer; 120	1 x 3 г
Масса IPS InLine One Dentcisal; 1	1 x 20 г
Краситель IPS InLine System Shade; 1	1 x 3 г
Краситель режущего края IPS InLine System Shade Incisal; SI 1	1 x 3 г
Глазурь IPS InLine System Glaze	1 x 3 г
Жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid (P)	1 x 15 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze/Stain Liquid	1 x 5 мл

Стартовый набор IPS InLine One Starter Kit A-D A2 631866

Опакер IPS InLine System Opaquer; A2	1 x 3 г
Масса IPS InLine One Dentcisal; 2	1 x 20 г
Краситель IPS InLine System Shade; 2	1 x 3 г
Краситель режущего края IPS InLine System Shade Incisal; SI 1	1 x 3 г
Глазурь IPS InLine System Glaze	1 x 3 г
Жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid (P)	1 x 15 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze/Stain Liquid	1 x 5 мл

Стартовый набор IPS InLine One Starter Kit A-D A3 631867

Опакер IPS InLine System Opaquer; A3	1 x 3 г
Масса IPS InLine One Dentcisal; 3	1 x 20 г
Краситель IPS InLine System Shade; 2	1 x 3 г
Краситель режущего края IPS InLine System Shade Incisal; SI 1	1 x 3 г
Глазурь IPS InLine System Glaze	1 x 3 г
Жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid (P)	1 x 15 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze/Stain Liquid	1 x 5 мл

Базовый набор IPS InLine® One Basic Kit

Базовый набор IPS InLine One Basic Kit содержит оптимальный набор материалов для знакомства со всей широтой линии IPS InLine One. Наряду с семью массами Dencisal Shades в наборе присутствуют различные компоненты системы IPS InLine. Базовый набор IPS InLine One Basic Kit выпускается в цветах Chromascop и A–D.



Форма поставки

Базовый набор IPS InLine One Basic Kit Chromascop		631848	Базовый набор IPS InLine One Basic Kit A–D		631849
Опакер IPS InLine System Opaquer BL3/BL4, 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 520	по 1 x 3 г		Опакер IPS InLine System Opaquer BL3/BL4, A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3	по 1 x 3 г	
Масса IPS InLine One Dencisal BL, 1, 2, 4, 5, 6	по 1 x 20 г		Масса IPS InLine One Dencisal BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 20 г	
Краситель IPS InLine System Shade 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 3 г		Краситель IPS InLine System Shade 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 3 г	
Краситель режущего края IPS InLine System Shade Incisal SI1, SI2	по 1 x 3 г		Краситель режущего края IPS InLine System Shade Incisal SI1, SI2	по 1 x 3 г	
Краситель IPS InLine System Stains белый, красное дерево, оранжевый, желтый, базовый синий	1 x 20 г		Краситель IPS InLine System Stains белый, красное дерево, оранжевый, желтый, базовый синий	1 x 20 г	
Глазурь IPS InLine System Glaze	1 x 3 г		Глазурь IPS InLine System Glaze	1 x 3 г	
Корректировочная масса IPS InLine System Add-On (690°C/1274°F)	1 x 20 г		Корректировочная масса IPS InLine System Add-On (690°C/1274°F)	1 x 20 г	
Жидкость для опакера IPS InLine System Opaquer Liquid	1 x 15 мл		Жидкость для опакера IPS InLine System Opaquer Liquid	1 x 15 мл	
Жидкости IPS InLine System Build-Up Liquid (L, P)	по 1 x 60 мл		Жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid (L, P)	по 1 x 60 мл	
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stain Liquid	1 x 15 мл		Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stain Liquid	1 x 15 мл	
Силер для моделей IPS Model Sealer	1 x 50 мл		Силер для моделей IPS Model Sealer	1 x 50 мл	
Сепарационная жидкость для керамики с брашем IPS Ceramic Separating Liquid with Brush	1 x 15 мл		Сепарационная жидкость для керамики с брашем IPS Ceramic Separating Liquid with Brush	1 x 15 мл	

IPS InLine® One Dencisal



Форма поставки

IPS InLine One Dencisal	1 x 20 г	
BL		631850
1		631851
2		631852
3		631853
4		631854
5		631855
6		631856
IPS InLine One Dencisal	1 x 100 г	
BL		631857
1		631858
2		631859
3		631860
4		631861
5		631862
6		631863

Базовый набор IPS InLine® Basic Kit

Тщательно подобранный базовый набор, который выпускается в цветах Chromascop и A–D, дает возможность создавать эстетичные реставрации, полностью покрывая область показаний для металлокерамики. Набор оснащен десятью ходовыми цветами Chromascop или восемью ходовыми цветами A–D, к тому же существует возможность индивидуально его дооснащать.

Существенным преимуществом бокса для материалов является возможность докомплектовывать базовый набор другими наборами масс.



Форма поставки

Базовый набор IPS InLine Basic Kit Chromascop 593003

Опакер IPS InLine System; 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510	по 1 x 3 г
Интенсивный opakер IPS InLine System; белый, фиолетовый, коричневый, режущего края	по 1 x 3 г
Дентин IPS InLine; 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510	по 1 x 20 г
Масса режущего края IPS InLine Incisal; I1, I2, I3	по 1 x 20 г
Транспа-масса IPS InLine Transpa; прозрачная (clear)	1 x 20 г
Глазурь IPS InLine System	1 x 3 г
Корректировочная масса IPS InLine Add-On	1 x 20 г
Жидкость для opakера IPS InLine System Opaquer Liquid	1 x 15 мл
Жидкости IPS InLine System Build-Up Liquid; L и P	по 1 x 60 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid	1 x 15 мл
Силер для моделей IPS Model Sealer	1 x 50 мл
Сепарационная жидкость для керамики со щеточкой IPS Ceramic Separating Liquid with Brush	1 x 15 мл
Расцветки IPS InLine (opakер, дентин, режущего края)	по 1 x
Расцветка Chromascop	1 x

Базовый набор IPS InLine Basic Kit A–D 591551

Опакер IPS InLine System; A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3	по 1 x 3 г
Интенсивный opakер IPS InLine System; белый, фиолетовый, коричневый, режущего края	по 1 x 3 г
Дентин IPS InLine; A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3	по 1 x 20 г
Цервикальный дентин IPS InLine Cervical Dentin D2/D3	1 x 20 г
Транспа-масса режущего края IPS InLine Transpa Incisal; TI1, TI2, TI3	по 1 x 20 г
Транспа-масса IPS InLine Transpa; прозрачная (clear)	1 x 20 г
Глазурь IPS InLine System	1 x 3 г
Корректировочная масса IPS InLine Add-On	1 x 20 г
Жидкость для opakера IPS InLine System Opaquer Liquid	1 x 15 мл
Жидкости IPS InLine System Build-Up Liquid; L и P	по 1 x 60 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid	1 x 15 мл
Силер для моделей IPS Model Sealer	1 x 50 мл
Сепарационная жидкость для керамики со щеточкой IPS Ceramic Separating Liquid with Brush	1 x 15 мл
Расцветки IPS InLine (opakер, дентин, режущего края)	по 1 x

Стартовый набор IPS InLine® Trial Kit

Стартовый набор дает возможность быстро и просто получить первое представление о новой металлокерамике. Все наиболее важные материалы содержатся в этом наборе.



Форма поставки

Стартовый набор IPS InLine Trial Kit Chromascop 593001

Опакер IPS InLine System (210)	1 x 3 г
Дентин IPS InLine; (210)	1 x 5 г
Масса режущего края IPS InLine Incisal; (I2)	1 x 5 г
Транспа-масса IPS InLine Transpa; прозрачная (clear)	1 x 5 г
Дип-дентин IPS InLine Deep Dentin; (210)	1 x 5 г
Окклюзионный дентин IPS InLine Occlusal Dentin (оранжевый)	1 x 5 г
Плечевая масса IPS InLine Margin; (210)	1 x 5 г
Мамелоновая масса IPS InLine Mamelon; светлая (light)	1 x 5 г
Опаловые эффект-массы IPS InLine Opal Effect; (1, 3)	по 1 x 5 г
Краситель IPS InLine System Shade; (2)	1 x 3 г
Глазурь IPS InLine System	1 x 3 г
Жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid P	1 x 5 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid	1 x 5 мл
Жидкость для плечевых масс IPS InLine Margin Build-Up Liquid	1 x 5 мл
Расцветка IPS InLine Trial Kit 210	1 x

Стартовый набор IPS InLine Trial Kit A3 593154

Опакер IPS InLine System (A3)	1 x 3 г
Дентин IPS InLine Dentin; (A3)	1 x 5 г
Масса режущего края IPS InLine Incisal; (TI2)	1 x 5 г
Транспа-масса IPS InLine Transpa; прозрачная (clear)	1 x 5 г
Дип-дентин IPS InLine Deep Dentin; (A3)	1 x 5 г
Окклюзионный дентин IPS InLine Occlusal Dentin (оранжевый)	1 x 5 г
Плечевая масса IPS InLine Margin; (A3)	1 x 5 г
Мамелоновая масса IPS InLine Mamelon; светлая (light)	1 x 5 г
Опаловые эффект-массы IPS InLine Opal Effect; (1, 3)	по 1 x 5 г
Краситель IPS InLine System Shade; (2)	1 x 3 г
Глазурь IPS InLine System	1 x 3 г
Жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid P	1 x 5 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid	1 x 5 мл
Жидкость для плечевых масс IPS InLine Margin Build-Up Liquid	1 x 5 мл
Расцветка IPS InLine Trial Kit A3	1 x

Форма поставки

Опакер IPS InLine System

Опаquer Chromascop	1 x 3 г	
110		593010
120		593011
130		593012
140		593013
210		593014
220		593015
230		593016
240		593017
310		593018
320		593019
330		593020
340		593021
410		593022
420		593023
430		593024
440		593025
510		593026
520		593027
530		593028
540		593029

Опакер IPS InLine System

Опаquer Chromascop	1 x 9 г	
110		593033
120		593034
130		593035
140		593036
210		593037
220		593038
230		593039
240		593040
310		593041
320		593042
330		593043
340		593044
410		593045
420		593046
430		593047
440		593048
510		593049
520		593050
530		593051
540		593052

Опакер IPS InLine System Опаquer A–D 1 x 3 г

A1	593160
A2	593161
A3	593162
A3.5	593163
A4	593164
B1	593165
B2	593166
B3	593167
B4	593168
C1	593169



C2	593170
C3	593171
C4	593172
D2	593173
D3	593174
D4	593175

Опакер IPS InLine System Опаquer A–D 1 x 9 г

A1	593177
A2	593178
A3	593179
A3.5	593180
A4	593181
B1	593182
B2	593183
B3	593184
B4	593185
C1	593186
C2	593187
C3	593188
C4	593189
D2	593190
D3	593191
D4	593192

Интенсивный opakер IPS InLine System

Intensive Опаquer	1 x 3 г
белый	593325
фиолетовый	593326
коричневый	593327
режущего края	593328

Интенсивный opakер IPS InLine System

Intensive Опаquer	1 x 9 г
белый	593330
фиолетовый	593331
коричневый	593332
режущего края	593333

Ультрасветлый opakер IPS InLine System

Опаquer Bleach BL	1 x 3 г
BL1/BL2	602930
BL3/BL4	602931

Ультрасветлый opakер IPS InLine System

Опаquer Bleach BL	1 x 9 г
BL1/BL2	602933
BL3/BL4	602934

Опакер IPS InLine System Опаquer F 1 x 1 г

	593323
--	--------

Форма поставки

Дентин IPS InLine Dentin Chromascop 1 x 20 г

110	593104
120	593105
130	593106
140	593107
210	593108
220	593109
230	593110
240	593111
310	593112
320	593113
330	593114
340	593115
410	593116
420	593117
430	593118
440	593119
510	593120
520	593121
530	593122
540	593123

Дентин IPS InLine Dentin Chromascop 1 x 100 г

110	593125
120	593126
130	593127
140	593128
210	593129
220	593130
230	593131
240	593132
310	593133
320	593134
330	593135
340	593136
410	593137
420	593138
430	593139
440	593140
510	593141
520	593142
530	593143
540	593144

Дентин IPS InLine Dentin A-D 1 x 20 г

A1	593226
A2	593227
A3	593228
A3.5	593229
A4	593230
B1	593231
B2	593232
B3	593233
B4	593234
C1	593235
C2	593236
C3	593237



C4	593238
D2	593239
D3	593240
D4	593241

Дентин IPS InLine Dentin A-D 1 x 100 г

A1	593244
A2	593245
A3	593246
A3.5	593247
A4	593248
B1	593249
B2	593250
B3	593251
B4	593252
C1	593253
C2	593254
C3	593255
C4	593256
D2	593257
D3	593258
D4	593259

Цервикальный дентин IPS InLine Cervical Dentin

D2/D3	1 x 20 г	593242
D2/D3	1 x 100 г	593260

Масса режущего края IPS InLine Incisal 1 x 20 г

I1	593146
I2	593147
I3	593148

Масса режущего края IPS InLine Incisal 1 x 100 г

I1	593150
I2	593151
I3	593152

Транспа-масса режущего края

IPS InLine Transpa Incisal 1 x 20 г	
T11	593262
T12	593263
T13	593264

Транспа-масса режущего края

IPS InLine Transpa Incisal 1 x 100 г	
T11	593266
T12	593267
T13	593268

Корректировочная масса

IPS InLine Add-On 1 x 20 г	593343
-----------------------------------	--------

Плечевая корректировочная масса

IPS InLine Add-On Margin 1 x 20 г	593344
--	--------

Набор дип-дентинов **IPS InLine® Deep Dentin Kit**

Массы Deep Dentin позволяют при слоях очень малой толщины создавать реставрации с глубоким живым цветом. Они наносятся тонкими слоями для создания основного цвета зуба, а также для усиления насыщенности цвета.

Наборы содержат 10 наиболее ходовых цветов Chromascop или 8 ходовых цветов A–D и могут быть индивидуально докомплектованы.



Форма поставки

Набор IPS InLine Deep Dentin Kit Chromascop 593005

10 x 20 г IPS InLine Deep Dentin по 1 x 20 г
130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510

Расцветка IPS InLine Deep Dentin 1 x

Набор IPS InLine Deep Dentin Kit A–D 593158

IPS InLine Deep Dentin по 1 x 20 г

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2/D3

Расцветка IPS InLine Deep Dentin A–D 1 x

IPS InLine Deep Dentin Chromascop 1 x 20 г

110	593079
120	593080
130	593081
140	593082
210	593083
220	593084
230	593085
240	593086
310	593087
320	593088
330	593089
340	593090
410	593091
420	593092
430	593093
440	593094
510	593095
520	593096
530	593097
540	593098
IPS InLine Deep Dentin A–D 1 x 20 г	
A1	593210
A2	593211
A3	593212
A3.5	593213
A4	593214
B1	593215
B2	593216
B3	593217
B4	593218
C1	593219
C2	593220
C3	593221
C4	593222
D2/D3	593223
D4	593224

Набор плечевых масс **IPS InLine® Margin Kit**

Плечевые массы служат для формирования керамического уступа. Также в вашем распоряжении находятся четыре интенсивных плечевых массы Intensiv Margin для создания специальных эффектов. Корректировочная плечевая масса Margin Add-On служит для окончательной корректировки плеча.

Наборы содержат 10 наиболее ходовых цветов Chromascop или 8 ходовых цветов A–D и могут быть индивидуально докомплектованы.



Форма поставки

Набор плечевых масс

IPS InLine Margin Kit Chromascop 593004

Плечевые массы IPS InLine Margin по 1 x 20 г
130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 430, 510

Интенсивные плечевые массы по 1 x 20 г

IPS InLine Intensive Margin
желтый, оранжевый, оранжево-розовый, упаковочный

Корректировочная плечевая масса 1 x 20 г
IPS InLine Margin Add-On

Жидкость для плечевых масс 1 x 60 мл
IPS InLine Margin Build-Up Liquid

Силер IPS Margin Sealer 1 x 20 мл

Сепарационная жидкость 1 x 15 мл
для керамики с брашем

IPS Ceramic Separating Liquid with Brush

Расцветка плечевых масс IPS InLine Margin 1 x

Набор плечевых масс

IPS InLine Margin Kit A–D 593157

Плечевые массы IPS InLine Margin по 1 x 20 г
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2/D3

Интенсивные плечевые массы по 1 x 20 г

IPS InLine Intensive Margin
желтый, оранжевый, оранжево-розовый, упаковочный

Корректировочная плечевая масса 1 x 20 г
IPS InLine Margin Add-On

Жидкость для плечевых масс 1 x 60 мл
IPS InLine Margin Build-Up Liquid

Силер IPS Margin Sealer 1 x 20 мл

Сепарационная жидкость 1 x 15 мл
для керамики со щеточкой

IPS Ceramic Separating Liquid with Brush

Расцветка плечевых масс IPS InLine Margin 1 x

Плечевые массы

IPS InLine Margin Chromascop 1 x 20 г

110	593056
120	593057
130	593058
140	593059
210	593060
220	593061
230	593062
240	593063
310	593064
320	593065
330	593066
340	593067
410	593068
420	593069
430	593070
440	593071
510	593072
520	593073
530	593074
540	593075

Плечевые массы

IPS InLine Margin A–D 1 x 20 г

A1	593194
A2	593195
A3	593196
A3.5	593197
A4	593198
B1	593199
B2	593200
B3	593201
B4	593202
C1	593203
C2	593204
C3	593205
C4	593206
D2/D3	593207
D4	593208

Интенсивные плечевые массы

IPS InLine Intensive Margin 1 x 20 г

желтый	593335
оранжевый	593336
оранжево-розовый	593337
упаковочный	593338

Корректировочная плечевая масса

IPS InLine Add-On Margin 1 x 20 г 593344

Набор ультрасветлых цветов **IPS InLine® Bleach Kit BL**

Четко выраженные цветовые оттенки позволяют соответствовать высочайшим требованиям современной «белой эстетики».



Форма поставки

IPS InLine Bleach Kit BL		602167
Опакер IPS InLineSystem Опаquer BL1/BL2, BL3/BL4	по 1 x 3 г	
Дентин IPS InLine Dentin BL1, BL2, BL3, BL4	по 1 x 20 г	
Масса режущего края IPS InLine Incisal BL	1 x 20 г	
Дип-дентин IPS InLine Deep Dentin BL1, BL4	по 1 x 20 г	
Плечевая масса IPS InLine Margin BL1, BL4	по 1 x 20 г	
Корректировочная масса IPS InLine Add-On BL	1 x 20 г	
Расцветка IPS d.SIGN / IPS InLine BL	1 x	
Расцветка Bleach BL	1 x	
Опакер IPS InLine System Опаquer Bleach BL	1 x 3 г	
BL1/BL2		602930
BL3/BL4		602931
Опакер IPS InLine System Опаquer Bleach BL	1 x 9 г	
BL1/BL2		602933
BL3/BL4		602934
Дентин IPS InLine Dentin Bleach BL	1 x 20 г	
BL1		602972
BL2		602973
BL3		602974
BL4		602975
Дентин IPS InLine Dentin Bleach BL	1 x 100 г	
BL1		602977
BL2		602978
BL3		602979
BL4		602980
Дип-дентин IPS InLine Deep Dentin Bleach BL	1 x 20 г	
BL1		602969
BL4		602970
Плечевая масса IPS InLine Margin Bleach BL	1 x 20 г	
BL1		602966
BL4		602967
Масса режущего края IPS InLine Incisal Bleach BL	1 x 20 г	602981
	1 x 100 г	602982
Корректировочная масса IPS InLine Add-On Bleach BL	1 x 20 г	602983

Набор импульсных масс **IPS InLine® Impulse Kit**

Набор импульсных масс Impulse Kit состоит из 16 различных масс для выполнения индивидуальных эффектов. Они помогают создать естественные эффекты, например, на окклюзионной, резцовой или пришеечной поверхности.

Импульсные массы IPS InLine могут использоваться как с цветами Chromascop, так и с цветами A–D.



Форма поставки

Набор импульсных масс

IPS InLine Impulse Kit **601222**

Окклюзионный дентин IPS InLine Occlusal Dentin оранжевый, коричневый	1 x 20 г
Пришеечная масса режущего края IPS InLine Cervical Incisal оранжевая	1 x 20 г
Мамелоновая масса IPS InLine Mamelon светлая (light)	1 x 20 г
Опаловые эффект-массы IPS InLine Opal Effect 1, 2, 3, 4, 5, фиолетовый	по 1 x 20 г
Транспа-масса IPS InLine Transpa голубая	1 x 20 г
Расцветка импульсных масс IPS InLine Impulse	1 x

Окклюзионный дентин

IPS InLine Occlusal Dentin	1 x 20 г
оранжевый	593271
коричневый	593272

Мамелоновая масса IPS InLine Mamelon 1 x 20 г

светлая	593273
желто-оранжевая	600096
лососевая	600097

Опаловые эффект-массы

IPS InLine Opal Effect	1 x 20 г
1	593275
2	593276
3	593277
4	593278
5	593279
Фиолетовый	593280

Пришеечная масса режущего края

IPS InLine Cervical Incisal	1 x 20 г
оранжевая	593281
желтая	600098

Транспа-масса IPS InLine Transpa 1 x 20 г

прозрачная	593283
голубая	593284
коричнево-серая	600100
нейтральная	600099

Транспа-масса IPS InLine Transpa 1 x 100 г

прозрачная	593285
нейтральная	600101

Набор красителей **IPS InLine® System** Shade / Stains Kit

Готовые к использованию, пастообразные интенсивные красители 14 различных цветов служат для создания естественных эффектов на керамической поверхности. Благодаря 3 дополнительным цветам (базовый синий (basic синий), базовый красный (basic красный), базовый желтый (basic желтый)) оттенки можно индивидуально менять. С помощью семи пастообразных дентиновых красителей можно производить корректировки цвета на реставрациях IPS InLine/IPS InLine PoM.

Материалы IPS InLine/IPS InLine PoM Shades, Stains и глазурь можно применять как с **традиционной металлокерамикой**, так и с **керамикой для напрессовывания на металл**.

IPS InLine PoM

Окончательный цвет зуба создается в результате индивидуальной характеристики красителями Shade/Stains и глазурью.



Форма поставки

Набор красителей IPS InLine/IPS InLine PoM Shade/Stains Kit 602166

Красители IPS InLine/IPS InLine PoM Shade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по 1 x 3 г

Красители IPS InLine System Stains белый, красное дерево, хаки, оранжевый, серый, ваниль, имитация трещины, оливковый, желтый, черный, темно-бордовый, базовый синий, базовый красный, базовый желтый по 1 x 1 г

Глазурь IPS InLine System 1 x 3 г

Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid 1 x 15 мл

Красители IPS InLine/IPS InLine PoM Shade

PoM Shade	1 x 3 г
1	602363
2	602364
3	602365
4	602366
5	602367
6	602368
7	602369

Красители режущего края IPS InLine/IPS InLine PoM Shade Incisal

PoM Shade Incisal	1 x 3 г
1 (сине-прозрачный)	613290
2 (серо-прозрачный)	613291

Красители IPS InLine/IPS InLine PoM Stains

PoM Stains	1 x 1 г
белый	602370
красное дерево	602371
хаки	602372
оранжевый	602373
серый	602374
ваниль	602375
имитация трещины	602376
оливковый	602377
желтый	602378
черный	602379
темно-бордовый	602380
базовый синий	602381
базовый красный	602382
базовый желтый	602383

Набор десневых масс **IPS InLine® Gingiva Kit**

Десневые массы с живым внешним видом, которые можно применять индивидуально в сочетании с интенсивными десневыми массами Intensiv Gingiva, в зависимости от ситуации пациента. Спектр цветов содержит оранжевые, красноватые и синеватые оттенки.

Десневые массы IPS InLine могут применяться как с цветами Chromascop, так и с цветами A-D.



Форма поставки

Набор десневых масс IPS InLine Gingiva Kit 593286

Десневой опакер IPS InLine Gingiva Opaquer, розовый 1 x 3 г

Десневые массы IPS InLine Gingiva 1, 2, 3, 4, 5 по 1 x 20 г

Интенсивные десневые массы IPS InLine Intensive Gingiva 1, 2, 3, 4 по 1 x 20 г

Расцветка десневых масс IPS InLine Gingiva 1 x

Десневой опакер IPS InLine Gingiva Opaquer

Gingiva Opaquer	1 x 3 г
розовый	593287

Десневые массы IPS InLine Gingiva	1 x 20 г
1	593289
2	593290
3	593291
4	593292
5	593293

Интенсивные десневые массы IPS InLine Intensive Gingiva

IPS InLine Intensive Gingiva	1 x 20 г
1	593295
2	593296
3	593297
4	593298

Базовый набор **IPS InLine® PoM Basic Kit**

Базовый набор IPS InLine PoM Basic Kit объединяет в себе ходовые цвета опакеров, все 7 цветов заготовок размеров XS и S, 7 масс Touch Up, а также необходимые для работы принадлежности. Базовый набор поставляется в новом боксе для материалов, который при желании можно дополнительно оснастить другими наборами.



Форма поставки

Базовый набор IPS InLine PoM Basic Chromascope 602170

Опакер IPS InLineSystem Opaquer BL1/BL2, 130, 140, 210, 220, 230, 310, 410, 420, 510	по 1 x 3 г
IPS InLine PoM Заготовки XS BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 5
IPS InLine PoM Заготовки S BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 5
IPS InLine PoM массы Touch Up BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 20 г
Глазурь IPS InLine System	1 x 3 г
Корректировочная масса IPS InLine System Add-On 690°C/1274°F	1 x 20 г
Жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid P	1 x 60 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid	1 x 15 мл
IPS InLine PoM расцветка	1 x
IPS муфельная система 100 г	1 x
IPS муфельная система 200 г	1 x
IPS силиконовое кольцо 100 г	1 x
IPS силиконовое кольцо 200 г	1 x
IPS Стержень из оксида алюминия AloX Plunger	1 x
IPS Сепаратор для стержня из оксида алюминия AloX Plunger Separator	1 x 200 мг
IPS контрольный шаблон 100 г	1 x
IPS контрольный шаблон 200 г	1 x

Базовый набор IPS InLine PoM Basic Kit A-D 602169

Опакер IPS InLine System Opaquer BL1/BL2, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, C4	по 1 x 3 г
IPS InLine PoM Заготовки XS BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 5
IPS InLine PoM Заготовки S BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 5
IPS InLine PoM массы Touch Up BL, 1, 2, 3, 4, 5, 6	по 1 x 20 г
Глазурь IPS InLine System	1 x 3 г
Корректировочная масса IPS InLine System Add-On 690°C/1274°F	1 x 20 г
Жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid P	1 x 60 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid	1 x 15 мл
IPS InLine PoM расцветка	1 x
IPS муфельная система 100 г	1 x
IPS муфельная система 200 г	1 x
IPS силиконовое кольцо 100 г	1 x
IPS силиконовое кольцо 200 г	1 x
IPS Стержень из оксида алюминия AloX Plunger	1 x
IPS Сепаратор для стержня из оксида алюминия AloX Plunger Separator	1 x 200 мг
IPS контрольный шаблон 100 г	1 x
IPS контрольный шаблон 200 г	1 x

Стартовый набор **IPS InLine® PoM Trial Kit**

Стартовый набор Trial Kit дает возможность быстро и просто получить первое представление о керамике для напрессовывания на металл. В этом наборе собраны все наиболее важные компоненты системы.



Форма поставки

IPS InLine PoM Стартовый набор Trial Kit A-D 611450

Опакер IPS InLine System Opaquer, A2	1 x 3 г
IPS InLine PoM заготовки, 2 S	1 x 5
IPS InLine PoM масса Touch Up, 2	1 x 20 г
Краситель IPS InLine System Shade, 2	1 x 3 г
Красители IPS InLine System Stains белый, оранжевый, базовый синий	по 1 x 1 г
IPS InLine System пастообразная глазурь	1 x 3 г
Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid	1 x 5 мл
Жидкость IPS InLine System Build Up Liquid, P	1 x 5 мл
Стержень из оксида алюминия IPS AloX Plunger	1 x
Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS AloX Plunger Separator	1 x 200 мг
IPS муфельная система 200 г	1 x
IPS силиконовое кольцо 200 г	1 x
IPS PressVEST Speed Порошок	10 x 100 г
IPS PressVEST Speed Жидкость	1 x 0,5 л

IPS InLine® PoM Заготовки

С помощью всего лишь 7 цветов легко воспроизводятся все цвета Chromascop, A–D и новые ультрасветлые цвета Bleach. Благодаря этому можно выполнять полноанатомическую напрессовку различных клинических случаев за одно прессование. Благодаря различному размеру заготовок вы сводите к минимуму расход материала, при работе с IPS InLine PoM остатков практически не остается. Окончательный цвет зуба создается в результате характеристики с помощью новых красителей Shade/Stains и глазури.



Форма поставки

IPS InLine PoM Заготовки XS	1 x 5
BL	602387
1	602388
2	602389
3	602390
4	602391
5	602392
6	602393
IPS InLine PoM Заготовки S	1 x 5
BL	602394
1	602395
2	602396
3	602397
4	602398
5	602399
6	602400

IPS InLine® PoM Массы Touch Up

7 масс Touch Up, специально согласованных с цветами заготовок, идеально подходят для окончательной корректировки формы и цвета.



Форма поставки

IPS InLine PoM Массы Touch Up	1 x 20 г
BL	602401
1	602402
2	602403
3	602404
4	602405
5	602406
6	602407

Опакер F IPS InLine® System Opaquer F

Вопрос флюоресцентности является темой, которая много обсуждается. Поскольку природа не дает нам единого стандарта флюоресцентности, мы, тем не менее, хотим обеспечить неизменное качество своих материалов, поэтому с помощью opakera F существует возможность повысить флюоресцентность, идущую из глубины реставрации.



Форма поставки

IPS InLine System Опакер F	1 x 1 г	593323
-----------------------------------	----------------	---------------

Корректировочная масса IPS InLine® System Add-On 690°C/1274°F

Эта низкотемпературная корректировочная масса Add-On была разработана специально для системы IPS InLine PoM. Она служит для выполнения корректировок и изменений формы уже готовой, прошедшей обжиг реставрации IPS InLine или IPS InLine PoM.



Форма поставки

Корректировочная масса IPS InLine System Add-On 690°C/1274°F	1 x 20 г	602386
---	-----------------	---------------

Жидкость для opakera IPS InLine® System Opaquer Liquid

Служит для минимального разбавления засохшего opakera. Не может быть использована для замешивания пастообразного opakera.



Форма поставки

Жидкость для opakera IPS InLine System Opaquer Liquid	1 x 15 мл	593345
--	------------------	---------------

Жидкость для плечевых масс **IPS InLine® Margin Build-Up Liquid**

Служит для замешивания плечевых масс IPS InLine Margin.



Форма поставки

Жидкость для плечевых масс IPS InLine Margin Build-Up Liquid	1 x 60 мл	593346
--	-----------	--------

Жидкость для глазури и красителей **IPS InLine® System Glaze and Stains Liquid**

Создание реставраций с живым блеском вполне реально благодаря удобной в работе глазури IPS InLine System в сочетании с жидкостью для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid.



Форма поставки

Жидкость для глазури и красителей IPS InLine System Glaze and Stains Liquid	1 x 15 мл	593353
IPS InLine System Глазурь	1 x 3 г	602384
	1 x 10 г	602385

Моделировочная жидкость **IPS InLine® System Build-Up Liquid L**

Подходит для замешивания небольших порций керамического порошка или при изготовлении небольших реставраций. Моделировочная жидкость L подходит техникам, которые предпочитают менее влажную моделировку, без постоянного подсушивания, поскольку эта жидкость быстрее испаряется. Благодаря этому материалы IPS InLine хорошо моделируются шпателем.



Форма поставки

Моделировочная жидкость IPS InLine System Build-Up Liquid L	1 x 60 мл	593348
	1 x 250 мл	593351

Моделировочная жидкость **IPS InLine® System Build-Up Liquid P**

Подходит для замешивания керамического порошка IPS InLine при изготовлении больших реставраций, когда требуется пластичность материала на длительное время. Моделировочная жидкость P особенно хорошо подходит техникам, которые предпочитают длительную обработку влажного материала при одновременном сохранении его стабильности.




Форма поставки

Моделировочная жидкость P

IPS InLine System Build-Up Liquid P	1 x 60 мл	593349
	1 x 250 мл	593352

Расцветка **IPS InLine®**

Образцы для расцветок обжигаются из оригинальных масс IPS InLine/IPS InLine PoM в условиях, аналогичных лабораторным, поэтому полностью соответствуют желаемому результату.

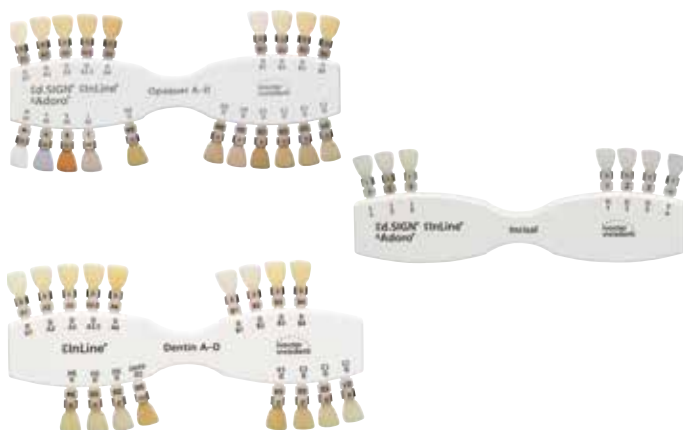

Форма поставки

Расцветки IPS InLine

по 1 x

Стартовый набор Trial Kit Chromascop	593355
Опакер Chromascop	605191
Плечевые массы Margin Chromascop	593357
Дип-дентин Deep Dentin Chromascop	593358
Дентин Chromascop	593359
Стартовый набор Trial Kit A-D; A3	609610
Опакер A-D	605190
Плечевые массы Margin A-D	593363
Дип-дентин Deep Dentin A-D	593364
Дентин A-D	593365
Ультрасветлые цвета Bleach BL	602984
Массы режущего края / транспа Incisal /Transpa	609611
Импульсные массы Impulse	593367
Десневые массы Gingiva	605192
Расцветка IPS InLine PoM	1 x 602408

Бокс для материалов **IPS InLine® System**

Симпатичный бокс для материалов выпускается двух размеров и имеет достаточно места для расположения в нем различных материалов. Его бесспорным преимуществом является возможность располагать в нем разнообразные наборы материалов. Поставляется без материалов.



Форма поставки

Бокс для материалов IPS InLine/IPS InLine PoM

Ящик 80 мм	595319
Ящик 55 мм	595320
Колесики	594811

Силер для моделей IPS® Model Sealer

Model Sealer служит для изоляции гипсовой модели от облицовочных масс. Model Sealer закрывает поры в гипсе и препятствует отсасыванию жидкости из керамических масс



Форма поставки

**Силер для моделей
IPS Model Sealer** 1 x 50 мл 593401

Силер для плечевых масс IPS® Margin Sealer

Margin Sealer применяется для изоляции гипсового штампа при изготовлении керамического уступа из плечевых масс



Форма поставки

**Силер для плечевых масс
IPS Margin Sealer** 1 x 20 мл 593402

Сепарационная жидкость для керамики с брашем IPS® Ceramic Separating Liquid with Brush

Изолирующая жидкость для нанесения на поверхности, которые были пропитаны силером для плечевых масс Margin Sealer или силером для моделей Model Sealer. Благодаря ей гарантируется чистое отделение керамической массы от гипсовой модели либо гипсового штампа.



Форма поставки

**Сепарационная жидкость
для керамики с брашем
IPS Ceramic Separating Liquid with Brush** 1 x 15 мл 593403

Сплавы IPS InLine®

Компоненты, согласованные со всей линией продуктов. Система IPS InLine согласуется с многообразными сплавами фирмы Ivoclar Vivadent. При этом существует выбор между сплавами желтого (золотого) и белого цвета.

Широкая программа сплавов разнообразна и предлагает различные продукты – начиная со сплавов с высоким содержанием золота и заканчивая сплавами из благородных металлов – в зависимости от клинических показаний и пожеланий пациента.

Форма поставки

Если Вам необходима более подробная информация о нашей программе сплавов, обратитесь к нашим представителям или непосредственно к нам.

В зависимости от страны предложение сплавов может меняться.



Сплав	IPS InLine One IPS InLine	IPS InLine PoM IPS кольцо 100/200 г	IPS InLine PoM IPS кольцо 300 г	Цвет	КТР 25–500°C
С высоким содержанием золота					
Brite Gold	✓*	-	-	очень желтый	14.8
Brite Gold XH	✓*	-	-	очень желтый	14.4
Golden Ceramic	✓*	-	-	очень желтый	14.6
Callisto 86	✓	✓	✓	очень желтый	14.4
Aquarius Hard	✓*	✓ ²⁾	✓ ²⁾	очень желтый	14.5
Aquarius	✓*	-	-	очень желтый	14.6
d.SIGN 98	✓*	✓ ¹⁾	-	очень желтый	14.3
Callisto 84	✓	✓	✓	очень желтый	14.3
Y	✓	-	-	желтый	14.6
Aquarius XH	✓	✓	✓	желтый	14.1
Y-2	✓*	-	-	желтый	15.0
Y-Lite	✓	✓	✓	желтый	13.9
Sagittarius	✓	✓	✓	белый	14.0
Y-1	✓*	-	-	желтый	14.8
d.SIGN 96	✓	✓	-	желтый	14.3
С уменьшенным содержанием золота					
d.SIGN 91	✓	✓	✓	белый	14.2
W	✓	-	-	белый	14.2
W-5	✓	-	-	белый	14.0
Lodestar	✓	✓	✓	белый	14.1
W-3	✓	✓	✓	белый	13.9
Leo	✓	✓	✓	белый	13.9
W-2	✓	✓	✓	белый	14.2
На основе палладия					
Spartan Plus	✓	✓	-	белый	14.3
Spartan	✓	✓	-	белый	14.2
Capricorn	✓	✓	✓	белый	14.1
d.SIGN 84	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	белый	13.8
Protocol	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	белый	13.8
Callisto 75 Pd	✓	✓	✓	белый	13.9
Aries	✓	-	-	белый	14.7
d.SIGN 67	✓	-	-	белый	13.9
d.SIGN 59	✓*	-	-	белый	14.5
d.SIGN 53	✓**	-	-	белый	14.8
W-1	✓*	-	-	белый	14.8
Capricorn 15	✓	-	-	белый	14.3
Callisto CP+	✓	✓	✓	белый	14.4
Сплавы для имплантов					
Callisto Implant 78	✓	✓	✓	белый	13.9
Callisto Implant 33	✓	✓	✓	белый	14.0
IS-64	✓**	-	-	белый	14.8
Callisto Implant 60	✓**	-	-	белый	14.5
Сплавы из благородных металлов					
Colado NC	✓	✓	✓	белый	14.0
4all	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	белый	13.8
IPS d.SIGN 30	✓**	✓ ²⁾	✓ ²⁾	белый	14.5
Colado CC	✓**	✓ ²⁾	✓ ²⁾	белый	14.2

* Охлаждение до 800 °C
** Охлаждение до 700 °C

1) Одиночные реставрации
2) см. инструкцию к IPS InLine System

IPS Classic® / IPS Classic® V

Проверенные опытом металлокерамические массы IPS Classic дают возможность индивидуально и очень творчески подходить к созданию реставраций. Благодаря гармоничному распределению размеров частиц эта керамика обладает отличной моделируемостью и высокой стабильностью, даже после нескольких обжигов. Материал IPS Classic выпускается в цветах Chromascop и V.



Опакер IPS Classic® / IPS Classic® V Opaquer

Пастообразные opakеры, консистенция и превосходная стабильность которых обеспечивают прекрасную маскирующую способность даже при нанесении тонким слоем. Пастообразные opakеры отличаются удобством и экономичностью в работе.



Форма поставки

Пастообразный opakер

IPS Classic Opaquer Paste Chromascop	1 x 3 г	
110	532000	
120	532001	
130	532005	
140	532002	
210	532006	
220	532003	
230	532004	
240	532007	
310	532009	
320	532016	
330	532008	
340	532011	
410	532012	
420	532017	
430	532013	
440	532018	
510	532019	
520	532014	
530	532010	
540	532015	

Пастообразный opakер

IPS Classic V Opaquer Paste	1 x 3 г	
A1	531666	
A2	531667	
A3	531668	
A3.5	531669	
A4	531670	
B1	531672	
B2	531673	
B3	531674	
B4	531675	
C1	531677	
C2	531678	
C3	531679	
C4	531680	
D2	531681	
D3	531682	
D4	531683	

Интенсивный опакер IPS Classic® / IPS Classic® V Intensive Opaquer

Специально окрашенные пастообразные интенсивные опакеры для создания индивидуальных особенностей на этапе нанесения опакера.



Форма поставки

Интенсивный пастообразный опакер IPS Classic Intensive Opaquer Paste		1 x 3 г
белый		532020
оранжевый		532021
коричневый		532022
фиолетовый		532023
серый		532024
Интенсивный пастообразный опакер IPS Classic V Intensive Opaquer Paste		1 x 3 г
A		531665
B		531671
прозрачный		531676
фиолетовый		531684
белый		531685

Десневой опакер IPS® Gingiva Opaquer

Этот десневой опакер идеально подходит для покрытия металлических каркасов или супраструктур имплантантов перед нанесением десневой массы IPS Gingiva.



Форма поставки

Десневой пастообразный опакер IPS Gingiva Opaquer Paste		1 x 3 г
Розовый		546676

Низкотемпературный опакер IPS® Lowraque IPS® Lowraque V

Низкотемпературный opakер IPS Lowraque был специально разработан для так называемых биосплавов, которые в большинстве своем имеют низкую точку плавления. Для обеспечения термической стабильности биосплавам необходим opakер с низкой температурой обжига. Разумеется, opakер IPS Lowraque подходит не только для биосплавов, но и для других сплавов для металлокерамики.

Преимущества

- отличная покрывающая способность
- хорошие рабочие свойства
- совместим со всеми металлокерамическими массами IPS Classic и IPS Classic V
- низкая температура обжига 920°C



Форма поставки

Низкотемпературный opakер IPS Lowraque

1 x 3 г

110	549051
120	549052
130	549053
140	549054
210	549055
220	549056
230	549057
240	549058
310	549059
320	549060
330	549061
340	549062
410	549063
420	549064
430	549065
440	549066
510	549067
520	549068
530	549069
540	549070

Низкотемпературный opakер IPS Lowraque V

1 x 3 г

A1	549076
A2	549077
A3	549078
A3,5	549079
A4	549080
B1	549081
B2	549082
B3	549083
B4	549084
C1	549085
C2	549086
C3	549087
C4	549088
D2	549089
D3	549090
D4	549091

Низкотемпературный интенсивный opakер IPS® Lowraque Intensiv

Специально окрашенные пастообразные низкотемпературные интенсивные opakеры для создания индивидуальных особенностей на этапе нанесения opakера.



Форма поставки

Низкотемпературный интенсивный opakер IPS Lowraque Intensiv

1 x 3 г

IO белый	549071
IO оранжевый	549072
IO коричневый	549073
IO фиолетовый	549074
IO серый	549075

Низкотемпературный интенсивный opakер IPS Lowraque V Intensiv

1 x 3 г

IO A	549092
IO B	549093
IO C	549094
IO фиолетовый	549095
IO белый	549096

Низкотемпературный десневой опакер IPS® Lowraque Gingiva

Этот десневой низкотемпературный опакер идеально подходит для покрытия металлических каркасов или супраструктур имплантантов перед нанесением десневой массы IPS Gingiva.



Плечевая масса IPS® Margin / IPS® Margin V

Плечевые массы IPS Margin отличаются стабильностью формы и малой усадкой. Позволяют технику изготовить эстетичные края коронки с оптимальным краевым прилеганием.



Форма поставки

Десневой низкотемпературный опакер		
IPS Lowraque Gingiva	1 x 3 г	549101

Преимущество:

– высокая прочность края коронки

Форма поставки

Плечевые массы IPS Margin	1 x 15 г	
1		529451
2		529452
3		529453
4		529454
5		529455
6		529456
7		529457
8		529458
9		529459
10		529460
Плечевые массы IPS Margin V	1 x 20 г	
A1		531705
A2		531706
A3		531707
A3.5		531708
A4		531709
B1		531711
B2		531712
B3		531713
B4		531714
C1		531715
C2		531716
C3		531717
C4		531718
D2		531719
D3		531720
D4		531721

Интенсивная плечевая масса IPS® Margin Intensiv

Интенсивные плечевые массы IPS Margin Intensiv предназначены для создания эффектов в пришеечной области. Они применяются индивидуально в зависимости от клинической ситуации.



Опак-дентин IPS® Opaque Dentin / IPS® Opaque Dentin V

19 opak-дентинов IPS Opaque Dentin обеспечивают оптимальные результаты и максимально возможную эстетику в условиях ограниченного места.



Форма поставки

Интенсивные плечевые массы

IPS Intensiv Margin	1 x 15 г
11	529461
12	529462
13	529463
14	529464

Интенсивные плечевые массы

IPS Intensiv Margin V	1 x 20 г
коричневый	531710
желтый	531722
оранжевый	531723

Преимущества

- повышенная opakовость и насыщенность цвета
- отличная маскирующая способность

Форма поставки

Опак-дентин IPS Opaque Dentin	1 x 20 г
120	529417
130	529421
140	529418
210	529422
220	529419
230	529420
240	529423
310	529424
320	529427
410	529425
420	529428
430	529426
440	529429
510	529430

Кисточка для opakера

IPS Opaquer Pinsel G3	1 x	531743
-----------------------	-----	--------

Опак-дентин IPS Opaque Dentin V	1 x 20 г
A1	531724
A2	531725
A3	531726
A3.5	531727
A4	531728
B1	531730
B2	531731
B3	531732
B4	531733
C1	531734

C2	531735
C3	531736
C4	531737
D2	531738
D3	531739
D4	531740

Опак-дентин IPS Opaque Dentin V	1 x 100 г
A1	532101
A2	532102
A3	532103
A3.5	532104
A4	532105
B1	532107
B2	532108
B3	532109
B4	532110
C1	532111
C2	532112
C3	532113
C4	532114
D2	532115
D3	532116
D4	532117

Цвета для характеристики	1 x 20 г
коричневый	531729
желтый	531741
оранжевый	531742

Дентин IPS Classic® / IPS Classic® V Dentin

Благодаря гармоничному распределению размеров частиц дентиновые массы имеют живой внешний вид и великолепные цветовые оттенки.



Форма поставки

Дентин IPS Classic Dentin Chromascop 1 x 20 г

110	529190
120	529192
130	529196
140	529193
210	529197
220	529194
230	529195
240	529198
310	529200
320	529207
330	529199
340	529202
410	529203
420	529208
430	529204
440	529209
510	529210
520	529205
530	529201
540	529206

Дентин IPS Classic Dentin Chromascop 1 x 100 г

110	529212
120	529214
130	529218
140	529215
210	529219
220	529216
230	529217
240	529220
310	529222
320	529229
330	529221
340	529224
410	529225
420	529230
430	529226
440	529231
510	529232
520	529227
530	529223
540	529228

Дентин IPS Classic V Dentin

1 x 20 г

A1	531648
A2	531775
A3	531649
A3.5	531650
A4	531651
B1	531652
B2	531653
B3	531654
B4	531655
C1	531656
C2	531657
C3	531658
C4	531659
D2	531660
D3	531661
D4	531662

Дентин IPS Classic V Dentin

1 x 100 г

A1	531753
A2	531754
A3	531755
A3.5	531756
A4	531757
B1	531758
B2	531759
B3	531760
B4	531761
C1	531762
C2	531763
C3	531764
C4	531765
D2	531766
D3	531767
D4	531768

Массы режущего края IPS Classic® / IPS Classic® V Incisal

Благодаря гармоничному распределению размеров частиц и опаловому эффекту массы режущего края приобретают живой внешний вид и великолепные цветовые оттенки.



Форма поставки

Массы режущего края

IPS Classic Incisal	1 x 20 г	
1		529256
2		529257
3		529258
4		529259
5		529260

Массы режущего края

IPS Classic Incisal	1 x 100 г	
1		529262
2		529263
3		529264
4		529265
5		529266

Массы режущего края

IPS Classic V Incisal	1 x 20 г	
1		531686
2		531687
3		531688
4		531689

Массы режущего края

IPS Classic V Incisal	1 x 100 г	
1		531769
2		531770
3		531771
4		531772

Опаловые массы режущего края IPS Classic® Opal-Incisal

Благодаря гармоничному распределению размеров частиц опаловые массы режущего края приобретают живой внешний вид и опаловый эффект.



Форма поставки

Опаловые массы режущего края

IPS Classic Opal-Incisal	1 x 20 г	
1		531580
2		531581
3		531582
4		531583
5		531584

Опаловые массы режущего края

IPS Classic Opal-Incisal	1 x 100 г	
1		531585
2		531586
3		531587
4		531588
5		531589

Прозрачная масса IPS Classic® / IPS Classic® V Transparent

Четыре прозрачных массы (Т1-Т4) для создания различных эффектов в области режущего края.



Форма поставки

Прозрачные массы		
IPS Classic Transparent	1 x 20 г	
1		529274
2		529275
3		529276
4		529277
Прозрачные массы		
IPS Classic V Transparent	1 x 20 г	
прозрачная		531647
нейтральная		531664
Прозрачные массы		
IPS Classic V Transparent	1 x 100 г	
прозрачная		531773
нейтральная		531774

Импульсные массы IPS® Impulse

Готовые к применению индивидуальные керамические массы упрощают создание различных эффектов.



Преимущества:

- опалесцирующие массы
- хорошая моделируемость

Форма поставки

Импульсные мамелоновые массы		
IPS Impulse Mamelon	1 x 20 г	
1		531692
2		531693
3		531694
4		531695
оранжевый		531696
Импульсные массы кромки режущего края		
IPS Impulse Incisal	1 x 20 г	
желтый		531690
светло-желтый		531691
Импульсные массы режущего края		
IPS Impulse Incisal	1 x 20 г	
желто-серый		531701
серый		531702
Прозрачная импульсная масса		
IPS Impulse Transparent	1 x 20 г	
синий		531703
желто-серый		531704
серый		531786
Импульсная масса окклюзионного дентина		
IPS ImpulseOcclusal Dentin	1 x 20 г	
коричневый		531698
желтый		531699
оранжевый		531700
Импульсная масса режущего края моляров		
IPS Impulse Molar Incisal	1 x 20 г	531697

Эффект-масса IPS® Effect

С помощью готовых к применению индивидуальных керамических эффект-масс очень просто и быстро создается опаловый эффект в области режущего края.



Преимущества:

- опалесцентные массы со стойким опаловым эффектом, сохраняющимся даже после нескольких обжигов.
- хорошая моделируемость

Форма поставки

Эффект-массы IPS Effect	1 x 20 г
1 супер опаловый	545017
2 опаловый	545018
3 беловато-опаловый	545019
4 белый опаловый	545020
5 красно-коричневый опаловый	545021

Десневая масса IPS® Gingiva

Десневая масса IPS Gingiva предназначена в первую очередь для проблемных в плане эстетики случаев, при которых необходимо имитировать живую десну.



Преимущества:

- живой цвет десны
- совместима с IPS Classic V

Форма поставки

Десневая масса IPS Gingiva	1 x 20 г
1	546667
2	546668
3	546669
4	546670
5	546671

Десневой модификатор IPS® Gingiva Modifier

Применяется индивидуально в зависимости от ситуации.



Форма поставки

Десневой модификатор IPS Gingiva Modifier	1 x 10 г
1	546672
2	546673
3	546674
4	546675

Дентиновые красители IPS® Shade / IPS® Shade V

Пастообразные, готовые к применению дентиновые красители IPS Shade позволяют выполнять корректировки цвета керамической поверхности. Кроме того, их можно смешивать с другими керамическими массами для создания индивидуальных эффектов.



Преимущества:

- простое применение, экономящее время
- высокая термостойкость и стойкость в полости рта

Форма поставки

Дентиновые красители IPS Shade	1 x 3 г	
110 / 120		531564
130		531569
140 / 210		531565
220 / 230		531566
240		531570
310		531571
320		531572
330		531573
340		531574
410 / 420		531567
430 / 440		531568
510		531575
520		531576
530		531577
540		531578
Дентиновые красители IPS Shade V	1 x 3 г	
A1		531777
A2 / A3 / A3.5		531778
A4		531779
B1		531780
B2 / B3 / B4		531781
C1 / C2		531782
C3 / C4		531783
D2 / D3		531784
D4		531785

Красители IPS® Stains-P

Пастообразные красители позволяют индивидуально оформить реставрацию. Красители можно либо наносить непосредственно на керамическую поверхность, либо смешивать с керамическими массами. Безграничные возможности смешивания различных масс обеспечивают полную свободу для творчества.



Преимущества:

- высокая термостойкость и стойкость в полости рта
- широкий диапазон температур

Форма поставки

Красители IPS Stains-P	1 x 3 г	
белый		531590
бамбуково-бежевый		531591
карамельно-коричневый		531592
медно-коричневый		531593
пробковый коричневый		531594
красное дерево		531595
лазурь		531596
черный		531597
оранжевый		531598
базовый желтый		531599
базовый красный		531600
базовый синий		531601

Корректировочная масса IPS Classic® Correction Powder

Низкотемпературная корректировочная масса для металлокерамики IPS Classic и IPS Classic V предназначена для небольших корректировок и изменений формы уже готовых обожженных реставраций.



Преимущества:

- низкая температура обжига 690 °C
- возможность смешивания с красителями IPS Shade или IPS Stains-P
- высокая кислотоустойчивость и стойкость в полости рта

Форма поставки

Корректировочная масса		
IPS Classic Correction Powder	1 x 20 г	541671

Глазуровочная паста IPS Classic® Glaze Paste

Пастообразная глазуровочная паста для создания живого блеска на керамической реставрации.



Форма поставки

Глазуровочная паста		
IPS Classic Glaze Paste	1 x 3 г	531602

Жидкость для глазури и красителей IPS Classic® Glaze and Stain Liquid

Жидкость для изменения консистенции глазурочной пасты IPS Classic.



Форма поставки

Жидкость для глазури и красителей 1 x 15 мл 529413
IPS Classic Glaze and Stain Liquid

Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS® Margin Build-Up Liquid

Специальная моделировочная жидкость для керамических плечевых масс облегчает моделирование и снятие смоделированной коронки с гипсовой модели.



Форма поставки

Моделировочная жидкость 1 x 60 мл 529465
для плечевых масс
IPS Margin Build-Up Liquid

Моделировочная жидкость IPS Classic® Build-Up Liquid L (L = Long-term – длительное время)

Моделировочная жидкость Build-Up Liquid L была создана специально для техников, которые предпочитают длительное рабочее время, а также для работы в жарких условиях. Жидкость содержит добавки, которые повышают точку кипения и замедляют испарение. Благодаря этому увеличивается рабочее время при неизменно превосходной моделируемости.

Форма поставки

Моделировочная жидкость
IPS Classic Build-Up Liquid L 1 x 60 мл 529398
1 x 250 мл 529402



Моделировочная жидкость IPS Classic® Build-Up Liquid N (N = Normal – стандартное рабочее время)

Эта моделировочная жидкость предназначена для техников, предпочитающих наносить керамические массы кисточкой маленькими порциями. Моделировочная жидкость Build-Up Liquid N придает материалу превосходную стабильность и отличные моделировочные свойства. Особенно хорошо эта моделировочная жидкость подходит для техников, которые предпочитают влажную моделировку без избыточного высыхания. В соответствии с обозначением N (= Normalliquid – нормальная жидкость), эта жидкость подходит для ежедневного использования и для большинства техник наложения.



Форма поставки

Моделировочная жидкость		
IPS Classic Build-Up Liquid N	1 x 60 мл	529397
	1 x 250 мл	529401

Моделировочная жидкость IPS Classic® Build-Up Liquid S (S = Spatula Technique – техника работы шпателем)

Эта жидкость предназначена для техников, которые предпочитают тщательно высушивать и конденсировать керамику, а затем сошлифовывать ее избыток при помощи инструментов. Жидкость легко впитывается и обеспечивает относительно плотную керамическую массу, которой можно придать индивидуальную форму при помощи инструментов.



Форма поставки

Моделировочная жидкость		
IPS Classic Build-Up Liquid S	1 x 60 мл	529399
	1 x 250 мл	529403

Силер для моделей IPS® Model Sealer

Силер для моделей Model Sealer служит для изоляции гипсовых моделей. Силер закрывает поры в гипсе и препятствует отсасыванию влаги из керамических масс в гипс.



Форма поставки

**Силер для моделей
IPS Model Sealer**

1 x 50 мл

593401

Силер для плечевых масс IPS® Margin Sealer

Силер для плечевых масс Margin Sealer служит для изоляции гипсовой культи при изготовлении керамического уступа.



Форма поставки

**Силер для плечевых масс
IPS Margin Sealer**

1 x 20 мл

593402

IPS e.max® – Единая система для всех показаний

IPS e.max – это инновационная система цельной керамики, с помощью которой вы можете создать любые работы в тех случаях, когда показана цельная керамика – от тонких виниров до мостовидного протеза на 12 единиц.


Система **IPS e.max** объединяет в себе высокопрочные и эстетичные материалы для технологий прессования и CAD/CAM, является гибкой и экономичной.

Для технологии **прессования** предлагаются высокопрочные стеклокерамические заготовки из стеклокерамики на основе дисиликата лития **IPS e.max Press**, а также эстетичные стеклокерамические фтор-апатитовые заготовки **IPS e.max ZirPress** для быстрого и эффективного напрессовывания на каркасы из оксида циркония.

Для **технологии CAD/CAM** предлагаются материалы двух различных типов: высокопрочный оксид циркония **IPS e.max ZirCAD** и эстетичные стеклокерамические блоки на основе дисиликата лития **IPS e.max CAD**.

Новая техника **IPS e.max CAD-on-Technik** объединяет преимущества материалов IPS e.max CAD (LS2) и IPS e.max ZirCAD (ZrO2) при изготовлении мостовидных протезов до 4 единиц.

Нано-фтор-апатитовая **керамика для наслоения IPS e.max Ceram** является замыкающим звеном в системе цельной керамики. Она является облицовочным материалом для компонентов системы IPS e.max.

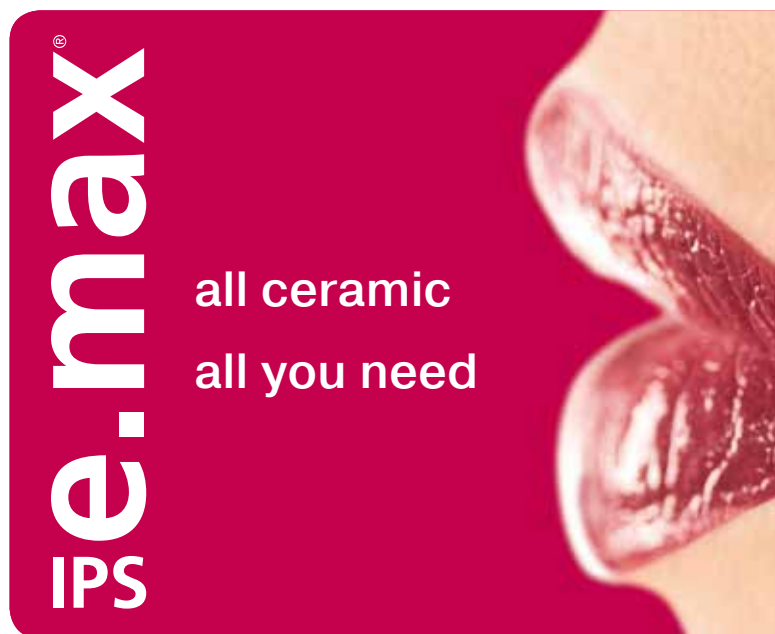

IPS e.max System



Концепция системы IPS e.max заключается в совместимости отдельных продуктов, которые дополняют друг друга и все вместе образуют систему IPS e.max.

Таблица комбинирования

Технология ПРЕССОВАНИЯ

IPS e.max Press		IPS e.max ZirPress	
Арт. №	Продукт	Арт. №	Продукт
БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ	626300	Базовый набор IPS e.max Press Basic Kit A-D	
	639660	IPS e.max Press Abutment Solutions Basic Kit A-D	
	626301	Стартовый набор IPS e.max Press Starter Kit A-D	
	597064	Жидкость IPS e.max Press Invex Liquid	
	595592AN	IPS PressVEST 2.5 кг	
	595588	Жидкость IPS PressVEST Liquid 0.5 л	
		<i>или</i>	
	595590AN	IPS PressVEST Speed 2.5 кг	
	595586	Жидкость IPS PressVEST Speed Liquid 0.5 л	
	591388	Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit A-D	
	<i>или</i>		
596828	Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit Chromascop		
ОПЦИОНАЛЬНО	597078	Культовой материал IPS Natural Die Material	
	596834AN	Набор дип-дентинов IPS Ceram Deep Dentin Kit A-D	
		<i>или</i>	
	596833AN	Набор дип-дентинов IPS Ceram Deep Dentin Kit Chromascop	
	596835AN	Набор импульсных масс IPS e.max Ceram Impulse Kit	
	596836AN	Набор красителей IPS e.max Ceram Essence Kit	
	596837AN	Набор красителей IPS e.max Ceram Shade Kit	
	602450AN	Набор ультрасветлых цветов IPS e.max Ceram Bleach Kit	
	602316AN	Набор десневых масс IPS e.max Ceram Gingiva Kit	
	ПРИБОРЫ	636211	Programat EP 5000/G2, 200–240 В / 50–60 Гц
		<i>или</i>	
636210		Programat EP 5000/G2, 110–120 В / 50–60 Гц	
		<i>или</i>	
636209		Programat EP 3000/G2, 200–240 В / 50–60 Гц	
	<i>или</i>		
636208	Programat EP 3000/G2, 110–120 В / 50–60 Гц		

Технология CAD/CAM

IPS e.max ZirCAD		IPS e.max CAD *)				
Арт. №	Продукт	Арт. №	Продукт	Арт. №	Продукт	
IPS e.max ZirCAD for inLab		IPS e.max CAD for inLab		IPS e.max CAD for Everst		
БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ	626588	Базовый набор IPS e.max ZirCAD for inLab Basic Kit		626376	Базовый набор IPS e.max CAD for inLab Basic Kit A-D	
	591388	Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit A-D		628186	IPS e.max CAD Crystallization Kit	
		<i>или</i>		591388	Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit A-D	
	596828	Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit Chromascop			<i>или</i>	
596830 AN	IPS e.max Ceram ZirLiner Kit		596828	Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit Chromascop	596828	Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit Chromascop
ОПЦИОНАЛЬНО	597078	Культовой материал IPS Natural Die Material		597078	Культовой материал IPS Natural Die Material	
	596832 AN	Набор плечевых масс IPS e.max Ceram Margin Kit A-D		596834 AN	Набор дип-дентинов IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit A-D	
		<i>или</i>			<i>или</i>	
	596831 AN	Набор плечевых масс IPS e.max Ceram Margin Kit Chromascop		596833AN	Набор дип-дентинов IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit Chromascop	
	596834 AN	Набор дип-дентинов IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit A-D		596835AN	Набор импульсных масс IPS e.max Ceram Impulse Kit	
		<i>или</i>		596836AN	Набор красителей IPS e.max Ceram Essence Kit	
	596833AN	Набор дип-дентинов IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit Chromascop		596837AN	Набор красителей IPS e.max Ceram Shade Kit	
	596835AN	Набор импульсных масс IPS e.max Ceram Impulse Kit		602450AN	Набор ультрасветлых цветов IPS e.max Ceram Bleach Kit	
	596836AN	Набор красителей IPS e.max Ceram Essence Kit		602316AN	Набор десневых масс IPS e.max Ceram Gingiva Kit	
	596837AN	Набор красителей IPS e.max Ceram Shade Kit				
602450AN	Набор ультрасветлых цветов IPS e.max Ceram Bleach Kit					
602316AN	Набор десневых масс IPS e.max Ceram Gingiva Kit					
ПРИБОРЫ	613886	Programat S1 118–240 В / 50–60 Гц		645987	Programat P310 200–240 В / 50–60 Гц	
					<i>или</i>	
				645950	Programat P310 110–120 В / 50–60 Гц	
					<i>или</i>	
				645988	Programat P510 200–240 В / 50–60 Гц	
					<i>или</i>	
			645981	Programat P 510 110–120 В / 50–60 Гц		
				<i>или</i>		
			613811	Programat P700/G2 200–240 В / 50–60 Гц		
				<i>или</i>		
			613812	Programat P700/G2 110–120 В / 50–60 Гц		

*) IPS e.max CAD LT выпускается также для использования врачом-стоматологом во время лечения. См. каталог клинических продуктов.

Техника CAD-on

IPS e.max ZirCAD		IPS e.max CAD-on	
БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ	Арт. №	Продукт	Арт. № 635528
			Продукт Базовый набор IPS e.max CAD-on for inLab Basic Kit A-D
ОПЦИОНАЛЬНО	597078	Культовой материал IPS Natural Die Material	597078
			
ПРИБОРЫ	613886	Programat S1 118–240 В / 50–60 Гц	633343
			645987
			или
			645950
			или
			645988
			или
613838			
или			
613811			
или			
613812			



Базовый набор IPS e.max® Press Basic Kit A-D

Базовый набор IPS e.max Press Basic Kit включает в себя заготовки всех степеней транслюцентности, необходимые для изготовления каркаса и реставраций в полную анатомическую форму, а также принадлежности для работы. Поставляется в боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими наборами IPS e.max.



Форма поставки

Базовый набор		626300
IPS e.max Press Basic Kit A-D		
Заготовки IPS e.max Press; HO HO 1	1 x 5	
Заготовки IPS e.max Press MO MO 1	1 x 5	
Заготовки IPS e.max Press LT LT A1, LT A2, LT A3, LT B1	по 1 x 5	
Заготовки IPS e.max Press HT HT A1, HT A2, HT A3, HT B1	по 1 x 5	
Муфельная система IPS, 100 г	1 x	
Муфельная система IPS, 200 г	1 x	
Силиконовое кольцо IPS, 100 г	1 x	
Силиконовое кольцо IPS, 200 г	1 x	
Контрольный шаблон IPS Sprue Guide 100 г	1 x	
Контрольный шаблон IPS Sprue Guide 200 г	1 x	
Стержень из оксида алюминия IPS	2 x	
Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS AloX Plunger Separator	1 x 200 мг	
Текущая фиксирующая паста IPS Object Fix Flow	1 x 10 мл	
Протравочный набор IPS Ceramic Etching Gel	1 x	
Тестовая упаковка OptraStick Test Pack	3 x	
Расцветка IPS e.max Press	1 x	
Расцветка IPS e.max Press / CAD LT	1 x	
Расцветка IPS e.max Press /CAD HT	1 x	
Принадлежности		

Базовый набор IPS e.max® Press Abutment Solutions Basic Kit A-D

Базовый набор IPS e.max Press Abutment Solutions Basic Kit A-D содержит в себе заготовки IPS e.max Press и принадлежности, материалы для проведения клинической примерки, а также необходимые фиксирующие материалы для адгезивной фиксации.

Поставляется в боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими наборами IPS e.max.



Форма поставки

Базовый набор IPS e.max Press Abutment Solutions Basic Kit A-D		639660
Заготовки IPS e.max Press MO MO 1	1 x 5	
Заготовки IPS e.max Press LT LT A2, LT A3	по 1 x 5	
Муфельная система IPS, 100 г	1 x	
Силиконовое кольцо IPS, 100 г	1 x	
Контрольный шаблон IPS Sprue Guide 100 г	1 x	
Стержень из оксида алюминия IPS	2 x	
Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS AloX Plunger Separator	1 x 200 мг	
Протравочный набор IPS Ceramic Etching Gel	1 x	
Multilink Implant	1 x 9 г	
Monobond Plus	1 x 5 г	
Liquid Strip	1 x 2,5 г	
Virtual Extra Light Body Fast Set	1 x 50 мл	
Расцветка IPS e.max Press	1 x	
Расцветка IPS e.max Press/CAD LT	1 x	



Стартовый набор IPS e.max® Press Starter Kit A-D

Стартовый набор IPS e.max Press Starter Kit включает в себя заготовки HT для изготовления полноанатомических или редуцированных реставраций, а также красители и облицовочную массу. К тому же, в наборе есть все принадлежности, необходимые для изготовления первых прессованных реставраций.




Форма поставки

Стартовый набор

IPS e.max Press Starter Kit A-D	626301
Заготовки IPS e.max Press (HT A2)	1 x 5
Транспа-масса режущего края IPS e.max Ceram Transpa Incisal (TI 1)	1 x 5 г
Опаловая эффект-масса IPS e.max Ceram Opal Effect (OE 1)	1 x 5 г
Красители IPS e.max Ceram Essence (E 01 белый, E11 красное дерево)	по 1 x 5 г
Краситель IPS e.max Ceram Shade (1)	1 x 3 г
Краситель режущего края IPS e.max Ceram Shade Incisal (I 1)	1 x 3 г
Пастообразная глазурь IPS e.max Ceram Glaze Paste	1 x 3 г
Жидкость для глазури и красителей IPS e.max Ceram Glaze and Stain Liquid (allround)	1 x 15 мл
Моделировочная жидкость IPS e.max Ceram Build-Up Liquid (allround)	1 x 15 мл
Муфельная система IPS, 100 г	1 x
Силиконовое кольцо IPS, 100 г	1 x
Стержень из оксида алюминия IPS AloX Plunger	1 x
Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS PressVest Speed	1 x 200 мг
Жидкость IPS PressVest Speed Liquid	1 x 100 г
IPS e.max Press Invex	1 x 100 мл
	1 x 50 мл

Набор заготовок IPS e.max® Press Impulse Ingot Kit

Набор заготовок IPS e.max Press Impulse Ingot Kit содержит 5 x 5 заготовок Impulse трех цветов Value (Value 1, 2, 3) и двух опаловых цветов (Opal 1, 2). Прежде всего, они подходят для изготовления (тонких) виниров, накладок, частичных и одиночных коронок. Никаких других принадлежностей набор не содержит.

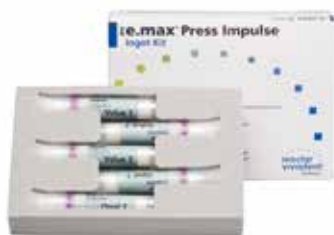

Форма поставки

Набор заготовок

IPS e.max Press Impulse Ingot Kit	635564
Заготовки IPS e.max Press Impulse Value 1, Value 2, Value 3	по 1 x 5
Заготовки IPS e.max Press Impulse Opal 1, Opal 2	по 1 x 5



Заготовки IPS e.max® Press HO (High Opacity – высокая опаковость)

Заготовки выпускаются в трех цветах и, благодаря своей высокой опаковости, идеально подходят для изготовления каркасов на девитальные или сильно измененные в цвете зубы.



Форма поставки

Заготовки IPS e.max Press HO	по 1 x 5
0	596753
1	626302
2	626303
Заготовки IPS e.max Press HO L	по 1 x 3
0	596754
1	626304
2	626305

Заготовки IPS e.max® Press MO (Medium Opacity – средняя опаковость)

Благодаря своей опаковости, заготовки цветов MO 0 – MO 4 идеально подходят для изготовления каркасов на витальные или слегка измененные в цвете зубы. Заготовки окрашены в соответствии с характерными групповыми цветами.



Форма поставки

Заготовки IPS e.max Press MO	по 1 x 5
0	596756
1	596757
2	596758
3	596759
4	596760
Заготовки IPS e.max Press MO L	по 1 x 3
0	596762
1	596763
2	596764
3	596765
4	596766



Заготовки IPS e.max® Press LT (Low Translucency – низкая прозрачность)

Заготовки LT с более высокой транслюцентностью, чем заготовки MO, идеально подходят для работы техникой Cut-Back, кроме того, с ними можно работать техникой окрашивания. Выпускаются в 16 цветах А–D и 4 ультрасветлых цветах Bleach.



Форма поставки

IPS e.max Press LT	по 1 x 5
BL1	605293
BL2	605294
BL3	605295
BL4	605296
A1	605273
A2	605274
A3	605275
A3.5	605276
A4	626306
B1	605277
B2	605278
B3	605279
B4	626307
C1	626308
C2	605280
C3	626309
C4	626310
D2	626311
D3	605281
D4	626312

IPS e.max Press LT L	по 1 x 3
BL1	605298
BL2	605299
BL3	605300
BL4	605301
A1	605283
A2	605284
A3	605285
A3.5	605286
A4	626313
B1	605287
B2	605288
B3	605289
B4	626314
C1	626315
C2	605290
C3	626316
C4	626317
D2	626318
D3	605291
D4	626319



Заготовки IPS e.max® Press HT (High Translucency – высокая прозрачность)

Заготовки HT по причине высокой прозрачности идеально подходят для изготовления полноанатомических прессованных реставраций (техника окрашивания). Выпускаются в 16 цветах A–D и 4 ультрасветлых цветах Bleach.



Форма поставки

IPS e.max Press HT	по 1 x 5
BL1	626352
BL2	626353
BL3	626354
BL4	626355
A1	626320
A2	626321
A3	626322
A3.5	626323
A4	626324
B1	626325
B2	626326
B3	626327
B4	626328
C1	626329
C2	626330
C3	626331
C4	626332
D2	626333
D3	626334
D4	626335

IPS e.max Press HT L	по 1 x 3
BL1	626356
BL2	626357
BL3	626358
BL4	626359
A1	626336
A2	626337
A3	626338
A3.5	626339
A4	626340
B1	626341
B2	626342
B3	626343
B4	626344
C1	626345
C2	626346
C3	626347
C4	626348
D2	626349
D3	626350
D4	626351

Заготовки IPS e.max® Press Impulse

Заготовки Impulse выпускаются в 5 цветах: три цвета Value (Value 1, 2, 3) и два цвета Opal (Opal 1, 2). Прежде всего, они подходят для изготовления (тонких) виниров, накладок, частичных и одиночных коронок. Благодаря различной светлоте (растущей от 1 до 3), заготовки Value оптимально интегрируются в остаточные ткани зуба. Заготовки Opal при уменьшающейся опалесцентности и одновременно растущей светлоте от 1 до 2 можно использовать как «замену эмали».



Форма поставки

IPS e.max Press Impulse Starter Ingots	по 1 x 5	638203
IPS e.max Press Impulse по 1 x 5		
Value 1	635562	
Value 2	635558	
Value 3	635559	
Opal 1	635560	
Opal 2	635561	
IPS e.max Press Impulse L по 1 x 3		
Value 1	635566	
Value 2	635567	
Value 3	635568	
Opal 1	635569	
Opal 2	635570	



Опакеры IPS e.max® Press Опаquer

Опакеры IPS e.max Press необходимы для нанесения перед напрессовкой керамики на гальванические каркасы. Опакеры выпускаются пяти цветов (0 – 4), которые подбираются в соответствии с желаемым цветом зуба, после этого проводится обжиг. Таким образом обеспечивается равномерное сцепление с гальваническим каркасом, а также с заготовкой IPS e.max Press.



Форма поставки

Опакер IPS e.max Press Опаquer	по 1 x 3 г
0	596769
1	596770
2	596771
3	596772
4	596773

Набор IPS e.max® Abutment Solutions Cem Kit

Набор IPS e.max Abutment Solutions Cem Kit объединяет в себе продукты, необходимые для клинической примерки и адгезивной фиксации. К тому же, набор может быть полезен для тех, кто изготавливает гибридные абатменты из ZrO₂/Ti-Base.



Форма поставки

Набор IPS e.max Abutment Solutions Cem Kit	638959AN
Multilink Implant	1 x 9 г
Monobond Plus	1 x 5 г
Liquid Strip	1 x 2,5 г
Virtual Extra Light Body Fast Set	1 x 50 мл
Смешивающие типсы малые	48 x
Virtual Mixing Tips Small	
Типсы малые Virtual Intra Oral Tips Small	100 x



Базовый набор IPS e.max® ZirPress Basic Kit

Базовый набор IPS e.max ZirPress Basic Kit A–D содержит заготовки MO, LT и HT наиболее ходовых цветов A–D для работы техникой Cut-Back и моделирования в окончательной анатомической форме, а также необходимые принадлежности. Базовый набор поставляется в боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими базовыми наборами и дополнительными комплектами материалов IPS e.max.



Форма поставки

Базовый набор IPS e.max ZirPress Basic Kit A–D	626360
Заготовки IPS e.max ZirPress MO MO A2	по 1 x 5
Заготовки IPS e.max ZirPress LT LT A1, LT A2, LT A3, LT B1	по 1 x 5
Заготовки IPS e.max ZirPress HT HT A1, HT A2, HT A3, HT B1	по 1 x 5
Десневая заготовка IPS e.max ZirPress Gingiva G4	1 x 5
Муфельная система IPS, 100 г	1 x
Муфельная система IPS, 200 г	1 x
Силиконовое кольцо IPS, 100 г	1 x
Силиконовое кольцо IPS, 200 г	1 x
Контрольный шаблон IPS Sprue Guide 100 г	1 x
Контрольный шаблон IPS Sprue Guide 200 г	1 x
Стержень из оксида алюминия IPS AloX Plunger	2 x
Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS	1 x 200 мг
Принадлежности	

Заготовки IPS e.max® ZirPress MO (Medium Opacity – средняя опаковость)

Благодаря своей упаковке, эти заготовки идеально подходят для точного прессования керамических уступов, промежуточной части мостовидного протеза или цервикальной трети.



Форма поставки

IPS e.max ZirPress MO	по 1 x 5
BL1	601392
BL2	601393
BL3	601394
BL4	601395
A1	596776
A2	596777
A3	596778
A3.5	596779
B1	601396
B2	596780
B3	596781
C2	596782
D3	596783

Заготовки IPS e.max® ZirPress LT (Low Translucency – низкая прозрачность)

Благодаря своей полупрозрачности идеально подходят для работы техникой Cut-Back / напрессовывания дентинового ядра.



Форма поставки

IPS e.max ZirPress LT	по 1 x 5		
BL1	601397	B2	596789
BL2	601398	B3	596790
BL3	601399	B4	626362
BL4	601400	C1	626363
A1	596785	C2	596791
A2	596786	C3	626364
A3	596787	C4	626365
A3.5	596788	D2	626366
A4	626361	D3	596792
B1	601401	D4	626367
		D4	626367
		D4	626367

Заготовки IPS e.max® ZirPress HT (High Translucency – высокая прозрачность)

Благодаря своей полупрозрачности идеально подходят для моделирования в окончательной анатомической форме.



Форма поставки

IPS e.max ZirPress HT	по 1 x 5		
BL1	605313	B2	605308
BL2	605314	B3	605309
BL3	605315	B4	626369
BL4	605316	C1	626370
A1	605303	C2	605310
A2	605304	C3	626371
A3	605305	C4	626372
A3.5	605306	D2	626373
A4	626368	D3	605311
B1	605307	D4	626374

Заготовки IPS e.max® ZirPress Gingiva

Заготовки для изготовления десневой части техникой прессования, особенно актуальны для больших имплантологических работ.



Форма поставки

IPS e.max ZirPress Gingiva	по 1 x 5	
3	608423	
4	608424	



Базовый набор IPS e.max® ZirCAD для inLab® Basic Kit

Базовый набор IPS e.max ZirCAD для inLab Basic Kit содержит блоки трех цветов для системы Sirona inLab System, а также все необходимые для работы принадлежности. Базовый набор поставляется в новом боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими наборами IPS e.max.



Блоки IPS e.max® ZirCAD для inLab®

Блоки IPS e.max ZirCAD выпускаются в девяти размерах и трех цветах и фрезеруются в системе inLab. Благодаря высокой прочности после спекания (>900 МПа) из них можно изготавливать протезы на боковые зубы. На каркасы напрессовывается материал IPS e.max ZirPress или наносится облицовочный материал IPS e.max Ceram.



Форма поставки

Базовый набор IPS e.max ZirCAD for inLab Basic Kit		626588
Блоки IPS e.max ZirCAD for inLab Probe Blocks C13	1 x 5	
Блоки IPS e.max ZirCAD for inLab Probe Blocks C15	1 x 5	
Блоки IPS e.max ZirCAD for inLab Probe Blocks C15 L	1 x 5	
Блоки IPS e.max ZirCAD for inLab Probe Blocks B40	1 x 3	
Блоки IPS e.max ZirCAD for inLab Probe Blocks B40 L	1 x 3	
Лабораторный контрастный спрей IPS Contrast Spray Labside	1 x 200 мл	

Форма поставки

IPS e.max ZirCAD for inLab C 13 / MO по 1 x 5		
Пробные блоки		626594
MO 0		626589
MO 1		626590
MO 2		626591
IPS e.max ZirCAD for inLab C 13 / MO по 1 x 25		
MO 0		626595
MO 1		626596
MO 2		626597
IPS e.max ZirCAD for inLab C15 / MO по 1 x 5		
Пробные блоки		626600
MO 0		596825
MO 1		608450
MO 2		608451
IPS e.max ZirCAD for inLab C15 / MO по 1 x 25		
MO 0		602438
MO 1		608454
MO 2		608455
IPS e.max ZirCAD for inLab C15 L / MO по 1 x 5		
Пробные блоки		626601
MO 0		602439
MO 1		608458
MO 2		608459
IPS e.max ZirCAD for inLab C15 L / MO по 1 x 25		
MO 0		602440
MO 1		608462
MO 2		608463
IPS e.max ZirCAD for inLab B 40 / MO по 1 x 3		
Пробные блоки		626602
MO 0		596826
MO 1		608466
MO 2		608467



Форма поставки

IPS e.max ZirCAD for inLab B 40 / MO по 1 x 9

MO 0	602441
MO 1	608470
MO 2	608471

IPS e.max ZirCAD for inLab B 40 L / MO по 1 x 3

Пробные блоки	626603
MO 0	602442
MO 1	608474
MO 2	608475

IPS e.max ZirCAD for inLab B 40 L / MO по 1 x 9

MO 0	602443
MO 1	608478
MO 2	608479

IPS e.max ZirCAD for inLab B 55 / MO по 1 x 1

MO 0	605453
MO 1	608482
MO 2	608483

IPS e.max ZirCAD for inLab B 55 / MO по 1 x 3

MO 0	605454
MO 1	608486
MO 2	608487

IPS e.max ZirCAD for inLab B 65 / MO по 1 x 1

MO 0	605461
MO 1	608490
MO 2	608491

IPS e.max ZirCAD for inLab B 65 / MO по 1 x 3

MO 0	605462
MO 1	608494
MO 2	608495

IPS e.max ZirCAD for inLab B 65 L-17 / MO по 1 x 1

MO 0	605469
MO 1	608498
MO 2	608499

IPS e.max ZirCAD for inLab B 65 L-17 / MO по 1 x 3

MO 0	605470
MO 1	608502
MO 2	608503

IPS e.max ZirCAD for inLab B 85 L-22 / MO по 1 x 1

MO 0	605471
MO 1	608506
MO 2	608507

IPS e.max ZirCAD for inLab B 85 L-22 / MO по 1 x 3

MO 0	605472
MO 1	608510
MO 2	608511



Базовый набор IPS e.max® CAD for inLab® Basic Kit A-D *

Базовый набор IPS e.max CAD for inLab Basic Kit включает в себя блоки трех степеней транслюцентности, а также все необходимые принадлежности для работы в лаборатории с системой inLab фирмы Sirona. Поставляется в боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими наборами IPS e.max.



Форма поставки

Базовый набор IPS e.max CAD for inLab Basic Kit MO **626376**

Блоки IPS e.max CAD for inLab Blocks C 14 MO 1	1 x 5
Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab Blocks C 14 LT A1, LT A2	по 1 x 5
Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab Blocks C 14 HT A1, HT A2	по 1 x 5
Кристаллизационные красители IPS e.max CAD Crystall./Shade 1, 2, I1, I2	по 1 x 3 г
Кристаллизационные красители IPS e.max CAD Crystall./Stains белый, закат, хаки, красное дерево	по 1 x 1 г
Пастообразная глазурь IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste	1 x 3 г
Глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray	1 x 270 мл
Жидкость для глазури IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid	1 x 15 мл
Корректировочная масса IPS e.max CAD Crystall./Add-On	1 x 5 г
Жидкость для корректировочной массы IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid	1 x 15 мл
Лабораторный контрастный спрей IPS Contrast Spray Labside	1 x 200 мл
Лоток для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray	1 x
Фиксирующая паста (текучая) IPS Object Fix Flow	1 x 10 мл
Фиксирующая паста IPS Object Fix Putty	1 x 10 г
Протравочный гель, набор IPS Ceramic Etching Gel Kit	1 x
Тестовая упаковка OptraStick Test Pack	1 x
Различные кисточки	
Расцветка IPS e.max CAD MO	1 x
Расцветка IPS e.max Press / CAD LT	1 x
Расцветка IPS e.max Press / CAD HT	1 x

* IPS e.max CAD LT выпускается также для использования врачом-стоматологом.
См. каталог клинических продуктов.



Базовый набор IPS e.max® CAD-on for inLab® Basic Kit A-D

Базовый набор IPS e.max CAD-on for inLab Basic Kit содержит в себе блоки IPS e.max CAD HT (High Translucency – высокая прозрачность) В 40 и блоки IPS e.max ZirCAD MO (Medium Opacity – средняя opakовость) В 40 L, а также принадлежности, необходимые для применения техники CAD-on с системой Sirona inLab. Базовый набор поставляется в боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими наборами IPS e.max.



Форма поставки

Базовый набор IPS e.max CAD-on for inLab Basic Kit A-D 635528

Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab B 40 HT A1, HT A2	по 1 x 3
Блоки IPS e.max ZirCAD for inLab B40 L MO 1	1 x 3
Кристаллизационные красители IPS e.max CAD Crystall./Shade 1, I1	по 1 x 3 г
Кристаллизационные красители IPS e.max CAD Crystall./Stains белый, закат, красное дерево	по 1 x 1 г
Пастообразная глазурь IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste	1 x 3 г
Жидкость для глазури IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid	1 x 15 мл
Корректировочная масса IPS e.max CAD Crystall./Add-On Dentin	1 x 5 г
Жидкость для корректировочной массы IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid allround	1 x 15 мл
IPS e.max CAD Crystall./Add-On Connect	1 x 5 г
Жидкость IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid longlife	1 x 15 мл
Лоток для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray	1 x
Расцветка IPS e.max Press / CAD HT	1 x
IPS шпатель	1 x
Набор Ivomix Kit	1 x
Различные принадлежности	

Набор для кристаллизации IPS e.max® CAD Crystallization Kit

Содержит красители, глазурь и принадлежности для доработки реставраций IPS e.max CAD в «голубом» состоянии. Подходит только для тех клиентов, которые для вытачивания реставраций пользуются услугами авторизованных фрезеровальных центров.



Форма поставки

Набор для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Kit 628186

Кристаллизационные красители IPS e.max CAD Crystall./Shade 1, 2, I1	по 1 x 3 г
Кристаллизационные красители IPS e.max CAD Crystall./Stains белый, закат, красное дерево	по 1 x 1 г
Пастообразная глазурь IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste	1 x 3 г
Глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray	1 x 270 мл
Жидкость для глазури IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid	1 x 15 мл
Корректировочная масса режущего края IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal	1 x 5 г
Жидкость для корректировочной массы IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid	1 x 15 мл
Лоток для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray	1 x
Фиксирующая паста (текучая) IPS Object Fix Flow	1 x 10 мл
Фиксирующая паста IPS Object Fix Putty	1 x 10 г
Протравочный гель, набор IPS Ceramic Etching Gel Kit	1 x
Различные принадлежности	





Блоки IPS e.max® CAD for inLab® MO / C14

Выпускаются в цветах MO 0 – MO 4 (Medium Opacity – средняя opakовость) и по причине своей opakовости идеально подходят для изготовления каркасов на витальные или слегка измененные в цвете зубы. Блоки окрашены в соответствии с цветовыми группами, в некристаллизованном состоянии имеют синеватый оттенок.



Форма поставки

Блоки IPS e.max CAD for inLab MO C 14 по 1 x 5

MO 0	596797
MO 1	596798
MO 2	596799
MO 3	596800
MO 4	596801



Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® LT / I 12 и C 14 Blocks

Блоки в 16 цветах А–D и 4 цветах Bleach имеют повышенную транслюцентность по сравнению с блоками MO. Они оптимальны для изготовления полноанатомических реставраций (коронки) и работы техникой Cut-Back. Фрезеруются в системе CEREC или inLab фирмы Sirona. До кристаллизации блоки имеют голубоватый оттенок.



Форма поставки

Блоки PS e.max CAD for CEREC and inLab LT I 12

по 1 x 5

LT BL1	605338
LT BL2	605339
LT BL3	605340
LT BL4	605341
LT A1	605318
LT A2	605319
LT A3	605320
LT A3.5	605321
LT A4	626377
LT B1	605322
LT B2	605323
LT B3	605324
LT B4	626378
LT C1	626379
LT C2	605325
LT C3	626380
LT C4	626381
LT D2	626382
LT D3	605326
LT D4	626383

Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT C 14

по 1 x 5

LT BL1	605343
LT BL2	605344
LT BL3	605345
LT BL4	605346
LT A1	605328
LT A2	605329
LT A3	605330
LT A3.5	605331
LT A4	626384
LT B1	605332
LT B2	605333
LT B3	605334
LT B4	626385
LT C1	626386
LT C2	605335
LT C3	626387
LT C4	626388
LT D2	626389
LT D3	605336
LT D4	626390



Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® HT / I 12 и C 14 Blocks

Блоки HT по причине своей высокой транслюцентности идеально подходят для фрезерования полноанатомических реставраций (техника окрашивания) вкладок типа Inlay, Onlay, частичных коронок и виниров. Выпускаются в 16 цветах A–D и 4 цветах Bleach BL.



Форма поставки

Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab HT I 12

по 1 x 5

HT BL1	626423
HT BL2	626424
HT BL3	626425
HT BL4	626426
HT A1	626391
HT A2	626392
HT A3	626393
HT A3.5	626394
HT A4	626395
HT B1	626396
HT B2	626397
HT B3	626398
HT B4	626399
HT C1	626400
HT C2	626401
HT C3	626402
HT C4	626403
HT D2	626404
HT D3	626405
HT D4	626406

Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab HT C 14

по 1 x 5

HT BL1	626427
HT BL2	626428
HT BL3	626429
HT BL4	626430
HT A1	626407
HT A2	626408
HT A3	626409
HT A3.5	626410
HT A4	626411
HT B1	626412
HT B2	626413
HT B3	626414
HT B4	626415
HT C1	626416
HT C2	626417
HT C3	626418
HT C4	626419
HT D2	626420
HT D3	626421
HT D4	626422



Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® Impulse / C 14 Blocks

Блоки Impulse выпускаются в 5 цветах: три цвета Value (Value 1, 2, 3) и два цвета Opal (Opal 1, 2). Прежде всего, они подходят для изготовления (тонких) виниров, накладок, частичных и одиночных коронок. Благодаря различной светлоте (растущей от 1 до 3), блоки Value оптимально интегрируются в остаточные ткани зуба. Блоки Opal при уменьшающейся опалесцентности и одновременно растущей светлоте от 1 до 2 можно использовать как «замену эмали».



Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab Impulse C 14

по 1 x 5

Стартовые блоки	637798
Value 1	637795
Value 2	637796
Value 3	637797
Opal 1	637793
Opal 2	637794

Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® HT / B 40 Blocks

Блоки HT (High Translucency – высокая транслюцентность) B 40 применяются при изготовлении реставраций техникой CAD-on. Они выпускаются в 9 цветах A–D и 1 цвете Bleach BL. По причине своей транслюцентности эти блоки идеально подходят для изготовления реставраций CAD-on техникой окрашивания. Блоки обрабатываются в системе Sirona inLab и в некристаллизованном состоянии имеют голубой оттенок. Для характеристики и глазурования реставраций IPS e.max CAD-on могут применяться исключительно только красители IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains и глазурь.

Важное указание: изготовление мостовидных протезов из IPS e.max CAD HT без опоры на оксид циркония противопоказано!



Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab HT B40

по 1 x 3

HT BL2	634603
HT A1	634586
HT A2	634587
HT A3	634588
HT A3.5	634589
HT B1	634591
HT B2	634592
HT C1	634595
HT C2	634596
HT D2	634599



Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® LT / C 16 Blocks

Блоки IPS e.max CAD C 16 – это классика большего размера, эти блоки идеальны для создания больших монолитных коронок. Если блока C 14 недостаточно, блоки C 16 помогут решить проблему. Блоки C 16 используются для больших коронок (например, с опорой на имплантат). Они имеют низкую прозрачность LT (Low Translucency), выпускаются в девяти хорошо известных цветах A–D и цвете Bleach для отбеленных зубов



Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT C 16

по 1 x 5

LT BL2	648221
LT A1	648188
LT A2	648189
LT A3	648190
LT A3.5	648191
LT B1	648193
LT B2	648194
LT C1	648197
LT C2	648198
LT D2	648201

Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® LT / B32 Blocks

Длинные блоки IPS e.max CAD B 32 идеальны для монолитных мостовидных протезов из трех единиц. Блоки B 32 для изготовления мостовидных протезов из трех единиц во фронтальном и боковом отделах позволяют расширить возможности лечения в цепи цифровой обработки. Эти блоки имеют низкую прозрачность LT (Low Translucency), выпускаются в девяти хорошо известных цветах A–D и цвете Bleach для отбеленных зубов.



Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT B 32

по 1 x 3

LT BL2	648225
LT A1	648204
LT A2	648205
LT A3	648206
LT A3.5	648207
LT B1	648209
LT B2	648210
LT C1	648213
LT C2	648214
LT D2	648217



IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® Abutment Solutions: блоки MO A 14 и LT A 16

Блоки для изготовления гибридных реставраций на имплантаты на одиночные зубы технологией CAD/CAM. Блоки имеют отверстия (диаметр S и L) для титановых основ Ti-Base фирмы Sirona. Блоки IPS e.max CAD A 14 в 5 цветах MO (Medium Opacity – средняя opakовость) применяются для изготовления высокоэстетичных гибридных абатментов, а блоки IPS e.max CAD A 16 в 10 цветах LT (Low Translucency – низкая прозрачность) – для функциональных гибридных абатментов-коронки. Эти гибридные конструкции изготавливаются индивидуально из блоков диоксида лития (LS2) и склеиваются с титановой основой.



Форма поставки

Базовый набор	
IPS e.max CAD Abutment Solutions for CEREC and inLab Basic Kit	648187
Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab A14 (L) Цвет: MO 1	1 x 5 шт.
Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab A16 (L), Цвета: LT A1, LT A2	1 x 5 шт.
Набор для протравки IPS Ceramic Etching Gel Kit Monobond Plus	1 x 1 x 5 г
Фиксирующая паста текучая IPS Object Fix Flow	1 x 10 мл
Расцветка IPS e.max CAD MO	1 x
Расцветка IPS e.max Press/CAD LT	1 x
Различные принадлежности	

Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab MO A14 (S)	по 1 x 5
MO 0	644357
MO 1	644358
MO 2	644359
MO 3	644360
MO 4	644361
IPS e.max CAD for CEREC and inLab MO A14 (L)	по 1 x 5
MO 0	644362
MO 1	644363
MO 2	644364
MO 3	644365
MO 4	644366

IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT A16 (S)	по 1 x 5
LT BL2	645595
LT A1	644367
LT A2	644368
LT A3	644369
LT A3.5	644370
LT B1	644372
LT B2	644373
LT C1	644376
LT C2	644377
IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT A16 (L)	по 1 x 5
LT BL2	645599
LT A1	644383
LT A2	644385
LT A3	644386
LT A3.5	644387
LT B1	644389
LT B2	644390
LT C1	644393
LT C2	644394
LT D2	644397





Блоки IPS e.max® CAD for Everest® MO / C14 Blocks

Блоки в цветах MO 0 – MO 4 (Medium Opacity – средняя opakовость) благодаря своей opakовости идеально подходят для изготовления каркасов для витальных и слегка измененных в цвете зубов. Блоки окрашены в соответствии с групповыми цветами, до кристаллизации имеют голубоватый оттенок. Фрезеруются в системе Everest фирмы KaVo.



Форма поставки

IPS e.max CAD for Everest MO C 14	по 1 x 5
MO 0	596813
MO 1	596814
MO 2	596815
MO 3	596816
MO 4	596817



Блоки IPS e.max® CAD for Everest® LT / C14 Blocks

Блоки в 16 цветах А–D и 4 цветах Bleach имеют повышенную транслюцентность по сравнению с блоками MO. Они оптимальны для изготовления полноанатомических реставраций (коронки) и работы техникой Cut-Back. Фрезеруются в системе Everest фирмы KaVo. До кристаллизации блоки имеют голубоватый оттенок.



Форма поставки

Блоки IPS e.max CAD for Everest LT C14 по 1 x 5

LT BL1	605395
LT BL2	605396
LT BL3	605397
LT BL4	605398
LT A1	605380
LT A2	605381
LT A3	605382
LT A3.5	605383
LT A4	626440
LT B1	605384
LT B2	605385
LT B3	605386
LT B4	626441
LT C1	626442
LT C2	605387
LT C3	626443
LT C4	626444
LT D2	626445
LT D3	605388
LT D4	626446



Блоки IPS e.max® CAD for Everest® HT / C14 Blocks

Блоки HT по причине своей высокой транслюцентности идеально подходят для фрезерования полноанатомических реставраций (техника окрашивания) вкладок типа Inlay, Onlay, частичных коронок и виниров. Выпускаются в 16 цветах A–D и 4 цветах Bleach BL.



Форма поставки

Блоки IPS e.max CAD for Everest HT C14 по 1 x 5

HT BL1	626484
HT BL2	626485
HT BL3	626486
HT BL4	626487
HT A1	626464
HT A2	626465
HT A3	626466
HT A3.5	626467
HT A4	626468
HT B1	626469
HT B2	626470
HT B3	626471
HT B4	626472
HT C1	626473
HT C2	626474
HT C3	626475
HT C4	626476
HT D2	626477
HT D3	626478
HT D4	626479



Красители IPS e.max® CAD Crystall./Shades

Пастообразные красители для дентина оптимально согласованы для работы с IPS e.max CAD. Их можно наносить на реставрации в «голубом» состоянии, а также на уже кристаллизованные реставрации.



Форма поставки

Красители IPS e.max CAD Crystall./Shade	по 1 x 3 г
0	605348
1	605349
2	605350
3	605351
4	605352
11	605353
12	605354

Красители IPS e.max® CAD Crystall./Stains

Пастообразные интенсивные красители для воспроизведения естественных эффектов на реставрации. Оптимально согласованы для работы с IPS e.max CAD. Их можно наносить на реставрации в «голубом» состоянии, а также на уже кристаллизованные реставрации.



Форма поставки

Красители IPS e.max CAD Crystall./Stains	по 1 x 1 г
белый	605356
кремовый	605357
закат	605358
медь	605359
оливковый	605360
хаки	605361
красное дерево	605362

Пастообразная глазурь IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Paste

Специальная глазуровочная паста, которая была разработана для использования с полноанатомическими реставрациями IPS e.max CAD. Может наноситься перед кристаллизацией на «голубую» коронку или при последующем обжиге.



Форма поставки

Пастообразная глазурь IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste	1 x 3 г	605363

Глазурь-спрей IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Spray

Специальная глазурь-спрей, предназначенная для использования с полноанатомическими реставрациями IPS e.max CAD. Напыляется на поверхность после нанесения красителей IPS e.max CAD Crystall./Shades и Stains. Затем следует комбинированный кристаллизационный и глазуровочный обжиг.



Форма поставки

Глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray	1 x 270 мл	605364AN



Жидкость для глазури IPS e.max® CAD Crystall./ Glaze Liquid

Специальная жидкость для разведения красителей IPS e.max CAD Crystall./Shades и Stains, а также пастообразной глазури IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste.



Форма поставки

Жидкость для глазури
IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid 1 x 15 мл 605366

Корректировочная масса IPS e.max® CAD Crystall./ Add-On, Жидкость для корректировочной массы Add-On Liquid

Масса для корректировки проксимальных или окклюзионных контактных пунктов, а также области дентина. Можно наносить прямо при кристаллизационном обжиге или проводить последующий корректировочный обжиг.



Форма поставки

Корректировочная масса для дентина
IPS e.max CAD Crystall./Add-On Dentin 1 x 5 г 635549

Корректировочная масса режущего края
IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal 1 x 5 г 605365

Жидкость для корректировочной массы
IPS e.max CAD Crystall./Add-On
Liquid allround 1 x 15 мл 605569

Трегер и пины для кристаллизации IPS e.max® CAD Crystallization Tray, Pins

Трегер из нитрида кремния для кристаллизации реставраций IPS e.max CAD. Поставляемые в комплекте кристаллизационные пины необходимы при кристаллизации реставраций IPS e.max CAD.



Форма поставки

Трегер для кристаллизации
IPS e.max CAD Crystallization Tray 605367AN

Трегер из нитрида кремния
G Siliziumnitrid-Firing Tray G 1 x

Кристаллизационные пины
IPS e.max CAD (размеры: S, M, L) 9 x

Кристаллизационные пины
IPS e.max CAD Crystallization Pin Refill по 6 x
S / M / L 605368AN



Приведенные ниже продукты применяются исключительно только для базирующейся на технологии CAD/CAM техники изготовления реставраций CAD-on:

IPS e.max® CAD Crystall./Connect

IPS e.max CAD Crystall./Connect – это предварительно дозированная, готовая к использованию соединительная стеклокерамика, которая используется для создания гомогенного соединения каркаса из IPS e.max ZirCAD с облицовочной структурой IPS e.max CAD при соединительном/кристаллизационном обжиге при работе техникой IPS e.max CAD-on.

Соединительная стеклокерамика предлагается в девяти цветах. Смесь жидкость-порошок в прецизионно выверенном соотношении IPS e.max CAD Crystall./Connect при вибрации (Ivomix) становится текучей. Это позволяет провести замешивание и выполнить процесс соединения с помощью прибора Ivomix. Без механического воздействия (вибрации) материал IPS e.max CAD Crystall./Connect снова затвердевает, благодаря чему становится возможной проверка готовой соединенной реставрации в артикуляторе.



Форма поставки

IPS e.max CAD Crystall./Connect	по 10 x 6,5 г	
1		634606
2		634607
3		634608
4		634609
5		634610
6		634611
7		634612
8		634613
9		634614

Корректировочная масса IPS e.max® CAD Crystall./ Add-On Connect, Жидкость для корректировочной массы Add-On Liquid

Подходит для корректировки места соединения в случае применения техники IPS e.max CAD-on после проведения соединительного/кристаллизационного обжига.



Форма поставки

IPS e.max CAD Crystall./Add-On Connect	1 x 5 г	635644
IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid longlife	1 x 15 мл	635550



Базовый набор IPS e.max® Ceram Basic Kit

Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit содержит ходовые дентиновые цвета (8 x A–D / 10 x Chromascop), соответствующие массы режущего края, а также все необходимые для работы принадлежности. Базовый набор поставляется в боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими наборами IPS e.max.



Форма поставки

Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit A–D 591388

Дентин IPS e.max Ceram Dentin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3	по 1 x 20 г
Транспа-масса режущего края IPS e.max Ceram Transpa Incisal TI 1, TI 2, TI 3	по 1 x 20 г
Транспа-масса IPS e.max Ceram Transpa нейтральная, прозрачная	по 1 x 20 г
Корректировочная масса IPS e.max Ceram Add-On дентин, режущего края	по 1 x 20 г
Жидкости IPS e.max Ceram Build-Up Liquid (allround, soft)	по 1 x 60 мл
Пастообразная глазурь IPS e.max Ceram Glaze Paste	1 x 3 г
Пастообразная глазурь FLUO IPS e.max Ceram Glaze Paste FLUO	1 x 3 г
Жидкости для глазури и красителей IPS e.max Ceram Glaze and Stain Liquid (allround, longlife)	по 1 x 15 мл
Силер для моделей IPS Model Sealer	1 x 50 мл
Сепарационная жидкость для керамики с брашем IPS Ceramic Separating Liquid with Brush	1 x 15 мл
Расцветка дентинов IPS e.max Ceram Dentin A–D	1 x
Расцветка масс режущего края	1 x

Базовый набор IPS e.max Ceram Basic Kit Chromascop 596828

Дентин IPS e.max Ceram Dentin 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510	по 1 x 20 г
Масса режущего края IPS e.max Ceram Incisal I 1, I 2, I 3	по 1 x 20 г
Транспа-масса IPS e.max Ceram Transpa нейтральная, прозрачная	по 1 x 20 г
Корректировочная масса IPS e.max Ceram Add-On дентин, режущего края	по 1 x 20 г
Жидкость IPS e.max Ceram Build-Up Liquid (allround, soft)	по 1 x 60 мл
Пастообразная глазурь IPS e.max Ceram Glaze Paste	1 x 3 г
Пастообразная глазурь FLUO IPS e.max Ceram Glaze Paste FLUO	1 x 3 г
Жидкость для глазури и красителей IPS e.max Ceram Glaze and Stain Liquid (allround, longlife)	по 1 x 15 мл
Силер для моделей IPS Model Sealer	1 x 50 мл
Сепарационная жидкость для керамики с брашем IPS Ceramic Separating Liquid with Brush	1 x 15 мл
Расцветка масс режущего края IPS e.max Ceram Incisal/Transpa	1 x
Расцветка Chromascop	1 x

Стартовый набор IPS e.max® Ceram Trial Kit (A2)

Стартовый набор IPS e.max Ceram Trial Kit содержит массы и жидкости IPS e.max Ceram в маленьких упаковках. С помощью этого набора можно выполнить первые облицовки IPS e.max.



Форма поставки

Стартовый набор IPS e.max Ceram Trial Kit A2 605474

IPS e.max Ceram ZirLiner (1)	1 x 5 г
Плечевая масса IPS e.max Ceram Margin (A2)	1 x 5 г
Дип-дентин IPS e.max Ceram Deep Dentin (A2)	1 x 5 г
Дентин IPS e.max Ceram Dentin (A2)	1 x 5 г
Транспа-масса режущего края IPS e.max Ceram Transpa Incisal (TI 1)	1 x 5 г
Транспа-масса (прозрачная) IPS e.max Ceram Transpa (clear)	1 x 5 г
Опаловые эффект-массы IPS e.max Ceram Opal Effect (1, 3)	по 1 x 5 г
Окклюзионный дентин (оранжевый) IPS e.max Ceram Occlusal Dentin	1 x 5 г
Мамелоновая масса IPS e.max Ceram Mamelon (светлая)	1 x 5 г
Красители IPS e.max Ceram Essence (белый, закат, красное дерево)	по 1 x 5 г
Краситель IPS e.max Ceram Shade (1)	1 x 3 г
Пастообразная глазурь IPS e.max Ceram Glaze Paste	1 x 3 г
Жидкость IPS e.max Ceram ZirLiner Build-Up Liquid (allround)	1 x 15 мл
Жидкость IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid (allround)	1 x 15 мл
Жидкость IPS e.max Ceram Build-Up Liquid (allround)	1 x 15 мл
Жидкость для глазури и красителей IPS e.max Ceram Glaze and Stain Liquid	1 x 15 мл



Набор циркониевых подслоев IPS e.max® Ceram ZirLiner Kit

Циркониевый подслои IPS e.max Ceram ZirLiner применяется при напрессовывании материалов IPS e.max ZirPress, а также при облицовке материалами IPS e.max Ceram. Он обеспечивает чрезвычайно надежное соединение с каркасом из оксида циркония и придает белому и непрозрачному каркасу окраску, обеспечивая натуральную глубину цвета.



Форма поставки

Набор циркониевых подслоев IPS e.max Ceram ZirLiner Kit		596830
Циркониевый подслои IPS e.max Ceram ZirLiner ZL clear, ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4	по 1 x 5 г	
Интенсивный подслои IPS e.max Ceram Intensiv ZirLiner IZL желтый, IZL оранжевый, IZL коричневый, IZL режущего края	по 1 x 5 г	
Жидкость для подслоя IPS e.max Ceram ZirLiner Build-Up Liquid	1 x 60 мл	
Расцветка циркониевых подслоев IPS e.max Ceram ZirLiner	1 x	

Набор плечевых масс IPS e.max® Ceram Margin Kit

В наборе объединены плечевые массы с естественной флюоресцентностью шейки зуба, которые служат для создания керамических уступов на каркасах IPS e.max ZirCAD. В состав набора входят ходовые цвета (8 x A–D / 10 x Chromascop), соответствующие интенсивные массы, а также необходимые жидкости.



Форма поставки

Набор плечевых масс IPS e.max Ceram Margin Kit A–D		596832
Плечевые массы IPS e.max Ceram Margin A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3	по 1 x 20 г	
Интенсивные плечевые массы IPS e.max Ceram Intensiv Margin оранжевый, оранжево-розовый, желтый, желто-зеленый	по 1 x 20 г	
Корректировочная масса IPS e.max Ceram Add-On плечевая	1 x 20 г	
Плечевой силер IPS Margin Sealer	1 x 20 мл	
Жидкости для плечевых масс IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid (allround, carving)	2 x 60 мл	
Расцветка плечевых масс IPS e.max Ceram Margin A–D Набор плечевых масс	1 x	
IPS e.max Ceram Margin Kit Chromascop		596831
Плечевые массы IPS e.max Ceram Margin 130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510	по 1 x 20 г	
Интенсивные плечевые массы IPS e.max Ceram Intensiv Margin оранжевый, оранжево-розовый, желтый, желто-зеленый	по 1 x 20 г	
Корректировочная масса IPS e.max Ceram Add-On плечевая	1 x 20 г	
Плечевой силер IPS Margin Sealer	1 x 20 мл	
Жидкости для плечевых масс IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid (allround, carving)	2 x 60 мл	
Расцветка плечевых масс IPS e.max Ceram Margin	1 x	



Набор дип-дентинов IPS e.max® Ceram Deep Dentin Kit

Набор дип-дентинов с живой флюоресцентностью, повышенной опаковостью и насыщенностью цвета позволяет создать основной цвет зуба даже при работе очень тонкими слоями, а реставрации благодаря естественности цвета имеют эстетичный внешний вид. В состав набора входят ходовые цвета (8 x A–D / 10 x Chromascop).



Форма поставки

Набор дип-дентинов

IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit A–D **596834**

Дип-дентин IPS e.max Ceram Deep Dentin **по 1 x 20 г**

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D3

Расцветка дип-дентинов **1 x**

IPS e.max Ceram Deep Dentin A–D

Набор дип-дентинов

IPS e.max Ceram Deep Dentin Chromascop **596833**

Дип-дентин IPS e.max Ceram Deep Dentin **по 1 x 20 г**

130, 140, 210, 220, 230, 310, 320, 410, 420, 510

Расцветка дип-дентинов **1 x**

IPS e.max Ceram Deep Dentin

Набор импульсных масс IPS e.max® Ceram Impulse Kit

Набор импульсных масс IPS e.max Ceram Impulse составлен по аналогии с другими облицовочными материалами фирмы Ivoclar Vivadent. В общей сложности выпускается 22 импульсных массы для выполнения различных индивидуализаций.



Форма поставки

Набор импульсных масс

IPS e.max Ceram Impulse Kit **596835**

Окклюзионный дентин **по 1 x 20 г**

IPS e.max Ceram Impulse Occlusal Dentin

оранжевый, коричневый

Импульсная мамелоновая масса **по 1 x 20 г**

IPS e.max Ceram Impulse Mamelon

светлый, желто-оранжевый, лососевый

Импульсная опаловая эффект-масса **по 1 x 20 г**

IPS e.max Ceram Impulse Opal Effect

OE 1, OE 2, OE 3, OE 4, OE 5, фиолетовый

Импульсная транспа-масса **по 1 x 20 г**

IPS e.max Ceram Impulse Transpa

синий, коричнево-серый, оранжево-серый

Импульсная масса кромки режущего края **1 x 20 г**

IPS e.max Ceram Impulse Incisal Edge

Специальная импульсная **по 1 x 20 г**

масса режущего края

IPS e.max Ceram Impulse Special Incisal

желтый, серый

Импульсная масса режущего края **1 x 20 г**

IPS e.max Ceram Impulse Inter Incisal

бело-голубой

Импульсная пришеечная транспа-масса **по 1 x 20 г**

IPS e.max Ceram Impulse Cervical Transpa

желтый, оранжево-розовый, хаки, оранжевый

Расцветка импульсных масс **1 x**

IPS e.max Ceram Impulse



Набор порошковых красителей

IPS e.max® Ceram Essence Kit

19 порошкообразных красителей Essence с эффектом «один за всех», применяются для внутренних характеристик, смешивания с другими порошкообразными материалами IPS e.max Ceram и/или окончательного наружного окрашивания поверхности реставрации.



Форма поставки

Набор красителей

IPS e.max Ceram Essence Kit **596836**

Красители IPS e.max Ceram Essence **по 1 x 5 г**
 белый, кремовый, лимон, закат, медь, орех, оливковый, хаки, изумрудный, терракотовый, красное дерево, капучино, эспрессо, землистый, профундо, океан, сапфир, антрацит, черный

Порошкообразная глазурь **1 x 5 г**
 IPS e.max Ceram Glaze Powder

Флюоресцирующая порошкообразная глазурь **1 x 5 г**
 IPS e.max Ceram Glaze Powder FLUO

Жидкости для глазури и красителей **по 1 x 15 мл**

IPS e.max Ceram Glaze and Stain Liquid (allround, longlife)

Расцветка красителей **1 x**
 IPS e.max Ceram Essence

Набор красителей

IPS e.max® Ceram Shade Kit

7 пастообразных красителей для окончательной корректировки цвета (5 дентиновых цветов и 2 цвета режущего края). Красители Shade могут применяться и с массами по расцветке A–D, и с массами цветов Chromascop.



Форма поставки

Набор красителей IPS e.max Ceram Shade Kit **596837**

Красители IPS e.max Ceram Shade **по 1 x 3 г**
 0, 1, 2, 3, 4, I 1, I 2

Пастообразная глазурь **1 x 3 г**
 IPS e.max Ceram Glaze Paste

Флюоресцирующая пастообразная глазурь **1 x 3 г**
 IPS e.max Ceram Glaze Paste FLUO

Жидкость для глазури и красителей **по 1 x 15 мл**
 IPS e.max Ceram Glaze and Stain Liquid (allround, longlife)



Набор ультрасветлых цветов IPS e.max® Ceram Bleach Kit BL

Новый набор ультрасветлых цветов IPS e.max Bleach Kit содержит плечевые массы, дип-дентины, дентины, массу режущего края и порошкообразную корректировочную массу Add-on-Pulver для создания особенно светлых реставраций в четырех новых современных ультрасветлых цветах Bleach BL.



Форма поставки

Набор ультрасветлых цветов

IPS e.max Ceram Bleach Kit	602450
Плечевая масса IPS e.max Ceram Margin BL1, BL4	по 1 x 20 г
Дип-дентин IPS e.max Ceram Deep Dentin BL1, BL4	по 1 x 20 г
Дентин IPS e.max Ceram Dentin BL1, BL2, BL3, BL4	по 1 x 20 г
Масса режущего края IPS e.max Ceram Incisal BL	1 x 20 г
Корректировочная масса IPS e.max Ceram Add-On BL	1 x 20 г
Шаблон IPS e.max Ceram Bleach BL Shade Guide	1 x
Bleach Modul BL	1 x

Набор десневых масс IPS e.max® Ceram Gingiva Kit

Двенадцать десневых керамических масс и один лайнер для создания «живой» десны, прежде всего при выполнении имплантологических работ. Пять десневых масс, которые используются в сочетании с четырьмя интенсивными десневыми массами (Intensiv Gingiva) и тремя порошкообразными красителями Essence, в зависимости от пожеланий пациента. При работе с оксидом циркония используется десневой подслой IPS e.max Ceram ZirLiner Gingiva.



Форма поставки

Набор десневых масс

IPS e.max Ceram Gingiva Kit	602316
Циркониевый десневой подслой IPS e.max Ceram ZirLiner Gingiva	1 x 5 г
Десневая масса IPS e.max Ceram Gingiva 1, 2, 3, 4, 5	по 1 x 20 г
Интенсивная десневая масса IPS e.max Ceram Intensive Gingiva 1, 2, 3, 4	по 1 x 20 г
Красители IPS e.max Ceram Essence розовый, ягода, фиолетовый	по 1 x 5 г
Расцветка IPS e.max Ceram Gingiva Shade Guide	1 x



Циркониевый подслей IPS e.max® Ceram ZirLiner

– Циркониевый подслей IPS e.max Ceram ZirLiner 1–4

Придает белому каркасу из оксида циркония цветовой оттенок и выравнивает цвет каркаса до основного цвета заготовки и/или блока (средней упаковки) IPS e.max Press и IPS e.max CAD.



– Циркониевый подслей прозрачный IPS e.max Ceram ZirLiner clear

Используется для окрашенных каркасов из оксида циркония, ультрасветлых цветов Bleach, а также для смешивания с интенсивным циркониевым подслоем IPS e.max Ceram Intensiv ZirLiner.



– Интенсивный циркониевый подслей IPS e.max Ceram Intensiv ZirLiner

желтый, оранжевый, коричневый и режущего края для усиления цвета, идущего из глубины реставрации.



Форма поставки

Циркониевый подслей IPS e.max Ceram ZirLiner	по 1 x 5 г	
1		596839
2		596840
3		596841
4		596842
Прозрачный		596843

Циркониевый подслей IPS e.max Ceram ZirLiner	по 1 x 20 г	
1		605492
2		605493
3		605494
4		605495
Прозрачный		609434

Интенсивный циркониевый подслей IPS e.max Ceram Intensiv ZirLiner	по 1 x 5 г	
желтый		596845
оранжевый		596846
коричневый		596847
режущего края		596848

Плечевые массы IPS e.max® Ceram Margin

– Плечевые массы IPS e.max Ceram Margin (A–D / Chromascop)

с естественной флюоресцентностью шейки зуба, служат для создания керамических уступов на каркасах IPS e.max ZirCAD. Благодаря разнице в температуре обжига с массами дентина и режущего края имеют высокую стабильность при обжиге.

– Интенсивные плечевые массы IPS e.max Ceram Intensiv Margin

С помощью четырех интенсивных плечевых масс IPS e.max Ceram Intensiv Margin индивидуально формируется область керамического уступа. Например, с помощью интенсивной плечевой массы желто-зеленого цвета очень хорошо можно имитировать оголенные шейки зуба.



Форма поставки

Плечевые массы IPS e.max Ceram Margin Chromascop	по 1 x 20 г	
110		596852
120		596853
130		596854
140		596855
210		596856
220		596857
230		596858
240		596859
310		596860
320		596861
330		596862
340		596863
410		596864
420		596865
430		596866
440		596867
510		596868
520		596869
530		596870
540		596871

Плечевые массы IPS e.max Ceram Margin A–D	по 1 x 20 г	
A1		596873
A2		596874
A3		596875
A3.5		596876
A4		596877
B1		596878
B2		596879
B3		596880
B4		596881
C1		596882
C2		596883
C3		596884
C4		596885
D2		596886
D3		596887
D4		596888

Интенсивные плечевые массы IPS e.max Ceram Intensiv Margin	по 1 x 20 г	
оранжевый		596890
оранжево-розовый		596891
желтый		596892
желто-зеленый		596893



Дип-дентин IPS e.max® Ceram Deep Dentin (A–D / Chromascop)

Дип-дентины IPS e.max Ceram Deep Dentin с живой флюоресцентностью, повышенной opakовостью и насыщенностью цвета позволяют создать основной цвет зуба даже при работе очень тонкими слоями, а реставрации благодаря естественности цвета имеют эстетичный внешний вид. Они также служат для усиления насыщенности цвета, а также для создания гармоничного цветового перехода от промежуточной части мостовидного протеза к десневой части, от десны к шейке зуба.



Форма поставки

Дип-дентин IPS e.max Ceram

Deep Dentin Chromascop	по 1 x 20 г
110	596897
120	596898
130	596899
140	596900
210	596901
220	596902
230	596903
240	596904
310	596905
320	596906
330	596907
340	596908
410	596909
420	596910
430	596911
440	596912
510	596913
520	596914
530	596915
540	596916

Дип-дентин IPS e.max Ceram

Deep Dentin A–D	по 1 x 20 г
A1	596918
A2	596919
A3	596920
A3.5	596921
A4	596922
B1	596923
B2	596924
B3	596925
B4	596926
C1	596927
C2	596928
C3	596929
C4	596930
D2	596931
D3	596932
D4	596933



Дентин IPS e.max® Ceram Dentin (A-D / Chromascop)

Дентиновые массы IPS e.max Ceram Dentin созданы таким образом, что позволяют легко и достоверно воспроизвести цвет зуба независимо от каркасного материала. Высокая стабильность и отличная моделируемость обеспечивают быстрое и несложное наложение.



Форма поставки

Дентин IPS e.max Ceram Dentin Chromascop		по 1 x 20 г
110		596937
120		596938
130		596939
140		596940
210		596941
220		596942
230		596943
240		596944
310		596945
320		596946
330		596947
340		596948
410		596949
420		596950
430		596951
440		596952
510		596953
520		596954
530		596955
540		596956

Дентин IPS e.max Ceram Dentin A-D		по 1 x 20 г
A1		596958
A2		596959
A3		596960
A3.5		596961
A4		596962
B1		596963
B2		596964
B3		596965
B4		596966
C1		596967
C2		596968
C3		596969
C4		596970
D2		596971
D3		596972
D4		596973

Дентин IPS e.max Ceram Dentin A-D		по 1 x 100 г
A1		605497
A2		605498
A3		605499
A3.5		605500
A4		605501
B1		605502
B2		605503
B3		605504
B4		605505
C1		605506
C2		605507
C3		605508
C4		605509
D2		605510
D3		605511
D4		605512



Масса режущего края/ Транспа-масса режущего края

IPS e.max® Ceram Incisal/ Transpa Incisal

Масса режущего края IPS e.max Ceram Incisal и транспа-масса режущего края Transpa Incisal обладают легкой флюоресцентностью и опалесцентностью, свойственными эмали живых зубов. Высокая стабильность и отличная моделируемость позволяют точно воспроизводить все нюансы рельефа режущего края и жевательной поверхности.



Форма поставки

Масса режущего края IPS e.max Ceram Incisal		по 1 x 20 г
1		596975
2		596976
3		596977
Транспа-масса режущего края IPS e.max Ceram Transpa Incisal		по 1 x 20 г
1		596979
2		596980
3		596981
Транспа-масса режущего края IPS e.max Ceram Transpa Incisal		по 1 x 100 г
1		605514
2		605515
3		605516

Транспа-масса IPS e.max® Ceram Transpa

Неокрашенные транспа-массы выпускаются двух степеней прозрачности. В зависимости от пожеланий врача и требований пациента транспа-массы можно использовать в чистом виде либо смешивать их с другими массами.



Форма поставки

Транспа-масса IPS e.max Ceram Transpa		по 1 x 20 г
прозрачная		596998
нейтральная		596999
Транспа-масса IPS e.max Ceram Transpa		по 1 x 100 г
прозрачная		605518
нейтральная		605519

Импульсная масса окклюзионного дентина IPS e.max® Ceram Impulse Occlusal Dentin

Окклюзионные дентины выпускаются двух различных цветов. Они являются цветовой основой жевательной поверхности и служат для усиления насыщенности цвета.



Форма поставки

Импульсная масса окклюзионного дентина IPS e.max Ceram Impulse Occlusal Dentin		по 1 x 20 г
оранжевый		596983
коричневый		596984



Импульсная мамелоновая масса IPS e.max® Ceram Impulse Mamelon

Мамелоновые массы выпускаются в трех различных цветах. Обладают высокой опаковостью и отличной маскирующей способностью даже при нанесении тонкими слоями. В зависимости от предпочтений в работе могут наноситься на редуцированный дентин, благодаря чему создается индивидуальный рисунок режущей трети реставрации.



Форма поставки

Импульсная мамелоновая масса

IPS e.max Ceram Impulse Mamelon по 1 x 20 г

светлый	596986
желто-оранжевый	596987
лососевый	596988

Импульсная масса кромки режущего края IPS e.max® Ceram Impulse Incisal Edge

Служит для воспроизведения эффекта ореола (так называемый Halo-Effekt), который проявляется у живых зубов при преломлении света на режущем крае.



Форма поставки

Импульсная масса кромки режущего края

IPS e.max Ceram Impulse Incisal Edge 1 x 20 г 596996

Импульсная опаловая эффект-масса IPS e.max® Ceram Impulse Opal Effect

Опаловые эффект-массы выпускаются в шести цветах. Начиная с опаловой эффект-массы 1 (Opal Effect 1) с повышенной опалесцентностью и одновременно высокой прозрачностью, постепенно возрастает светлость эффект-масс с Opal Effect 2 до Opal Effect 4. Эффект-масса Opal Effect 5 имеет типичный опаловый цвет. Эффект-масса «фиолетовая» служит для уменьшения светлости в области режущего края.



Форма поставки

Импульсные опаловые эффект-массы

IPS e.max Ceram Impulse Opal Effect по 1 x 20 г

1	596990
2	596991
3	596992
4	596993
5	596994
фиолетовый	596995



Импульсная транспа-масса IPS e.max® Ceram Impulse Transpa

Транспа-массы выпускаются в трех цветовых оттенках. С их помощью точно воспроизводятся прозрачные области, особенно в области режущего края.



Форма поставки

Импульсная транспа-масса

IPS e.max Ceram Impulse Transpa по 1 x 20 г

голубой	597000
коричнево-серый	597001
оранжево-серый	597002

Специальная импульсная масса режущего края IPS e.max® Ceram Impulse Special Incisal

Специальная импульсная масса режущего края служит для усиления интенсивности области режущего края. Ее можно наносить промежуточным слоем между дентином и массой режущего края, а можно класть отдельным слоем.



Форма поставки

Специальная импульсная масса режущего края

IPS e.max Ceram Impulse Special Incisal по 1 x 20 г

желтый	597004
серый	597005

Импульсная масса режущего края Inter IPS e.max® Ceram Impulse Inter Incisal

Масса режущего края Inter – это специальная масса режущего края, которая используется при очень светлом оттенке режущего края или для усиления светлости области режущей трети, когда место сильно ограничено.



Форма поставки

Импульсная масса режущего края Inter

IPS e.max Ceram Impulse Inter Incisal 1 x 20 г

бело-голубой	597006
--------------	--------



Импульсная пришеечная транспа-масса IPS e.max® Ceram Impulse Cervical Transpa

С помощью этих окрашенных транспа-масс в пришеечной трети достигается эффект глубины цвета, присущий живым зубам. В отличие от традиционных транспа-масс, эти массы обладают повышенной флюоресцентностью.



Ультрасветлые массы IPS e.max® Ceram Bleach BL

10 керамических масс для создания очень светлых реставраций. Плечевые массы и дип-дентины в двух, дентин в четырех новых цветах Bleach BL1 – BL4. Кроме того, в этой группе выпускается одна масса режущего края и одна корректировочная масса Add-On.



Десневые массы IPS e.max® Ceram Gingiva

Двенадцать десневых керамических масс для создания «живой» десны, прежде всего при выполнении имплантологических работ. Пять десневых масс, которые могут быть использованы в сочетании с четырьмя интенсивными десневыми массами (Intensiv Gingiva) и тремя порошкообразными красителями Essence, в зависимости от пожеланий пациента. При работе с оксидом циркония используется десневой подслой IPS e.max Ceram ZirLiner Gingiva.



Форма поставки

Импульсная пришеечная транспа-масса

IPS e.max Ceram Impulse Cervical Transpa по 1 x 20 г

желтый	597008
оранжево-розовый	597009
хаки	597010
оранжевый	597011

Форма поставки

Плечевая масса

IPS e.max Ceram Bleach BL Margin по 1 x 20 г

BL1	602452
BL4	602453

Дип-дентин

IPS e.max Ceram Bleach BL Deep Dentin по 1 x 20 г

BL1	602454
BL4	602455

Дентин

IPS e.max Ceram Bleach BL Dentin по 1 x 20 г

BL1	602456
BL2	602457
BL3	602458
BL4	602459

Масса режущего края

IPS e.max Ceram Bleach BL Incisal BL 1 x 20 г 602460

Корректировочная масса

IPS e.max Ceram Bleach BL Add-On BL 1 x 20 г 602461

Форма поставки

Десневой циркониевый подслой

IPS e.max Ceram ZirLiner Gingiva 1 x 5 г 605475

Красители

IPS e.max Ceram Essence по 1 x 5 г

20 розовый	605477
21 ягода	605478
22 баклажан	605479

Десневые массы

IPS e.max Ceram Gingiva по 1 x 20 г

1	605481
2	605482
3	605483
4	605484
5	605485

Интенсивные десневые массы

IPS e.max Ceram Intensive Gingiva по 1 x 20 г

1	605487
2	605488
3	605489
4	605490



Порошкообразные красители IPS e.max® Ceram Essence

19 порошкообразных красителей Essence с эффектом «1 за 3», применяются для внутренних характеристик, смешивания с другими порошкообразными материалами IPS e.max Ceram и для окончательного наружного окрашивания поверхности реставрации. Порошок очень высокой дисперсности, в зависимости от цвета обладает флюоресцентностью в большей или меньшей степени.



Форма поставки

Красители IPS e.max Ceram Essence по 1 x 5 г

01 белый	597013
02 кремовый	597014
03 лимон	597015
04 закат	597016
05 медь	597017
06 орех	597018
07 оливковый	597019
08 хаки	597020
09 изумрудный	597021
10 терракотовый	597022
11 красное дерево	597023
12 капучино	597024
13 эспрессо	597025
14 землистый	597026
15 профундо	597027
16 океан	597028
17 сапфир	597029
18 антрацит	597030
19 черный	597031

Красители IPS e.max® Ceram Shade

- **5 красителей IPS e.max Ceram Shades** в цветах A–D и Chromascop служат для окончательной корректировки цвета реставраций IPS e.max, а также используются при грунтовочном обжиге Wash.
- **2 красителя режущего края IPS e.max Ceram Shades Incisal** в первую очередь предназначаются для полноанатомических реставраций (например, IPS e.max ZirPress). Служат для имитации режущего края и придают режущей трети оптическую прозрачность и эффект глубины.



Форма поставки

Красители IPS e.max Ceram Shade по 1 x 3 г

0	597033
1	597034
2	597035
3	597036
4	597037
11	597038
12	597039



Глазурь IPS e.max® Ceram Glaze

– Глазурь IPS e.max Ceram Glaze выпускается в уже зарекомендовавшей себя пастообразной форме, а также в виде порошка. Глазурь наносится на все поверхности реставрации, облицованные материалом IPS e.max Ceram; благодаря облицовочному материалу готовая реставрация имеет достаточную флюоресценцию.



– Флюоресцентная глазурь IPS e.max Ceram Glaze FLUO точно так же выпускается в пастообразной форме и в виде порошка. Флюоресцирующая глазурь применяется, прежде всего, на поверхностях, не облицованных материалом IPS e.max Ceram, либо на каркасном материале с низкой или отсутствующей флюоресцентностью, который моделируется в полной анатомической форме или частично редуцируется.



– Глазурь-спрей IPS e.max Ceram Glaze Spray

Для быстрого и простого глазурования полноанатомических прессованных/фрезерованных или облицованных реставраций IPS e.max (нельзя использовать на блоках IPS e.max CAD в «голубом», некристаллизованном состоянии).



Форма поставки

Пастообразная глазурь		
IPS e.max Ceram Glaze Paste	по 1 x 3 г	597041
Флюоресцентная пастообразная глазурь		
Glaze Paste FLUO		597042
Порошкообразная глазурь		
IPS e.max Ceram Glaze Powder	по 1 x 5 г	597044
Флюоресцентная порошкообразная глазурь		
Glaze Powder FLUO		597045
Глазурь-спрей IPS e.max Ceram		
Glaze Spray	1 x 120 мл (270 мл)	609433AN

Корректировочные массы IPS e.max® Ceram Add-On

Корректировочные массы IPS e.max Ceram Add-On выпускаются в трех цветах. В зависимости от потребности можно выбрать цвет и опакость плечевой массы, дентина и массы режущего края. С помощью окрашенных корректировочных масс выполнять корректировки еще проще.



Форма поставки

Корректировочная масса	
IPS e.max Ceram Add-On	по 1 x 20 г
Плечевая масса	597047
Дентин	597048
Масса режущего края	597049



Моделировочная жидкость для циркониевого подслоя IPS e.max® Ceram ZirLiner Build-Up Liquid

Моделировочная жидкость для циркониевого подслоя IPS e.max Ceram ZirLiner Build-Up Liquid allround служит исключительно для замешивания порошка циркониевого подслоя IPS e.max Ceram ZirLiner. Жидкость придает подслою ZirLiner кремообразную и пластичную консистенцию и позволяет легко и эффективно наносить подслои. Если необходима другая консистенция, жидкость можно смешивать в произвольном соотношении с другими жидкостями IPS e.max Ceram.



Форма поставки

Моделировочная жидкость

IPS e.max Ceram ZirLiner Build-Up Liquid 1 x 60 мл

allround	597050
----------	--------

Моделировочная жидкость для плечевых масс IPS e.max® Ceram Margin Build-Up Liquid

Моделировочные жидкости для плечевых масс IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid выпускаются в двух вариантах:

- жидкость allround Liquid многостороннего применения, консистенция подходит для традиционной работы с плечевыми массами с последующим подсушиванием.
- жидкость для техники гравировки (carving Liquid) характеризуется тем, что замешанный с ней порошок имеет очень короткое рабочее время. После высыхания порошок твердеет. Созданному таким образом плечу можно придать желаемую форму, «гравирюя» его подходящим инструментом.



Форма поставки

Моделировочные жидкости для плечевых масс

IPS e.max Ceram Margin Build-Up Liquid по 1 x 60 мл

allround	597052
carving	597053



Моделировочная жидкость IPS e.max® Ceram Build-Up Liquid

Моделировочные жидкости IPS e.max Ceram Build-Up Liquids выпускаются в двух вариантах:

- жидкость allround Liquid многостороннего применения, консистенция подходит для традиционной работы с последующим подсушиванием.
- порошки, замешанные с жидкостью soft Liquid, имеют укороченное рабочее время.



Форма поставки

Моделировочные жидкости

IPS e.max Ceram Build-Up Liquid по 1 x 60 мл

allround	597055
soft	597056

Моделировочные жидкости

IPS e.max Ceram Build-Up Liquid по 1 x 250 мл

allround	605521
soft	605522

Жидкость для глазури и красителей IPS e.max® Ceram Glaze and Stain Liquid

Жидкость для глазури и красителей IPS e.max Ceram Glaze and Stain Liquids выпускается в двух вариантах:

- жидкость allround Liquid многостороннего применения, консистенция подходит для традиционной работы. Порошок, замешанный с жидкостью allround, имеет укороченное рабочее время (примерно 1/2 дня).
- в противоположность предыдущей, жидкость longlife Liquid обеспечивает пастообразную консистенцию, и замешанный с ней порошок имеет более длительное рабочее время (примерно 1 неделю).



Форма поставки

Жидкость для глазури и красителей

IPS e.max Ceram Glaze and Stain Liquid по 1 x 15 мл

allround	597058
longlife	597059

Стартовый набор муфельной системы IPS® 300 г Starter Kit

Стартовый набор муфельной системы IPS Investment Ring System 300 г Starter Kit объединяет все компоненты, необходимые для прессования реставраций большой протяженности или большого количества маленьких реставраций. Подходит для напрессовывания на каркасы из оксида циркония (материала IPS e.max ZirPress) и металлические каркасы (IPS InLine PoM).



Форма поставки


Стартовый набор муфельной системы

IPS 300 г Starter Kit	614491AN
IPS Муфельный цоколь 300 г	1 x
IPS Ограничитель 300 г	1 x
IPS Силиконовое кольцо 300 г	1 x
Одноразовый поршень 300 г (28 мм)	10 x
IPS щипцы для заготовок	1 x
Шаблон IPS Sprue Guide 300 г	1 x

Муфельная система IPS

Муфельная система IPS состоит из муфельного цоколя и ограничителя и служит для штифтования смоделированных реставраций. Для того, чтобы ее было легче отличать от муфельной системы IPS Empress, муфельная система IPS окрашена в серый цвет.

Муфельная система 100 г и 200 г применяется для IPS e.max Press, ZirPress и InLine PoM, 300 г – только для IPS ZirPress и IPS InLine PoM.

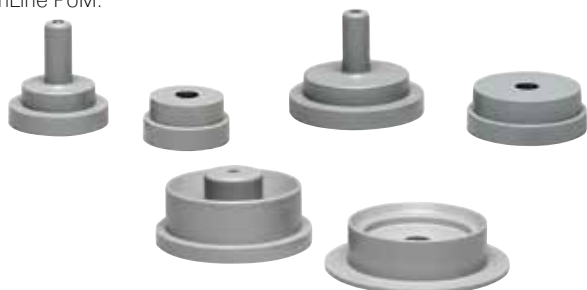

Форма поставки

Муфельная система IPS

Муфельный цоколь	Ограничитель		
100 г		3 x 1	597060
200 г		3 x 1	597061
300 г		1 x 1	614490

Силиконовые кольца IPS®

Силиконовые кольца применяются и для муфельной системы IPS Empress, и для муфельной системы IPS.



Форма поставки

Силиконовое кольцо IPS Silicone Ring по 1 x

100 г	590113 AN
200 г	590114 AN
300 г	614492

Стержень из оксида алюминия IPS Alox Plunger

С помощью стержня из оксида алюминия IPS керамическая заготовка в размягченном состоянии прессуется в полость опоки. Стержень имеет больший диаметр и несколько короче, чем стержень из оксида алюминия системы IPS Empress, а поэтому подходит исключительно только для муфельных систем IPS на 100 г и 200 г. Стержень имеет скругленную форму с обеих сторон, поэтому его можно применять для прессования с обеих сторон. Является изделием многоразового использования.



Форма поставки

Стержень из оксида алюминия IPS Alox Plunger	2 x	597062
---	------------	---------------

Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS Alox Plunger Separator

Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS Alox Plunger Separator препятствует прилипанию прессовочных заготовок к стержню во время процесса прессования и охлаждения в опоке. Холодный стержень помещается в выемку емкости с сепаратором и поворачивается. Порошок остается на поверхности и схватывается, образуя разделительный слой. Незначительного количества сепаратора полностью хватает для этой операции.



Форма поставки

Сепаратор для стержня из оксида алюминия IPS Alox Plunger Separator	1 x 200 мг	597063
--	-------------------	---------------

Цанги для заготовок IPS® Ingot Tongs

Цанги для заготовок IPS Ingot Tongs применяются для помещения нескольких заготовок для прессования в муфель на 300 г.



Форма поставки

Цанги для заготовок IPS Rohlingszange	1 x	614498
--	------------	---------------

Жидкость IPS e.max® Press Invex Liquid

Жидкость IPS e.max Press Invex (Investment-Ex) Liquid служит для размягчения реакционного слоя, возникающего во время прессования на каркасах IPS e.max Press и ZirPress.



Форма поставки

Жидкость IPS e.max Press Invex Liquid	1 x 1 л	597064
--	----------------	---------------

Емкость (пустая) IPS e.max Press Invex Dose	1 x	628336
--	------------	---------------

Жидкость IPS e.max Press Invex Liquid	1 x 50 мл	630539
--	------------------	---------------

Расцветки IPS e.max® Press/ IPS e.max® CAD

Расцветки материалов Press и CAD помогают при определении цвета. Образцы имеют цвет материала после прессования или кристаллизации, т.е. уже конечный цвет. Они служат для контроля цвета, а в случае реставраций из IPS e.max CAD их можно использовать дополнительно для контроля качества кристаллизации.



Расцветки IPS e.max® Ceram

Расцветки IPS e.max Ceram являются неотъемлемой частью концепции материала.

Для естественного преломления света образцам дентиновой расцветки была придана анатомическая форма и созданы структуры на поверхности. Все остальные образцы имеют слегка клиновидную форму для лучшей иллюстрации полупрозрачности отдельных масс. Во избежание путаницы с расцветками других материалов (например, IPS d.SIGN, IPS InLine, SR Adoro) стержни и держатели расцветок IPS e.max Ceram имеют светло-серый цвет.



Упаковка IPS e.max®

Бокс для материалов IPS e.max и поролоновые вкладыши являются оптимальным средством для хранения материалов IPS e.max в лаборатории.



Форма поставки

Расцветка IPS e.max Press HO/MO	1 x	597065
Расцветка IPS e.max CAD MO	1 x	597067
Расцветка IPS e.max Press / IPS e.max CAD LT	1 x	605523
Расцветка IPS e.max Press / IPS e.max CAD HT	1 x	613998
Расцветка IPS e.max Press / CAD Impulse	1 x	637799

Форма поставки

Расцветки IPS e.max Ceram	по 1 x	
Расцветка циркониевых подслоев IPS e.max Ceram ZirLiner		597069
Расцветка плечевых масс IPS e.max Ceram Margin Chromascop		597070
Расцветка плечевых масс IPS e.max Ceram Margin A-D		597071
Расцветка дип-дентинов IPS e.max Ceram Deep Dentin Chromascop		597072
Расцветка дип-дентинов IPS e.max Ceram Deep Dentin A-D		597073
Расцветка дентинов IPS e.max Ceram Dentin Chromascop		597275
Расцветка дентинов IPS e.max Ceram Dentin A-D		597276
Расцветка масс режущего края IPS e.max Ceram Incisal/Transpa		597074
Расцветка импульсных масс IPS e.max Ceram Impulse		597075
Расцветка красителей IPS e.max Ceram Essence		597076
Расцветка ультрасветлых цветов IPS e.max Ceram Bleach BL		602463
Расцветка десневых масс IPS e.max Ceram Gingiva		602464

Форма поставки

Упаковка IPS e.max

Бокс для материалов малый IPS e.max Material-Box small (55 мм)	1 x	597483
Бокс для материалов средний IPS e.max Material-Box medium (80 мм)	1 x	597484
Вкладыш на 22 баночки 20 г IPS e.max Ceram Insert (for 22 refills)	1 x	597485
Вкладыш IPS e.max Ceram Shade Insert (для 16 Refills + 2 Liquids)	1 x	635843
Вкладыш IPS e.max Ceram Essence Insert (для 21 Refills + 2 Liquids)	1 x	635844
Вкладыш на 24 шт. IPS e.max Press/ZirPress Insert (for 24 refills)	1 x	607668
Вкладыш на 6 шт. IPS e.max CAD/ZirCAD Insert (for 6 refills)	1 x	614248

Система IPS Empress®

20 лет назад керамика IPS Empress внесла коренные изменения в наши представления об обработке керамики и, благодаря многочисленным преимуществам лейцитной стеклокерамики, прежде всего, превосходной эстетичности, керамика IPS Empress по праву стала «золотым стандартом» в стоматологическом мире. Свыше 33 миллионов готовых реставраций IPS Empress свидетельствуют о безусловном успехе и высоком уровне качества этого материала.

Наряду с уже зарекомендовавшей себя и полюбившейся техникой прессования в области цельнокерамических конструкций развивалась технология CAD/CAM. Система IPS Empress объединяет продукты для обеих этих технологий, поскольку наряду с IPS Empress Esthetic сегодня предлагаются блоки IPS Empress CAD для технологии CAD/CAM.



Доверие
Надежность
Эстетика



IPS Empress®* CAD

*Мировой лидер в сегменте безметалловой керамики

 Система IPS Empress		
ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ CAD/CAM	СТОМАТОЛОГИ
<p>IPS Empress Esthetic</p>  <p>Керамические реставрации, выполненные в лаборатории</p>	<p>IPS Empress CAD</p>  <p>Керамические реставрации, выполненные в лаборатории или в кабинете стоматолога</p>	<p>IPS Empress Direct</p>  <p>Прямые реставрации</p>

Базовый набор IPS Empress® Esthetic Basic Kit

Базовый набор IPS Empress Esthetic Basic Kit содержит все заготовки, а также необходимые принадлежности. Базовый набор поставляется в боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими наборами IPS Empress.



Форма поставки

Базовый набор IPS Empress Esthetic Basic Kit		602466
заготовки IPS Empress Esthetic E T1, E T2, E O1, E O2, E O3, E OC1, E TC0, E TC1, E TC2, E TC3, E TC4, E TC5	по 1 x 5	
цоколь муфельной системы; 100 г IPS Empress		1 x
цоколь муфельной системы; 200 г IPS Empress		1 x
силиконовое кольцо 100 г IPS Silicone Ring		1 x
силиконовое кольцо 200 г IPS Silicone Ring		1 x
стержень из оксида алюминия IPS Empress Alox Kolben		2 x
фиксирующая паста (текучая) IPS Object Fix Flow	1 x 10 мл	
контрольный шаблон 100 г IPS Sprue Guide		1 x
контрольный шаблон 200 г IPS Sprue Guide		1 x
универсальный трепер IPS UniTray		1 x
расцветка заготовок IPS Empress Esthetic Ingots		1 x

Заготовки IPS Empress® Esthetic

Заготовки IPS Empress Esthetic выпускаются в 12 цветах и 7 различных степенях транслюцентности. Слегка окрашенные заготовки TC сводят к минимуму необходимость окрашивания и являются универсальными для всех показаний. Кроме того, существует шесть цветов, которые подходят для изготовления вкладок Inlay и виниров.



Форма поставки

Заготовки IPS Empress Esthetic		по 1 x 5
E T1		574553
E T2		574554
E O1		574555
E O2		574556
E O3		599604
E TC1		574557
E TC2		574522
E TC3		574559
E TC4		574560
E TC5		574561
E TC0		574562
E OC1		574563
Заготовки IPS Empress Esthetic		по 2 x 5
E T1		574511
E T2		574512
E O1		574513
E O2		574514
E O3		599605
E TC1		574515
E TC2		574516
E TC3		574517
E TC4		574518
E TC5		574519
E TC0		574520
E OC1		574521

Базовый набор IPS Empress® CAD для inLab® Basic Kit

Базовый набор содержит блоки различных форм в ходовых цветах А-D, а также необходимые принадлежности, такие как IPS лабораторный контрастный спрей Labside. Таким образом, в наборе есть все необходимое для оснащения рабочего процесса. Набор поставляется в новом боксе для материалов, благодаря которому можно компактно дооснастить свое рабочее место другими наборами керамики, например, IPS e.max.



Стартовый набор IPS Empress® CAD for inLab Trial Kit

Стартовый набор Trial Kit содержит небольшое количество блоков различных форм цветов А-D, а также красители и массы для наложения IPS Empress Esthetic Veneer. Таким образом, стартовый набор Trial Kit содержит все необходимое для начала работы с реставрациями IPS Empress CAD.



Форма поставки

Базовый набор

IPS Empress CAD для inLab Basic Kit A-D 602477

Блоки IPS Empress CAD для CEREC и inLab Blocks HT I12 HT A1, HT A2, HT A3, HT B1	по 1 x 5
Блоки IPS Empress CAD для CEREC и inLab Blocks LT C14 LT BL2, LT A1, LT A2, LT A3, LT B1	по 1 x 5
Мультиблоки IPS Empress CAD для CEREC и inLab Blocks Multi C14 L Multi A1, Multi A2, Multi A3	по 1 x 5
Лабораторный контрастный спрей IPS Contrast Spray Labside	1 x 200 мл
Фиксирующая паста (текучая) IPS Object Fix Flow	1 x 10 мл
Расцветка IPS Empress CAD	1 x
Bleach Modul BL	1 x

Форма поставки

Стартовый набор

IPS Empress CAD for inLab Trial Kit A-D 602481

Блоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab Block HT I10 HT A1, HT A2	по 1 x 1
Блоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab Block HT I12 HT A1, HT A2, HT A3	по 1 x 1
Блоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab Block LT I12 LT A1, LT A2	по 1 x 1
Блоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab Block LT C14 LT A1, LT A2, LT A3	по 1 x 1
Мультиблоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab Block Multi C14 Multi A1, Multi A2	по 1 x 1
Мультиблоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab Block Multi C14 L Multi A1, Multi A2	по 1 x 1
Пасты Wash IPS Empress Esthetic Veneer Wash Paste нейтральная, MM светло-лососевая, MM желто-оранжевая	по 1 x 1 г
Опаловая масса режущего края IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal high translucent (очень прозрачная), low translucent (слабо прозрачная)	по 1 x 5 г
Универсальные красители IPS Empress Universal Shade A2/A3/A3.5	1 x 3 г
Универсальный краситель режущего края IPS Empress Universal Shade Incisal 1	1 x 3 г
Универсальные красители IPS Empress Universal Stains белый, красное дерево	по 1 x 1 г
Универсальная глазуровочная паста IPS Empress Universal Glaze Paste	1 x 3 г
Универсальная жидкость для глазури и красителей IPS Empress Universal Glaze and Stain Liquid	1 x 5 мл
Моделировочная жидкость IPS Empress Esthetic Veneer Build-Up Liquid	1 x 5 мл

Блоки IPS Empress® CAD for CEREC® and inLab® HT (High Translucency – высокая транслюцентность)

По причине своей высокой транслюцентности блоки HT идеально подходят для выполнения небольших реставраций (например, вкладки Inlay/Onlay), при изготовлении которых необходимо создать естественный эффект «хамелеон».



Форма поставки

Блоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab HT Blocks Chromascope

по 1 x 5

100 / I 8	602484
200 / I 8	602485
300 / I 8	602486
100 / I 10	602488
200 / I 10	602489
300 / I 10	602490
100 / I 12	602492
200 / I 12	602493
300 / I 12	602494

Блоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab HT Blocks A-D

по 1 x 5

A1 / I 8	602500
A2 / I 8	602501
A3 / I 8	602502
A3.5 / I 8	602503
B1 / I 8	602504
B2 / I 8	602505
B3 / I 8	602506
C2 / I 8	602507
D3 / I 8	602508
A1 / I 10	602510
A2 / I 10	602511
A3 / I 10	602512
A3.5 / I 10	602513
B1 / I 10	602514
B2 / I 10	602515
B3 / I 10	602516
C2 / I 10	602517
D3 / I 10	602518
A1 / I 12	602520
A2 / I 12	602521
A3 / I 12	602522
A3.5 / I 12	602523
B1 / I 12	602524
B2 / I 12	602525
B3 / I 12	602526
C2 / I 12	602527
D3 / I 12	602528

Блоки IPS Empress® CAD for CEREC® and inLab® LT (Low Translucency – низкая транслюцентность)

Эти блоки отличаются светлой тональностью и живым цветом, поэтому они идеально подходят для изготовления реставраций больших размеров.



Форма поставки

Блоки IPS Empress CAD for CEREC

IPS Empress CAD for CEREC and inLab LT Blocks Chromascop	по 1 x 5	
100 / I 10		602531
200 / I 10		602532
300 / I 10		602533
100 / I 12		602535
200 / I 12		602536
300 / I 12		602537
100 / C 14		602539
200 / C 14		602540
300 / C 14		602541

Блоки IPS Empress CAD for CEREC

IPS Empress CAD for CEREC and inLab LT Blocks A-D	по 1 x 5	
A1 / I 10		602547
A2 / I 10		602548
A3 / I 10		602549
A3.5 / I 10		602550
B1 / I 10		602551
B2 / I 10		602552
B3 / I 10		602553
C2 / I 10		602554
D3 / I 10		602555
A1 / I 12		602557
A2 / I 12		602558
A3 / I 12		602559
A3.5 / I 12		602560
B1 / I 12		602561
B2 / I 12		602562
B3 / I 12		602563
C2 / I 12		602564
D3 / I 12		602565
A1 / C 14		602567
A2 / C 14		602568
A3 / C 14		602569
A3.5 / C 14		602570
B1 / C 14		602571
B2 / C 14		602572
B3 / C 14		602573
C2 / C 14		602574
D3 / C 14		602575

Блоки IPS Empress CAD for CEREC

IPS Empress CAD for CEREC and inLab LT Blocks Bleach BL	по 1 x 5	
BL1 / I 10		602577
BL2 / I 10		602578
BL3 / I 10		602579
BL4 / I 10		602580
BL1 / I 12		602582
BL2 / I 12		602583
BL3 / I 12		602584
BL4 / I 12		602585
BL1 / C 14		602587
BL2 / C 14		602588
BL3 / C 14		602589
BL4 / C 14		602590

Мультиблоки IPS Empress® CAD for CEREC® and inLab® Multi Blocks

Мультиблоки имеют естественный переход цвета от дентина к режущему краю. Выпускаются в 5 ходовых цветах A-D и 2 цветах Bleach VL. Даже без индивидуальной характеристики эти блоки оптимальны для изготовления одиночных и частичных коронок, а также виниров.



Форма поставки

Мультиблоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab Multi Blocks по 1 x 5

BL1 / I12	607681
BL3 / I12	607682
A1 / I 12	602592
A2 / I 12	602593
A3 / I 12	602594
A3.5 / I 12	602595
B1 / I 12	602596
BL1 / C14	607683
BL3 / C14	607684
A1 / C 14	602598
A2 / C 14	602599
A3 / C 14	602600
A3.5 / C 14	602601
B1 / C 14	602602
BL1 / C 14 L	607672
BL3 / C 14 L	607673
A1 / C 14 L	602604
A2 / C 14 L	602605
A3 / C 14 L	602606
A3.5 / C 14 L	602607
B1 / C 14 L	602608

Пробные блоки IPS Empress® CAD for CEREC® and inLab®

Три пробных блока IPS Empress CAD в цвете A2 (HT, LT, Multi).



Форма поставки

Пробные блоки IPS Empress CAD for CEREC and inLab 603417

IPS Empress CAD for CEREC and inLab HT A2 / I12	1 x 1
IPS Empress CAD for CEREC and inLab LT A2 / C 14	1 x 1
IPS Empress CAD for CEREC and inLab Multi A2 / C 14 L	1 x 1

Набор универсальных красителей IPS Empress® Universal Shade/Stains Kit (Chromascop и A-D)

Наборы красителей IPS Empress Universal Shade/Stains Kits объединяют в себе ходовые красители для дентина и интенсивные красители. С помощью красителей выполняются индивидуальные эффекты на поверхности реставрации. Для заключительного глазурирования реставраций IPS Empress в вашем распоряжении находится тонкозернистая глазурировочная паста нежной консистенции.



Форма поставки

Набор универсальных красителей

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit Chromascop	по 1 x 3 г	602468
Универсальные красители IPS Empress Universal Shade 110/120, 130, 140/210, 220/230, 310, 410/420	по 1 x 3 г	
Универсальные красители режущего края IPS Empress Universal Shade Incisal I1, I2	по 1 x 3 г	
Универсальные красители IPS Empress Universal Stains белый, оранжевый, красное дерево, хаки, темно-бордовый	по 1 x 1 г	
Универсальная глазурировочная паста IPS Empress Universal Glaze Paste	1 x 3 г	
Универсальная жидкость для глазури и красителей IPS Empress Universal Glaze and Stain Liquid (L)	1 x 15 мл	
Пинцет	1 x	
Моделировочная кисточка	1 x	

Набор универсальных красителей

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit A-D	по 1 x 3 г	602469
Универсальные красители IPS Empress Universal Shade A1, A2/A3/A3,5, B1, B2/B3/B4, C1/C2, D2/D3	по 1 x 3 г	
Универсальные красители режущего края IPS Empress Universal Shade Incisal I1, I2	по 1 x 3 г	
Универсальные красители IPS Empress Universal Stains белый, оранжевый, красное дерево, хаки, темно-бордовый	по 1 x 1 г	
Универсальная глазурировочная паста IPS Empress Universal Glaze Paste	1 x 3 г	
Универсальная жидкость для глазури и красителей IPS Empress Universal Glaze and Stain Liquid (L)	1 x 15 мл	
Пинцет	1 x	
Моделировочная кисточка	1 x	

Универсальные красители IPS Empress® Universal Shades

Универсальные красители IPS Empress Universal Shades выпускаются в 9 цветах A-D и 15 цветах Chromascop. Они применяются для точного воспроизведения цвета по расцветкам A-D и Chromascop.



Форма поставки

Универсальные красители

IPS Empress Universal Shade Chromascop	по 1 x 3 г	
110 / 120	562457	
130	562462	
140 / 210	562458	
220 / 230	562459	
240	562463	
310	562464	
320	562465	
330	562466	
340	562467	
410 / 420	562460	
430 / 440	562461	
510	562468	
520	562469	
530	562470	
540	562471	

Универсальные красители

IPS Empress Universal Shade A-D	по 1 x 3 г	
A1	562472	
A2 / A3 / A3,5	562473	
A4	562474	
B1	562475	
B2 / B3 / B4	562476	
C1 / C2	562477	
C3 / C4	562478	
D2 / D3	562479	
D4	562480	

Универсальные красители режущего края IPS Empress® Universal Shades Incisal

Две пасты особенно хорошо подходят для полноанатомических реставраций. Они служат для оформления режущего края и придают инцизальной трети оптическую прозрачность и глубину.



Универсальные красители IPS Empress® Universal Stains

Эти интенсивные красители выпускаются в 14 различных цветах. Они используются для создания различных эффектов. С помощью трех дополнительных цветов (базовый синий, базовый красный и базовый желтый) можно индивидуально создавать оттенки цветов.



Универсальная глазуровочная паста IPS Empress® Universal Glaze Paste и Универсальная жидкость для глазури и красителей Glaze and Stain Liquid

Универсальная глазуровочная паста служит для глазурования всех реставраций IPS Empress (Esthetic и CAD). Универсальная жидкость для глазури и красителей служит для регулирования консистенции универсальных красителей IPS Empress Universal Shade, IPS Empress Universal Stains и глазури IPS Empress Universal Glaze.



Форма поставки

**Универсальные красители режущего края
IPS Empress Universal Shade Incisal по 1 x 3 г**

I1	602471
I2	602472

Форма поставки

**Универсальные красители
IPS Empress Universal Stains по 1 x 1 г**

белый	562481
черный	562482
красное дерево	562483
хаки	562484
оранжевый	562485
серый	562486
ваниль	562487
имитация трещины	562488
оливковый	562489
желтый	562490
базовый синий	562491
базовый желтый	562492
базовый красный	562493
темно-бордовый	562494

Форма поставки

**Универсальная глазуровочная паста
IPS Empress Universal Glaze Paste 1 x 3 г 562495**

**Универсальная жидкость для глазури и красителей
IPS Empress Universal Glaze
and Stain Liquid 1 x 15 мл 562496**

Универсальная глазурь-спрей IPS Empress® Universal Glazespray

Служит для быстрого и простого глазурования полноанатомических (индивидуализированных) реставраций IPS Empress (Esthetic и CAD). Используется также для глазурования реставраций, облицованных массами IPS Empress Esthetic Veneer.

Форма поставки

Универсальная глазурь-спрей
IPS Empress

Universal Glaze Spray 1 x 120 мл (270 мл) 609432AN



Набор IPS Empress® Veneer Kit

Набор IPS Empress Veneer Kit объединяет ходовые пасты Wash и облицовочные массы (техника редуцирования Cut-Back) для реставраций IPS Empress (Esthetic и CAD). С помощью паст Wash создается превосходное равномерное соединение с редуцированной реставрацией. Лейцитные массы для наложения имеют флюоресцентность, схожую с флюоресцентностью режущего края живого зуба, и естественную опалесцентность.



Пасты Wash IPS Empress® Esthetic Veneer Wash-Pasten

С помощью шести стандартных паст Wash создается индивидуальная характеристика прессованных/редуцированных реставраций. Идеальное соответствие цветовых нюансов позволяет создавать реставрации на высочайшем эстетическом уровне. С помощью пяти модификаторов Wash-Paste Modifiers (медь, оранжевый, небесный синий, базовый желтый, базовый красный) можно индивидуально окрасить шесть стандартных паст Wash.



Опаловая масса режущего края IPS Empress® Esthetic Veneer Incisal Opal

Опаловые массы предлагаются в трех степенях транслюцентности (low/низкая, medium/средняя и high/высокая).



Форма поставки

Набор IPS Empress Veneer Kit		602467
Пасты Wash IPS Empress Esthetic Veneer Wash-Pasten	по 1 x 1 г	
нейтральный, Low Value, High Value, ММ светло-лососевый, ММ желто-оранжевый, ММ красно-оранжевый		
Опаловая масса режущего края IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal	по 3 x 20 г	
low translucent – низкая транслюцентность, medium translucent – средняя транслюцентность, high translucent – высокая транслюцентность		
Масса режущего края IPS Empress Esthetic Veneer Incisal белый	1 x 20 г	
Транспа-масса IPS Empress Esthetic Veneer Transpa нейтральный, голубой	по 1 x 20 г	
Корректировочная масса IPS Empress Add-On 770°C/1418°F	1 x 20 г	
Моделировочная жидкость IPS Empress Esthetic Veneer Build-Up Liquid	1 x 60 мл	
Универсальная глазуровочная паста IPS Empress Universal Glaze Paste	1 x 3 г	
Универсальная жидкость для глазури и красителей IPS Empress Universal Glaze and Stain Liquid	1 x 15 мл	
Фиксирующая паста (текучая) PS Object Fix Flow	1 x 10 мл	
расцветка IPS Empress Esthetic Veneer	1 x	
Пинцет	1 x	
Моделировочная кисточка	1 x	

Форма поставки

Пасты Wash IPS Empress Esthetic Veneer Wash Pasten		по 1 x 1 г
нейтральный		579406
low value		579407
high value		579408
ММ светло-лососевый		579409
ММ желто-оранжевый		579410
ММ красновато-оранжевый		579411
Модификатор Modifier медь		579412
Модификатор Modifier оранжевый		579413
Модификатор Modifier небесный синий		579414
Модификатор Modifier базовый желтый		579415
Модификатор Modifier базовый красный		579416

Форма поставки

Опаловая масса режущего края IPS Empress Esthetic Veneer Incisal Opal		по 1 x 20 г
Низкая транслюцентность (low translucent)		579388
Средняя транслюцентность (medium translucent)		579389
Высокая транслюцентность (high translucent)		579390

Масса режущего края IPS Empress® Esthetic Veneer Incisal

Массы режущего края Incisal представлены в шести цветовых оттенках (белый, серый, оранжевый, кромки, желтый, оранжево-розовый) и служат для дополнительной характеристики области режущего края.



Форма поставки

Массы режущего края

IPS Empress Esthetic Veneer Incisal по 1 x 20 г

белый	579391
серый	579392
оранжевый	579393
кромки	579394
желтый	579397
оранжево-розовый	579398

Модификатор цвета IPS Empress® Esthetic Veneer Chroma Modifier

Усиливает глубину цвета прессованных/редуцированных реставраций, выпускается в цветах 110/A1 и 210/A3.



Форма поставки

Модификатор цвета

IPS Empress Esthetic Veneer

Chroma Modifier

по 1 x 20 г

110/A1	579395
210/A3	579396

Осветлитель IPS Empress® Esthetic Veneer Brightener

Используется для повышения светлой тональности реставрации.



Форма поставки

Осветлитель

IPS Empress Esthetic Veneer Brightener 1 x 20 г 579399

Прозрачные массы IPS Empress® Esthetic Veneer Transparent

Окрашенные прозрачные массы выпускаются в двух цветовых оттенках (голубой и нейтральный).



Форма поставки

Прозрачные массы

IPS Empress Esthetic Veneer Transpa по 1 x 20 г

голубой	579400
нейтральный	579401

Корректировочная масса IPS Empress® Add-On 770°C / 1418°F

Низкотемпературная корректировочная масса для последующих корректировок, например, аппроксимальных и окклюзионных контактных пунктов на реставрациях:

- IPS Empress Esthetic
- IPS Empress, выполненных техникой наслоения



Форма поставки

Корректировочная масса
IPS Empress Add-On 770°C/1418°F 1 x 20 г 564080

Моделировочная жидкость IPS Empress® Esthetic Veneer Build-Up Liquid

Моделировочная жидкость служит для замешивания облицовочных масс IPS Empress Esthetic Veneer и корректировочной массы IPS Empress Add-On 770 °C/1418 °F.



Форма поставки

Моделировочная жидкость
IPS Empress Esthetic Veneer
Build-Up Liquid 1 x 60 мл 579405

Муфельная система IPS Empress®

Муфельная система служит для штифтования смоделированных реставраций. Муфельная система на 100 г применяется для одиночных реставраций, муфельная система на 200 г – для нескольких одиночных реставраций. По причине различных диаметров заготовок для прессования и стержней из оксида алюминия муфельная система IPS Empress подходит только для материалов системы IPS Empress System.



Силиконовые кольца IPS® Silicone Ring

- IPS Силиконовое кольцо на 100 г для муфельной системы IPS Empress и IPS e.max, 100 г
- IPS Силиконовое кольцо на 200 г для муфельной системы IPS Empress и IPS e.max, 200 г



Стержень из оксида алюминия IPS Empress® Alox Plunger

С помощью стержня из оксида алюминия IPS Empress керамическая заготовка в размягченном состоянии прессуется в полость опоки. Стержень имеет меньший диаметр и несколько длиннее, чем стержень из оксида алюминия системы IPS e.max, а поэтому подходит исключительно только для муфельных систем IPS Empress.



Одноразовый поршень IPS Empress® One-Way Plunger

С помощью одноразового поршня керамическая заготовка IPS Empress Esthetic в размягченном состоянии прессуется в полость опоки. Одноразовые поршни IPS Empress-One-Way Plunger предназначены для одноразового применения. Они работают и с системой на 100 г, и с системой на 200 г.



Форма поставки

Муфельная система IPS Empress Investment Ring System		
Цоколь	3 x	
Ограничитель паковки	3 x	
100 г		554034
200 г		554035

Форма поставки

Силиконовое кольцо IPS Silicone Ring по 1 x		
Малое		590113AN
Большое		590114AN

Форма поставки

Стержень из оксида алюминия IPS Empress Alox Plunger		
	2 x	554070

Форма поставки

Одноразовый поршень IPS Empress One-Way Plunger		
	50 x	614500

Расцветка IPS Empress® Esthetic

Эта расцветка позволяет определить цвет реставрации IPS Empress Esthetic еще до прессования. Шаблоны показывают цвет соответствующей заготовки после прессования. Во избежание перекрестной инфекции между пациентами отдельные пластинки, а также всю расцветку можно автоклавируют.



Форма поставки

Расцветка заготовок

IPS Empress Esthetic Ingots 1 x 579403

Расцветка

IPS Empress Esthetic Veneer 1 x 579404

Расцветка IPS Empress® CAD HT/LT A-D/ BL

Расцветка показывает цвета материалов IPS Empress CAD, выпускаемых в цветах A-D и Bleach BL.



Форма поставки

Расцветка IPS Empress CAD HT/LT A-D/BL 1 x 603418

Упаковка IPS Empress®

Бокс для материалов IPS Empress и поролиновые вкладыши являются оптимальным средством для хранения материалов IPS Empress в лаборатории и клинике.



Форма поставки

Упаковка IPS Empress

Бокс для материалов малый
IPS Empress Material-Box small (55 мм) 602990

Вкладыш IPS Empress Esthetic Ingot Insert 1 x 30 602989

Вкладыш на 15 шт. IPS Empress
CAD Block Insert (for 15 Refills) 1 x 602988

Вкладыш на 21 шт.
IPS Empress Universal Shade/Stains Insert
(for 21 Refills) 1 x 609450

CosmoPost®

С помощью корневого штифта из оксида циркония CosmoPost в сочетании с реставрацией из материалов IPS Empress можно полностью выполнить безметалловую реставрацию зубов после эндодонтического лечения. Это особенно важно для пациентов, придающих большое значение эстетике. Штифт CosmoPost зрительно высветляет зуб, благодаря этому реставрация не выглядит серой.

Преимущества:

- превосходная эстетика
- отсутствие металла
- биологическая совместимость
- рентгеноконтрастность
- оттисковый штифт, который одновременно является временным штифтом
- возможен прямой метод работы



Форма поставки

CosmoPost Refill

Штифт CosmoPost 1,4 мм	1 x 5	549402
Штифт CosmoPost 1,7 мм	1 x 5	549403
Оттисковый штифт 1,4 мм	1 x 5	562812
Оттисковый штифт 1,7 мм	1 x 5	562813
CosmoPost Развертка 1,4 мм красная	1 x	572712
CosmoPost Развертка 1,7 мм черная	1 x	572713

Заготовки IPS Empress® Cosmo

Заготовка IPS Empress Cosmo из керамики, содержащей оксид циркония, для индивидуального восстановления культи разрабатана в соответствии с корневым штифтом CosmoPost.



Преимущества:

- биологическая совместимость
- точность
- стабильность формы
- полупрозрачность
- привычное использование с системой IPS Empress

Форма поставки

Заготовка IPS Empress Cosmo	1 x 10	549405
-----------------------------	--------	--------







IPS AcrylCAD®

IPS AcrylCAD – это выгораемый акрилат-полимерный блок, который используется вместо моделировочного воска. Блоки подходят для автоматизированного изготовления частей формы, которые формируются программным обеспечением системы CAD/CAM. Благодаря своей окраске материал дает хороший контраст на модели. Выточенные в системе inLab® фирмы Sirona формы либо запаковываются и отливаются в металлический каркас или прессуются в керамику (например, IPS e.max Press).



Форма поставки

IPS AcrylCAD for inLab B 40 L	1 x 3 блока	614863
	1 x 9 блока	614865

Паковочная масса	IPS Empress		IPS e.max		IPS InLine
	IPS Empress Cosmo	IPS Empress Esthetic	IPS e.max Press	IPS e.max ZirPress	IPS InLine PoM
Температура прессования	900 °C	1075 °C	915–930 °C	900–910 °C	940–950 °C
IPS PressVEST					
 Порошок – 2,5 кг 595592AN – 5 кг 595594AN	✓	✓	✓	✓	✓
 Жидкость – 500 мл 595588 – 1 л 595589	✓	✓	✓	✓	✓
IPS PressVEST Speed					
 Порошок – 2,5 кг 595590AN – 5 кг 595591AN	✓	—	✓	✓	✓
 Жидкость – 500 мл 595586 – 1 л 595587	✓	—	✓	✓	✓
IPS Empress Esthetic Speed					
 Порошок – 2,5 кг 579309AN	—	✓	—	—	—
 Жидкость – 500 мл 579308	—	✓	—	—	—

Паковочная масса IPS Empress® Esthetic Speed

Новая фосфатная паковочная масса IPS Empress Esthetic Speed позволяет получить превосходные результаты прессования в короткие сроки. С помощью быстро нагреваемой паковочной массы изготавливаются вкладки Inlay, Onlay, виниры и коронки высокой точности из материала IPS Empress Esthetic.

Форма поставки

Паковочная масса IPS Empress Esthetic Speed

Порошок	1 x 2,5 кг	579309
Жидкость	1 x 0,5 л	579308

Жидкость для паковочной массы IPS Empress® Esthetic Speed

Служит для замешивания только паковочной массы IPS Empress Esthetic Speed.



IPS® PressVEST

IPS PressVEST – это оптимизированная фосфатная паковочная масса для традиционного (ночного) метода нагрева. Позволяет достичь точных результатов прессования и может быть использована для прессования в печах EP 500, EP 600, EP 600 Combi, а также Programat EP 3000 и Programat EP 5000 со следующими керамическими массами для прессования фирмы Ivoclar Vivadent:

- IPS e.max Press
- IPS e.max ZirPress
- IPS Empress Esthetic
- IPS Empress Cosmo
- IPS InLine PoM (Press-on-Metal керамика для напрессовывания на металл)

Паковочную массу IPS PressVEST нельзя использовать для модельного литья и техники наложения IPS Empress из-за слишком высокой температуры.



Форма поставки

IPS PressVEST

Порошок	1 x 2,5 кг	595592AN
	1 x 5 кг	595594AN
Жидкость	1 x 0,5 л	595588
	1 x 1 л	595589

IPS® PressVEST Speed

IPS PressVEST Speed – это фосфатная паковочная масса для быстрого метода нагрева (в течение дня). Паковочная масса может быть использована для прессования в печах EP 500, EP 600, EP 600 Combi, а также Programat EP 3000 и Programat EP 5000 со следующими керамическими массами для прессования фирмы Ivoclar Vivadent:

- IPS e.max Press
- IPS e.max ZirPress
- IPS Empress Cosmo
- IPS InLine PoM (Press-on-Metal Keramik)

Паковочную массу IPS PressVEST Speed нельзя использовать для модельного литья из-за слишком высокой температуры.




Форма поставки

IPS PressVEST Speed

Порошок	1 x 2,5 кг	595590AN
	1 x 5 кг	595591AN
Жидкость	1 x 0,5 л	595586
	1 x 1 л	595587

Контрольный шаблон IPS® Sprue Guide

С помощью контрольного шаблона IPS Sprue Guide проверяется правильность штифтования объектов прессования на цоколе муфельной системы.

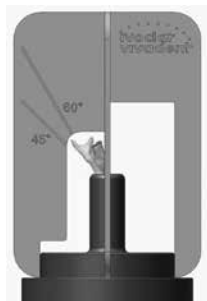

Форма поставки

Контрольный шаблон IPS Sprue Guide

100 г	1 x	598993
200 г	1 x	598994
300 г	1 x	613780

Универсальный трегер IPS® UniTray

IPS UniTray – это универсальный трегер для обжига, который сконструирован таким образом, что на него можно помещать объекты для обжига или заготовки для прессования и вспомогательные средства для прессования с обеих сторон. При использовании трегера IPS UniTray в керамической печи для позиционирования реставраций применяются прилагающиеся металлические пины.



Форма поставки

IPS UniTray

602231

IPS UniTray	1 x
Металлический штифт А	4 x
Металлический штифт В	4 x
Металлический штифт С	4 x

Муфельная система IPS®

Муфельная система IPS состоит из муфельного цоколя и ограничителя и служит для штифтования смоделированных реставраций. Для того, чтобы ее было легче отличать от муфельной системы IPS Empress, муфельная система IPS окрашена в серый цвет.

Муфельная система 100 г и 200 г применяется для IPS e.max Press, ZirPress и InLine PoM, 300 г – только для IPS ZirPress и IPS InLine PoM.



Форма поставки

Муфельная система IPS

Муфельный цоколь	
Ограничитель	
100 г	597060
200 г	597061
300 г	614490

Силиконовые кольца IPS®

Силиконовые кольца применяются и для муфельной системы IPS Empress, и для муфельной системы IPS.



Форма поставки

Силиконовое кольцо IPS Silicone Ring	по 1 x	
100 г		590113 AN
200 г		590114 AN
300 г		614492

Муфельная цанга IPS® Investment Ring Tong

Муфельная цанга создана для надежной и безопасной работы с опокой. Кроме того, она нужна для введения заготовок для прессования и стержней из оксида алюминия Alox Plunger в опоку перед прессованием.



Форма поставки

Муфельная цанга	1 x	554073
-----------------	-----	--------

Пинцет



Форма поставки

Пинцет	1 x	554069
--------	-----	--------

Шпатель IPS® Spatula

Шпатель IPS Spatula применяется при обработке соединительной стеклокерамики IPS e.max CAD Crystall./Connect во время процесса соединения в технике CAD-on. Кроме того, он служит для применения обжиговой пасты IPS Object Fix Putty (Single Dose).



Форма поставки

Шпатель IPS Spatula	1 x	635529
---------------------	-----	--------

Кисточки для моделирования

Моделировочные кисточки из щетины красной куницы используются для наслаивания керамических масс. Размеры 00, 0, 1, 2, 4, 6, 10, G2, G4



Форма поставки

Набор моделировочных кисточек		530381
Моделировочные кисточки	9 x	
(Размеры: 00, 0, 1, 2, 4, 6, 10, G2, G4)		
Моделировочные кисточки Refill	по 1 x	
00		530382
0		530383
1		530384
2		530385
4		530386
6		530387
10		530388
G2		530389
G4		530390

Культевой материал IPS® Natural Die Material

Светоотверждаемый культевой материал IPS Natural Die Material имитирует цвет препарированного зуба, создавая оптимальную основу для естественной передачи цвета при изготовлении цельнокерамических реставраций.

Выпускается в 9 цветах, предусматривающих все возможные оттенки культы, начиная с ультрасветлого цвета для имитации культы отбеленных зубов (ND 1) и цвета для имитации вторичного дентина, имеющего высокую насыщенность (ND 6), и заканчивая цветом для имитации культы сильно измененных в цвете / девитальных зубов (ND 9).



Форма поставки

Набор IPS Natural Die Material Kit		597078
Культевые материалы IPS Natural Die Material ND 1, ND 2, ND 3, ND 4, ND 5, ND 6, ND 7, ND 8, ND 9	по 1 x 8 г	
Сепаратор IPS Natural Die Material Separator	1 x 20 мл	
Штопфер IPS Stopfer	8 x 10	
Держатель IPS Stumpfdoorne	8 x 10	
Универсальная ручка	2 x	
Расцветка культовых материалов IPS Natural Die Material	1 x	
IPS Natural Die Material Refill	по 1 x 8 г	
ND1		597080
ND2		597081
ND3		597082
ND4		597083
ND5		597084
ND6		597085
ND7		597086
ND8		597087
ND9		597088
Сепаратор IPS Natural Die Material Separator Refill	1 x 20 мл	597089

IPS® Natural Die Material Kit Promo



Форма поставки

IPS Natural Die Material Kit Promo		638177
IPS Natural Die Material Kit (597078)	1 x	
Расцветка IPS Natural Die Material	4 x	

Расцветка культовых материалов IPS® Natural Die Material

Расцветка помогает определить цвет культы после препарирования.

Во избежание перекрестной инфекции между пациентами отдельные пластинки, а также всю расцветку можно автоклави-ровать.



Форма поставки

Расцветка культовых материалов IPS Natural Die Material	1 x	597090
--	-----	---------------

Лабораторный контрастный спрей IPS® Contrast Spray Labside

Лабораторный контрастный спрей IPS Contrast Spray Labside используется для оптимального сканирования при изготовлении реставраций технологией CAD/CAM. С помощью этого контрастного спрея компенсируются различные оптические особенности гипсовой модели, благодаря чему сканирование проводится безупречно. С помощью распыляющего носика просто и эффективно коротким нажатием создается оптимальный покрывающий слой, который детально воспроизводит все границы.



Форма поставки

Лабораторный контрастный спрей
IPS Contrast Spray Labside 1 x 200 мл (270 мл) 602713AN

Фиксирующая паста IPS® Object Fix Flow (текучая) IPS® Object Fix Putty (вязкая)

IPS Object Fix – это вспомогательные пасты различной вязкости для фиксации цельнокерамических реставраций при обжиге и кристаллизации. Эта паста используется для удобного позиционирования реставраций на металлическом опорном штифте из нитрида кремния или прямо на трегере из нитрида кремния. Благодаря оптимальной консистенции, пасты просто наносить, а после проведения обжига легко удалять.



Форма поставки

Фиксирующая паста IPS Object Fix

Текучая Flow	1 x 10 мл 605525AN
Вязкая Putty	1 x 10 г 605526 AN

Сочетание материалов

Материал Отверждение	Эстетические фиксирующие композиты		Универсальные фиксирующие композиты	
	Variolink® Veneer	Variolink® II	Multilink® Automix	Speed CEM
Метод	Световое	Световое/двойное	Химическое отверждение с опциональной возможностью светового	
	Адгезивно Syntac или ExcITE Total-Etch	Адгезивно Syntac или ExcITE DSC Total-Etch	Адгезивно Праймер Multilink Primer A/B Самопротравливающий	Самоадгезивно
IPS e.max Press	✓	✓	✓	✓*
IPS e.max CAD	✓	✓	✓	✓*
IPS e.max Ceram Veneers	✓	✓	–	–
IPS e.max ZirCAD	–	–	✓	✓
IPS Empress Esthetic	✓	✓	✓	–
IPS Empress CAD	✓	✓	✓	–
SR Adoro (на металличе- ской основе)	–	–	✓	✓
SR Adoro (без металла)	✓	✓	✓	–
IPS d.SIGN IPS InLine / IPS InLine PoM IPS Classic	–	–	✓	✓
FRC Postec Plus	–	✓	✓	✓
CosmoPost	–	–	✓	✓



Соблюдайте рекомендации инструкций к материалам.

- ✓ Рекомендуемое сочетание материалов
- * Рекомендуется в зависимости от показаний
- Не рекомендуемое сочетание материалов

Протравливающий гель IPS® Ceramic Etching Gel

Протравливающий гель IPS Ceramic Etching Gel служит для создания ретенционной поверхности при фиксации реставраций композитами. Он существенно усиливает силу адгезии между фиксирующим композитом и керамической поверхностью.



Форма поставки

Набор IPS Ceramic Etching Gel Kit **531550**

Протравливающий гель IPS Ceramic Etching Gel	1 x 5 мл	
Нейтрализующий порошок	1 x 30 г	
Дозировочная ложка	1 x	

Refill

Протравливающий гель IPS Ceramic Etching Gel	1 x 5 мл	531548
Нейтрализующий порошок	1 x 30 г	531549

Monobond Plus

Универсальный однокомпонентный бондинг для создания адгезивного соединения между фиксирующим композитом (например, материалами линий Variolink или Multilink) и всеми реставрационными материалами для не прямых реставраций (стеклокерамика и оксидная керамика, металл, композиты, композиты, усиленные волокном).



Форма поставки

Заказ на Monobond Plus может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Total Etch

Для подготовки препарации к адгезивной фиксации реставраций IPS Empress CAD применяется протравливающий гель Total Etch. Это гель 37%-ной фосфорной кислоты для протравливания эмали и подготовки дентина в процессе адгезивной фиксации реставраций из цельной керамики.



Форма поставки

Заказ на Total Etch может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

ExcITE® DSC

ExcITE DSC – это однокомпонентный адгезив двойного отверждения для адгезивной фиксации безметалловых конструкций, корневых штифтов и культей.



Форма поставки

Заказ на ExcITE DSC может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Syntac® и Heliobond

Syntac – это давно зарекомендовавший себя многокомпонентный адгезив. Адгезивная связь создается последовательным нанесением праймера Syntac Primer, адгезива Syntac Adhesive и Heliobond.



Форма поставки

Заказ на Syntac и Heliobond может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Variolink® II

Variolink II хорошо зарекомендовал себя в клинической практике более чем за 10 лет во всем мире. Более двадцати миллионов применений, многочисленные положительные отзывы как о лучшем продукте в категории адгезивных фиксирующих композитов (например, Reality, Dental Advisor) и очень хорошие результаты независимых клинических долгосрочных исследований свидетельствуют об успешности этого продукта.



Форма поставки

Заказ на Variolink II может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Variolink® II Try-In

С помощью водорастворимой пасты Variolink II Try-In можно воссоздать цвет зафиксированной реставрации перед адгезивной фиксацией. Пасты Variolink II Try-In обладают теми же внешними свойствами, что и фиксирующий композит Variolink II.



Форма поставки

Заказ на Variolink II Try-In может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Variolink® Veneer

Фиксирующий композит световой полимеризации, выпускается в семи цветах «Value» для адгезивной фиксации прозрачных цельнокерамических реставраций толщиной < 2,0 мм (виниры, вкладки Inlay, Onlay).



Форма поставки

Заказ на Variolink Veneer может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Variolink® Veneer Try-In

С помощью водорастворимой пасты Variolink Veneer Try-In можно воссоздать цвет зафиксированной реставрации перед адгезивной фиксацией. Пасты Try-In обладают теми же внешними свойствами, что и фиксирующий композит Variolink Veneer.



Форма поставки

Заказ на Variolink Veneer Try-In может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Multilink® Hybrid Abutment

Multilink Hybrid Abutment – это самоотверждающийся фиксирующий композит для постоянного экстраорального склеивания керамических структур (абатментов и коронок-абатментов) из стекло-керамики на основе дисиликата лития (LS2) и оксида циркония с имплантатами из титана/титановых сплавов и оксида циркония.



Форма поставки

Заказ на Multilink Automix может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Multilink® Automix

Самоотверждаемый фиксирующий композит с опциональной возможностью световой полимеризации для адгезивной фиксации не прямых реставраций из металла, цельной керамики и металлокерамики, а также композитов.



Форма поставки

Заказ на Multilink Automix может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

SpeedCEM®

Самоадгезивный композитный цемент химического отверждения с опциональной возможностью световой полимеризации для быстрой и простой цементировки без использования адгезивов и без отдельной обработки фосфорной кислотой.



Форма поставки

Заказ на SpeedCEM может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Vivaglass® CEM

Классический самоотверждаемый стеклоиономерный цемент, который, помимо всего прочего, подходит для цементировки высокопрочной керамики, такой, например, как IPS e.max. Содержит особенно прозрачный стеклонеполнитель для эстетичных результатов.



Форма поставки

Заказ на Vivaglass CEM может быть размещен у официальных дилеров клинической продукции Ivoclar Vivadent Clinical.

Ivomat® IP3

Ivomat IP3 предназначен для полностью автоматизированной полимеризации облицовочных композитов под давлением при высокой температуре. Кроме того, в нем можно полимеризовать различные пластмассы горячей и холодной полимеризации.

Технические данные

- Напряжение*: 220-230 В / 50 Гц, 1030 Вт
*другие варианты по запросу
- Размеры: Ш 285 x В 225 x Г 280 мм

Цвета:

Стандартный цвет: белый

Дополнительные цвета: бирюзовый, аквамарин, оранжево-красный



Преимущества:

- регулировка давления в соответствии с особенностями материала
- индивидуально настраиваемая температура от +30 °С до +120 °С
- автоматический слив воды после окончания полимеризации

Форма поставки

Ivomat IP3	220-230 В / 50 Гц*
Ivomat IP3	1 x
Резервуар	1 x
Стакан для заполнения	1 x
белый	530554
бирюзовый	530551
аквамарин	530552
оранжево-красный	530555

* Возможна поставка с другим напряжением

Резервуар Ivomat®

Практичный резервуар для полимеризатора Ivomat. После окончания полимеризации вода автоматически сливается обратно в резервуар.



Форма поставки

Резервуар	530596
Резервуар со шлангом	1 x
Настенный держатель	1 x

Настенный держатель Ivomat® Wallfixator

Настенный держатель для фиксации гипсовых или разборных штампов при полимеризации.



Форма поставки

Держатель	530588
Держатель с ручкой	1 x

Quick

Этот прибор был специально разработан для материала SR Adoro, также различных светоотверждаемых пластмасс фирмы Ivoclar Vivadent. Может быть использован для других светоотверждаемых материалов, полимеризующихся в диапазоне 400-500 нм. Встроенный сенсор обеспечивает бесконтактное включение/выключение лампы, что делает работу с прибором Quick очень простой и удобной.

Технические данные:

- Напряжение: однофазный переменный ток
220, 230, 240 В / 50-60 Гц
100, 110, 120 В / 50-60 Гц
- Потребляемая мощность: макс. 100 Вт
- Напряжение лампы: 12 В
- Размеры: Д 390 x Ш 150 x В 130 мм
(в закрытом состоянии)
- Диапазон длины волны (с фильтром): 400-500 нм

Цвет:

- Стандартный цвет: белый (дополнительных цветов не выпускается)



Преимущества:

- индивидуально настраиваемая рабочая высота
- встроенный звуковой таймер информирует об актуальном времени полимеризации
- практичный светозащитный щиток

Форма поставки

Quick (белый)	230 В / 50-60 Гц*	546085
Quick		1 x
светозащитный щиток		1 x
сетевой кабель		1 x

* Возможна поставка с другим напряжением

Lumamat® 100

Lumamat 100 является составной частью системы SR Adoro и применяется для полимеризации и снятия напряжений светоотверждаемого облицовочного композита SR Adoro по программам P1 и P3. Прибор сочетает в себе свет и управляемый электроникой нагрев. Благодаря управляемому процессу свет/высокая температура создаются оптимальные свойства облицовочного материала. Кроме того, в Lumamat 100 можно полимеризовать другие композиты фирмы Ivoclar Vivadent (например, SR Spectrasit, SR Nexco) по программе P2.

Технические данные:

- Напряжение: однофазный переменный ток 220-230 В / 50-60 Гц 100, 110, 120, 240 В / 50-60 Гц
- Потребляемая мощность: 750 Вт
- Размеры: Ш 320 x Г 440 x В 330 мм
- Диапазон длины волны: 450-580 нм

Цвета:

- Стандартный цвет: белый
- Дополнительные цвета: бирюзовый, аквамарин, лососево-красный



Преимущества:

- механизм открытия «вверх-и-назад»
- смотровое окошко
- новая подставка для объектов с ограничителем области полимеризации
- стандартные программы для SR Adoro P1 и P3
- программа светополимеризации P2
- программа индивидуальных настроек P4
- счетчик отработанных часов
- возможность контроля температуры и калибровки с помощью тестового набора L100

Форма поставки

Lumamat 100	220-230 В/ 50-60 Гц*
Lumamat 100	1 x
Сетевой кабель	1 x
Запасная лампа	1 x
Запасной предохранитель	1 x
Отвертка	1 x
Стандартный набор принадлежностей	1 x
Тестовый набор L100	1 x
белый	572463
зеленый	574098
аквамарин	574097
оранжево-красный	574139

* Возможна поставка с другим напряжением

Тестовый набор L100

Тестовый набор L100 служит для проверки мощности светового излучения и калибровки температуры прибора Lumamat 100.



Форма поставки

Тестовый набор L100	578987
Трегер для пробы	5 x
Держатель пробы	2 x

Programat® P310

Имея компактный дизайн, Programat P310 фокусируется на главном и, таким образом, является наиболее подходящей печью для повседневной работы зуботехнической лаборатории. Благодаря новому цветному сенсорному экрану и проверенной пленочной клавиатуре, эта печь еще проще в управлении, чем предыдущее поколение P300. Эта печь оборудована множеством программ Ivoclar Vivadent, скоординированных с такими материалами, как: IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine и IPS Empress, это позволяет незамедлительно начать работу с печью, без предварительного программирования. В зависимости от сферы применения, пользователь может выбирать между разными режимами работы (нормальный, защищенный и производственный)

Более того, Programat P310 оборудован технологией муфеля QTK2, обеспечивающей равномерное распределение тепла в камере обжига, что гарантирует оптимальные результаты обжига и продлевает жизненный цикл нагревательного элемента. И наконец, новый вакуумный насос контролирует систему; благодаря технологии сдвоенного клапана обеспечивается бесшумное и энергосберегающее функционирование.

Технические данные:

- Напряжение: 110-120 В / 50-60 Гц
200-240 В / 50-60 Гц
- Размеры (в закрытом состоянии): Ширина 315 мм / 390 мм
(с охлаждающим трегером)
x глубина 455 мм x высота 315 мм
- Полезный объем камеры обжига: 90 мм / В 80 мм
- Максимальная температура обжига: 1200 °C

Цвет: белый



Преимущества:

- равномерное распределение тепла благодаря QTK2 технологии муфеля с отражателем SiC
- наглядная пленочная клавиатура и цветной сенсорный экран с большими иконками обеспечивают простую и удобную работу
- дисплей OSD и статус процесса
- встроенный режим энергосбережения (Power Saving Technology)
- 300 индивидуальных программ
- выбор из трех различных режимов работы (нормальный, защищенный, производственный)
- разъем USB для обновления программного обеспечения или подключения принтера, компьютера
- удаленная диагностика через Интернет, e-mail и файлы выгрузки данных
- функция защиты от термшока TSP (Thermo Shock Protection)
- программа температурной калибровки для серебряной пробы
- технология сдвоенного клапана в вакуумном насосе

Форма поставки

Programat 310

Programat P310	1 x	
Сетевой кабель	1 x	
Вакуумный шланг	1 x	
Набор трегеров для обжига Programat 2	1 x	
Набор для измерений температуры 2	1 x	
Шнур USB	1 x	
Инструкция по эксплуатации	1 x	
Держатель шипцов	1 x	
	200-240 В / 50-60 Гц	645987
	110-120 В / 50-60 Гц	645950

Programat® P510

Programat P510 сочетает в себе высокие технологии и современный дизайн в очень эффективной и понятной для пользователя печи. Интеллектуальный Programat с инфракрасной технологией ускоряет процесс обжига на 25% и улучшает результаты обжига. Размер и число реставраций не имеют значения. Новая термовидеокамера автоматически контролирует процессы предварительной сушки и закрывания печи.

Управление Programat P510 осуществляется посредством большого 7-дюймового цветного экрана и уже зарекомендовавшей себя пленочной клавиатурой. В дополнение к множеству программ Ivoclar Vivadent, скоординированных с такими материалами, как IPS e.max, IPS d.SiGN, IPS InLine и IPS Epress, печь поддерживает 500 индивидуальных программ.

Технология муфеля QTK2 олицетворяет дальнейшие инновации. Она отвечает за обеспечение равномерного распределения тепла и увеличенный срок службы нагревательного элемента. И наконец, новый вакуумный насос контролирует систему благодаря технологии двоянного клапана, обеспечивает бесшумное и энергосберегающее функционирование.

Технические данные:

- Напряжение: 110-120 В / 50-60 Гц
200-240 В / 50-60 Гц
- Размеры (в закрытом состоянии): Ширина 320 мм / 395 мм
(с охлаждающим трегером)
x глубина 495 мм x высота 320 мм
- Полезный объем камеры обжига: 90 мм / В 80 мм
- Максимальная температура обжига: 1200 °C

Цвет: белый



Преимущества:

- равномерное распределение тепла благодаря QTK2 технологии муфеля с отражателем SiC
- большой цветной сенсорный экран и проверенная пленочная клавиатура обеспечивают удобный ввод данных и быстрое считывание всех значимых параметров
- простое интуитивное управление с помощью современной панели управления и иконок
- интегрированная технология энергосбережения позволяет экономить электроэнергию и беречь окружающую среду
- простая, чрезвычайно точная автоматическая двухуровневая калибровка (АТК2) печи через две референтные температурные точки
- 500 индивидуальных программ
- встроенная инфракрасная тепловидеокамера обеспечивает оптимальный процесс предварительной сушки
- удаленная диагностика через Интернет, e-mail и файлы выгрузки данных
- операционный дисплей OSD и статус процесса
- набор Programat WLAN Kit для беспроводной передачи данных (обновление ПО, PrograBase x10)
- выбор из трех различных режимов работы (нормальный, защищенный, производственный)
- мультимедийные функции (видеоплеер, MP3-плеер, фотопроектор)

Форма поставки

Programat 510

Programat P510	1 x
Сетевой кабель	1 x
Вакуумный шланг	1 x
Набор трегеров для обжига Programat 2	1 x
Набор для измерений температуры 2	1 x
Шнур USB	1 x
Programat USB флеш-карта памяти	1 x
Набор Programat WLAN	1 x
Инструкция по эксплуатации	1 x
Держатель шипцов	1 x
	200-240 В / 50-60 Гц 645988
	110-120 В / 50-60 Гц 645981

Керамическая печь Programat® P700/G2

Новое поколение керамической печи Programat P700 оснащено большим графическим дисплеем с активной матрицей с высоким разрешением и зарекомендовавшей себя пленочной клавиатурой. Подкупает удобством в работе и обширным пакетом новых функций. Высокие технологии и современный дизайн объединяются в этой особенной печи, чрезвычайно простой и удобной для пользователя.

К новинкам относится интегрированная технология энергосбережения (Power Saving Technology), которая позволяет экономить электроэнергию до 40% в режиме Standby, а также современная панель управления с цветными иконками. Кроме этого, прибор оснащен звуковым информатором, который дает пользователю необходимую информацию на 13 различных языках. На дисплее печи Programat P700 могут отображаться цветные цифровые снимки пациентов и зубов, кроме того, он имеет встроенный MP3-плеер. Ручки OSD отображают актуальное состояние печи. Печь оснащена технологией муфеля QTK, которая позволяет добиваться оптимальных результатов обжига.

Технические данные:

- Напряжение: 110-120 В / 50 / 60 Гц
200-240 В / 50 / 60 Гц
- Размеры (в закрытом состоянии): Ш 303/382 мм
(с подставкой) x Г 468 x
В 320 мм
- Полезный объем камеры обжига: 80 мм / В 48 мм
- Максимальная температура обжига: 200 °C

Цвет:

- Стандартный цвет: белый
- Специальные цвета: красный, зеленый, синий



Преимущества:

- интегрированная технология энергосбережения (Power Saving Technology)
- звуковой информатор на 13 языках
- оптимизированная современная панель управления с цветными иконками
- мультимедиа функции по отображению снимков и воспроизведению MP3-звуков
- Ручки OSD отображают актуальное состояние печи (нагрев, охлаждение, сообщение об ошибке и т.д.)
- графический дисплей с активной матрицей в сочетании с надежной пленочной клавиатурой
- функция Защиты от быстрого охлаждения (Cooling Shock Protection – CSP) препятствует возникновению напряжений в цельнокерамических реставрациях благодаря специальному процессу охлаждения.
- функция Защиты от термошока (Thermo Shock Protection – TSP) препятствует возникновению термошока в керамике путем быстрого нагрева
- технология муфеля QTK обеспечивает равномерное распределение тепла и позволяет добиваться оптимальных результатов обжига
- автоматическая калибровка температуры (ATK2) печи через две референтные температурные точки
- 4 USB-интерфейса для подключения различных дополнительных приборов
- Update через USB-накопитель возможно без ПК
- Ethernet-разъем для быстрого подсоединения прибора
- встроенное считывающее устройство карты памяти (Card-Reader) для изображений
- место подключения для стереомикрофона

Форма поставки

Programat P700/G2

Programat P700/G2	1 x
Сетевой кабель	1 x
Вакуумный шланг	1 x
Programat трегер для объектов обжига	1 x
Набор автоматического температурного контроля ATK2 (тестовый набор)	1 x
Загрузочный кабель USB	1 x
USB-накопитель данных «Programat»	1 x
USB-накопитель Мультимедиа	1 x
ПО PrograBase 2 Software	1 x
Сервисный талон	1 x

200-240 В / 50-60 Гц

белый	613811
красный	628348
зеленый	628327
синий	628349

110-120 В / 50-60 Гц

белый	613812
красный	628352
зеленый	628350
синий	628351

Вакуумный насос VP4

Высокомощный вакуумный насос, который был специально разработан для печей обжига и прессования фирмы Ivoclar Vivadent. Этот вакуумный насос отличается очень высокой мощностью. Насос имеет простой дизайн и транспортировочную ручку, что делает удобным любое его перемещение.

Технические данные:

- Напряжение: 230 В / 50-60 Гц
200 В / 50-60 Гц
115 В / 50-60 Гц
100 В / 50-60 Гц
- Потребляемая мощность: 100 Вт
- Конечный вакуум: прим. 30 мбар

Цвет:

Стандартный цвет: белый (дополнительных цветов не выпускается)



Преимущества:

- современный эргономичный дизайн
- высокая вакуумная мощность
- высокий конечный вакуум (прим. 30 мбар)
- бесшумная работа
- встроенная транспортировочная ручка

Форма поставки

Вакуумный насос VP4 (белый)	230 В/ 50-60 Гц*	602172
Вакуумный насос VP4		1 x

* возможна поставка прибора для другого напряжения в сети

Вакуумный насос VP3 easy

Маленький и легкий вакуумный насос VP3 easy предназначен для создания вакуума в камерах обжига керамических печей Ivoclar Vivadent. Не подходит для печей прессования. Мембранный насос характеризуется малым весом и чрезвычайно малыми размерами.

Технические данные:

- Напряжение: 230 В / 50-60 Гц
200 В / 50-60 Гц
115 В / 50-60 Гц
- Потребляемая мощность: 70 Вт
- Размеры: Ш 140 x В 130 x Г 210 мм
- Конечный вакуум: прим. 40 мбар

Цвет:

Стандартный цвет: серый



Преимущества:

- малый вес
- маленькие размеры
- конечный вакуум: прим. 40 мбар

Форма поставки

Вакуумный насос VP3 easy (серый)	230 В/ 50-60 Гц*	594554
Вакуумный насос VP3 easy		1 x
Изоляция шума		1 x

* возможна поставка прибора для другого напряжения в сети

Набор принадлежностей Programat® Accessories Set 2

Набор принадлежностей Programat является идеальным дополнением к печам Programat и содержит все необходимые для работы принадлежности.




Форма поставки

Набор принадлежностей Programat Accessories Set 2 610164

Трегер Programat	1 x
Трегер из нитрида кремния «К»	1 x
Щипцы	1 x
Набор автоматического температурного контроля АТК2	1 x

Трегер в комплекте Programat® Firing Tray Kit

Этот большой трегер с сотовой структурой для керамических печей подходит и для одиночных коронок, и для больших мостовидных протезов. Опорные штифты при необходимости индивидуально монтируются в сотовый трегер.

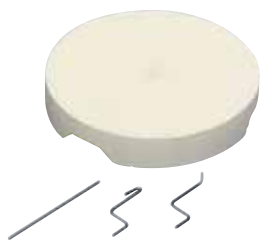

Форма поставки

Трегер Programat Firing Tray Kit 598642

Трегер Programat Firing Tray	1 x
Металлический штифт А	4 x
Металлический штифт В	4 x
Металлический штифт С	4 x

Опорные штифты для трегера Metal Pins for Firing Tray

Металлические опорные штифты подходят к трегеру Programat и при необходимости могут индивидуально монтироваться в сотовый трегер.



Форма поставки

Металлические опорные штифты для трегера 626698

Металлический штифт А	4 x
Металлический штифт В	4 x
Металлический штифт С	4 x

Набор для контроля температуры 2 Temperature Checking Set 2

Набор для контроля температуры служит для точной проверки и калибровки температуры в камере обжига печи Programat.



Форма поставки

Набор для контроля температуры

Temperature Checking Set 2 **544903**

Держатель пробы **2 x**

Тестовая серебряная проба **10 x**

Тестовая серебряная проба

Упаковка с пятью серебряными пробами к набору для контроля температуры 2.



Форма поставки

Refill Серебряная проба **5 x** **545634**

Набор автоматического температурного контроля Automatic Temperature Checking Set «АТК2»

Набор автоматического температурного контроля АТК 2 служит для точной проверки и калибровки температуры в камере обжига печей, оснащенных автоматическими программами калибровки для системы АТК2 (например, Programat CS, P700, EP 3000, EP 5000). Особенность набора АТК2 состоит в том, что калибровка производится через две референтные точки.



Форма поставки

Набор автоматического температурного контроля «АТК2»

Automatic Temperature Checking Set «АТК2» **598833**

Пробы АТК2 **5 x**

Щипцы

С помощью этих щипцов помещение объектов в камеру для обжига становится очень простым. Щипцы характеризуются точностью работы и высоким качеством материала.



Форма поставки

Щипцы 1 x 530665

Держатель щипцов Programat®

Держатель щипцов Programat может быть закреплен на корпусе печи Programat, что позволяет удобно расположить щипцы во время работы (возможно, начиная с моделей 2007).



Форма поставки

Держатель щипцов Programat 1 x 607538

USB Загрузочный кабель

С помощью загрузочного кабеля USB можно обновлять программное обеспечение через компьютер/ноутбук (Update/Upgrade). Через загрузочный кабель USB можно осуществлять управление печью и протоколирование данных через компьютер, используя программное обеспечение PrograBase 2 Software (начиная с Programat P500)



Форма поставки

Загрузочный кабель USB, тип А-В, 1,8 м 1 x 597183

Набор для модернизации EP 600 Combi Upgrade Kit

С этим набором Upgrade Kit можно обновить печь EP 600 до версии EP 600 Combi – печь для обжига и прессования.

Форма поставки

EP 600 Upgrade Kit 200-240 В /50-60 Гц

562204

Карта памяти EP 600 Combi Program Memory Card 1

На этой карте можно сохранять до 50 индивидуальных программ.

Форма поставки

**Карта памяти EP 600 Combi Program
Memory Card**

3 x

563874

Набор автоматического температурного контроля Automatic Temperature Checking Set 1 (ATK1)

Набор автоматического температурного контроля служит для проверки и калибровки температуры обжига и прессования печей, оснащенных автоматическими программами калибровки (например, EP 600 и EP 600 Combi).

Форма поставки

**Набор автоматического
температурного контроля 1**

559358

Контактные штифты

2 x

Керамический цоколь

1 x

Пробы

5 x



АТК 1 Пробы

10 проб для набора автоматического температурного контроля 1.



Форма поставки

АТК1 пробы Refill	10 x	559359
--------------------------	-------------	---------------

АТК 1 Контактные штифты / Керамические цоколи

10 контактных штифтов и 5 керамических цоколей для набора автоматического температурного контроля 1.



Форма поставки

АТК1 Контактные штифты / Керамические цоколи Refill		559582
--	--	---------------

Контактные штифты	10 x	
Керамические цоколи	5 x	

Programat® EP 3000 G2

Programat EP 3000 второго поколения является комбинированной печью, которую можно использовать и для обжига, и для прессования. Новый дизайн пленочной клавиатуры в сочетании с монохромным дисплеем обеспечивает удобную и простую работу с прибором, не требующую знания иностранных языков. Благодаря встроенному режиму энергосбережения (Power Saving Technology) можно сократить потребление энергии в режиме обжига в состоянии Standby до 40 процентов. Эта функция позволяет экономить деньги и бережно относиться к окружающей среде. Наряду с многочисленными новинками, EP 3000 имеет уже зарекомендовавшую себя функцию определения трещин в муфеле Crack Detection System (CDS). Эта функция автоматически распознает трещины в муфеле прессования и сразу же отключает давление прессования. Кроме того, печь при необходимости может быть очень точно и полностью автоматически откалибрована с помощью системы автоматической калибровки температуры (ATK2) через две референтные температурные точки.

Технические данные:

- Напряжение: 110-120 В / 50-60 Гц
200-240 В / 50-60 Гц
- Размеры: ширина 305/410 мм
(с подставкой)
x глубина 430 x высота
565 мм
- Полезный объем камеры обжига: 80 мм / В 48 мм
- Максимальная температура обжига: 1200 °C

Цвет:

- Стандартный цвет: белый (дополнительные цвета не выпускаются)



Преимущества:

- встроенная специальная программа для заготовок IPS e.max Press Multi.
- технология кварцевой трубки для муфеля нагрева (QTK-Muffel Technology) обеспечивает равномерное распределение тепла и позволяет достигать оптимальных результатов обжига и прессования
- управляемый электроникой привод прессования позволяет достигать великолепных результатов прессования и не требует подключения сжатого воздуха.
- функция CDS – Crack Detection System для ранней диагностики трещин в муфеле прессования: сразу же прерывает процесс прессования, если в муфеле обнаруживаются трещины
- простая, прецизионно точная автоматическая калибровка температуры (ATK2) через две референтные температурные точки.
- съемная головка печи обеспечивает удобство в обслуживании и транспортировке печи.
- большое разнообразие программ (20 индивидуальных программ прессования, 300 индивидуальных программ обжига).
- USB-разъем для обновления программного обеспечения через компьютер/лептоп.

Форма поставки

Programat EP 3000/G2

Programat EP 3000/G2	1 x	
Сетевой кабель	1 x	
Вакуумный шланг	1 x	
Подставка для объектов обжига „S“	1 x	
Набор трегеров Programat	1 x	
Набор автоматического температурного контроля ATK2 (тестовый набор)	1 x	
Решетка для охлаждения муфелей	1 x	
USB Загрузочный кабель	1 x	
PrograBase 2 Software	1 x	
Сервисный паспорт прибора	1 x	
Инструкция	1 x	
		200-240 В / 50-60 Гц 636209
		110-120 В / 50-60 Гц 636208

Programat® EP 5000 G2

Второе поколение комбинированной печи Programat EP 5000 очень удобно в работе – благодаря цветному графическому дисплею с высоким разрешением, с функцией активной матрицы, а также надежной пленочной клавиатуре. В течение процесса обжига вы постоянно получаете информацию об актуальном статусе печи – начиная с нагрева, заканчивая охлаждением. Благодаря встроенному режиму энергосбережения (Power Saving Technology) можно сократить потребление энергии в режиме обжига в состоянии Standby до 40 процентов. Специально для прессованной керамики новый привод прессования с функцией IPF (Intelligente Press Funktion) обеспечивает до 45 процентов более быстрое прессование с прекрасными результатами. Функция CDS – Crack Detection System – для ранней диагностики трещин в муфеле прессования: сразу же прерывает процесс прессования, если в муфеле обнаруживаются трещины.

Технические данные:

- Напряжение: 110-120 В / 50-60 Гц
200-240 В / 50-60 Гц
- Размеры: ширина 305/400 мм
(с подставкой)
x глубина 470 x высота 565 мм
- Полезный объем камеры обжига: 80 мм / В 48 мм
- Максимальная температура обжига: 1200 °C

Цвет:

- Стандартный цвет: белый
- Дополнительные цвета: красный, зеленый, синий



Преимущества:

- встроенная специальная программа для заготовок IPS e.max Press Multi.
- современное рабочее поле с большим графическим дисплеем с высоким разрешением, с функцией активной матрицы обеспечивает простую интуитивную работу с прибором
- функция IPF обеспечивает до 45 процентов более быстрое прессование
- функция CDS – Crack Detection System для ранней диагностики трещин в муфеле прессования: сразу же прерывает процесс прессования, если в муфеле обнаруживаются трещины
- технология кварцевой трубки для муфеля нагрева (QTK-Muffel Technology) обеспечивает равномерное распределение тепла
- встроенный режим энергосбережения (Power Saving Technology) позволяет экономить деньги и бережно относиться к окружающей среде
- управляемый электроникой привод прессования позволяет достигать великолепных результатов прессования и не требует подключения сжатого воздуха.
- функция «OSD» информирует об актуальном состоянии печи (нагрев, охлаждение, сообщение об ошибке и т.д.)
- простая, прецизионно точная автоматическая калибровка температуры (ATK2) через две референтные температурные точки.
- USB-разъем для обновления программного обеспечения или для подключения принтера, компьютера или флеш-карты.
- функции защиты от термошока TSP (Thermo Shock Protection) и переохлаждения CSP (Cooling Shock Protection).

Форма поставки

Programat EP 5000/G2	200-240 В / 50-60 Гц	
Programat EP 5000/G2		1 x
Сетевой кабель		1 x
Вакуумный шланг		1 x
Подставка для объектов обжига „L“		1 x
Набор трегеров Programat		1 x
Набор автоматического температурного контроля ATK2 (тестовый набор)		1 x
Решетка для охлаждения муфелей		1 x
USB Загрузочный кабель		1 x
Флеш-карта Programat		1 x
PrograBase 2 Software		1 x
Сервисный паспорт прибора		1 x
Инструкция		1 x
белый	200-240 В / 50-60 Гц	636211
	110-120 В / 50-60 Гц	636210
красный	200-240 В / 50-60 Гц	636213
	110-120 В / 50-60 Гц	636215
зеленый	200-240 В / 50-60 Гц	636217
	110-120 В / 50-60 Гц	636212
синий	200-240 В / 50-60 Гц	636214
	110-120 В / 50-60 Гц	636216

Решетка для охлаждения опок

Решетка для охлаждения опок была специально разработана для системы IPS Empress и обеспечивает идеальное охлаждение опок до комнатной температуры. Благодаря этому снижается вероятность возникновения в опоке термических напряжений.



Форма поставки

**Решетка для охлаждения
опок в комплекте**

1 x 559758

Набор автоматического температурного контроля Automatic Temperature Checking Set «АТК2»

Набор автоматического температурного контроля АТК 2 служит для точной проверки и калибровки температуры в камере обжига печей, оснащенных автоматическими программами калибровки для системы АТК2 (например, Programat CS, P700, EP 5000). Особенность набора АТК2 состоит в том, что калибровка производится через две референтные точки.



Форма поставки

**Набор автоматического температурного
контроля «АТК2»**

Automatic Temperature Checking Set «АТК2» 598833

Пробы АТК2

5 x

Programat® S1

Programat S1 – это легкая и компактная печь для спекания каркасов из IPS e.max ZirCAD и альтернативных материалов ZrO2. Ее особым преимуществом является короткое время процесса, что позитивно сказывается на времени изготовления реставраций из оксида циркония и общем расходе электроэнергии. Programat S1 положил конец длительному процессу спекания, и теперь одиночный каркас из оксида циркония IPS e.max ZirCAD спекается всего лишь за 90 минут – обычным печам для этого процесса нужно, как правило, от пяти до восьми часов. Для лаборатории короткий процесс спекания имеет совершенно конкретные последствия: коронки и мостовидные протезы с каркасом из оксида циркония могут быть сделаны в течение одного рабочего дня. Короткий процесс спекания никак не вредит высокой прочности материала и точности реставрации, как это показывают научные исследования. Кроме того, расход электроэнергии снижается. Введением энергосберегающей печи Programat S1 фирма Ivoclar Vivadent успешно продолжает свою линию энергосберегающих приборов „Power Saving Technology“.

Технические данные:

- Напряжение: 118-240 В / 50-60 Гц
- Размеры (в закрытом состоянии): Ш 310/390 мм
(с подставкой) х Г 430 х
В 570 мм
- Полезный объем камеры обжига: 80 мм / В 80 мм
- Максимальная температура обжига: 1530 °C

Цвет: белый



Преимущества:

- одиночный каркас из оксида циркония IPS e.max ZirCAD спекается всего лишь за 90 минут
- простое и независимое от языка управление через надежную комбинацию пленочной клавиатуры и графического дисплея
- Технология энергосбережения: по сравнению с обычными спекающими печами в процессе спекания экономится до 64% электроэнергии.
- компактный дизайн, характерный для всей линии Programat
- малый вес – всего 27 кг
- возможность проведения калибровки
- OSD (optical status display) – показатель состояния печи
- возможность комфортного расположения объектов в камере спекания благодаря откидывающейся головке печи
- удобная в сервисе съемная головка печи
- USB-разъем – легкое проведение обновления ПО
- удаленное управление через ПК/лептоп с помощью ПО

Форма поставки

Programat S1, белый	118-240 В / 50-60 Гц	613886
Programat S1		1 x
Сетевой кабель		1 x
Подставка под объекты обжига		1 x
Столик для спекания		1 x
Цанга столика для спекания		1 x
Набор контроля температуры S1 Starter Kit		1 x
USB-загрузочный кабель		1 x
ПО PrograBase2 Software		1 x
Сервисный талон		1 x

Столик для спекания Programat® S1 Sinter Tray

Столик для спекания удобно располагается в печи Programat S1 и обязателен для достижения оптимальных результатов спекания. Специально разработанная геометрия столика обеспечивает равномерное распределение тепла.



Форма поставки

Столик для спекания Programat S1	1 x	627987
---	------------	---------------

Вилка-держатель для столика спекания Programat® S1 Sinter Tray Fork

С помощью вилки-держателя столик для спекания располагается в камере печи. Его форма точно соответствует размерам столика для спекания Programat S1.



Форма поставки

Вилка-держатель для столика для спекания Programat S1	1 x	627988
--	------------	---------------

Набор для контроля температуры Programat® S1 Temperature Checking Set

10 спекающихся колец для точной проверки температуры в печи Programat S1.



Форма поставки

Набор для контроля температуры печи Programat S1		627398
Кольца спекающиеся	10 x	
Таблица пересчета	1 x	

Стартовый набор для контроля температуры Programat® S1 Temperature Checking Set Starter Kit

Стартовый набор для контроля температуры объединяет в себе все необходимые компоненты, необходимые для проверки и калибровки температуры спекания в печи Programat S1.



Форма поставки

Стартовый набор для контроля температуры Programat S1	627380
Измеритель	1 x
Кольца спекающиеся	5 x
Таблица пересчета	1 x

Лоток для спекания Sintramat

Лоток для спекания в сочетании с шариками из оксида циркония обеспечивает оптимальные условия спекания. В лотке можно расположить 25 одиночных реставраций или 8-10 каркасов мостовидных протезов на 3 единицы. Чтобы организовать процесс спекания максимально эффективно, три лотка можно поставить друг на друга. Благодаря прямоугольной форме пространство камеры обжига при этом используется оптимально.



Форма поставки

Лоток для спекания Sintramat	1 x	596515
-------------------------------------	------------	---------------

Sintramat® ZrO₂ Дробь

Шарики для спекания из оксида циркония обеспечивают равномерную поддержку и в то же время подвижность каркасов из материала IPS e.max ZirCAD в процессе спекания. Поэтому они незаменимы для достижения высокой точности краевого прилегания каркасов, так как предотвращают их деформацию при спекании.



Форма поставки

Sintramat ZrO₂ Дробь	1 x 100 г	596514
--	------------------	---------------

Ivomix®

Для соединения облицовочной структуры из дисиликата лития (LS2) с каркасом из оксида циркония (ZrO2) применяется инновационная соединительная стеклокерамика. Новая разработка Ivomix применяется для обработки этой соединительной стеклокерамики.

Ivomix создает вибрации, которые точно согласованы со свойствами текучести соединительной стеклокерамики. Гомогенное стеклокерамическое соединение позволяет создавать цельнокерамические реставрации, которые не только эстетичны и функциональны, но и обладают превосходной общей прочностью

Технические данные:

- сетевое подключение: 100-240 В / 50-60 Гц
- допустимый диапазон температур: от +10 °С до -35°С
- вес: 320 г

Цвет:

белый (стандартный)



Преимущества

- оптимальные свойства текучести соединительной стеклокерамики благодаря согласованной вибрации
- комфорт в работе благодаря согласованной системе соединения
- компактный и эргономичный дизайн
- сменная рабочая платформа
- сменная плашка

Форма поставки

Ivomix (белый)	100-240 В / 50-60 Гц	633343
Ivomix		1 x
сетевой блок		1 x
рабочая платформа		3 x

Ivoclar Vivadent – во всем мире

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd.

1 – 5 Overseas Drive
P.O. Box 367
Noble Park, Vic. 3174
Australia
Tel. +61 3 979 595 99
Fax +61 3 979 596 45
www.ivoclarvivadent.com.au

Ivoclar Vivadent Ltda.

Alameda Caiapós, 723
Centro Empresarial Tamboré
CEP 06460-110 Barueri – SP
Brazil
Tel. +55 11 2424 7400
Fax +55 11 3466 0840
www.ivoclarvivadent.com.br

Ivoclar Vivadent Inc.

1-6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario
L5T 2Y2
Canada
Tel. +1 905 670 8499
Fax +1 905 670 3102
www.ivoclarvivadent.us

Ivoclar Vivadent Shanghai Trading Co., Ltd.

2/F Building 1, 881 Wuding Road,
Jing An District
200040 Shanghai
China
Tel. +86 21 6032 1657
Fax +86 21 6176 0968
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63
www.ivoclarvivadent.co

Ivoclar Vivadent SAS

B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 450 88 64 00
Fax +33 450 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH

Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Germany
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
www.ivoclarvivadent.de

Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG

Schwenninger Strasse 13
D-75179 Pforzheim
Germany
Tel. +49 (0) 72 31 / 37 05-0
Fax +49 (0) 72 31 / 35 79 59
www.wieland-dental.com

Ivoclar Vivadent Marketing (India) Pvt. Ltd.

503/504 Raheja Plaza
15 B Shah Industrial Estate
Veera Desai Road, Andheri (West)
Mumbai, 400 053
India
Tel. +91 (22) 2673 0302
Fax +91 (22) 2673 0301
www.ivoclarvivadent.in

Ivoclar Vivadent s.r.l.

Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel. +39 051 611 35 55
Fax +39 051 611 35 65
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent K.K.

1-28-24-4F Hongo
Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
Japan
Tel. +81 3 6903 3535
Fax +81 3 5844 3657
www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent Ltd.

12F W-Tower, 1303-37
Seocho-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-855
Republic of Korea
Tel. +82 (2) 536 0714
Fax +82 (2) 596 0155
www.ivoclarvivadent.co.kr

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 863,
Piso 14, Col. Napoles
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 (55) 50 62 10 00
Fax +52 (55) 50 62 10 29
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent BV

De Fruittuinen 32
2132 NZ Hoofddorp
Netherlands
Tel. +31 23 529 37 91
Fax +31 23 555 45 04
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Ltd.

12 Omega St, Rosedale
PO Box 303011 North Harbour
Auckland 0751
New Zealand
Tel. +64 9 914 99 99
Fax +64 9 914 99 90
www.ivoclarvivadent.co.nz

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawla II 78
00-175 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 54 96
Fax +48 22 635 54 69
www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent LLC

Prospekt Andropova 18 korp. 6/
office 10-06
115432 Moscow
Russia
Tel. +7 499 418-03-00
Fax +7 499 418-03-10
www.ivoclarvivadent.ru

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Qlaya Main St.
Siricon Building No. 14, 2nd Floor
Office No. 204
P.O. Box 300146
Riyadh 11372
Saudi Arabia
Tel. +966 1 293 83 45
Fax +966 1 293 83 44
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pte. Ltd.

171 Chin Swee Road
#02-01 San Centre
Singapore 169877
Tel. +65 6535 6775
Fax +65 6535 4991
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.

c/ Emilio Muñoz Nº 15
Entrada c/ Albarracin
E-28037 Madrid
Spain
Tel. + 34 91 375 78 20
Fax + 34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB

Dalvägen 14
S-169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 (0) 8 514 93 930
Fax +46 (0) 8 514 93 940
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison Office

: Tesvikiye Mahallesi
Sakayik Sokak
Nisantas' Plaza No:38/2
Kat:5 Daire:24
34021 Sisli – Istanbul
Turkey
Tel. +90 212 343 08 02
Fax +90 212 343 08 42
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited

Ground Floor Compass Building
Feldspar Close
Warrens Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SE
United Kingdom
Tel. +44 116 284 78 80
Fax +44 116 284 78 81
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc.

175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us



КАТАЛОГ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Содержание*

Композиты

Tetric N-Ceram	7
Tetric N-Ceram Bulk Fill	
Tetric N-Flow	
Te-Econom Plus	
Te-Econom Flow	
IPS Empress Direct	
IPS Empress Direct Flow	
IPS Empress Direct® Color	
IPS Empress Direct Opaque	
Ceramic Repair	

Адгезивы/Протравка

N-Etch	17
Tetric N-Bond	
Tetric N-Bond® Self-Etch	
Tetric N-Bond® Universal	
Eco-Etch	
Te-Econom Bond	
Email Preparator blue	
Syntac	
Heliobond	
Excite F	
Excite F DSC	
AdheSE	
Adhese® Universal	

IPS Empress CAD

IPS Empress	25
Блоки IPS Empress® CAD HT	
Блоки IPS Empress® CAD LT	
Блоки IPS Empress® CAD Multi	
IPS Empress® CAD Пробные блоки	
Набор универсальных красителей Shade/Stains Kit	
Универсальные красители IPS Empress Universal Shades	
Универсальные красители IPS Empress Universal Stains	
Универсальная глазурь IPS Empress Universal Glaze	
Универсальная глазурь-спрей IPS Empress Universal Glaze Spray	
IPS Empress CAD HT/LT Расцветка A-D/BL	
Упаковка IPS Empress	

IPS e.max CAD

IPS e.max CAD	33
IPS e.max® CAD for CEREC® and InLab®	
Блоки IPS e.max® CAD for CEREC®	
Кристаллические красители IPS e.max CAD Crystall./Shades	
Кристаллические красители IPS e.max CAD Crystall./Stains	
Пастообразная глазурь-кристалл IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste	
Кристаллическая глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray	
Жидкость IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid	
Корректировочные средства IPS e.max® CAD	

Crystall./Add-On, Liquid	
Трегер для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray, Pin	
Расцветка IPS e.max Press/CAD	
Упаковка IPS e.max®	

Принадлежности CAD/CAM

Гель для протравливания IPS® Ceramic Etching Gel	43
Пинцет	
Контрастный спрей для врача IPS® Contrast Spray Chairside	
Фиксирующая паста IPS® Object Fix Flow (текучая)	
IPS® Object Putty (вязкая)	
Культевой материал IPS® Natural Die Material	
IPS® Natural Die Material Kit Promo	
Расцветка IPS Natural Die Material	

Временные материалы

Telio CS C&B	46
Telio CS Link	
Telio CS Cem Implant	
Telio CS Desensitizer	
Стартовый набор Telio CAD for CEREC Starter Kit	
Блоки Telio® CAD for CEREC® and InLab® LT / B 40 L	
Блоки Telio® CAD for CEREC® and InLab® LT / B 55	
Telio CS Inlay	
Telio CS Onlay	

Фиксирующие материалы

Variolink N	52
Variolink N LC	
Variolink N Try-In	
Variolink® Veneer	
Variolink® Esthetic	
Multilink N	
Multilink Speed	
Multilink Automix	
Monobond® N	
Monobond® Etch & Prime	
Liquid Strip	
Ivoclean	

Эндодонтия/ Восстановление культы

FRC Postec Plus	62
MultiCore	

Слепочные материалы

Virtual	64
Virtual 380	
Virtual CADbite Registration	

Приборы

Bluephase® 20i	67
Bluephase® Style	
Bluephase® Style M8	
Bluephase N®	
Bluephase N® M	
Bluephase N® MC	
Bluephase® Meter II	
Cultura Incubator	

Профессиональный уход и профилактика

CRT bacteria	74
CRT buffer	
Plaque Test	
VivaSens®	
Cervitec® Plus	
Cervitec® Liquid	
Cervitec® Gel	
Fluor Protector N	
Fluor Protector	
Fluor Protector Gel	
Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear Proxyt	

Клинические аксессуары

OptraGate	83
OptraDam Plus	
OptraSculpt	
OptraSculpt Pad	
OptraContact	
OptraPol	
OptraFine	
OptraStick	
Astropol	
Astrobrush	
Politip	
Инжектор для кавифилов VivaPad	
Polyart Блок для смешивания	
P1 Инструмент	
Держатель для кисточек	
Кисточка с жесткой щетиной	
Кисточка с мягкой щетиной	
Vivabrush	
VivaBrush G	
Аппликатор Vivadent	
Канюли	



Прямые реставрации

ПОДГОТОВКА

АДГЕЗИВЫ

ПЛОМБИРОВАНИЕ

Изоляция

OptraGate®

Нежное решение для расширения рабочего поля



Преимущества:

- Значительно увеличенный доступ к рабочему полю
- Удобный для пациента, благодаря трехмерной гибкости
- Широкий диапазон применения

Продукты этой категории:

- OptraDam® Plus

Самопротравливающие адгезивы

Tetric N-Bond® Self-Etch

Нанооптимизированный однокомпонентный адгезив



Преимущества:

- Хранение при комнатной температуре
- Предотвращение постоперационной чувствительности
- Выпускается в бутылочках и удобной форме ручки VivaPen®

Продукты этой категории:

- N-Etch
- Te-Econom Bond®

Метод тотального травления

Tetric N-Bond®

Постоянно высокий результат сцепления



Преимущества:

- Постоянно высокие значения сцепления с эмалью и дентином
- Низкая постоперационная чувствительность
- Выпускается в бутылочках и удобной форме ручки VivaPen®

Продукты этой категории:

- N-Etch
- Te-Econom Bond®

Текущие композиты

Tetric® N-Ceram Bulk Fill

4 мм до Вашего успеха



Преимущества:

- Внесение одной порцией возможно благодаря Ivocerin®, запатентованному фотоинициатору
- Особая технология наполнителей обеспечивает низкий стресс при усадке
- Эстетические результаты в боковом отделе достигаются легко и быстро

Продукты этой категории:

- Tetric N-Ceram®
- Tetric N-Flow®
- Te-Econom Plus®



ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

УХОД

Моделировочные инструменты

OptraSculpt® Pad

Эффективное моделирование благодаря неприлипающей поверхности



Преимущества:

- Придание формы и контурирование без прилипания благодаря губчатой насадке.
- Высокоэластичная губчатая насадка позволяет создать гладкую и ровную поверхность
- Измерительная шкала на ручке инструмента помогает достичь профессиональных эстетических результатов

Продукты этой категории:

- OptraSculpt®
- OptraContact®

Приборы для световой полимеризации

Bluephase® Style

Самая маленькая полимеризационная лампа для любого применения



Преимущества:

- Для любого размера руки – удобно держать и мужчине, и женщине
- Для любого материала – универсальное использование благодаря поливолновой полимеризации широкого спектра (Polywave®)
- В любое время – возможна работа от сети с функцией Click&Cure

Продукты этой категории:

- Bluephase® 20i
- Bluephase® C8

Полиры

OptraPol®

Просто блестяще – всего за один шаг



Преимущества:

- Превосходный блеск и гладкая поверхность благодаря содержанию алмазных частиц
- Быстрая финишная полировка всего лишь за один рабочий этап
- Многократное использование, позволяющее экономить средства

Продукты этой категории:

- Astropol®
- Astrobrush®

Профессиональный уход

Proxyl®

Сохраняет реставрации в хорошем состоянии



Преимущества:

- Индивидуализированный с разными уровнями абразивности
- Нежный – естественный блеск
- Эффективный – ощущаемо гладкие поверхности

Продукты этой категории:

- Fluor Protector

Tetric N-Ceram Bulk Fill

Нано-оптимизированный
композитный материал 4 мм



Откройте для себя
новый, экономящий Ваше
время КОМПОЗИТ

4 мм к успеху

- Внесение одним слоем возможно благодаря Ivocerin®, запатентованному фотоинициатору
- Особая технология наполнителей обеспечивает низкий стресс при усадке
- Эстетические результаты в боковом отделе достигаются легко и быстро

**ivoclar**
vivadent[®]
passion vision innovation

Tetric® N-Ceram

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный наногибридный композит для прямых реставрационных работ. Выпускается в шприцах и кавифилах.

Показания:

– Универсальное применение – для реставраций на боковой и фронтальной группах зубов



Преимущества:

- Высокий уровень рентгеноконтрастности
- Быстрая и легкая полировка
- Основные свойства материала усовершенствованы благодаря нано-наполнителям
- Нано-пигменты обеспечивают уникальный эффект хамелеона и натуральную эстетику
- Нано-модификаторы придают оптимальную стабильность, великолепную моделируемость и удобство применения
- Материал не прилипает к инструментам

Цвета:

Цвета эмали: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3
 Цвета дентина: A3.5 Dentin, B2 Dentin
 Цвета отбеленных зубов: Bleach L, Bleach I, Bleach M
 Цвет высокопрозрачного режущего края: T

Формы поставки

В шприцах

Intro Pack 640103

Tetric N-Ceram. 1 x A1, 1 x A2, 1 x A3, 1 x B2 по 3,5 г
 Tetric N-Bond 1 x 6 г
 N-Etch 1 x 2 г
 различные аксессуары

Intro Pack 631072

Tetric N-Ceram 1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2 по 3,5 г
 Tetric N-Bond 1 x 6 г
 N-Etch 1 x 2 г
 различные аксессуары

Intro Pack 640104

Tetric N-Ceram 1 x A1, 1 x A2, 1 x A3, 1 x B2 по 3,5 г
 Tetric N-Bond Self-Etch 1 x 6 г
 различные аксессуары

Intro Pack 630320

Tetric N-Ceram 1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2 по 3,5 г
 Tetric N-Bond Self-Etch 1 x 6 г
 различные аксессуары

Refill 1 x 3,5 г см. стр. 8

1 шприц, 3,5 г (16 цветов)

Кавифилы

Refill 10 x 0,25 г см. стр. 8

10 Кавифилы, по 0,25 г. (16 цветов)

Расцветка 1 x 604023

Tetric N-Ceram® Bulk Fill

Tetric N-Ceram® Bulk Fill – эффективный, рентгеноконтрастный композит для внесения порцией 4 мм для прямых реставраций в боковом отделе.

Показания:

- Реставрации молочных зубов
- Реставрации в боковом отделе (Классы I и II)
- Реставрации V класса (цервикальный кариес, эрозии корня зуба, клиновидный дефект)
- Расширенное запечатывание фиссур на молярах и премолярах.



Преимущества:

- Может вноситься порциями до 4 мм, благодаря Ivocerin®, запатентованному фотоинициатору
- Низкие показатели усадки и полимеризационного стресса, благодаря компоненту, снижающему усадочное напряжение
- Время полимеризации всего 10 секунд (при интенсивности света 1000 мВт/см²)
- Эстетичные 4-миллиметровые реставрации, благодаря прозрачности естественной эмали, 15%
- Однородная консистенция позволяет легко адаптировать материал к стенкам полости

Цвета:

Универсальные цвета: IVA, IVB, IVW

Формы поставки

В шприцах

System Kit 647627

Tetric N-Ceram Bulk Fill 2 x IVA, 1 x IVB, 1 x IVW 4 x 3,5 г
 Tetric N-Bond Self-Etch 1 x 6 г

System Kit 647634

Tetric N-Ceram Bulk Fill 2 x IVA, 1 x IVB, 1 x IVW 4 x 3,5 г
 Tetric N-Bond 1 x 6 г

Refill 1 x 3,5 г. См. стр. 8

1 шприц, 3,5 г (3 цвета)

Кавифилы

Refill 10 x 0,25 г. См. стр. 8

10 Кавифилы, по 0,25 г (3 цвета)

	Цвета	Tetric® N-Ceram Шприцы 1 x 3,5 г.	Tetric® N-Ceram Кавифилы 10 x 0,25 г.	Tetric® N®-Ceram Bulk Fill Шприцы 1 x 3,5 г.	Tetric®N-Ceram Bulk Fill Кавифилы 10 x 0,25 г.	Tetric® N-Flow Шприцы 1 x 2 г.
ENAMEL	A1	604025	604035			604046
	A2	604026	604036			604047
	A3	604027	604037			604048
	A3.5	604028	604038			604049
	A4	604030	604040			604051
	B1					
	B2	604031	604041			604052
	B3	616873	616867			
	B4					
	C1					
	C2	616875	616869			
	C3	616876	616870			
	C4					
	D2					
	D3	616874	616868			
	D4					
	540					
	WE					
	GE					
	IVA				644171	644174
IVB				644172	644175	
IVW				644173	644176	
DENTIN	A1 Dentin					
	A2 Dentin					
	A3 Dentin					
	A3.5 Dentin	604029	604039			604050
	A4 Dentin					
	B1 Dentin					
	B2 Dentin	616877	616871			
	B3 Dentin					
	C3 Dentin					
	C4 Dentin					
	D2 Dentin					
	D4 Dentin					
	IVA5 Dentin					
	IVA6 Dentin					
BLEACH	Bleach L	604033	604043			604054
	Bleach M	616878	616872			
	Bleach XL					
	Bleach I	604034	604044			604055
	Bleach L Dentin					
	Bleach XL Dentin					
TRANSPARENT	T	604032	604042			604053
	110 T					
	420 T					
	Trans 20					
	Trans 30					
	Trans Opal					
	TW					
TG						

Tetric® N-Flow

Tetric N-Flow – светоотверждаемый рентгеноконтрастный текучий наногибридный композит для реставрационного лечения и фиксации прозрачных керамических реставраций. Выпускается в шприцах и кавифилах.



Показания:

- В качестве лайнера при реставрации полостей I и II классов
- Реставрации боковых зубов (классы III, IV)
- Реставрации небольших полостей всех классов
- Расширенное запечатывание фиссур
- Шинирование подвижных зубов
- Закрытие поднутрений
- Адгезивная фиксация прозрачных керамических и композитных конструкций

Преимущества:

- Нано-оптимизированная технология включает в себя нано-наполнители и нано-пигменты
- Высокая рентгеноконтрастность
- Время полимеризации всего 10 сек. (при интенсивности света 1000 мВт/см²)

Цвета:

Цвета эмали: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2

Цвета дентина: A3.5

Высокопрозрачный цвет режущего края: T

Цвета для отбеленных зубов: Bleach Light (L), Bleach Incisal (I)

Формы поставки

В шприцах

Шприцы	1 x 2 г см. стр. 8
1 шприц по 2 г (10 цветов)	

Кавифилы

Кавифилы	0 x 0,25 см. стр. 8
10 кавифилов по 0,25 г (10 цветов)	
Расцветка	1 x 604023

Te-Econom Plus®

Te-Econom Plus – это светоотверждаемый рентгеноконтрастный композитный материал для реставрационной терапии. Выпускается в шприцах.



Показания:

– Реставрации I-V классов

Преимущества:

- Отличные физические свойства
- Хорошая полируемость
- Высокая рентгеноконтрастность
- Длительное рабочее время
- Проверенные технологии и качество Ivoclar Vivadent

Цвета:

A1, A2, A3, A3.5, B2, C3

Формы поставки

Упаковка Intro Pack **2 x 4 г 610908**

1 x A2, 1 x A3 1 x 4 г каждый
 Eco-Etch 1 x 2 г
 Te-Econom Bond 1 x 5 г
 Аксессуары

Упаковка Intro Pack **4 x 4 г 610909**

1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2 1 x 4 г каждый
 Eco-Etch 1 x 2 г
 Te-Econom Bond 1 x 5 г
 Аксессуары

Упаковка Intro Pack **4 x 4 г 648186**

1 x A1, 1 x A2, 1 x A3, 1 x B2 1 x 4 г каждый
 Eco-Etch 1 x 2 г
 Te-Econom Bond 1 x 5 г
 Аксессуары

Системная упаковка System Pack **8 x 4 г 610907**

1 x A1, 3 x A2, 2 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2 1 x 4 г каждый
 Eco-Etch 1 x 2 г
 Te-Econom Bond 1 x 5 г
 Аксессуары

Refill **3 x 4 г см. стр. 8**

3 шприца по 4 г каждый (6 цветов)

Refill **1 x 4 г см. стр. 8**

1 шприц, 4 г (6 цветов)

Te-Econom Flow®

Te-Econom Flow – это текучий светоотверждаемый рентгеноконтрастный композитный материал для реставрационной терапии. Выпускается в шприцах.



Показания:

- Верхний слой
- Небольшие полости классов I и II
- Реставрации молочных зубов

Преимущества:

- Широкий спектр показаний
- Удобство применения
- Легкий доступ даже к самым маленьким полостям
- Точное и экономное нанесение

Цвета:

Выпускается в цветах A2, A3

Формы поставки

Refill

1 x 2 г см. стр. 8

1 шприц, 2 г (2 цвета)

Единственный Композитный Материал, КОТОРЫЙ МОЖЕТ НОСИТЬ ИМЯ Empress®

Уверенность

Эстетика керамики с преимуществами композита

Надежность

• Исключительные моделировочные свойства

Эстетика

• Легкое применение

• Естественные цвета

• Превосходные полировочные свойства



IPS Empress Direct

Эстетичный композитный материал
для прямых реставраций



IPS Empress Direct®

Светоотверждаемый наногибридный композит для высокоэстетичных прямых реставраций.



до лечения



после лечения

Показания:

- Пломбирование передних зубов (класс III, IV)
- Пломбирование боковых зубов (класс I и II)
- Пломбирование в области шейки зуба (класс V, например, в случае пришеечного кариеса, эрозии корней, клиновидных дефектов)
- Корректировка положения и формы зуба (например, закрытие диастемы, закрытие межзубного треугольника, удлинение режущего края)
- Изготовление виниров прямым способом

Преимущества:

- Широкий спектр показаний для передней и боковой группы зубов
- Широкая палитра естественных цветов с различной степенью прозрачности
- Нет определенной схемы наслоения
- Очень хорошая полируемость и долго сохраняющийся блеск
- Естественная флуоресцентность
- Низкая чувствительность к свету
- Относящаяся к системе расцветку можно автоклавируют, она выполнена из керамики. Это позволяет определять цвет с очень высокой точностью, также спустя длительное время, т.к. керамические пластинки не меняют свой цвет под воздействием света.

Цвета:

Дентиновые цвета (дентин):

A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, A6, B1, B2, C3, D2, Bleach L, Bleach XL

Цвета эмали (эмаль):

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, Bleach L, Bleach XL

Translucent: Trans 20, Trans 30, Trans Opal

Формы поставки

Шприцы

Basic Kit базовый набор 8 x 3 г 627218

Дентин: A1, A2, A3

Эмаль: A1, A2, A3

Транслюцент: Trans 30, Trans Opal

Basic Kit базовый набор 8 x 3 г 635243

Дентин: A1, A2, A3, A3,5

Эмаль: A1, A2, A3, A3,5

Empress Pad

Refill 1 x 3 г см.стр. 9

1 шприц по 3 г (32 цвета)

Расцветка дентинов IPS Empress Direct Dentin 1 x 627214

Расцветка для эмали IPS Empress Direct Enamel 1 x 627215

Кавифилы

Basic Kit базовый набор 80 x 0,2 г 627217

Дентин: A1, A2, A3

Эмаль: A1, A2, A3

Транслюцент: Trans 30, Trans Opal

Basic Kit базовый набор 80 x 0,2 г 635241

Дентин 10 x 0,2 г: A1, A2, A3, A3,5

Эмаль 10 x 0,2 г: A1, A2, A3, A3,5

Empress Pad

Refill 10 x 0,2 г см.стр. 9

10 кавифилов по 0,2 г (32 цвета)

IPS Empress Direct® Flow

IPS Empress Direct Flow – это светоотверждаемый текучий наногибридный композит, выпускаемый в трех цветах. Этот композитный материал используется для создания высокоэстетичных реставраций в переднем отделе. Эти особые текучие материалы выпускаются в удобных шприцах.



Формы поставки:

Шприцы

Refill 1 x 1,8 г см. стр. 9

1 шприц, 1,8 г (3 цвета)

IPS Empress Direct® Color

IPS Empress Direct Color предлагает 7 цветов для естественной индивидуализации прямых реставраций и конструкций, выполненных технологией CAD/CAM, а также для закрытия пятен на тканях зуба.



Показания:

- Для создания естественных эффектов в инцизальной трети
- Реставрации передних зубов (классы III и IV)
- Небольшие реставрации всех типов
- Починка композитной и керамической облицовки

Преимущества:

- Идеальное дополнение к IPS Empress Direct для создания особых эффектов
- Уникальный оттенок Trans Opal для создания эстетичной опалесцентности
- Естественная прозрачность для оптимального воспроизведения режущего края
- Исключительные возможности для воссоздания индивидуальных особенностей, таких, как флюороз
- Точное нанесение благодаря тонкой 0,9 мм канюле
- Удобное применение, благодаря эргономичной форме шприца
- Оптимальное сходство с поверхностью обеспечивает стабильность
- Идеальная консистенция для контурирования при помощи кисточки
- Отличная полируемость

Цвета:

Trans Opal, Trans 30, Bleach XL

Показания:

- индивидуальная характеристика композитных реставраций, выполненных прямым методом, либо в лаборатории
- для закрытия пятен на тканях зуба
- характеристика виниров, выполненных стоматологом технологией CAD/CAM chairside

Преимущества:

- возможность естественной индивидуализации композитных и CAD/CAM реставраций
- удобное прямое нанесение, разбавление не требуется
- высокая покрывающая способность, также при нанесении тонкими слоями
- нежная кремообразная консистенция
- канюля 0,4 мм для точного нанесения
- оптимальное дополнение к IPS Empress Direct и IPS Empress CAD

Цвета:

Белый, медово-желтый, охра, коричневый, фиолетовый, синий, серый

Формы поставки

Шприцы

Набор 637898

IPS Empress Direct Color 7 x 1 г

Белый, медово-желтый, охра, коричневый, фиолетовый, синий, серый

Опакер IPS Empress Direct Opaque 1 x 1,8 г

Различные принадлежности

Refill 1 x 1 г

Белый 637899

Медово-желтый 637900

Охра 637903

Коричневый 637904

Фиолетовый 637902

Синий 637901

Серый 637905

IPS Empress Direct® Opaque

IPS Empress Direct Opaque – это светоотверждаемый опаловый материал для закрытия открытых металлических поверхностей, закрытия потемнений на тканях зуба.



Показания:

Закрытие следующих поверхностей:

- открытых металлических поверхностей при интраоральной починке дефектов керамических или композитных облицовок
- измененных в цвете тканей зуба

Преимущества:

- Высокая маскирующая способность даже при нанесении тонкого слоя
- Идеальное дополнение к системе IPS Empress
- Универсальный опаловый цвет, не требуется подбора цвета

Цвет:

Опаловый

Формы поставки

Шприцы

Refill	1 x 1,8 г	637897
1 шприц, 1,8 г (опаловый)		

Ceramic Repair

Комплексная система для интраоральных починок керамических и композитных реставраций.



Показания:

Починки сколов и переломов:

- реставраций, облицованных керамикой
- цельнокерамических реставраций
- композитных реставраций

Преимущества:

- высокая прочность сцепления
- простая технология работы
- продуманная эргономика

Формы поставки

Упаковка Intro Pack	628838
Tetric EvoCeram (A1, A2, A3, A3.5 Dentin)	4 x 3 г
IPS Empress Direct Opaque	1 x 1,8 г
Monobond Plus	1 x 5 г
Heliobond	1 x 6 г
Различные принадлежности	

Обзор светоотверждаемых адгезивов

Рабочие этапы	Адгезивы для тотального травления		Самопротравливающие адгезивы	
	Syntac®	Tetric N-Bond®	Tetric N-Bond® Self-Etch	
Протравка эмали	N-Etch 	N-Etch 	Tetric N-Bond® Self-Etch в бутылочке 	Tetric® N-Bond Self-Etch в форме ручки 
Протравка дентина	Syntac® Primer 			
Внесение праймера	Syntac® Adhesive 	Tetric N-Bond® 		
Бондинг	Heliobond 			

Адгезивы для не прямых реставраций

Рабочие этапы	Адгезивы для тотального травления	
	Syntac®	Excite F DSC
Протравка эмали	N-Etch 	N-Etch 
Протравка дентина	Syntac® Primer 	
Внесение праймера	Syntac® Adhesive 	Excite® F DSC 
Бондинг	Heliobond 	

N-Etch

Гель 37%-ой фосфорной кислоты для протравливания эмали и подготовки дентина.



Показания:

N-Etch используется в технике тотального травления в сочетании с адгезивами, композитами, фиксирующими цементами и материалами для запечатывания фиссур.

Преимущества:

- Оптимальный партнер для Tetric N-Bond
- Хороший протравливающий эффект на эмали и дентине
- Широкий спектр показаний для применения

Формы поставки

Jumbo	1 x 30 г / 1 x 2 г	635408
N-Etch Jumbo, N-Etch, различные аксессуары		
Refill N-Etch	2 x 2 г	630210

Tetric N-Bond®

Tetric N-Bond – это нано-оптимизированный светоотверждаемый однокомпонентный адгезив для эмали и дентина для применения в сочетании с техникой тотального травления.



Показания:

- для прямых композитных и компомерных реставраций светового и двойного отверждения
- для непрямых цельнокерамических и композитных реставраций (вкладки inlay, onlay, виниры)

Преимущества:

- использование нано-наполнителей обеспечивает образование гомогенного слоя и хорошее проникновение в дентинные каналы, что повышает прочность сцепления и снижает риск постоперационной чувствительности
- спиртовая основа для простого нанесения в один слой и улучшенной стабильности материала. Адгезив не испаряется преждевременно, что характерно для материалов на основе ацетона
- высокая прочность сцепления обеспечивает надежные отдаленные результаты
- независимость от методики работы - хорошая смачиваемость сухой и увлажненной поверхности

Формы поставки

Refill бутылочка	1 x 6 г	603936
Refill VivaPen	1 x 2 мл	613756

Различные принадлежности

Tetric N-Bond® Self-Etch

Tetric N-Bond – это светоотверждаемый нано-оптимизированный самопротравливающий однокомпонентный адгезив



Показания:

Адгезив для прямых светоотверждаемых композитных и компомерных реставраций

Преимущества:

- Постоянно высокие значения силы сцепления для длительного бондинга
- Не содержит ацетона - в качестве растворителя используется вода
- Хранится при комнатной температуре
- Снижена постоперационная чувствительность
- Теперь и в уникальной ручке VivaPen

Формы поставки

Refill бутылочка	1 x 6 г	628941
Refill VivaPen	1 x 2 мл	632729

Tetric N-Bond® Universal

Tetric N-Bond Universal – это однокомпонентный светоотверждаемый адгезив для прямых и непрямых реставраций, совместимый с любой техникой травления: самопротравливания, селективного травления эмали и тотального травления, демонстрирует высокую прочность сцепления на мокром или пересушенном дентине.

Показания:

- Прямые композитные и компомерные реставрации светового отверждения
- Прямое восстановление культи при помощи композитов светового, химического и двойного отверждения
- Починка сколов композитных и компомерных реставраций
- Адгезивная фиксация непрямых реставраций при помощи композитных фиксирующих материалов светового и двойного отверждения
- Запечатывание подготовленной поверхности зуба перед временной/постоянной фиксацией непрямых реставраций
- Десенсибилизация гиперчувствительной поверхности шейки зуба

Преимущества:

- Универсальное применение - для прямых и непрямых реставраций, совместим с любой техникой травления
- Предсказуемые результаты - высокая прочность сцепления на мокром или пересушенном дентине.
- Универсальная форма выпуска: флаконы и удобная форма ручки VivaPen

Формы поставки

Refill VivaPen	1 x 2 мл	668222
Refill VivaPen	1 x 2 мл/40	674175
Starter Kit VivaPen	1 x 0,5 мл	668223
Refill VivaPen браш-канюли	100 шт.	627178
Refill VivaPen защитные рукава	300 шт.	627492
Refill флакон	1 x 6 г	668221
Refill аппликаторы Vivadent		603949



Eco-Etch®

Фосфорный протравливающий гель



Показания:

Eco-Etch используется в технике тотального протравливания в комбинации с Te-Econom Bond.

Формы поставки

Refill	2 x 2 г	574151
---------------	----------------	---------------

Te-Econom Bond®

Te-Econom Bond – это однокомпонентный бондинговый агент для эмали и дентина, применяется в сочетании с техникой тотального травления.



Показания:

– прямые светоотверждаемые реставрации

Преимущества

- Одна бутылочка, один слой адгезива
- Высокая сила сцепления
- Минимальное испарение растворителя (спирт)
- Хранение при комнатной температуре

Формы поставки

Refill бутылочка	1 x 5 г	611129
-------------------------	----------------	---------------

Email Preparator blue

37%-ная фосфорная кислота, выпускается в виде жидкости.



Показания:

– для протравливания эмали и дентина, применяется при запечатывании, пломбировании композитами, а также адгезивной фиксации реставраций.

Преимущества:

- микросцепление адгезива Heliobond с протравленной эмалью
- хорошее затекание в фиссуры благодаря жидкой консистенции
- хорошее закрепление запечатывающего материала, композита, а также фиксируемой реставрации.

Формы поставки

Refill	1 x 6 г	533034
---------------	----------------	---------------

Syntac®

Классический адгезив для создания стабильной химической связи между композитными материалами и тканями зуба.



Показания:

- Прямые композитные реставрации передних и боковых зубов
- Адгезивная фиксация не прямых композитных и компомерных реставраций

Преимущества:

- для прямых и не прямых реставраций
- положительный клинический опыт в течение многих лет
- уменьшение послеоперационной чувствительности
- превосходная моментальная связь между дентином/эмалью и композитом
- высокая сила адгезии
- хранение при комнатной температуре

Форма поставки

Набор (Assortment)	2 x 3 г / 1 x 6 г	532891
---------------------------	--------------------------	---------------

Праймер Syntac Primer, адгезив Syntac Adhesive, Heliobond, различные принадлежности

Refill праймер	1 x 3 г	532893
-----------------------	----------------	---------------

Refill адгезив	1 x 3 г	532892
-----------------------	----------------	---------------

Heliobond

Heliobond – это светоотверждаемый однокомпонентный адгезив для оптимизации протравливания эмали, используемый со всеми светоотверждаемыми пломбировочными материалами.



Показания:

- адгезив для создания связи с эмалью
- вместе с Syntac может быть использован также на дентине
- фиксация украшений для зубов, например, Skycse
- прозрачное запечатывание фиссур и пломб
- используется в качестве связующего слоя при починках пластмассовых конструкций, коронок и мостовидных протезов.

Преимущества:

- для оптимального краевого прилегания на границе зуб/композит при использовании техники травления эмали.
- хранение при комнатной температуре

Форма поставки

Refill	1 x 11 г	532906
---------------	-----------------	---------------

Refill	1 x 6 г	532907
---------------	----------------	---------------

Excite® F

Excite F – это светоотверждаемый однокомпонентный адгезив, выделяющий фтор, используемый в сочетании с техникой тотального травления.



Показания:

- прямые реставрации из композитов светового и двойного отверждения и компомеров
- светоотверждаемая адгезивная фиксация непрямых реставраций

Преимущества:

- удобное и экономящее материал нанесение благодаря ручке VivaPen (прим. 120 применений)
- выпускается также в бутылочках и в разовых дозах Single Dose
- очень высокая сила адгезии на эмали и дентине
- не содержит ацетона (растворитель – спирт)
- выделение фтора
- сниженная послеоперационная чувствительность
- хранение при комнатной температуре

Форма поставки

Упаковка Intro Pack VivaPen		627177
Excite F в ручке VivaPen	1 x 2 мл	
Протравочный гель Total Etch	1 x 2 г	
Различные принадлежности		
Refill VivaPen	1 x 2 мл	613724
различные принадлежности		
Refill VivaPen	3 x 2 мл	626969
различные принадлежности		
Refill VivaPen канюли	100 x	627178
Refill VivaPen защитные колпачки	300 x	627492
Refill бутылочка	1 x 5 г	630375
Refill бутылочка	2 x 5 г	630376
Refill аппликаторы Regular (голубые)	50 x	631699
Refill разовые дозы Single Dose	50 x 0,1 г	630377

Excite® F DSC

Excite F DSC – это адгезив двойного отверждения, выделяющий фтор, для эмали и дентина, используемый в сочетании с техникой тотального травления.



Показания:

- адгезивная фиксация корневых штифтов, например, FRC Postec Plus
- адгезивная фиксация не прямых безметалловых транслюцентных реставраций фиксирующим композитом двойного или химического отверждения (например, Variolink® II)
- прямые реставрации и восстановление культи с композитными материалами химического или двойного отверждения (например, MultiCore®)

Преимущества:

- запатентованная технология с аппликатором, покрытым инициатором
- экономия времени: один шаг, один слой
- не требуется световой полимеризации
- высокая сила сцепления на эмали и дентине
- разовая доза Single-Dose выпускается с аппликаторами двух размеров: средний (regular) и малый (small/endo)

Форма поставки

Refill

средний (Regular)	20 x 0,1 г	634669
средний (Regular)	50 x 0,1 г	630378
малый (Small/Endo)	20 x 0,1 г	634668
малый (Small/Endo)	50 x 0,1 г	630380

AdheSE®

AdheSE – это самопротравливающий светоотверждаемый двухкомпонентный адгезив.



Показания:

- прямые композитные реставрации полостей классов I–V
- после световой полимеризации бондинг AdheSE может быть использован для реставраций из композитов двойного или химического отверждения (например, MultiCore)

Преимущества:

- экономит время, поскольку не требуется выполнять протравливание
- экономично – примерно на 150 применений
- надежность и простота в использовании благодаря цветовой кодировке бутылочек и блоков для смешивания
- очень высокая сила адгезии
- не требуется хранения в холодильнике

Форма поставки

Упаковка Intro Pack	2 x 5 г	573690
AdheSE праймер и бондинг различные принадлежности		
Refill праймер и бондинг	2 x 5 г	573691

Refill праймер	1 x 5 г	573692
Refill бондинг	1 x 5 г	573693
Refill аппликатор	2 x 25	564600

AdheSE® Universal

Светоотверждаемый однокомпонентный стоматологический адгезив для эмали и дентина, выпускается в ручке VivaPen® и бутылочках для многократного дозирования адгезива.

Предназначен для прямых и непрямых реставраций и совместим с любой техникой травления: самопротравливания, селективного травления эмали, техникой протравливания и смывания (Etch&Rinse), демонстрирует высокую прочность сцепления на мокром или пересушенном дентине



Показания:

- Прямые светоотверждаемые композитные и компомерные реставрации.
- Прямое восстановление культи свето- и самоотверждающимися композитами и композитами двойного отверждения.
- Применение при починке сколовшихся композитных и компомерных пломб.
- Клеевая фиксация непрямых реставраций со светоотверждаемыми композитами и композитами двойного отверждения.
- Герметизация подготовленных поверхностей зуба до временного или постоянного цементирования не прямой пломбы.
- Десенсибилизация сверхчувствительных шеек зубов.

Преимущества:

- Благодаря функции Click & Bond® вносится необходимое количество материала – экономия материала
- Подходит для применения в процедурах прямых и непрямых реставраций, не зависимо от применяемой техники травления
- Высокая сила сцепления на мокром или пересушенном дентине.

Форма поставки

Adhese Universal System VivaPen 1 x 2 мл 664504

Adhese Universal VivaPen, VivaPen канюли, VivaPen защитные рукава

Starter Kit VivaPen 1 x 0,5 мл 663717

Adhese Universal VivaPen, VivaPen канюли, VivaPen защитные рукава

Refill VivaPen

Adhese Universal VivaPen 1 x 2 мл **665156**

Adhese Universal VivaPen 3 x 2 мл **664505**

Sample VivaPen 1 x 0,1 мл 663726

Adhese Universal VivaPen, VivaPen канюли, VivaPen защитные рукава

Refill VivaPen канюли 100 шт. 627178

Refill VivaPen канюли 300 шт. 627161

Refill VivaPen защитные рукава 300 шт. 627492

Refill бутылочка 1 x 5 г 663720

Refill Bottle 2 x 5 г 663721

Refill Vivadent Аппликаторы (зеленые) 50 шт. 664698

IPS Empress®

Система IPS Empress вот уже более двадцати лет известна как керамический материал, обрабатываемый в лаборатории. Однако, начиная с введения IPS Empress CAD, эстетичные реставрации можно изготавливать с помощью технологии CAD/CAM прямо в кабинете врача-стоматолога. Новинкой в семействе IPS Empress является новый композитный материал для терапии прямого восстановления: IPS Empress Direct (см. в разделе Композиты).

Блоки IPS Empress CAD подходят для изготовления цельнокерамических вкладок типа Inlay, Onlay, виниров и коронок с помощью технологии CAD/CAM. Они выпускаются с двумя степенями транслюцентности (высокая транслюцентность = high translucency и низкая транслюцентность = low translucency), а также существуют полихроматические блоки IPS Empress CAD Multi. Реставрации IPS Empress CAD либо просто заполировываются, либо окрашиваются и глазуруются, а затем фиксируются адгезивно.

 Система IPS Empress		
Зубной техник	CAD/CAM пользователи	Стоматолог
IPS Empress Esthetic  Керамические реставрации, изготовленные в лаборатории	IPS Empress CAD  Керамические реставрации, изготовленные в кабинете врача или в лаборатории	IPS Empress Direct  Прямая композитная реставрация

Блоки IPS Empress® CAD HT

Блоки IPS Empress CAD HT являются более прозрачными и менее светлыми, чем блоки LT; благодаря этому, а также эффекту хамелеона, они лучше всего подходят для изготовления вкладок типа Inlay/Onlay. Благодаря повышенной транслюцентности цвет тканей зуба дополняет цвет реставрации, что, в сочетании с живой флюоресцентностью, обеспечивает гармоничную цветовую интеграцию реставрации в полости рта.



Форма поставки

IPS Empress CAD для CEREC® и inLab HT

Refill Блоки HT – Chromascop по 5 шт. см. стр. 29

(4 размера / 3 цвета Chromascop)

Refill Блоки HT – A-D по 5 шт. см. стр. 29

(4 размера / 9 цветов A-D)

Блоки IPS Empress® CAD LT

Блоки IPS Empress CAD LT являются более светлыми и имеют естественный насыщенный цвет, поэтому они применяются для изготовления реставраций больших размеров. Благодаря повышенной «светлости» коронки и частичные коронки из этих блоков не кажутся серыми. Блоки имеют живую флюоресцентность, соответствующую области показаний, что позволяет им при различных условиях освещенности идеально гармонизировать с соседними зубами.



Форма поставки

IPS Empress® CAD для CEREC® и inLab® LT

Refill Блоки LT – Chromascop по 5 шт. см. стр. 29

(4 размера / 3 цвета Chromascop)

Refill Блоки LT – A-D по 5 шт. см. стр. 29

(4 размера / 9 цветов A-D)

Refill Блоки LT – Bleach по 5 шт. см. стр. 29

(3 размера / 4 цвета Bleach)

Блоки IPS Empress® CAD Multi

Полихроматические блоки IPS Empress CAD Multi имеют цветовой переход от дентина к режущему краю, благодаря чему реставрации из них эстетичны и естественны, даже без дополнительной индивидуализации. Блоки IPS Empress CAD Multi в пришеечной области имеют более насыщенный цвет и естественную opakость, а в области режущего края – необходимую прозрачность.



Форма поставки

IPS Empress CAD для CEREC и inLab Multi

Refill Блоки Multi – A-D по 5 шт. см. стр. 29

(3 размера / 5 цветов A-D)

Refill Блоки Multi – Bleach по 5 шт. см. стр. 29

(3 размера / 2 цвета Bleach)

IPS Empress® CAD Пробные блоки

Три блока IPS Empress CAD цвета A2 (HT, LT, Multi).



Форма поставки

IPS Empress CAD для CEREC

и inLab Пробные блоки 603417

IPS Empress CAD for CEREC and inLab HT A2 / I 12 1 x

IPS Empress CAD for CEREC and inLab LT A2 / C 14 1 x

IPS Empress CAD for CEREC and inLab Multi A2 / C 14 L 1 x

ОБЗОР БЛОКОВ

	A-D								
	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	C2	D3
	HT High Translucency	LT Low Translucency	Multi						
I 8	● 602500	● 602501	● 602502	● 602503	● 602504	● 602505	● 602506	● 602507	● 602508
I 10	● 602510	● 602511	● 602512	● 602513	● 602514	● 602515	● 602516	● 602517	● 602518
	● 602547	● 602548	● 602549	● 602550	● 602551	● 602552	● 602553	● 602554	● 602555
I 12	● 602520	● 602521	● 602522	● 602523	● 602524	● 602525	● 602526	● 602527	● 602528
	● 602557	● 602558	● 602559	● 602560	● 602561	● 602562	● 602563	● 602564	● 602565
	● 602592	● 602593	● 602594	● 602595	● 602596				
C 14	● 602567	● 602568	● 602569	● 602570	● 602571	● 602572	● 602573	● 602574	● 602575
	● 602598	● 602599	● 602600	● 602601	● 602602				
C 14L	● 602604	● 602605	● 602606	● 602607	● 602608				
	Chromascop			Bleach					
	100	200	300	BL1	BL2	BL3	BL4		
	HT High Translucency	LT Low Translucency	Multi						
I 8	● 602484	● 602485	● 602486						
I 10	● 602488	● 602489	● 602490						
	● 602531	● 602532	● 602533		● 602577	● 602578	● 602579	● 602580	
I 12	● 602492	● 602493	● 602494						
	● 602535	● 602536	● 602537		● 602582	● 602583	● 602584	● 602585	
					● 607681		● 607682		
C 14	● 602539	● 602540	● 602541						
					● 602587	● 602588	● 602589	● 602590	
C 14L					● 607683		● 607684		
					● 607672		● 607673		

Набор универсальных красителей IPS Empress® Universal Shade/Stains Kit

Наборы IPS Empress Universal Shade/Stains Kits (Chromascop и A-D) объединяют в себе различные ходовые красители для дентина и интенсивные красители. С помощью красителей выполняются индивидуальные эффекты на поверхности реставрации.

Для заключительного глазурования реставраций IPS Empress в вашем распоряжении находится тонкозернистая глазуровочная паста нежной консистенции.



Форма поставки

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit 602468

Красители IPS Empress Universal Shade Цвета: 110/120, 130, 140/210, 220/230, 410/420	по 1 x 3 г
Красители для режущего края IPS Empress Universal Shade Incisal Цвета: I1, I2	по 1 x 3 г
Красители IPS Empress Universal Stains Цвета: белый, оранжевый, красное дерево, хаки, темно-бордовый	по 1 x 1 г
Универсальная газурь IPS Empress Universal Glaze	3 г
Универсальная жидкость для газури и красителей IPS Empress Universal Glaze and Stain	15 мл
Пинцет, моделировочная кисточка 00	по 1 x

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit A-D 602469

Красители IPS Empress Universal Shade A1, A2/A3/A3,5, B1, B2/B3/B4, C1/C2, D2/D3	по 1 x 3 г
Красители для режущего края IPS Empress Universal Shade Incisal I1, I2	по 1 x 3 г
Красители IPS Empress Universal Stains Цвета: белый, оранжевый, красное дерево, хаки, темно-бордовый	по 1 x 1 г
Универсальная газурь IPS Empress Universal Glaze	3 г
Универсальная жидкость для газури и красителей IPS Empress Universal Glaze and Stain	15 мл
Пинцет, моделировочная кисточка 00	по 1 x

Универсальные красители IPS Empress® Universal Shades

Универсальные красители IPS Empress Universal Shades выпускаются в 15 цветах Chromascop и 9 цветах A-D. С их помощью можно создавать базовый цветовой тон зуба (Chromascop и A-D). Для воспроизведения режущего края имеются два универсальных красителя для режущего края IPS Empress Universal Shades Incisal.



Форма поставки

Универсальные красители IPS Empress

Universal Shade цвета Chromascop	по 1 x 3 г
110 / 120	562457
130	562462
140 / 210	562458
220 / 230	562459
240	562463
310	562464
320	562465
330	562466
340	562467
410 / 420	562460
430 / 440	562461
510	562468
520	562469
530	562470
540	562471

Универсальные красители

IPS Empress Universal Shade цвета A-D	по 1 x 3 г
A1	562472
A2 / A3 / A3.5	562473
A4	562474
B1	562475
B2 / B3 / B4	562476
C1 / C2	562477
C3 / C4	562478
D2 / D3	562479
D4	562480

Универсальные красители режущего края

IPS Empress Universal Shade Incisal	по 1 x 3 г
I1	602471
I2	602472

Универсальные красители IPS Empress® Universal Stains

Эти интенсивные красители выпускаются в 14 различных цветах. Они используются для воспроизведения естественных эффектов. С помощью трех дополнительных цветов базового синего (Basic blue), базового красного (Basic red) и базового желтого (Basic yellow) можно индивидуально создавать различные цветовые оттенки.



Форма поставки

Универсальные красители IPS Empress Universal Stains

IPS Empress Universal Stains	по 1 x 1 г
белый	562481
черный	562482
красное дерево	562483
хаки	562484
оранжевый	562485
серый	562486
ваниль	562487
имитация трещины	562488
оливковый	562489
желтый	562490
базовый синий	562491
базовый желтый	562492
базовый красный	562493
темно-бордовый	562494

Универсальная глазурь IPS Empress® Universal Glaze

Глазуровочная паста для глазурования всех реставраций IPS Empress CAD.

Жидкость для глазури и красителей используется для регулирования консистенции следующих материалов:

универсальных красителей IPS Empress Universal Shade, универсальных красителей IPS Empress Universal Stains и универсальной глазури IPS Empress Universal Glaze.



Форма поставки

Универсальная глазурь IPS Empress Universal Glaze 3 г 562495

Универсальная жидкость для глазури и красителей IPS Empress Universal Glaze and Stain 15 мл 562496

Универсальная глазурь-спрей IPS Empress® Universal Glaze Spray

Для быстрого и простого глазурования полноанатомических (индивидуализированных) реставраций IPS Empress (Esthetic и CAD). Также может служить для глазурования реставраций, облицованных массами IPS Empress Esthetic Veneer.



Форма поставки

Глазурь-спрей IPS Empress Universal Glaze Spray 1 x 120 мл (270 мл) 609432AN

Для работы техникой редуцирования (Cut-Back) (наслоение в области режущего края на фронтальные коронки и виниры IPS Empress CAD) существует облицовочный материал IPS Empress Esthetic. Он объединяет различные массы для наслоения и жидкости (более подробное описание в каталоге зуботехнической продукции).

IPS Empress® CAD HT/LT Расцветка A-D/BL

Для предотвращения перекрестного инфицирования в полости рта индивидуальные планшеты и вся расцветка могут автоклавироваться.

Эта расцветка показывает существующие цвета A-D и ультра-светлые цвета Bleach материалов IPS Empress CAD.



Форма поставки

Расцветка A-D/BL IPS Empress CAD HT/LT 603418

Упаковка IPS Empress®



Форма поставки

Упаковка IPS Refill

Бокс для материалов IPS Empress малый (55 мм) 602990

Вставки из поролона

Вставка для блоков IPS Empress CAD 602988

Вставка для красителей IPS Empress Shade/Stain 609450

IPS e.max[®] CAD

IPS e.max CAD – это высокопрочная дисиликатлитиевая стеклокерамика (LS2), которая обрабатывается в системе CAD/CAM прямо в кабинете врача-стоматолога (chairside) или в лаборатории (labside).

Блоки IPS e.max CAD для обработки в кабинете врача-стоматолога предлагаются в 16 цветах A-D и 4 ультрасветлых цветах


Vleach-BL. Существуют две степени транслюцентности и два размера. Для изготовления каркасов (техника наложения) в лаборатории дополнительно предлагается еще опакный блок. Блоки IPS e.max CAD с высокой транслюцентностью (HT) применяются для вытачивания минимально инвазивных полноанатомических реставраций, таких, как вкладки типа Inlay, Onlay или виниры. Для частичных коронок и коронок используются менее транслюцентные (LT) блоки.

Реставрации вытачиваются из блоков в «голубом» состоянии. В течение короткого комбинированного обжига кристаллизации/глазурования, благодаря которому этап полировки становится излишним, коронки приобретают высокую прочность (360 МПа) и желаемые эстетические свойства (цвет, прозрачность, светлую тональность). С помощью красителей можно провести дополнительную индивидуализацию.

Затем реставрации устанавливаются. В случае коронок, кроме адгезивной фиксации, у врача существует выбор: самоадгезивная или традиционная.



Препарирование

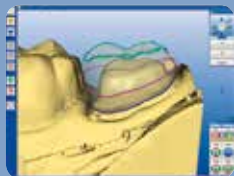

Конструкция



Процесс вытачивания



Примерка



Нанесение красителей и/или глазури



Кристаллизация



Готовая реставрация



Традиционно цементованная коронка IPS e.max CAD

IPS e.max[®] CAD for CEREC[®] and inLab[®]

Для эффективного изготовления полноанатомических реставраций (Monolithic Solutions) высокой прочности, стойких к нагрузкам и обладающих проверенными клиническими свойствами. Блоки выпускаются в цветах A-D и Bleach и могут фрезероваться в системах CEREC[®] или inLab[®] фирмы Sirona. Они оптимально подходят для изготовления монолитных вкладок Inlay, Onlay, виниров, коронок и мостовидных протезов на 3 единицы. Если требуется эстетическая характеристика, ее можно выполнить техникой окрашивания или Cut-back.



Форма поставки

Базовый набор IPS e.max CAD for CEREC and in Lab Basic Kit

626375

Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab Blocks C14, Цвета: LT A1, LT A2	2 x 5 шт.
Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab Blocks C14, Цвета: HT A1, HT A2	2 x 5 шт.
Красители IPS e.max CAD Crystall./Shade, Цвета: 1, 2, I1, I2	4 x 3 г
Красители IPS e.max CAD Crystall./Stains, Цвета: белый, закат, хаки, красное дерево	4 x 1 г
Пастообразная газурь IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste	1 x 3 г
Глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray	1 x 120 мл (270 мл)
Жидкость для газури IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid	x 15 мл
Корректировочная масса IPS e.max CAD Crystall./Add-On	1 x 5 г
Жидкость для корректировочной массы IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid	1 x 15 мл
Контрастный спрей для врача IPS Contrast Spray Chairside сине-лимонный	1 x 50 мл
Virtual CADbite	1 x 50 мл
Лоток для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray	1 x
Фиксирующая паста текучая IPS Object Fix Flow	1 x 10 мл
Фиксирующая паста вязкая IPS Object Fix Putty	x 10 г
Multilink Automix	1 x 5 мл
Праймер Multilink Primer A/B	1 x 3 г
Monobond Plus	1 x 5 г
Набор для протравки IPS Ceramic Etching Gel Kit	1 x
Различные принадлежности	

Монолитные решения: блоки HT I 12 и C 14

Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab HT I 12 по 1 x 5

HT BL1	626423
HT BL2	626424
HT BL3	626425
HT BL4	626426
HT A1	626391
HT A2	626392
HT A3	626393
HT A3.5	626394
HT A4	626395
HT B1	626396
HT B2	626397
HT B3	626398
HT B4	626399
HT C1	626400
HT C2	626401
HT C3	626402
HT C4	626403
HT D2	626404
HT D3	626405
HT D4	626406

IPS e.max CAD for CEREC and inLab HT C 14 по 1 x 5

HT BL1	626427
HT BL2	626428
HT BL3	626429
HT BL4	626430
HT A1	626407
HT A2	626408
HT A3	626409
HT A3.5	626410
HT A4	626411
HT B1	626412
HT B2	626413
HT B3	626414
HT B4	626415
HT C1	626416
HT C2	626417
HT C3	626418
HT C4	626419
HT D2	626420
HT D3	626421
HT D4	626422



Монолитные решения: блоки LT I 12 и C 14

Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab

LT I 12 blocks	по 1 x 5
LT BL1	605338
LT BL2	605339
LT BL3	605340
LT BL4	605341
LT A1	605318
LT A2	605319
LT A3	605320
LT A3.5	605321
LT A4	626377
LT B1	605322
LT B2	605323
LT B3	605324
LT B4	626378
LT C1	626379
LT C2	605325
LT C3	626380
LT C4	626381
LT D2	626382
LT D3	605326
LT D4	626383

IPS e.max CAD for CEREC and inLab

LT C 14	по 1 x 5
LT BL1	605343
LT BL2	605344
LT BL3	605345
LT BL4	605346
LT A1	605328
LT A2	605329
LT A3	605330
LT A3.5	605331
LT A4	626384
LT B1	605332
LT B2	605333
LT B3	605334
LT B4	626385
LT C1	626386
LT C2	605335
LT C3	626387
LT C4	626388
LT D2	626389
LT D3	605336
LT D4	626390



Монолитные решения: блоки С 16 и В 32

Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab

LT C 16	по 1 x 5	
LT BL2		648221
LT A1		648188
LT A2		648189
LT A3		648190
LT A3.5		648191
LT B1		648193
LT B2		648194
LT C1		648197
LT C2		648198
LT D2		648201

IPS e.max CAD for CEREC and inLab

LT B 32	по 1 x 3	
LT BL2		648225
LT A1		648204
LT A2		648205
LT A3		648206
LT A3.5		648207
LT B1		648209
LT B2		648210
LT C1		648213
LT C2		648214
LT D2		648217



Блоки IPS e.max[®] CAD for CEREC[®] and inLab[®] Impulse / C 14

Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab

Impulse C 14	1 x 5	
Starter Blocks		637798
Value 1		637795
Value 2		637796
Value 3		637797
Opal 1		637793
Opal 2		637794



IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® Abutment Solutions: блоки MO A 14 и LT A 16

Блоки для изготовления гибридных реставраций на имплантаты на одиночные зубы технологией CAD/CAM. Блоки имеют отверстия (диаметр S и L) для титановых основ Ti-Base фирмы Sirona.

Блоки IPS e.max CAD A 14 в 5 цветах MO (Medium Opacity – средняя opakовость) применяются для изготовления высокоэстетичных гибридных абатментов, а блоки IPS e.max CAD A 16 в 10 цветах LT (Low Translucency – низкая прозрачность) для функциональных гибридных абатментов-коронки. Эти гибридные конструкции изготавливаются индивидуально из блоков дисиликата лития (LS2) и склеиваются с титановой основой.



Форма поставки

Базовый набор IPS e.max CAD Abutment Solutions for CEREC and inLab Basic Kit **648187**

Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab A14 (L), Цвет: MO 1	1 x 5 шт.
Блоки IPS e.max CAD for CEREC and inLab A16 (L), Цвета: LT A1, LT A2	1 x 5 шт.
Набор для протравки IPS Ceramic Etching Gel Kit	1 x
Monobond Plus	1 x 5 г
Фиксирующая паста текучая IPS Object Fix Flow	1 x 10 мл
Расцветка IPS e.max CAD MO	1 x
Расцветка IPS e.max Press/CAD LT	1 x
Различные принадлежности	

Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab MO A14 (S)	по 1 x 5
MO 0	644357
MO 1	644358
MO 2	644359
MO 3	644360
MO 4	644361

IPS e.max CAD for CEREC and inLab MO A14 (L)	по 1 x 5
MO 0	644362
MO 1	644363
MO 2	644364
MO 3	644365
MO 4	644366

IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT A16 (S)	по 1 x 5
LT BL2	645595
LT A1	644367
LT A2	644368
LT A3	644369
LT A3,5	644370
LT B1	644372
LT B2	644373
LT C1	644376
LT C2	644377

IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT A16 (L)	по 1 x 5
LT BL2	645599
LT A1	644383
LT A2	644385
LT A3	644386
LT A3,5	644387
LT B1	644389
LT B2	644390
LT C1	644393
LT C2	644394
LT D2	644397



Кристаллические красители IPS e.max[®] CAD Crystall./Shades

Пастообразные красители для дентина, которые были специально разработаны для блоков IPS e.max CAD, могут наноситься как на реставрацию в «голубом» состоянии, так и на уже кристаллизованную поверхность.



Форма поставки

Красители IPS e.max CAD Crystall./Shades по 1 x 3 г

0	605348
1	605349
2	605350
3	605351
4	605352
11	605353
12	605354

Кристаллические красители IPS e.max[®] CAD Crystall./Stains

Пастообразные интенсивные красители, которые были специально разработаны для блоков IPS e.max CAD, могут наноситься как на реставрацию в «голубом» состоянии, так и на уже кристаллизованную поверхность.



Форма поставки

Красители IPS e.max CAD Crystall./Stains по 1 x 1 г

белый	605356
кремовый	605357
закат	605358
медный	605359
оливковый	605360
хаки	605361
красное дерево	605362

Пастообразная глазурь-кристалл IPS e.max[®] CAD Crystall./ Glaze Paste

Глазурь-паста, специально разработанная для нанесения на полно-анатомические реставрации IPS e.max CAD. Пасту можно наносить как на реставрацию в «голубом» состоянии до кристаллизации, так и при любом последующем обжиге.



Форма поставки

Пастообразная глазурь-кристалл IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste	3 г	605363
---	-----	--------

Кристаллическая глазурь-спрей IPS e.max[®] CAD Crystall./Glaze Spray

Глазурь-спрей, специально разработанный для нанесения на полно-анатомические реставрации IPS e.max CAD. Спрей наносится на реставрацию после нанесения кристаллических красителей IPS e.max CAD Crystall./Shades и Stains. После этого проводится комбинированный обжиг (кристаллизация/глазуровка).



Форма поставки

Глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./ Glaze Spray	120 мл (270 мл)	605364
--	-----------------	--------

Жидкость IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Liquid

Специальная жидкость для разведения красителей IPS e.max Crystall./Shades и Stains, а также пастообразной глазури IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste.



Форма поставки

Жидкость

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid	15 мл	605366
---	--------------	---------------

Корректировочные средства IPS e.max® CAD Crystall./Add-On, Liquid

Используются для корректировки проксимальных и окклюзионных контактных пунктов. Корректировка может проводиться как одновременно с кристаллизацией, так и отдельным корректировочным обжигом.



Форма поставки

IPS e.max CAD Crystall./Add-On Dentin	1 x 5 г	635549
IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal	1 x 5 г	605365
IPS e.max CAD Crystall./ Add-On Liquid all around	1 x 15 мл	605569

Трегер для кристаллизации IPS e.max® CAD Crystallization Tray, кристаллизационные штифты

Трегер из нитрида кремния для кристаллизации реставраций IPS e.max CAD. Поставляемые с ним кристаллизационные штифты необходимы при кристаллизации реставраций IPS e.max CAD LT.



Форма поставки

Трегер для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray	605367AN
Трегер из нитрида кремния G	1 x
IPS e.max CAD кристаллизационные штифты (размеры: S, M, L)	9 x
IPS e.max CAD Crystallization Pin Refill	по 6
S / M / L	605368AN

Расцветка IPS e.max® Press/IPS e.max® CAD

Расцветка для прессовочной керамики и CAD материалов является вспомогательным инструментом для определения цвета. Для предотвращения перекрестного инфицирования в полости рта индивидуальные планшеты и вся расцветка могут автоклавироваться. Цветовые планшеты показывают окончательный цвет, то есть после прессования или кристаллизации. Таким образом, они помогают выбрать цвет, а также проконтролировать качество процесса кристаллизации реставраций из IPS e.max CAD.

Форма поставки

Расцветка IPS e.max Press/CAD LT	1 x	605523
Расцветка IPS e.max Press/CAD HT	1 x	613998



Упаковка IPS e.max®

Этот бокс для материалов IPS e.max и поролоновые вставки служат для оптимального хранения материалов IPS e.max в лаборатории.



Форма поставки

Упаковка IPS e.max

Бокс для материалов IPS e.max малый (55 мм)	1 x	597483
Бокс для материалов IPS e.max средний (80 мм)	1 x	597484
Вставка IPS e.max Ceram Insert (для 22 Refills)	1 x	597485
Вставка для красителей Shade IPS e.max Ceram Shade Insert (для 16 Refills + 2 жидкости)	1 x	635843
Вставка для красителей Essence IPS e.max Ceram Essence Insert (для 21 Refills + 2 жидкости)	1 x	635844
Вставка IPS e.max Press/ZirPress Insert (для 24 Refills)	1 x	607668
Вставка IPS e.max CAD/ZirCAD Insert (для 6 Refills)	1 x	614248

Гель для протравливания IPS® Ceramic Etching Gel

IPS Ceramic Etching Gel применяется для создания шероховатой ретенционной поверхности на реставрации перед адгезивной фиксацией. Существенно повышает прочность сцепления керамики и композитных цементов.



Форма поставки

Набор геля для протравки

IPS Ceramic Etching Gel Kit **531550**

Гель для протравки IPS Ceramic Etching Gel	1 x 5 мл	
Порошок для нейтрализации	1 x 30 г	

Refill

Гель для протравки, красный IPS Ceramic Etching Gel	1 x 5 мл	531548
Порошок для нейтрализации	1 x 30 г	531549

Пинцет

Облегчает рабочий процесс при окрашивании и глазуровании



Форма поставки

Пинцет **1 x 554069**

Контрастный спрей для врача IPS® Contrast Spray Chairside

Спрей применяется для получения оптимальных оттисков при изготовлении реставраций CAD/CAM. Он выравнивает различные оптические свойства дентина и эмали и обеспечивает, таким образом, детальное отображение границ. Контрастный спрей IPS Contrast Spray chairside был разработан специально для использования в полости рта пациента.



Форма поставки

Контрастный спрей для врача, цвет лимонно-кремовый IPS Contrast Spray Chairside cream-lemon

5 одноразовых канюль, 2 распыляющих головки	1 x 50 мл (75 мл)	633159
--	--------------------------	---------------

Контрастный спрей для врача, цвет лимонно-голубой IPS Contrast Spray Chairside blue-lemon

5 одноразовых канюль, 2 распыляющих головки	1 x 50 мл (75 мл)	633160
--	--------------------------	---------------

Refill Канюли **100 x 614437**

Фиксирующая паста IPS® Object Fix Flow (текучая) IPS® Object Fix Putty (вязкая)

Вспомогательная фиксирующая паста различной вязкости служит опорой для цельнокерамических реставраций (например, IPS e.max CAD) при обжиге и кристаллизации. Паста применяется для закрепления реставраций на штифтах из нитрида кремния или непосредственно на трегере из нитрида кремния. Пасты легко наносятся и без затруднений удаляются после обжига.



Форма поставки

Фиксирующая паста IPS Object Fix Flow (текучая)	10 мл	605525
Фиксирующая паста IPS Object Fix Putty (вязкая)	10 г	605526

Культевой материал IPS® Natural Die Material

Для того, чтобы легче и надежнее воспроизвести желаемый цвет зуба, с помощью расцветки культевого материала IPS Natural Die Material определяется цвет культи после препарирования. С помощью цвета культи и с учетом желаемого цвета зуба может быть выбран соответствующий блок. Культевой материал IPS Natural Die Material выпускается в 9 цветах, среди них цвета для всех вариантов препарирования от ультрасветлого цвета для имитации культи отбеленных зубов (ND 1) и вторичного дентина, имеющего высокую насыщенность (ND 6), до культи сильно измененных в цвете/девитальных зубов (ND 9).



Форма поставки

Набор культевого материала IPS Natural Die Material Kit		597078
IPS Natural Die Material	по 8 г	
ND 1, ND 2, ND 3, ND 4, ND 5, ND 6, ND 7, ND 8, ND 9		
Изолирующая жидкость IPS Natural Die Material Separator	1 x 20 мл	
Штопфер IPS Condensers	8 x 10	
Ручки IPS Die Holders	8 x 10	
Универсальный держатель Universal holders	2 x	
Расцветка IPS Natural Die Material shade guide	1 x	
Refill IPS Natural Die Material	по 8 г	
ND1		597080
ND2		597081
ND3		597082
ND4		597083
ND5		597084
ND6		597085
ND7		597086
ND8		597087
ND9		597088
Изолирующая жидкость IPS Natural Die Material Separator	20 мл	597089

IPS® Natural Die Material Kit Promo



Форма поставки

IPS Natural Die Material Kit Promo		638177
IPS Natural Die Material Kit (597078)	1 x	
Расцветка IPS Natural Die Material	1 x	

Расцветка IPS® Natural Die Material

Расцветка позволяет определить оптимальный цвет культи после препаровки. Для предотвращения перекрестного инфицирования в полости рта индивидуальные планшеты и вся расцветка могут автоклавироваться.



Форма поставки

Расцветка IPS Natural Die Material		1 x	597090
---	--	------------	---------------

Telio®

Все для временных реставраций

С Telio могут работать и стоматологи (Telio CS), и пользователи технологии CAD/CAM (Telio CAD), и зубные техники (Telio Lab), поскольку она представляет собой комплексную систему.



Telio: одна система
для любого вида временных
реставраций.

Убедитесь сами.

- решение для традиционных временных реставраций и временных реставраций на имплантах
- продукты, совместимые между собой по цвету и материально-техническим свойствам
- безграничная гибкость в использовании

Telio® CS C&B

Самоотверждаемый пастообразный композитный материал для изготовления временных реставраций.



Показания:

Изготовление временных реставраций
 – коронок и мостовидных протезов,
 – вкладок Inlay, Onlay,
 – штифтовых временных конструкций
 – виниров

Преимущества:

– высокая прочность на излом и оптимальное время ношения
 – высокая точность и отсутствие напряжений
 – щадящее действие на пульпу и мягкие ткани
 – удобство в работе благодаря сдвоенной картуше с автоматическим смешиванием

Цвета:

Bleach BL3, A1, A2, A3, A3.5

Форма поставки

Telio CS C&B Starter Kit A2

Стартовый набор		628244
Telio CS C&B A2	1 x 78 г	
Смешивающие канюли	10 x	
Telio CS Link Transparent	1 x 6 г	
Смешивающие канюли	5 x	
Telio CS Desensitizer	1 x 5 г	
Аппликационные браши	50 x	
Различные принадлежности		

Refill Telio CS C&B

1 x 78 г

Сдвоенная картуша, 10:1, различные принадлежности		
Bleach BL3		628249
A1		628245
A2		628246
A3		628247
A3.5		628248

Refill Диспенсер	1 x	561381
Refill Смешивающие канюли	50 x	628157

Telio® CS Link

Временный translucentный композитный цемент двойного отверждения для эстетической фиксации временных конструкций.



Показания:

Временная фиксация временных конструкций:

- коронок и мостовидных протезов
- вкладок Inlay, Onlay
- виниров

Преимущества:

- не содержит эвгенола
- двойное отверждение
- высокая эстетика благодаря двум прозрачным цветам
- оптимальная ретенционность
- удобство в работе, благодаря сдвоенной картуше с автоматическим смешиванием

Цвета:

A3 и Transparent

Форма поставки

Telio CS C&B Starter Kit A2 Стартовый набор **628244**

Telio CS C&B A2	1 x 78 г
Смешивающие канюли	10 x
Telio CS Link Transparent	1 x 6 г
Смешивающие канюли	5 x
Telio CS Desensitizer	1 x 5 г
Апликационные браши	50 x
Различные принадлежности	

Refill Telio CS Link **2 x 6 г**

Сдвоенная картуша, 1:1, различные принадлежности

A3	627912
Transparent	627914

Refill Смешивающие канюли **10 x 627948**

Telio® CS Cem Implant

Самоотверждаемый композитный цемент с опциональной возможностью световой полимеризации для эстетической временно-долговременной фиксации на абатменты имплантов.



Показания:

- временно-долговременная фиксация супраконструкций имплантов на абатменты из титана, золота и оксида циркония.

Преимущества:

- временно-долговременная фиксация временных и постоянных конструкций.
- Время ношения: 6 месяцев и более

Форма поставки

Refill Telio CS Cem Implant **1 x 6 г**

Прозрачный	637510
Опаковый	637509

Refill смешивающие канюли **10 x 627948**

Telio® CS Desensitizer

Прозрачная жидкость, которая наносится на поверхность дентина для снятия или уменьшения гиперчувствительности дентина или послеоперационной чувствительности.



Показания:

Снятие или уменьшение гиперчувствительности дентина или послеоперационных болей при выполнении:

- временных реставраций
- фиксации/цементирования реставраций
- прямой реставрации

Преимущества:

- наносить всего лишь 10 секунд; световая полимеризация не требуется
- свобода в планировании и в выборе материалов. Никакого взаимодействия с материалами при последующем лечении.
- уменьшение гиперчувствительности дентина или послеоперационных болей
- оказывает очищающее действие на открытый дентин

Форма поставки

Telio CS C&B Starter Kit A2 Стартовый набор		628244
Telio CS C&B A2	1 x 78 г	
Смешивающие канюли	10 x	
Telio CS Link Transparent	1 x 6 г	
Смешивающие канюли	5 x	
Telio CS Desensitizer	1 x 5 г	
Апликационные браши	50 x	
Различные принадлежности		
Refill Telio CS Desensitizer		627911
Refill Telio CS Desensitizer Single Dose	1 x 5 г	
разовая доза	50 x 0,1 г	627916

Telio® CAD for CEREC® Starter Kit Стартовый набор

Стартовый набор Starter Kit включает в себя блоки, фиксирующий материал, материал для снятия чувствительности Desensitizer, а также различные принадлежности для врача-стоматолога при работе с системой CEREC.



Форма поставки

Telio CAD for CEREC Starter Kit A2		631697
Telio CAD for CEREC and inLab Блоки, В40 L		
Цвет: LT A1	2 x	
Telio CAD for CEREC and inLab Блоки, В40 L		
Цвета: LT A2, LT A3	по 3 x	
Telio CS Link Transparent	1 x 6 г	
Telio CS Desensitizer	1 x 5 г	
OptraPol Test Pack Тестовая упаковка		
Различные принадлежности		

Блоки Telio® CAD for CEREC® and InLab® LT / B 40 L



Форма поставки

Telio CAD for CEREC and inLab LT B 40 L по 1 x 3

LT BL3	627718
LT A1	627719
LT A2	627720
LT A3	627721
LT A3.5	627722
LT B1	627723

Telio CAD for CEREC and inLab LT B 40 L по 1 x 9

LT BL3	627726
LT A1	627727
LT A2	627728
LT A3	627729
LT A3.5	627730
LT B1	627731

Блоки Telio® CAD for CEREC® and InLab® LT / B 55



Форма поставки

Telio CAD for CEREC and inLab LT B 55 по 1 x 1

LT BL3	627818
LT A1	627819
LT A2	627820
LT A3	627821
LT A3.5	627822
LT B1	627823

Telio CAD for CEREC and inLab LT B 55 L по 1 x 3

LT BL3	627824
LT A1	627825
LT A2	627826
LT A3	627827
LT A3.5	627828
LT B1	627829

Telio® CS Inlay

Telio CS Inlay – это светоотверждаемый однокомпонентный материал для временных реставраций.



Показания:

- глубокие полости, препарированные под вкладки типа Inlay с параллельными стенками
- временное закрытие винтовых отверстий имплантатов
- в качестве прокладочного материала для уже готовых временных коронок и мостовидных протезов из поликарбоната или метакрилатов

Преимущества:

- хорошее увлажнение тканей зуба и отсутствие пятен
- незначительная полимеризационная усадка
- кариостатические и антибактериальные компоненты
- быстрое и простое применение, удаление одним куском
- светоотверждаемый однокомпонентный материал
- прилипает к зубу, а не к инструменту
- применение без дополнительного временного цемента
- выпускается в двух различных цветах и двух формах выпуска (шприцы и кавифилы)

Цвета:

прозрачный и универсальный

Telio® CS Onlay

Telio CS Onlay – это светоотверждаемый однокомпонентный материал для временных реставраций.



Показания:

- большие неглубокие полости, препарированные с малой ретенционностью, например, под вкладки типа Onlay.

Преимущества:

- хорошее увлажнение тканей зуба и отсутствие пятен
- незначительная полимеризационная усадка
- кариостатические и антибактериальные компоненты
- быстрое и простое применение, удаление одним куском
- светоотверждаемый однокомпонентный материал
- прилипает к зубу, а не к инструменту
- применение без дополнительного временного цемента
- выпускается в двух различных цветах и двух формах выпуска (шприцы и кавифилы).

Цвета:

прозрачный и универсальный

Форма поставки

Шприцы

Refill Telio CS Inlay	3 x 2,5 г
Универсальный	635332
Прозрачный	635335

Refill Telio CS Onlay	3 x 2,5 г
Универсальный	635339
Прозрачный	635338

Кавифилы

Refill Telio CS Inlay Cavifil	30 x 0,25 г
Универсальный	635333
Прозрачный	635334

Refill Telio CS Onlay Cavifil	30 x 0,25 г
Универсальный	635337
Прозрачный	635336

N-Cement Collection

Материалы для фиксации от Ivoclar Vivadent



Прочная СВЯЗЬ обеспечивает
уверенность и поддержку

Variolink® N | Multilink® N | Multilink® Speed

- Надежные материалы для фиксации
- Проверенные на практике сочетания продуктов
- Обширная коллекция для различных запросов:

ЭСТЕТИКА | УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | ПРОСТОТА



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Variolink® N

Композитная система для фиксации двойного (светового и химического) отверждения



Показания:

- адгезивная фиксация реставраций из керамики, керамика/FRC и композитных реставраций (вкладыш Inlay/Onlay, коронок, мостовидных протезов и виниров)

Преимущества:

- Variolink N выпускается в 4 различных цветах и двух степенях прозрачности
- Высокая рентгеноконтрастность
- Высокая эстетика результатов

Цвета:

Прозрачный, желтый, белый, ультрасветлый Bleach XL, Катализатор выпускается в двух цветах (Прозрачный, Желтый) и двух консистенциях (низкой и высокой вязкости).

Форма поставки

Professional Set 642981

База: прозрачный, желтый, белый, ультрасветлый Bleach XL
 Катализатор: прозрачный/низкой вязкости, прозрачный/высокой вязкости
 Катализатор: желтый/низкой вязкости, желтый/высокой вязкости
 Heliobond, Syntac Adhesive, Syntac Primer, Monobond N, N-Etch, Liquid Strip,
 Различные принадлежности

Esthetic Cementation System 642978

База: прозрачный, желтый, белый, ультрасветлый Bleach XL
 Катализатор: прозрачный/низкой вязкости, прозрачный/высокой вязкости
 Катализатор: желтый/низкой вязкости, желтый/высокой вязкости
 ExcITE F DSC, Monobond N, N-Etch, Liquid Strip,
 Различные принадлежности

Intro Pack 642979

База прозрачная, катализатор: прозрачный/низкой вязкости, Monobond N, Liquid Strip,
 Различные принадлежности

Bonding System 632341

Heliobond, Syntac Adhesive, Syntac Primer, N-Etch,
 Различные принадлежности

Bonding System ExcITE F DSC 637211

ExcITE F DSC Single Dose Regular	20 x 0,1 г
N-Etch	1 x 2 г

База Variolink N Base Refill 1 x 1,5 мл

Прозрачный	632335
Желтый	632334
Белый	632333
Bleach XL	632332

Катализатор Variolink N Catalyst Refill 1 x 1,5 мл

Прозрачный/низкой вязкости	632331
Прозрачный/высокой вязкости	632330
Желтый/низкой вязкости	632329
Желтый/высокой вязкости	632328

Variolink® N LC

Светоотверждаемый композитный цемент для высокоэстетичных реставраций



Показания:

– Адгезивная фиксация транслюцентных цельнокерамических реставраций, толщиной менее 2 мм. (виниры, вкладки inlay, onlay)

Преимущества:

– высокая цветовая стабильность благодаря особой формуле со сниженным содержанием амина
– низкий износ, хорошая полируемость

Цвета:

Clear: Нейтральный эффект (50% прозрачности)
+1: Небольшое осветление (24% прозрачности)
+2: Высветление, эффект отбеливания (12% прозрачности)

Форма поставки

System Pack		642969
Variolink N LC clear, +1, +2	3 x 1,5 мл	
Monobond N	1 x 5 г	
Tetric N-Bond	1 x 6 г	
Различные принадлежности		
Refill		1 x 1,5 мл
Clear		643413
+1		632687
+2		643414

Variolink® N Try-In

Водорастворимая глицириновая паста для примерки композитных и керамических реставраций, изготовленных в лаборатории. Выпускаются в четырех цветах Variolink N



Показания:

– Имитация цвета фиксирующего композита Variolink N
– Защита протравленной поверхности во время примерки керамической реставрации, изготовленной в лаборатории

Цвета:

Прозрачный, желтый, белый, ультрасветлый Bleach XL, Clear, +1, +2

Форма поставки

Refill		1 x 1,5 мл
Прозрачный		632340
Желтый		632339
Белый		632338
Bleach XL		632337
Clear		643416
+1		632688
+2		643415

Variolink® Veneer

Светоотверждаемый фиксирующий композит в семи цветах «Value» с очень высокой транслюцентностью и оптимальной стабильностью цвета.



Показания:

- адгезивная фиксация транслюцентных цельнокерамических реставраций толщиной < 2.0 мм (виниры, вкладки типа Inlay, Onlay)

Преимущества:

- высокая стабильность цвета благодаря химической формуле с сокращенным содержанием аминов
- выпускается в 7 цветах с очень высокой прозрачностью
- легкое удаление излишков
- малая стираемость, хорошая полируемость
- высокая сила сцепления

Цвета:

High Value +3, High Value +2, High Value +1, Medium Value 0, Low Value –1, Low Value –2, Low Value –3

Форма поставки

Набор

Variolink Veneer шприцы в 7 цветах	7 x 1,5 мл
Variolink Veneer Try-In шприцы в 7 цветах	7 x 1,5 мл
Monobond Plus	1 x 5 г
Liquid Strip	1 x 2,5 г
Total-Etch	1 x 2 г

Различные принадлежности

Набор Syntac

628320

Праймер Syntac Primer,	
адгезив Syntac Adhesive	по 3 г
Heliobond	1 x 6 г

Набор Excite F

628321

Excite F Single Dose	12 x 0,1 г
----------------------	------------

Refill Variolink Veneer шприцы 1 x 1,5 мл

High Value +1	591425
High Value +2	591424

High Value +	591423
--------------	---------------

Low Value –1	591427
--------------	---------------

Low Value –2	591428
--------------	---------------

Low Value –3	591429
--------------	---------------

Medium Value 0	591426
----------------	---------------

Refill Try-In Variolink Veneer Try-In шприцы 1 x 1,5 мл

High Value +1	591432
---------------	---------------

High Value +2	591431
---------------	---------------

High Value +3	591430
---------------	---------------

Low Value –1	591434
--------------	---------------

Low Value –2	591435
--------------	---------------

Low Value –3	591436
--------------	---------------

Medium Value 0	591433
----------------	---------------

Variolink® Esthetic

Эстетичный композитный материал для фиксации.

Variolink Esthetic – это эстетичный фиксирующий композит светового и двойного отверждения для постоянной фиксации керамических и композитных реставраций. Этот материал является приемником Variolink II и Variolink Veneer, давно зарекомендовавших себя в клинической практике. Variolink Esthetic олицетворяет собой новое поколение фиксирующих композитов, характеризующихся исключительной эстетикой и большим комфортом в работе.

Показания:

Variolink Esthetic LC

- Для постоянной фиксации реставраций из стеклокерамики, стеклокерамики на основе дисиликата лития, композитов (вкладки типа Inlay, Onlay и виниры)
- Применяется только с реставрациями малой толщины < 2 мм и с достаточной прозрачностью (например, IPS e.max HT)

Variolink Esthetic DC

- Для постоянной фиксации реставраций из стеклокерамики, стеклокерамики на основе дисиликата лития, композитов (вкладки типа Inlay, Onlay, частичные коронки, коронки, мостовидные протезы).



Цвета:

Light+ (светлый +), Light (светлый), Neutral (нейтральный), Warm (теплый), Warm+ (теплый +)

Преимущества:

- Превосходная стабильность цвета благодаря химической формуле, не содержащей амины, и запатентованному реактивному световому инициатору Ivocerin
- Сбалансированная и наглядная цветовая система Effekt-цветов
- Естественная флюоресценция, как у живых зубов
- Легкое контролируемое удаление излишков
- Гибкая консистенция, в зависимости от ситуации – идеальное сочетание текучести и стабильности

Форма поставки

Набор Variolink Esthetic LC System Kit

(только световое отверждение)

3 шприца Variolink Esthetic LC (light, neutral, warm), 3 шприца Variolink Esthetic Try-In паста (light, neutral, warm), 1 шприц Total Etch, 1 Adhese Universal VivaPen или 1 бутылочка, 1 бутылочка Monobond Plus, 1 шприц Liquid Strip, принадлежности

C Adhese Universal VivaPen 666433

C Adhese Universal в бутылочке 666065

Набор Variolink Esthetic DC System Kit (двойного отверждения)

3 шприца Variolink Esthetic DC (light, neutral, warm), 3 шприца Variolink Esthetic Try-In Paste (light, neutral, warm), 1 шприц Total Etch, 1 Adhese Universal VivaPen или 1 бутылочка, 1 бутылочка Monobond Plus, 1 шприц Liquid Strip, принадлежности

C Adhese Universal VivaPen 666434

C Adhese Universal в бутылочке 666125

Variolink Esthetic LC Refill (только световое отверждение)

1 шприц, 2 г (выбранного цвета), 5 насадок-аппликаторов

Light+ **666126**

Light **666127**

Neutral **666128**

Warm **666129**

Warm+ **666130**

Variolink Esthetic DC Refill (двойного отверждения)

1 автоматически смешивающий шприц, 5 г (выбранного цвета), 10 смешивающих насадок

Light+ **666117**

Light **666118**

Neutral **666119**

Warm **666120**

Warm+ **666121**

Variolink Esthetic DC Refill (двойного отверждения)

1 автоматически смешивающий шприц, 9 г (выбранного цвета), 15 смешивающих насадок

Light **666122**

Neutral **666123**

Warm **666124**

Variolink Esthetic Try-In Паста Refill

1 шприц, 1,7 г (выбранного цвета), 5 насадок-аппликаторов

Light+ **666067**

Light **666113**

Neutral **666114**

Warm **666115**

Warm+ **666116**

Принадлежности

Смешивающие насадки, короткие, заостренные refill, 15 шт. **645951**

Variolink насадки-аппликаторы, refill, 20 шт. **559224**

Multilink® N

Универсальный самоотвердеющий фиксирующий композит Multilink N в шприцах с автоматическим замешиванием характеризуется широким спектром применений, отличными свойствами, а также не затратным по времени применением.



Показания:

- Фиксация не прямых реставраций (вкладки Inlay/onlay, коронки, мостовидные протезы, штифты) из:
- металла и металлокерамики (PFM)
 - цельной керамики (силикат)
 - усиленной стеклокерамики (циркониевой или алюминиевой)
 - композита и стекловолокна (FRC)

Преимущества:

- Прочное и стойкое сцепление со всеми поверхностями
- универсальное использование, практически для любых случаев
- прямое нанесение, экономящее время

Цвета:

Прозрачный, желтый

Форма поставки

System Pack

Multilink N automix syringe	1 x 6 г	
Смешивающие канюли	10 x	
Multilink N Primer A/B	2 x 3 г	
Monobond N	1 x 5 г	
Различные принадлежности		
Прозрачный		642974
Желтый		642976

Starter Pack

Multilink N automix syringe, transparent	1 x 2,5 г	642973
Смешивающие канюли	4 x	
Multilink N Primer A/B	2 x 1 г	
Monobond N	1 x 1 г	
Различные принадлежности		

Refill

Multilink N automix syringe	1 x 6 г	
Смешивающие канюли	10 x	
Прозрачный		632321
Желтый		632322

Refill Multilink N Primer A 1 x 3 г **632198**

Refill Multilink N Primer B 1 x 3 г **632319**

Refill Monobond N 1 x 5 г **642967**

Refill Смешивающие канюли 15 x **592225**

Refill Аппликаторы 2 x 25 **592435**

Аппликаторы (25 больших, 25 маленьких)

Multilink® Speed

Самоадгезивный, самоотвердеющий композитный цемент с опцией световой полимеризации, что позволяет облегчить и ускорить процедуру фиксации. Исключается необходимость кондиционирования фосфорной кислотой и бондинга.



Показания:

- Постоянная фиксация не прямых реставраций, изготовленных из:
- Металла и металлокерамики
 - Высокопрочной цельной керамики (оксида циркония, дисиликата лития, оксида алюминия)
 - Стекловолоконные конструкции (корневые штифты)

Преимущества:

- Нет необходимости в протравливании фосфорной кислотой
- Нет необходимости использовать праймер, бондинг и адгезивы для эмали и дентина
- Простое и быстрое применение благодаря автоматическому смешивающему шприцу
- Отличные физические свойства
- Хорошие показатели сцепления
- Легкое удаление излишков материала

Цвета:

Прозрачный

Форма поставки

Starter Pack

Multilink Speed automix syringe, transparent	1 x 2,5 г	642977
Смешивающие канюли	4 x	
Monobond N	1 x 1 г	

Refill

Multilink Speed automix syringe, transparent	1 x 6 г	632342
Смешивающие канюли	10 x	

Комбинация продуктов

	Система для эстетичной композитной фиксации	Универсальная система композитной фиксации	Самоадгезивный композитный цемент
Фиксирующий цемент	Variolink® N	Multilink® N	Multilink® Speed
Отверждение	Светового/двойного отверждения**	Самотвердеющий с опцией светового отверждения	Самотвердеющий с опцией светового отверждения
Метод фиксации	Адгезивная Syntac/Excite F DSC/Tetric N-Bond Тотальное протравливание	Адгезивная Multilink N Primer A/B Самопротравливающий	Самоадгезивная
IPS e.max Press	✓	✓	✓*
IPS e.max CAD	✓	✓	✓*
IPS e.max Ceram Виниры	✓	-	-
IPS e.max ZirCAD	-	✓	✓
IPS Empress Esthetic	✓	✓	-
IPS Empress CAD	✓	✓	-
SR Adoro ¹ (на металле)	-	✓	✓
SR Adoro ¹ (безметалловые конструкции)	✓	✓	-
IPS d.SIGN IPS InLine/IPS InLine PoM IPS Classic	-	✓	✓
FRC Postec Plus	✓***	✓	✓
Cosmo Post	-	✓	✓

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей инструкцией по применению

✓ рекомендованное сочетание продуктов

* рекомендовано в зависимости от показаний к применению

- не рекомендовано

** Variolink® N Clear Veneer только светоотверждаемый

*** только материалы двойного отверждения

¹ – поставляется не во все страны

Multilink® Automix

Следующее поколение

Multilink Automix – это система адгезивной фиксации не прямых реставраций из силикатной или оксидной керамики (например, IPS e.max®), металла и металлокерамики, а также композитов.

Новинки:

оптимизированная формула, дополнительный цвет «Белый», пасты Try-In и оптимизированные рабочие свойства.



Показания:

Фиксация не прямых реставраций (вкладки типа Inlay, Onlay, коронки, мостовидные протезы, корневые штифты) из:

- металла и металлокерамики (PFM)
- цельной керамики (силикат)
- усиленной цельной керамики (оксид циркония или алюминия)
- композитов и стекловолоконных композитов (FRC)

Преимущества:

- высокая сила сцепления – и при двойном, и при химическом отверждении
- универсальность – фиксирует силикатную и оксидную керамику, а также металл
- клиническая надежность – подтверждают многочисленные годовые исследования
- оптимальное удаление излишков
- оптимальная эстетика
- оптимальное краевое прилегание

Цвета:

Прозрачный, желтый, белый, опаловый.

Форма поставки

Системная упаковка System Pack

Multilink Automix Шприц	1 x 9 г	
Смешивающие канюли	15 x	
Root Canal Tips	5 x	
Праймер Multilink Primer A+B	2 x 3 г	
Monobond Plus	1 x 5 г	
Liquid Strip	1 x 2,5 г	
Канюли для нанесения Liquid Strip	5 x	
Аппликаторы (большие и малые)	по 25 x	
Блок для смешивания	1 x	
Пластина для смешивания		
(для праймера Multilink Primer A+B)	1 x	
OptraStick	2 x	
Различные принадлежности		
Прозрачный		627471
Желтый		627473
Опаловый		627472
Белый		645954

Стартовый набор Starter Pack

Multilink Automix Шприц	1 x 2,5 г	
Смешивающие канюли	4 x	
Праймер Multilink Primer A/B	2 x 1 г	
Monobond Plus	1 x 1 г	
Аппликаторы (большие и малые)	по 25 x	
Блок для смешивания	1 x	
Пластина для смешивания		
(для праймера Multilink Primer A/B)	1 x	
OptraStick	2 x	
Различные принадлежности		
Прозрачный		627571

Refill Multilink Automix

Multilink Automix Шприц	1 x 9 г	
Смешивающие канюли	15 x	
Различные принадлежности		
Прозрачный		615216
Желтый		615217
Опаловый		615218
Белый		645952

Refill Multilink Automix Try-In

Multilink Automix Try-In Шприц	1 x 1,7 г	
Прозрачный		645956
Желтый		645957
Опаловый		645958
Белый		645959

Refill Праймер Multilink Primer A+B 2 x 3 г 576825

Refill Праймер Multilink Primer A 1 x 3 г 613626

Refill Праймер Multilink Primer B 1 x 3 г 613627

Refill Monobond Plus 1 x 5 г 626221

Refill Liquid Strip 1 x 2,5 г 532505

Refill Multilink Смешивающие типсы 15 x 645951

Типсы для корневых каналов (Intra Canal и смешивающие канюли) по 5 x 645955

Канюли для нанесения Liquid Strip 20 x 533666

Refill Аппликаторы (25 больших, 25 малых) 2 x 25 592435

Monobond® N

Универсальный однокомпонентный бондинговый агент для не прямых реставрационных материалов.



Показания:

Универсальный однокомпонентный бондинговый агент для не прямых реставрационных материалов (стеклокерамики и оксидной керамики, металла, композита, композита, усиленного волокнами). Создает прочную связь между реставрацией и фиксирующим материалом.

Форма поставки

Refill **1 x 5 г 642967**

Monobond® Etch & Prime

Самопротравливающий стеклокерамический праймер

Monobond Etch & Prime протравливает и силанизирует силикатную керамическую поверхность за один рабочий этап.

Показания:

Подготовка силикатной керамической поверхности к созданию адгезивной связи с фиксирующими композитами.

Форма поставки

Refill бутылочка, Monobond Etch & Prime **1 x 5 г 673026**



Liquid Strip

Глицериновый гель, препятствующий возникновению ингибированного слоя у композитов при фиксации композитных и керамических реставраций.



Показания:

- Паста для примерки
- препятствование возникновению ингибированного слоя у композитов
- защита протравленной ретенционной поверхности изготовленной в лаборатории цельнокерамической реставрации.

Форма поставки

Refill	1 x 2,5 г	532505
---------------	------------------	---------------

Ivoclean

Универсальная паста, специально разработанная для очистки склеиваемых поверхностей протетических конструкций после примерки в полости рта от загрязнений (в частности, содержащих белок).



Показания:

- экстраоральная очистка поверхностей керамических и металлических непрямых реставраций

Форма поставки

Refill	1 x 5 г	637568
---------------	----------------	---------------

FRC Postec® Plus

FRC Postec Plus – это высокоэстетичный рентгеноконтрастный корневой штифт из композита со стекловолокном для прямого восстановления сильно разрушенной коронковой части после эндодонтического лечения зуба, применяется врачами-стоматологами.

Система состоит из светопроводящих штифтов из композита со стекловолокном трех размеров и соответствующих римеров из нержавеющей стали для препарирования ложа для корневого штифта.

Показания:

- восстановление сильно разрушенной коронковой части после эндодонтического лечения зуба, применяется для фронтальных и боковых зубов.

Преимущества:

- эстетичность
- рентгеноконтрастность
- высокая ретенционность
- щадящее действие по отношению к корневому каналу
- наглядная система с зарекомендовавшими себя продуктами
- легко удаляется
- клинически проверенная концепция



Препарирование ложа для корневого штифта



Фиксация штифта с помощью Multilink



Восстановление культи с помощью MultiCore Flow



Восстановленная культия

Форма поставки

Упаковка Intro Pack Размер 0/1/3		603543
FRC Postec Plus Размер 0	3 x	
FRC Postec Plus Размер 1	5 x	
FRC Postec Plus Размер 3	2 x	
FRC Postec Plus Ример Размер 0	1 x	
FRC Postec Plus Ример Размер 1	1 x	
FRC Postec Plus Ример Размер 3	1 x	
Refill Размер 0	20 x	603540
Refill Размер 0	5 x	603541
Refill Размер 1	20 x	590222
Refill Размер 1	5 x	583244
Refill Размер 3	20 x	590223
Refill Размер 3	5 x	583245
Refill Ример, Размер 0	1 x	603542
Refill Ример, Размер 1	1 x	572801
Refill Ример, Размер 3	1 x	572800

MultiCore®

Самотвердеющий композит для восстановления культы с опциональной возможностью световой полимеризации.

Две консистенции, две технологии, два способа полимеризации и четыре цвета образуют оптимальный фундамент для восстановления частично или сильно разрушенной коронковой части витальных или девитализированных зубов.



Смешивающие шприцы по 10 г



Картуши по 50 г

Показания:

- восстановление культы витальных или девитализированных зубов

Преимущества:

MultiCore Flow для матричной технологии

- материал базируется на многолетнем опыте фирмы Ivoclar Vivadent в области композитных технологий
- для каждого пользователя свой выбор: химическая или световая полимеризация
- четыре различных цвета
- система сочетается с самопротравливающим адгезивом AdheSE

Цвета:

Светлый, средний, синий и белый

Форма поставки

MultiCore® Flow

Refill	1 x 10 г	
Смешивающий шприц, различные принадлежности		
Светлый		604166
Средний		604167
Белый		604168
Смешивающие типы малые	10 x	604209
Интраоральные типы малые	10 x	604210
Root Canal Tips	5 x	603018
Refill	1 x 50 г	
База, катализатор, различные принадлежности		
Светлый		578913
Средний		578914
Синий		578915
Диспенсер	1 x	579094
Смешивающие типы	50 x	579096
Интраоральные типы	50 x	579095

Virtual®

Virtual – это современная линия поливинилсилоксановых слепочных материалов для получения слепков различными способами. Линия продуктов Virtual содержит массы пяти вязкостей: Putty, Heavy Body, Monophase, Light Body и Extra Light Body с быстрым временем схватывания «Fast» (2:30 мин.) и обычным «Regular» (4:30 мин.).

В программе также предлагается адгезив для слепочных ложек и другие принадлежности.

Показания:

- Слепки для изготовления непрямых реставраций (коронки, мостовидные протезы, вкладки типа Inlay, Onlay и виниры)
- слепки для имплантатов
- силиконовый ключ для восковых моделей, учебные модели или планирование лечения.
- слепки беззубых челюстей
- силиконовый ключ для изготовления временных конструкций

Преимущества:

- превосходная адаптация на влажном дентине и слизистой оболочке
- отличная водоотталкивающая способность
- точные, очень хорошо читаемые слепки
- варьирующееся рабочее время и быстрая фаза твердения
- свежий аромат мяты
- гармоничный баланс физических свойств

Цвета:

Синий морской: Virtual Putty, Virtual Heavy Body и Virtual Monophase

Карамель: Virtual Light Body и Virtual Extra Light Body



Форма поставки

Multi Pack	12 x 50 мл	
+ смешивающие канюли		
Extra Light Body Fast		572812
Extra Light Body Regular		572813
Light Body Fast		572826
Light Body Regular		572827
Monophase Fast		572828
Monophase Regular		572829
Heavy Body Fast		572830
Heavy Body Regular		572831
Refill	2 x 50 мл	
+ 12 смешивающих канюль		
Extra Light Body Regular		562827
Extra Light Body Fast		562828
Light Body Regular		562829
Light Body Fast		562830
Monophase Regular		562831
Monophase Fast		562832
Heavy Body Regular		562835
Heavy Body Fast		562836
Refil		
Putty Regular	2 x 300 мл	562839
Putty Fast	2 x 300 мл	562840

Virtual Принадлежности

Адгезив для ложек	1 x 10 мл	562841
Refill Смешивающие типсы, малые	48 x	572806
Refill Смешивающие типсы, большие	48 x	572807
Refill Интраоральные типсы, большие	100 x	572808
Refill Интраоральные типсы, малые	100 x	572809
Refill Диспенсер 1:1 50 мл	1 x	572810

Virtual® 380

Virtual 380 – это материал с консистенцией «Heavy Body» и «Monophase» в больших картриджах. Эти XXL-картриджи используются в таких смесителях, как Pentamix, Plug & Press Dispenser и MixStar.



Преимущества:

- готовый к использованию XXL-картридж – простота и удобство в работе
- не требуется отдельной активации как для материала в мешках
- экономичная форма выпуска – содержание 380 мл

Форма поставки

Multi Pack	6 x 380 мл + смеситель + байонетные кольца	
Monophase Fast		594835
Heavy Body Fast		594836
Heavy Body Regular		594837

Refill	по 2 x 380 мл + смеситель + байонетные кольца	
Monophase Fast		594838
Heavy Body Fast		594839
Heavy Body Regular		594840

Virtual® 380 Принадлежности

Refill Динамические смесительные насадки	50 x	600158
Refill Байонетное Кольцо	2 x	600159

Технические данные	Virtual®						Virtual® 380	
	Extra Light Body	Light Body	Monophase	Heavy Body	Putty	CADbite Registration	Monophase	Heavy Body
Цвет	Карамель	Карамель	Синий морской	Синий морской	Синий морской	Светло-синий	Синий морской	Синий морской
Рабочее время • Fast • Regular	1:45 3:00 Мин.	1:35 Мин. 2:35 Мин.	1:35 Мин. 2:35 Мин.	1:15 Мин. 2:05 Мин.	1:15 Мин. 1:25 Мин.	max. 0:30 Мин.	1:35 Мин. –	1:35 Мин. 2:05 Мин.
Время нахождения в полости рта • Fast • Regular	2:30 Мин. 4:30 Мин.	2:30 Мин. 4:30 Мин.	2:30 Мин. 4:30 Мин.	2:30 Мин. 4:30 Мин.	2:30 Мин. 4:30 Мин.	0:45	3:30 Мин. –	2:30 Мин. 4:30 Мин.
Линейное изменение размеров	< 0.20 %	< 0.20 %	< 0.20 %	< 0.20 %	< 0.20 %	< 0.05 %	< 0.20 %	< 0.20 %
Деформация под давлением (min. - max.)	3 – 5 %	3 – 5 %	3 – 5 %	3 – 5 %	1 – 3 %	–	3 – 5 %	3 – 5 %
Восстановление после деформации	> 99.5 %	> 99.5 %	> 99.5 %	> 99.5 %	> 99.0 %	–	> 99.5 %	> 99.5 %
Передача деталей поверхности	20 μ	20 μ	20 μ	20 μ	50 μ	–	20 μ	20 μ
Жесткость по Шору А.	47 ± 3	54 ± 3	67 ± 3	68 ± 3	61 ± 3	32 по Шору	67 ± 3	68 ± 3

Virtual® CADbite Registration

Слепочный материал Virtual CADbite Registration можно сканировать, поэтому он используется для выполнения оптических оттисков при работе технологией CAD/CAM, например, с системой CEREC. Это силиконовый материал, который также превосходно подходит для регистрации прикуса при изготовлении не прямых реставраций. Материал имеет вязкую консистенцию, высокую точность передачи всех нюансов поверхности, короткое время схватывания, а также хорошую стабильность размеров; конечная твердость достигает 32 единицы по Шору D.



Преимущества:

Быстро

Краткое пребывание во рту в течение 45 секунд сводит к минимуму возможность ошибки при регистрации из-за движений челюсти пациентом. Вместе с этим, рабочее время материала Virtual CADbite достаточно для того, чтобы выполнить регистрацию полной челюсти.

Прочно

Высокая конечная твердость 32 единицы по Шору D в сочетании с идеальной прочностью на излом позволяют резать и фрезеровать регистрат, также свойства материала препятствуют смещению фиксированного положения модели в артикуляторе.

Можно сканировать

По согласованию с пользователями систем CAD/CAM по всему миру, поверхность материала Virtual CADbite была сделана рефлектирующей, благодаря чему с помощью этого материала можно получать великолепные результаты сканирования.



Регистрация прикуса с помощью Virtual CADbite



Отсканированный регистрат

Форма поставки


Multi Pack	12 x 50 мл	607909
и канюли для смешивания		
Refill	2 x 50 мл	607908
и канюли для смешивания		
Принадлежности		
Virtual® CADbite Registration Refill		
типы для смешивания, малые	48 x	572806

Bluephase® –

Светодиод для всех показаний, теперь эргономичный – для руки любого размера

В противоположность светодиодным приборам второго поколения, поливолновой светодиод достигает оптимума в широте спектра, который составляет от 385 до 515 нм, – точно так же, как у образца - галогеновой лампы. Благодаря этому приборы линии Bluephase можно неограниченно использовать для всех световых инициаторов и любых материалов.

Спектр длины световой волны

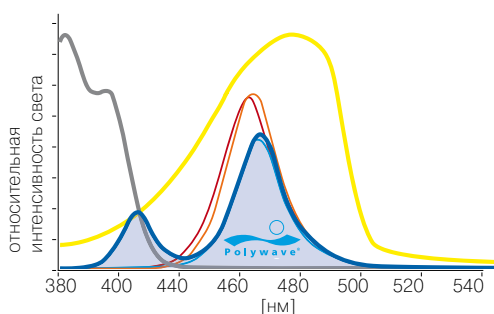

Так просто это работает: повернуть зарядный блок, вытянуть из него сетевой кабель, подключить к наконечнику и продолжать работу привычным для вас образом.



Bluephase Style можно держать и как ручку, и как пистолет.

Любой материал благодаря поливолновому® светодиоду

Bluephase подходит для применения с любыми материалами, благодаря тому, что в основе ее работы лежит поливолновая технология, которая использует различные светодиоды с доминантной длиной волны 410 нм и 470 нм.

- Фотоинициатор Campherchinon
- Фотоинициатор Lucirin TPO
- Bluephase Style с поливолновым светодиодом²
- Elipar S10¹
- SmartLite PS¹
- Demi Plus¹

Источник: R. Price, Dalhousie University Halifax, 2011

* эти марки не являются зарегистрированными товарными знаками фирмы Ivoclar Vivadent AG.

¹ светодиодный прибор второго поколения

² светодиодный прибор третьего поколения

Любые показания благодаря длительному охлаждению

Неприятные перерывы в работе и ожидание в течение нескольких минут теперь позади. Вместо этого приборы линии Bluephase позволяют работать длительное время без клинических ограничений – даже при обширной фиксации непрямого реставраций.

Всегда готов к работе благодаря функции Click & Cure

Работа в беспроводном режиме – это гарантия максимальной мобильности в стоматологическом кабинете. Уже зарекомендовавшая себя функция Click & Cure позволяет избежать неприятного времени ожидания из-за разрядившегося аккумулятора. Всего лишь одним кликом наконечник подключается к сетевому кабелю зарядного блока.

Для любой руки – эргономично и для женщин, и для мужчин

Лампу Bluephase Style можно держать и как ручку, и как пистолет. Нагрузка на кисть и руку минимальна – и все это независимо от размера руки.

NEW

Bluephase® 20i Миссия – Максимум

Bluephase 20i – это высокомогущный светодиодный полимеризационный прибор, питающийся от аккумулятора, с мощностью светового излучения 2.000 мВт/см², который вдохновляет сенсационно коротким временем полимеризации, которое составляет от 5 секунд.

Показания:

Прибор для полимеризации всех светоотверждаемых дентальных материалов в диапазоне длины световой волны 380-515 нм.



Преимущества:

- спектр 380-515 нм, сходный со спектром галогеновой лампы, благодаря поливолновому светодиоду
- уникально высокая мощность светового излучения 2.000 мВт/см² в режиме Turbo с сенсационно коротким временем полимеризации всего лишь до 5 секунд.
- встроенный вентилятор для бесперебойной работы без клинических ограничений
- функция Click & Cure для подключения прибора к электросети при необходимости и работы, независимой от состояния заряженности батареи
- беспроводной дизайн, дарящий пользователю абсолютную мобильность
- четыре программы для быстрого, максимального, близкого к пульпе и сокращающего стресс в материале отверждения
- мощный литий-полимерный аккумулятор на 45 мин. рабочего времени
- закрытая конструкция, обеспечивающая оптимальную гигиену прибора
- современный OLED цветной дисплей с использованием светодиодов на основе светоизлучающих органических материалов с великолепным качеством изображения
- инновационный сенсор на движение для моментальной готовности прибора к работе
- 3 года гарантии (на аккумулятор – 1 год)

Форма поставки

Bluephase 20i 100-240 В	613735
Bluephase 20i аккумулятор	627300
Bluephase 20i наконечник (наконечник, аккумулятор, световод)	613753

Bluephase® Style

Миссия – Эргономика

Bluephase Style – это беспроводной мощный светополимеризационный прибор с мощностью света 1 100 мВт/см², который благодаря своей форме удобно располагается в любой руке – и в мужской, и в женской.

Показания:

Световой прибор для полимеризации всех светоотверждаемых стоматологических материалов в диапазоне длины световой волны 385-515 нм.

Преимущества:

- эргономичен для любой руки – и мужской, и женской
- поливолна светодиода с широкополосным спектром 385-515 нм подходит для всех материалов
- без вентилятора возможно длительное использование без клинических ограничений
- функция Click & Cure для подключения прибора к электросети при необходимости и работы, независимой от состояния заряженности батареи
- беспроводной дизайн, дарящий пользователю абсолютную мобильность
- высокая интенсивность светового излучения 1.100 мВт/см² сокращает время полимеризации, которое может начинаться с 10 секунд



- простая работа благодаря интуитивному управлению двумя кнопками
- световод 10 мм для рабочего поля очень большой протяженности
- укороченный световод: любые поверхности зуба доступны без экстремально широкого открытия рта
- индуктивная зарядка позволяет бесконтактную зарядку аккумулятора
- зарядный блок с контрольным указателем позволяет распознать уровень зарядки с большого расстояния
- мощный литий-полимерный аккумулятор на 20 мин. рабочего времени
- закрытая конструкция, обеспечивающая оптимальную гигиену прибора
- зарядный блок с выходными отверстиями позволяет осуществлять простую очистку зарядного блока
- инновационный сенсор движения для моментальной готовности прибора к работе
- 3 года гарантии (на аккумулятор – 1 год)
- выпускается в трех цветах (серый, синий и розовый)

Форма поставки

Bluephase Style 100-240 В

Серый	635153
Синий	642513
Розовый	642514

Аккумулятор Bluephase Style

637692

Наконечник Bluephase Style

(наконечник, аккумулятор, световод)

Серый	637916
Синий	643296
Розовый	643307

Bluephase® Style M8 Миссия – Экономичность

Bluephase Style M8 – это беспроводной экономичный светодиодный полимеризационный прибор с мощностью светового излучения 800 мВт/см². Прибор позволяет полимеризовать светоотверждаемые стоматологические материалы в диапазоне световой волны длиной 430 – 490 нм, в течение 15 секунд.



- экономичный светодиодный прибор с мощностью светового излучения 800 мВт/см²
- сокращенное время полимеризации, в основном 15 секунд
- без вентилятора возможно длительное использование без клинических ограничений
- 4 временных программы, интуитивное управление
- закрытая конструкция, обеспечивающая оптимальную гигиену в кабинете
- функция Click & Cure для подключения прибора к электросети при необходимости и работы, не зависящей от состояния заряженности батареи
- 3 года гарантии

Форма поставки

Bluephase Style M8 100 – 240 Вт	667505
Bluephase Style M8 наконечник (наконечник, аккумулятор, световод)	667496

Bluephase N® LED для любых клинических нужд

Bluephase N – беспроводной, высокомощный светополимеризационный прибор, с интенсивностью света 1200 мВт/см²+10%.

Показания:

Прибор для полимеризации всех светоотверждаемых стоматологических материалов в диапазоне световой волны длиной 380-515 нм.



Преимущества:

- спектр 380-515 нм, сходный со спектром галогеновой лампы, благодаря поливольновому светодиоду
- три программы (HIGH – высокая мощность для быстрой полимеризации, SOFT Start – мягкий старт и LOW Power – низкая мощность для полимеризации областей близких к пульпе)
- функция Click & Cure для подключения прибора к электросети при необходимости и работы, независимой от состояния заряженности батареи
- беспроводной дизайн, дарящий пользователю абсолютную мобильность
- работа без перерыва на протяжении как минимум 10 минут, благодаря встроенному вентилятору, позволяет работать даже с большими реставрациями
- Полимеризация слоя материала толщиной до 4 мм (Tetric N-Ceram Bulk Fill) возможна всего за 10 секунд
- 3 года гарантии (на аккумулятор – 1 год)

Форма поставки

Bluephase N® 100-240 В	659683
Наконечник Bluephase N® (наконечник, аккумулятор, световод 10 мм)	659681
Аккумулятор	659956

Bluephase N[®] M LED для любой ситуации

Bluephase N[®]M – это беспроводной экономичный светодиодный полимеризационный прибор с мощностью светового излучения 800 мВт/см².

Показания:

Прибор для полимеризации всех светоотверждаемых стоматологических материалов в диапазоне световой волны длиной 430-490 нм.



Преимущества:

- беспроводной дизайн дает пользователю абсолютную мобильность и свободу движений
- максимальная мощность благодаря Li-Po аккумулятору
- возможность периодической зарядки позволяет продлить срок службы аккумулятора
- возможность выбрать время полимеризации 10, 15, 20 секунд, автоматическое отключение позволяет предотвратить излишний расход электроэнергии.
- Емкость аккумулятора позволяет работать в течение 60 минут
- 2 года гарантии (на аккумулятор – 1 год)

Форма поставки

Bluephase N[®]M100-240 В	647620
Наконечник Bluephase N[®]M (наконечник, аккумулятор, световод 10 мм)	647621
Аккумулятор	647622

Bluephase N[®] MC LED для любого бюджета

Bluephase N[®]MC – это экономичный светодиодный полимеризационный прибор, работающий от сети, с мощностью светового излучения 800 мВт/см².

Показания:

Прибор для полимеризации всех светоотверждаемых стоматологических материалов в диапазоне световой волны длиной 430-490 нм.



Преимущества:

- благодаря возможности продолжительной работы подходит для обработки объемных прямых и непрямых реставраций
- проста в применении: всего одна универсальная программа
- эргономичность: дизайн лампы, позволяет удобно держать ее в руке
- 10 мм световод позволяет достичь любой реставрируемой поверхности
- проверенное качество платформы Bluephase G2
- 2 года гарантии

Форма поставки

Bluephase N[®]MC 100-240 В	647619
--	---------------

Bluephase® Meter II

Стоматологический радиометр

Показания:

– инновационный радиометр с уникальным принципом измерения для определения мощности светового излучения светодиодных приборов.



Преимущества:

- уникальный принцип измерения для точного определения мощности светового излучения
- простота и удобство в работе
- универсален, подходит для всех типов полимеризационных ламп (галоген, плазма, светодиод и т.д.)
- область измерения для характерной в стоматологии длины световой волны 380-550 нм и мощности излучения 300-2500 мВт/см²
- дисплей с цифровыми значениями
- эргономичный, современный дизайн
- 3 года гарантии


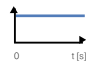

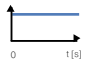

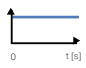

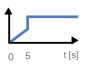
Форма поставки

Bluephase Meter II

667124

Технические данные

НОВИНКА

	Bluephase® Style	Bluephase® 20i	Bluephase N®	Bluephase N® M	Bluephase N® MC	Bluephase® Style M8
	1100 мВт/см ² ±10%	2000 мВт/см ² - 2.200 мВт/см ² Светодиод класса 2		800 мВт/см ² ±10%	800 мВт/см ² ±10%	800 мВт/см ² ±10%
Для каждой руки (эргономичный дизайн)	✓	–	–	–	–	✓
Каждый материал (спектр длины волны)	✓ 385 - 515 нм	✓ 385 - 515 нм	✓ 385-515 нм	– 430-490 нм	– 430-490 нм	– 430-490 нм
Все показания (рабочее время не менее 10 мин.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Постоянная готовность к работе click & cure (опциональная возможность питания от сети)	✓	✓	✓	–	(питание от сети)	✓ (питание от сети)
Время полимеризации для 2 мм Tetric N-Ceram/IPS Empress Direct 4 мм Tetric N-Ceram Bulk Fill	10 сек	5 сек	10 сек	15 сек	15 сек	15 сек
Программы полимеризации						
Турбо  	–	2,000 мВт/см ²	–	–	–	–
HIGH Power высокая мощность  	1,100 мВт/см ²	1,200 мВт/см ²	1,200 мВт/см ²	800 мВт/см ²	800 мВт/см ²	800 мВт/см ²
LOW Power низкая мощность  	–	650 мВт/см ²	650 мВт/см ²	–	–	–
SOFT Start мягкий старт  	–	650/1200 мВт/см ²	650/1200 мВт/см ²	–	–	–
Световод	Укороченный 10 мм, черный	10>8 мм, черный	10 мм, черный	10 мм, черный	10 мм, черный	10 мм, черный
Электропитание	Литий-полимерный аккумулятор Мощность прим. 20 мин., время зарядки прим. 2 часа	Литий-полимерный аккумулятор Мощность прим. 45 мин., время зарядки прим. 2 часа	Литий-полимерный аккумулятор Мощность прим. 60 мин., время зарядки прим. 2 часа	Литий-полимерный аккумулятор Мощность прим. 60 мин., время зарядки прим. 1 час	От сети	Литий-полимерный аккумулятор Мощность прим. 20 мин., время зарядки прим. 2 часа
Гарантия	3 года (1 год на аккумулятор)	3 года (1 год на аккумулятор)	3 года (1 год на аккумулятор)	2 года (1 год на аккумулятор)	2 года	2 года (1 год на аккумулятор)

Принадлежности

НОВИНКА

		Bluephase® Style	Bluephase® 20i	Bluephase N°	Bluephase N° M	Bluephase N° MC	Bluephase® Style M8
100 – 240 В		635153 серая 642513 голубая 642514 розовая	613735	659683	647620	647619	667505
Принадлежности / Форма поставки	Bluephase Meter II	667124	■	■	■	■	■
	Световод 10 мм, черный	636240	■	—	—	—	—
	Световод 10 мм, черный	608537	—	—	—	—	—
	Световод 10 мм, черный (M8)	667497	—	—	—	—	■
	Световод 10 мм, черный	613700	—	—	—	—	—
	Световод 10>8 мм, черный	627389	—	■	—	—	—
	Световод 6>2 мм (Pin-Point), черный	636241	✓	—	—	—	—
	Световод 10 мм, черный (N)	656196	—	—	✓■	✓■	✓■
	Световод 6>2 мм (Pin-Point), черный	608538	—	✓	✓	✓	✓
	Защитные чехлы	636239	■	—	—	—	—
	Защитные чехлы	608554	—	■	✓	✓	✓
	Защитный козырек (перевернутый конус)	551756	■	■	✓■	✓■	✓■
	Защитный экран	592496	✓	■	✓	✓	✓
	Аккумулятор	637692	627300		647622	—	637692
	Наконечник	637916 серый 643296 голубой 643307 розовый (наконечник, аккумулятор, световод 10 мм)	613753 (наконечник, аккумулятор, световод 10>8 мм)	659681 (наконечник, аккумулятор, световод 10 мм)	647621 (наконечник, аккумулятор, световод 10 мм)	—	667496

■ – содержится в форме поставки

✓ – приобретается дополнительно, как принадлежность

Cultura Incubator

Небольшой шкаф-инкубатор для современной клиники.



Технические данные:

- Температурный диапазон: 25-55 °С
- Отклонения температуры: ± 1 °С
- Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц
100-20 В/50-60 Гц
- Мощность: 30 В/0,2 А

Форма поставки


Cultura Incubator **220-240 В** **533539**

* поставляется не во все страны

Ivoclar Vivadent

Поддержание здоровья полости рта

Программа профессионального ухода от Ивоклар Вивадент предлагает комплексные решения

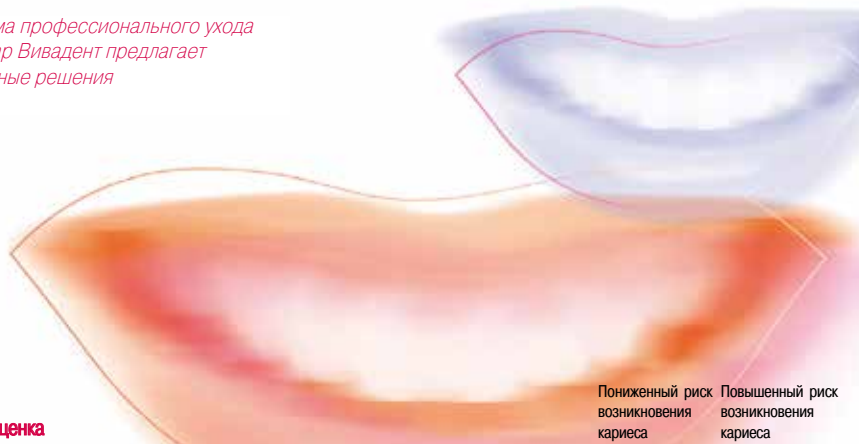

Оценка

Обследование	Метод	Пониженный риск возникновения кариеса	Повышенный риск возникновения кариеса
		< 10 ⁵	≥ 10 ⁵
Образование налета	Plaque Test		✓
Кариозные поражения			✓
Стрептококки mutans (CFU/мл в слюне)	CRT bacteria	< 10 ⁵	≥ 10 ⁵
Лактобациллы (CFU/мл в слюне)	CRT bacteria	< 10 ⁵	≥ 10 ⁵
Скорость течения слюны (мл слюны/мин.)	CRT bacteria	≥ 1	< 0,7
Буферная емкость слюны	CRT buffer	высокий	низкий

Рекомендации по лечению

Стоматологическая клиника	Метод	Пониженный риск возникновения кариеса	Повышенный риск возникновения кариеса
		✓ 2x/a	✓ 4-6x/a
Уточнение анамнеза			✓
Контроль		✓ 2x/a	✓ 4-6x/a
Риск возникновения кариеса	CRT bacteria	✓	✓
	CRT buffer	✓	✓
Раннее определение кариеса проксимальных поверхностей		✓	✓
Реставрация кариозных полостей	Tetric N-Ceram	✓	✓
	Tetric N-Flow	✓	✓
	Bluephase	✓	✓
Восстановление	IPS Empress	✓	✓
	VarioLink N	✓	✓
Удаление налета		✓	✓
Защита оголившихся шеек зубов	VivaSens	✓	✓
Запечатывание фиссур	Helioseal		✓
Локальное нанесение фтора	Fluor Protector N	✓ 2x/a	✓ 4-6x/a
Мотивация и консультирование по гигиене полости рта		✓	✓
Профессиональная очистка зубов	Proxylt, OptraGate	✓	✓
Локальное нанесение хлоргексидина	Cervitec Plus		✓
	Cervitec Gel		✓
Рекомендации по поводу питания			✓

Мероприятия

Дома	Метод	Пониженный риск возникновения кариеса	Повышенный риск возникновения кариеса
		✓	✓
Зубная паста, содержащая фтор		✓	✓
Уход за проксимальными поверхностями		✓	✓
Жидкости или гели для полоскания рта, содержащие фтор	Fluor Protector Gel		✓
Препараты, содержащие хлоргексидин	Cervitec Gel		✓
	Cervitec Liquid		✓
Препараты, содержащие бикарбонаты		✓	✓
Сбалансированное питание			✓
Питание, требующее интенсивного жевания			✓
Сладости, жевательные резинки с сахарозаменителями	Wrigley's ORBIT Жевательная резинка, не содержащая сахара		✓

Разработано в сотрудничестве с центром зубной, ротовой и челюстной медицины университетской клиники г. Jena Университета Friedrich-Schiller-Universität Jena

CRT® bacteria

Для определения количества стрептококков mutans и лактобацилл в слюне



Преимущества:

- 2 в 1: определение количества стрептококков mutans и лактобацилл
- высокая селективность питательной среды
- гигиенично закрытые поверхности агара
- отличная экономичная основа
- просто и быстро в использовании
- основа для индивидуального и целенаправленного планирования терапии

Форма поставки

Упаковка Intro Pack		553545
Культура Dip CRT bacteria	3 x	
Тестовые полоски CRT buffer	3 x	
Разные принадлежности		
Refill CRT bacteria, разные принадлежности	6 шт.	553543
Refill CRT Парафин	6 шт.	553546

CRT® buffer

Для определения буферной емкости слюны.



Преимущества:

- тестовые полоски в индивидуальной упаковке
- информативные результаты
- просто и быстро в применении
- результаты уже через 5 минут

Форма поставки

Refill CRT buffer, разные принадлежности	6 x	553544
---	------------	---------------

Plaque Test

Флюоресцирующая контрольная жидкость для выявления налета на зубах с помощью полимеризационной лампы.



Преимущества:

- никакого ненужного окрашивания языка и слизистой
- простое использование
- флюоресцирует под любой полимеризационной лампой

Форма поставки

Refill	1 x 11 г	553299
---------------	-----------------	---------------

VivaSens®

Снимающий чувствительность лак для гиперчувствительных зубов.



Показания:

- гиперчувствительные шейки зуба
- гиперчувствительность из-за отбеливания зубов
- снятие гиперчувствительности при профессиональной очистке зубов, работе со скейлером
- защита дентина под реставрационными материалами

Преимущества:

- ослабление боли на длительный период времени
- быстрое действие
- быстрое использование
- щадящее действие на десну
- разовая доза Free Stand Single Dose

Форма поставки

Разовые дозы Single Dose

Набор	22 x 0,1 г	561958
Упаковка Intro Pack	6 x 0,1 г	561959

Бутылочки

Набор	1 x 4 г	574359
--------------	----------------	---------------

Cervitec® Plus

Защитный лак, содержащий хлоргексидин, последнего поколения. Cervitec Plus является последователем клинически проверенного в течение многих лет лака Cervitec. 1% хлоргексидина плюс 1% тимола позволяют обеспечить высокую эффективность.



Показания:

- гиперчувствительные шейки зуба
- гингивиты
- пациенты с высоким количеством стрептококков mutans, например:
- пациенты после челюстных операций
- при недостаточной гигиене рта
- ксеростомии
- в семьях (трансмиссия)

Преимущества:

- закрытие открытых дентинных канальцев
- локальное лечение особенно поврежденных областей
- долгое действие компонентов
- отсутствие обычных для хлоргексидина неприятных побочных действий

Новая матрица лака расширяет спектр уже известных свойств:

- более сильное сцепление
- упрощенное нанесение благодаря повышенной гидрофильности
- разовая доза Single Dose и экономичные мультидозы Multi Dose – каждый выбирает то, что ему нужно.

Форма поставки

Набор с разовыми дозами Single Dose, различные принадлежности	20 x 0,25 г	602271
Intro Pack	4 x 0,25 г	643592
Набор, различные принадлежности	1 x 7 г	602273
Refill, различные принадлежности	2 x 7 г	604661

Cervitec® Liquid

Cervitec Liquid – это готовая к использованию жидкость для полоскания рта, без спирта, содержит 0,1% хлоргексидина, ксилит и эфирное масло. Компоненты препятствуют росту бактерий, которые могут вызывать воспаления в полости рта, заболевания пародонта, кариес или дурной запах изо рта.



Рекомендации по применению:

- для интенсивного курса полоскания рта, ограниченного по времени
- для предотвращения или в качестве поддерживающей меры при лечении воспалений десны, слизистой оболочки, а также связочного аппарата и инфекций в полости рта.
- до и после имплантологических, пародонтальных, челюстных хирургических вмешательств.
- при повышенном риске появления кариеса
- при ограниченной возможности по гигиене полости рта
- против дурного запаха изо рта

Преимущества:

- хлоргексидин + ксилит + эфирное масло означают комбинированное антибактериальное действие
- приятный вкус способствует готовности применять аппарат
- подходит для группы пациентов с алкогольной абстиненцией

Форма поставки

Cervitec Liquid	1 x 100 мл	630260
	1 x 300 мл	630221

Cervitec® Gel

Гель для ухода за полостью рта с 0.2% хлоргексидина и 900 ppm фтора.



Область применения:


- поддержание здоровья десен и слизистой оболочки для предотвращения воспалений
- воспалительные заболевания, такие, как гингивиты, пародонтиты, периимплантиты или протезные стоматиты, как сопутствующая мера к терапии.
- при повышенном количестве микробов

Преимущества:

- уменьшение налета, уменьшение воспалений десны, уменьшение запаха изо рта благодаря снижению количества бактерий.
- фтор защищает живые зубы
- приятный вкус
- простое использование
 - почистить зубы вечером обычным образом гелем Cervitec Gel
 - нанести гель на проксимальные поверхности с помощью межзубной щетки
 - гель нанести прямо на десну, слизистую оболочку или внутреннюю поверхность протеза

Форма поставки

Cervitec Gel	1 x 20 г	616440
	1 x 50 г	616439

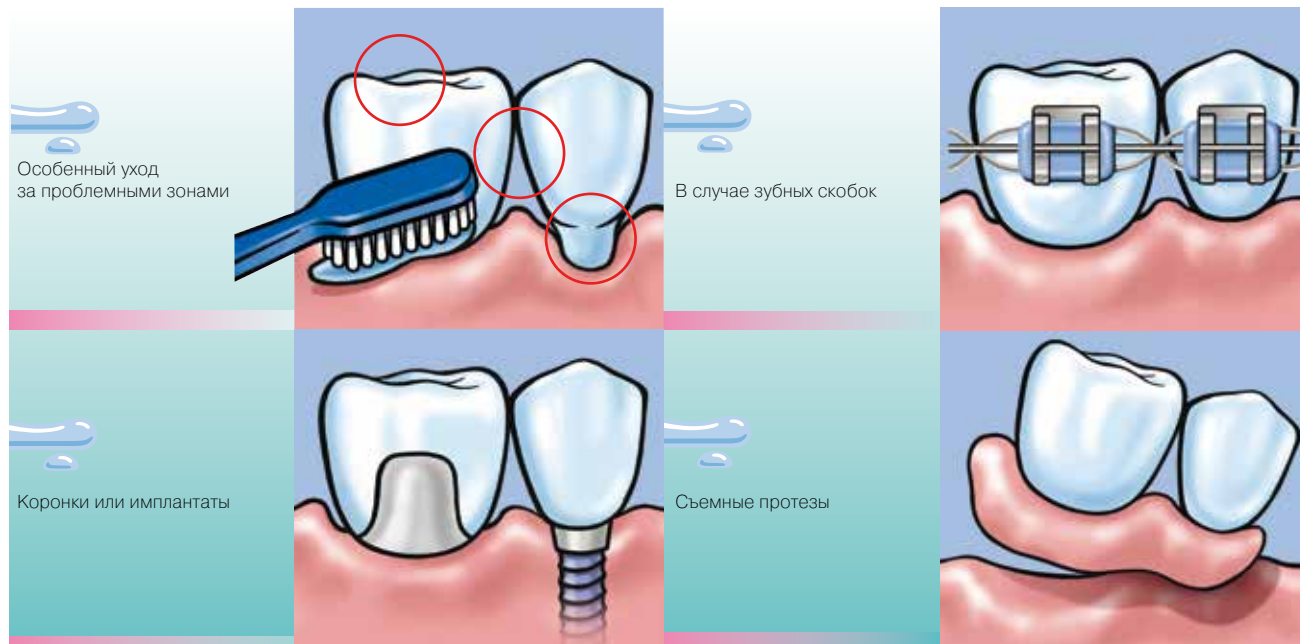

Fluor Protector N

Фторсодержащий лак для снижения чувствительности и защиты от кариеса и эрозии. Инновационная формула, экономичная бутылочка, подходит для детей и взрослых.



Сильная защита с Fluor Protector N

Показания:

- Лечение гиперчувствительных шеек зубов
- повышение резистентности эмали зубов к кислотам
- долгосрочная профилактика кариеса
- Лечение чувствительности после отбеливания зубов

Преимущества:

- 7700 ppm фтора в гомогенном растворе, после высушивания концентрация увеличивается примерно в 4 раза
- Готов для немедленного применения, эффективное фторирование
- Легко наносится, оптимальное соотношение цена/качество

Форма поставки

Fluor Protector N Refill	1 x 7 г	639518
---------------------------------	----------------	---------------

Fluor Protector

Фторсодержащий защитный лак для снижения чувствительности и профилактики кариеса.



Усиленная защита против чувствительности зубов, кариеса и эрозий путем:

- закрытия открытых дентинных канальцев
- препятствование деминерализации
- стимуляция реминерализации
- реминерализация кариозных поражений

Преимущества:

- 0.1%-ный гомогенный раствор, после высушивания прим. 10-кратно усиленная концентрация
- высокая эстетика
- превосходное сцепление

Форма поставки

Ампулы

Набор	25 x 1 мл	533294
Ампулы, различные принадлежности		
Refill	50 x 1 мл	533293
Ампулы, различные принадлежности		

VivAmpoule

Набор , различные принадлежности	20 x 0,4 мл	550578
Refill , различные принадлежности	40 x 0,4 мл	550579
Intro Pack , различные принадлежности	4 x 0,4 мл	550580

Fluor Protector Gel

Для усиления зубов кальцием плюс фосфатом плюс фтором.
Fluor Protector Gel – это гель для интенсивного и в то же время щадящего ухода за зубами.



Рекомендации по применению:

- специальный уход, обеспечивающий защиту от кариеса, эрозий и заболеваний пародонта
- при чувствительных
- при оголенных шейках зуба
- в случае употребления пищи с повышенным содержанием кислот
- в случае сухости во рту
- при челюстном ортопедическом лечении
- после профессиональной чистки зубов
- в рамках лечения по осветлению зубов

Преимущества:

- кальций + 1450 ppm фтор + фосфат защищают зубы от негативного влияния кислот.
- ксилит препятствует росту кариогенных бактерий
- D-пантенол ухаживает за тканями десны

Форма поставки

Fluor Protector Gel	1 x 20 г	628437
	1 x 50 г	628436

Helioseal® Helioseal® F Helioseal® Clear

Светоотверждаемый запечатывающий материал на основе пластмассы для превентивного запечатывания фиссур и впадин с применением техники протравливания эмали.



Helioseal

Запечатывающий материал белого цвета для оптимального контроля во время запечатывания и повторных посещений.

Helioseal F

Запечатывающий материал белого цвета, дополнительно выделяющий фтор.

Helioseal Clear

Прозрачный запечатывающий материал для оптимальной эстетики и лучшего контроля над фиссурами в сомнительных случаях.

Преимущества:

- ретенция на долгий период
- плотное краевое прилегание
- оптимальная текучесть

Форма поставки

Helioseal

Набор 1 x 8 г 533298

Helioseal, Email Preparator blue, различные принадлежности

Refill 1 x 8 г 533297

Helioseal F

Набор 5 x 1,25 г 558518

Helioseal F, Email Preparator blau, различные принадлежности

Refill шприцы 1 x 1,25 г 558519

Refill кавифилы 50 x 0,1 г 543793

Helioseal Clear

Набор 5 x 1,25 г 558520

Helioseal F Clear, Email Preparator blau, различные принадлежности

Refill 1 x 1,25 г 558521

Proxyl[®]

Пасты с различной абразивностью (RDA) для очистки и полировки зубов, реставраций и конструкций с опорой на имплантаты, благодаря своей усиленной формуле. Пасты содержат ксилит, который сокращает рост бактерий, вызывающих кариес.



Содержание фтор:

Proxyl RDA 83, грубая
Proxyl RDA 36, средняя
Proxyl RDA 7, тонкая

Не содержит фтора:

Proxyl RDA 36, средняя

Преимущества:

- универсальная, бережная чистка и полировка
- чистка без царапин в чувствительных участках при использовании тонкой Proxyl без пемзы
- в удобных пластиковых тубах
- паста не разбрызгивается
- свежий мятный вкус

Форма поставки

Refill RDA 7, тонкая	1 x 55 мл	579866
Refill RDA 36, средняя	1 x 55 мл	579867
Refill RDA 83, грубая	1 x 55 мл	579868
Refill RDA 36, средняя, без фтора	1 x 55 мл	633064

OptraGate®

ExtraSoft
Version

OptraGate – это инновационное вспомогательное средство для мягкого и комфортного для пациента расширения рабочего поля, не содержащее латекса. С помощью новой, оптимизированной экстра мягкой версии – OptraGate «ExtraSoft» – вы предоставляете пациенту еще больше комфорта, прежде всего в области верхней и нижней губной складки.

Наряду с размерами для взрослых, средний «Regular» и маленький «Small» теперь также выпускается OptraGate для детей, размер «Junior».




(Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)

Преимущества:

- наглядное рабочее поле
- повышенный комфорт для пациента благодаря трехмерной эластичности
- широкая область применения, возможность применения в детской стоматологии

Форма поставки

Набор	577275	
OptraGate Regular (средний)	40 x	
OptraGate Small (малый)	40 x	
Refill		
Regular (средний)	80 x	590850
Small (малый)	80 x	590851
Junior (детский)	80 x	591451

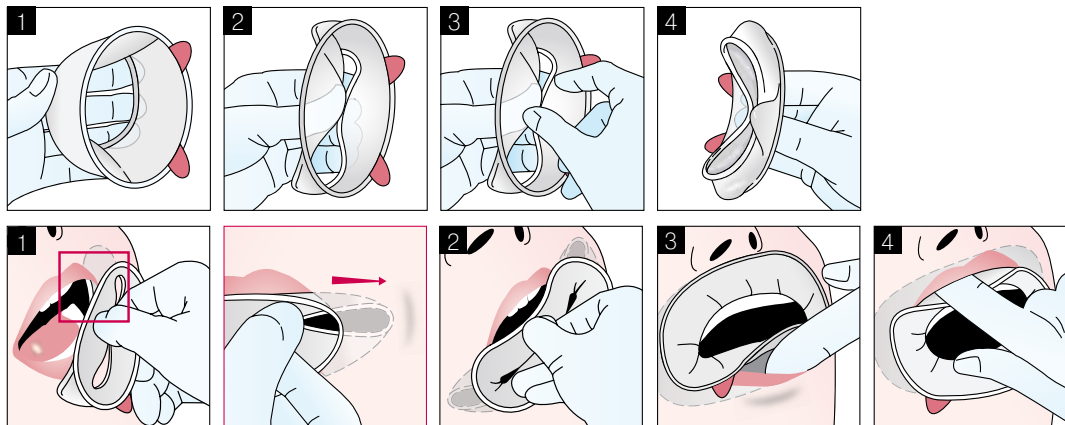

OptraDam® Plus

Удобный для пациента коффердам для обеспечения полной сухости рабочего поля. Благодаря встроенной неметаллической рамке OptraDam Plus может быть легко и быстро установлен без помощи ассистента. Благодаря своей анатомической форме коффердама и его трехмерной эластичности обеспечивается существенно облегченный доступ к значительно увеличенному рабочему полю.

Преимущества:


- простая и быстрая установка без посторонней помощи
- оптимальная доступность и обеспечение сухости одновременно всех четырех квадрантов
- очень высокий комфорт для пациента
- работает преимущественно без металлических кламмеров

Форма поставки

Набор	627401	
OptraDam Plus Regular (средний)	25 x	
OptraDam Plus Small (малый)	25 x	
Refill		
Regular (средний)	50 x	627399
Small (малый)	50 x	627400



(Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)

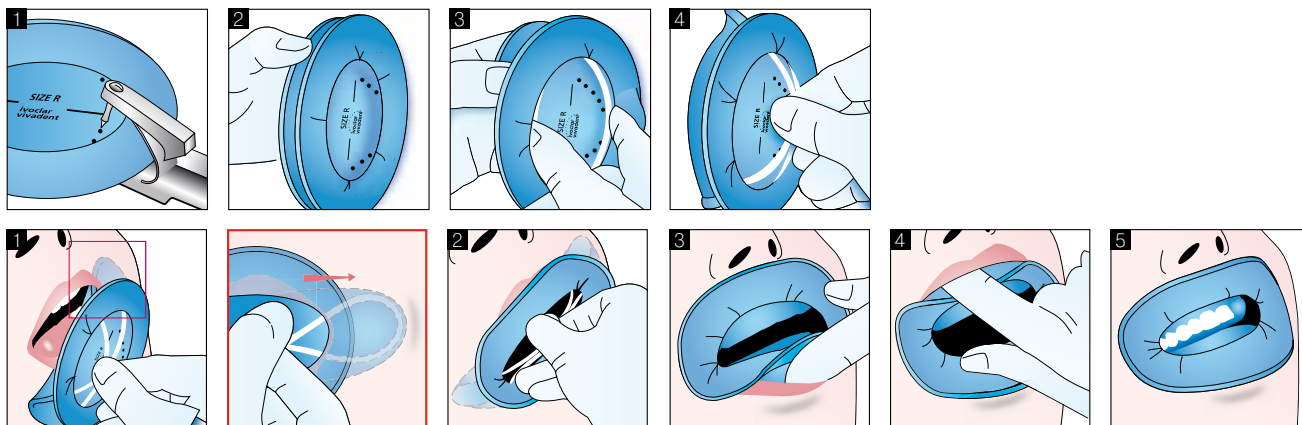

OptraSculpt®

Моделировочный инструмент для простой и точной обработки композитных материалов. Состоит из двух высококачественных базовых инструментов, а также специальных легких эластичных моделировочных насадок шести различных форм.



Показание:

Моделирование и контурирование анатомических особенностей прямых реставраций, композитных пломб

Преимущества:

- не прилипает композит
- позиция моделировочной насадки выбирается произвольно на 360°
- возможность индивидуального выбора 15 различных инструментов


Форма поставки

Набор		577273
OptraSculpt односторонний, OptraSculpt двухсторонний	по 1 x	
OptraSculpt шарик, OptraSculpt острое	по 40 x	
OptraSculpt шпатель, OptraSculpt цилиндр скошенный	по 40 x	
OptraSculpt цилиндр, OptraSculpt пирамида	по 40 x	

Refill Моделировочный инструмент односторонний	1 x	590756
Refill Моделировочный инструмент двухсторонний	1 x	590757
Refill Цилиндр скошенный	100 x	590762
Refill Цилиндр	100 x	590761
Refill Острое	100 x	590759
Refill Пирамида	100 x	590763
Refill Шпатель	100 x	590760
Refill Шарик	100 x	590758

OptraSculpt® Pad

OptraSculpt® Pad – это моделировочный инструмент с насадками из вспененного материала, к которым не прилипает материал, для быстрой моделировки композитных пломб.

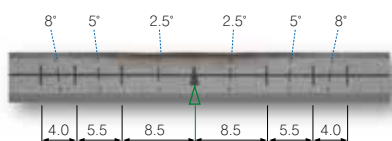

Высокоэластичные насадки из вспененного материала оптимально подходят к контуру зуба и позволяют выполнять равномерное моделирование, не оставляя при этом на поверхности композита нежелательные отпечатки от инструмента.

Показания:

Адаптация, моделирование и оформление поверхности неотвержденных трамбуемых композитных и компомерных материалов для реставраций класса III, IV и V, а также виниров, выполняемых прямым методом.

Преимущества:


- адаптация материала благодаря насадкам Pad из вспененного материала, к которым не прилипает материал
- гомогенное формирование поверхности без отпечатков инструмента на композите
- профессиональная эстетика благодаря уникальной ориентировочной шкале на ручке инструмента

Форма поставки

Набор		639791
OptraSculpt Pad Инструмент	1 x	
OptraSculpt Pad Refill/4 мм	60 x	
OptraSculpt Pad Refill/6 мм	60 x	
OptraSculpt Pad Refill/4 мм	60 x	639792
OptraSculpt Pad Refill/6 мм	60 x	639793
OptraSculpt Pad Инструмент Refill	1 x	646004

OptraContact®

Удобный в использовании и очень эффективный ручной инструмент для формирования плотных проксимальных контактных пунктов большой протяженности на боковых зубах.

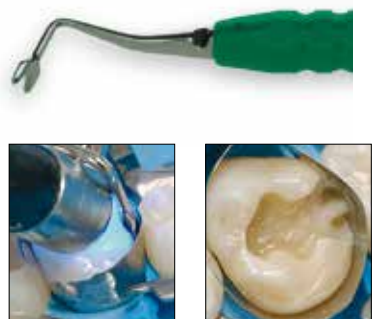

Показания:

В то время как OptraContact Molar (зеленый инструмент) специально разработан для больших полостей, Optra Contact Premolar (голубой инструмент) предназначен для маленьких реставраций.

Преимущества:

- плотные контактные пункты большой протяженности
- обеспечивает точное расположение контактного пункта на верхней или нижней трети проксимальной поверхности
- прост в применении

Форма поставки

Набор		577276
OptraContact Моляр	1 x	
OptraContact Премоляр	1 x	
Refill Моляр	1 x	582166
Refill Премоляр	1 x	582165

OptraPol® Next Generation

Высокоэффективные одношаговые полиры с алмазными частицами для композитов. Высокоэстетичный блеск и гладкая поверхность всего за один рабочий этап. Можно автоклавируют и использовать не менее 20 раз.

Формы:

- малое пламя
- большое пламя
- чашечка
- линза



Преимущества:

- превосходный блеск и гладкая поверхность благодаря содержанию алмазных частиц
- быстрая финишная полировка всего лишь за один рабочий этап
- многократное использование, позволяющее экономить средства

Форма поставки

Набор/18		634464
малое пламя,	6 x	
большое пламя, чашечка, линза	по 4 x	
Refill		
Чашечка	10 x	634459
Большое пламя	10 x	634461
Малое пламя	10 x	634458
Линза	10 x	634460

OptraFine®

Высокоэффективная алмазная полировочная система многократного использования для керамических реставраций, изготовленных с помощью технологии CAD/CAM и в лаборатории.

Формы:

- пламя
- чашечка
- шайба
- нейлоновые щетки и алмазная полировочная паста для финишной полировки



Показания:

Полировка до высокого блеска стоматологических керамических реставраций.

Преимущества:

- высокоэстетичный блеск
- быстро и эффективно
- многократное использование, позволяющее экономить средства

Форма поставки

Набор 601989

F пламя, F чашечка, F шайба	по 2
P пламя, P чашечка, P шайба	по 2
HP нейлоновая щетка	6 x
HP полировочная паста	1 x

Refill OptraFine F (светло-синие)

Пламя	10 x	601994
Чашечка	10 x	601990
Шайба	10 x	601992

Refill OptraFine P (темно-синие)

Пламя	10 x	601995
Чашечка	10 x	601991
Шайба	10 x	601993

Refill OptraFine HP Нейлоновая щетка 10 x 602288

Refill OptraFine HP Полировочная паста 1 x 602289

OptraStick®

OptraStick – это инструмент с гибким клейким окончанием. С его помощью очень удобно брать, переносить и точно размещать на месте маленькие частички, вкладки типа Inlay, Onlay или виниры из различных материалов (например, IPS Empress®, IPS e.max®)



Преимущества:

- быстрое и точное расположение
- хорошее сцепление с клейким окончанием
- широкая область применения

Форма поставки

Refill	50 x (5 x 10)	612600
--------	---------------	--------

Astropol®

Показания:

Astropol предназначен для финирирования, полирования и финишного полирования композитных и керамических материалов.

Astropol F

Финиры (серые) для удаления излишков композитных материалов в проксимальной и окклюзионной области.

Astropol P

Полиры (зеленые) для полирования композитных и керамических материалов.

Astropol HP

Полиры (розовые) для финишной обработки.

Формы:

- малое пламя
- большое пламя
- чашечка
- шайба



Форма поставки

Набор 24 x 557625

Astropol F: малое пламя, большое пламя, чашечка, шайба,
Astropol P: малое пламя, большое пламя, чашечка, шайба,
Astropol HP: малое пламя, большое пламя, чашечка, шайба

Refill Astropol F

Малое пламя	6 x	557615
Большое пламя	6 x	557616
Чашечка	6 x	557617
Шайба	6 x	557618

Refill Astropol P

Малое пламя	6 x	557614
Большое пламя	6 x	557621
Чашечка	6 x	557619
Шайба	6 x	557620

Refill Astropol HP

Малое пламя	3 x	557613
Большое пламя	3 x	557622
Чашечка	3 x	557623
Шайба	3 x	557624

Astrobrush®

Многократно используемые полиры для финишной полировки композитов, компомеров, керамики и стеклоиономеров.

Никакой полировочной пасты не требуется. В полирах содержатся специальные волокна с карбидом кремния. При постепенном износе щетины свежее абразивное вещество постоянно выступает наружу, обеспечивая тем самым всегда одинаково высокое качество полирования.

Astrobrush можно автоклавирировать и использовать до 20 раз.

Показания:

- Полировка реставраций из композита, компомеров, керамики и стеклоиономерных цемента.
- Удаление внешних дисколоритов в процессе профилактического лечения

Формы:

- малая чашечка
- большая чашечка
- острие

Форма поставки

Набор 15 x 559647

Острие, малая чашечка, большая чашечка

Refill

Острие	6 x	559648
Малая чашечка	6 x	559649
Большая чашечка	6 x	559650



Politip®

Многokrатно используемая двухэтапная полировочная система для композитов и амальгамы, состоящая из серых финиров Politip-F и зеленых полиров Politip-P.

Показания:

Politip показан для финирирования и полировки реставраций из композитных материалов и амальгамы.

Формы:

- малая чашечка
- большая чашечка
- пламя



Форма поставки

Профессиональный набор 24 x 551580
Professional Set Politip Полиры (P)/Финиры (F)

Формы финиров: пламя, большая чашечка, малая чашечка
 Формы полиров: пламя, большая чашечка, малая чашечка

Набор Politip-F (серый) 6 x 533599

Формы финиров: пламя, большая чашечка, малая чашечка

Refill Politip-F

Пламя	6 x	533602
Большая чашечка	6 x	533603
Малая чашечка	6 x	533604

Набор Politip-P (зеленый) 6 x 533598

Формы полиров: пламя, большая чашечка, малая чашечка

Refill Politip-P

Пламя	6 x	533584
Большая чашечка	6 x	533585
Малая чашечка	6 x	533587

Инжектор для кавифилов

Инжектор для стоматологических пломбировочных материалов в кавифилах.



Форма поставки

Refill Cavifil Injector Redesign 1 x 627882

VivaPad

Блок с защитой от света для замешивания и подготовки композитов двойного и светового отверждения, а также адгезивов.



Форма поставки

VivaPad 1 x **533648**

Polyart Блок для смешивания

Универсально используемый блок для замешивания с 60 отрывными листами.

Размер:
– размер 50 x 70 мм



Форма поставки

Блок для замешивания

50 x 70 мм 1 x **591204**

P1 Инструмент

Универсальный моделировочный инструмент и штопфер для композитов.



Форма поставки

P1 Инструмент 1 x **533646**

Держатель для кисточек

Двухсторонний держатель для кисточек, в который можно вставлять кисточки с мягкой и твердой щетиной, а также Vivabrush.



Форма поставки

Держатель

Фиолетовый	1 x	538895
Красный	1 x	538894
Темно-оранжевый	1 x	538893
Оранжевый	1 x	538892
Белый	1 x	573676

Кисточка с жесткой щетиной

Одноразовая кисточка для нанесения жидких стоматологических материалов.



Форма поставки

Refill	50 x	533664
--------	------	--------

Кисточка с мягкой щетиной

Одноразовая кисточка для нанесения стоматологических материалов низкой вязкости.



Форма поставки

Refill	50 x	533670
--------	------	--------

Vivabrush

Одноразовое вспомогательное средство для нанесения лаков, гелей и запечатывающих материалов (вставляется в держатель для кисточек).



Форма поставки

Refill	50 x	550430
---------------	-------------	---------------

VivaBrush G

Одноразовый аппликатор позволяет нанести тонкий слой лака, например Fluor Protector N, выборочно или на всю поверхность.



Форма поставки

Refill	50 x	631170
---------------	-------------	---------------

Vivadent® Applicator

Одноразовая кисточка для нанесения жидких или низкой вязкости стоматологических материалов.

Выпускается в трех размерах/формах:

- Средний Regular (синий) для нормальных препараций
- Малый Small (фиолетовый) для микрополостей
- Белый



Форма поставки

Аппликатор

Средний Regular	50 x	631699
Малый Small	25 x	562168
Белый	50 x	603949

Канюли

Канюли для шприцов и бутылочек



Форма поставки

Аппликационные канюли для Tetric N-Flow, 1,1 мм	20 x	597315
Аппликационные канюли для Heliomolar Flow, 0,9 мм	20 x	556744
Аппликационные канюли для Helioseal F, 0,6 мм	20 x	579862
Аппликационные канюли для Helioseal Clear, Tetric Color, 0,4 мм	20 x	556745
Аппликационные канюли Redesign для Helioseal Clear, 0,4 мм	20 x	634847
Аппликационные канюли Redesign для Helioseal F, 0,6 мм	20 x	634819
Аппликационные канюли Redesign для IPS Empress Direct Flow, IPS Empress Direct Opaque 0,9 мм	20 x	634849
VivaPen Браш-канюли для Tetric N-Bond, Tetric N-Bond Self-Etch	40 x	604637
	100 x	604310
Аппликационные канюли для Heliobond / Helioseal в бутылочках	20 x	533669
Аппликационные канюли для Variolink N	20 x	559224
Аппликационные канюли для N-Etch	20 x	550587
Аппликационные канюли для Email Preparator blau	20 x	533666