

Monnal T60

Дотронься и дыши



Мобильность

T60

Аппарат искусственной вентиляции легких **Monnal T60** был разработан для случаев срочного медицинского вмешательства в условиях интенсивной терапии, как в самой больнице, так и за ее пределами. Данный аппарат позволяет бригадам врачей скорой помощи осуществлять ИВЛ пациентов, находящихся в критическом состоянии, как взрослых и детей, так и новорождённых.

Monnal T60 – незаменимый аппарат в руках реаниматологов, позволяющий им еще больше повысить свою эффективность:

- в условиях оказания экстренной помощи на борту вертолета или самолета, при длительных медицинских эвакуациях наземным транспортом;
- при внутрибольничной перевозке пациентов;
- в приемном покое и отделении травматологии;
- в послеоперационных палатах и в отделениях интенсивной терапии.

Monnal T60 с легкостью можно приспособить к условиям, предъявляемым к отделениям интенсивной терапии.



Аппарат **Monnal T60** отвечает требованиям любых, как правило, уникальных ситуаций в тяжелых и даже экстремальных условиях.

Преимущества аппарата ИВЛ Monnal T60:

- + **Легкость и компактность:** 3,7 кг.
- + **Автономность от воздуха и электричества:** 5 часов автономной работы, а также улучшенные возможности для длительной транспортировки
- + **Надёжный и устойчивый к падениям:** защита соединений и интегрированный в корпус аппарата блок выдоха
- + **Широкая линейка принадлежностей:** подставки и системы защиты для оптимальной конфигурации и транспортировки пациента:
 - Настенная станция зарядки для машин скорой помощи
 - Сумка для переноски
 - Внутрибольничная универсальная переноска
 - Мобильное основание



Воздушный транспорт

- сертификат, подтверждающий возможность использования в воздушном транспорте (стандарт EN 13718 и RTCA DO-160F);
- виброзащитённость 20G;
- автоматическая компенсация изменений атмосферного давления;
- регулируемая яркость экрана;
- большая световая панель сигнализации.

МОБИЛЬНОСТЬ



Эргономичная рукоятка и ручка для переноски



monnal

Скорость

Аппарат **Monnal T60** - наилучшее решение для быстрого и надежного оказания экстренной помощи. Он обеспечивает эффективную респираторную поддержку в наиболее короткий срок. Достаточно простой в использовании, аппарат **Monnal T60**, позволяет реаниматологам быстро с ним ознакомиться и сфокусироваться на жизненно важном процессе оказания помощи пациенту.

Преимущества аппарата ИВЛ Monnal T60:

- + Сгруппированные и локализованные блоки подключений, обеспечивающие простую подготовку аппарата к запуску
- + Транспортная сумка, позволяющая подсоединить кабели и контур пациента
- + Автоматически настраиваемые режимы путем установления роста и пола пациента для быстрого и безопасного начала вентиляции



Интуитивное использование

- Большой сенсорный экран
- Уникальный способ интуитивной настройки: выбрать, настроить, подтвердить
- Контекстное меню

* Идеальный вес тела – вес рассчитанный по росту пациента

Восприятие



Точный, полный и доступный мониторинг на начальной стадии лечения пациента – крайне важно для планирования, мониторинга и корректировки лечения.

При наличии обширных возможностей мониторинга **Monnal T60** обеспечивает **безопасную вентиляцию в процессе транспортировки пациента**.

Преимущества аппарата ИВЛ Monnal T60:

- + Большой цветной экран, улучшающий считываемость информации в любых условиях, благодаря настраиваемой яркости экрана, дисплею с высокой контрастностью, вращающемуся на 180 градусов экрану
- + Уникальная зона мониторинга для лучшего отслеживания информации о пациенте
- + Функция увеличенного отображения зоны графического мониторинга
- + Большая световая панель сигнализации, которая легко различима в любых условиях и может быть отключена в случае необходимости



Безопасность вентиляции

- Мониторинг выдыхаемого CO₂ (опция) для обеспечения контроля корректной интубации пациента, а также для постоянного контроля эффективности вентиляции (общепринятая технология)
- Автоматическое мониторирование давления плато для защиты легких пациента

СКОРОСТЬ

ВОСПРИЯТИЕ



Сгруппированные и локализованные блоки подключений



Световая панель сигнализации

Эффективность

Аппарат **Monnal T60** обеспечивает высококачественную ИВЛ для успешного лечения пациентов. Бригады медиков могут эффективно адаптировать лечение для удовлетворения нужд пациентов: например, возможность высокоэффективной **инвазивной либо неинвазивной вентиляции, автоматическая экстренная вентиляция**, режимы ИВЛ по объему и давлению, CPAP и спонтанные режимы с поддержкой давления. Аппарат ИВЛ **Monnal T60** создан на основе технологии Monnal, которая поддерживает быстрый переход от скорой помощи к интенсивной терапии.

Преимущества аппарата ИВЛ Monnal T60:

- + Чувствительные триггеры для обеспечения **комфорта пациента**, а также восприятие неинвазивной вентиляции
- + Автоматическое определение утечки и ее **компенсация**
- + Возможность **настройки параметра FiO₂**
- + **Настраиваемая вентиляция апноэ**



Запатентованная турбинная технология Monnal T60


- **Пиковый поток 230 л/мин** для эффективной респираторной поддержки при неинвазивной вентиляции
- **Быстрое нагнетание давления** для наилучшего ответа на запрос пациента сделать глубокий вдох
- **Бесшумная работа** для минимизации окружающего шума (48 дБ на расстоянии 1 м)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Автоматическая экстренная вентиляция

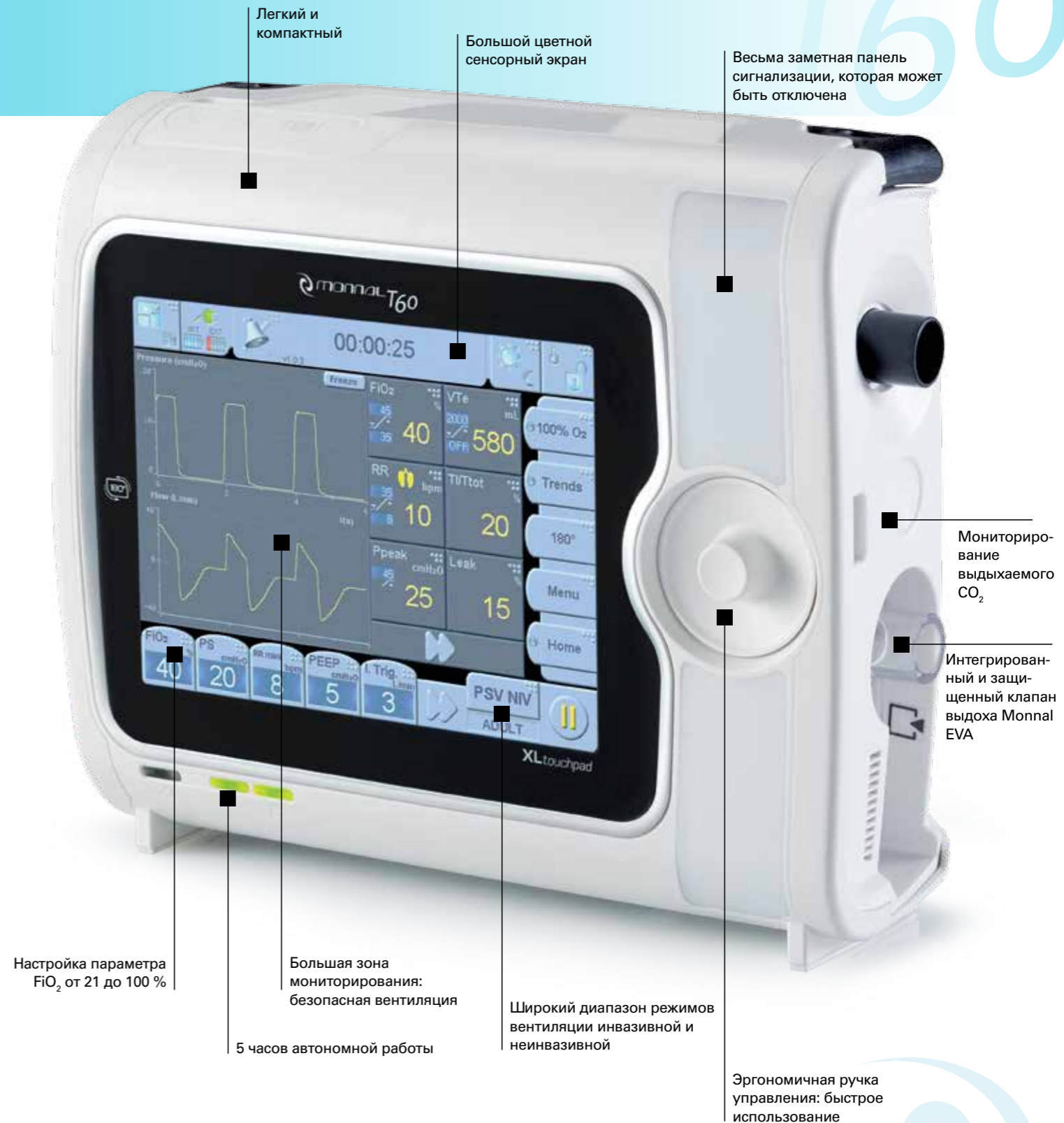



Снабжение
Медицинских
Учреждений



<http://medtehural.ru/>

Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнёры!

Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений, косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте, являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы. Компания "Медицинские Технологии Урала" находится в городе Екатеринбурге. Город равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и эффективного партнера!

*ООО "Медицинские Технологии Урала", желает Вам
Здоровья и Процветания на долгие года*

*Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется
любой удобной для Вас транспортной компанией с соблюдением
температурного режима.*

Мы заботимся о безопасности Вашего груза! Сотрудничая с нами,

Вы делаете правильный выбор!

