

• акушерские • сверхпрочные • хирургические • стоматологические • ортопедические • смотровые •



ARCHDALE

23 ГОДА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

ЛИДЕР ПОСТАВОК МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

02

▶ НАШИ КЛИЕНТЫ

- Медицинские учреждения и аптеки;
- лаборатории и салоны красоты;
- химическая промышленность;
- оптово-розничная торговля;
- пищевые производства и HoReCa;
- клининговые компании.

03

▶ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2001 году компания **ARCHDALE** одна из первых организовала собственное производство в России по стерилизации и упаковке товаров медицинского назначения — это дает преимущество для участия в тендерах с более выгодными ценами.

04

▶ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Передовые технологии в производстве гарантируют соблюдение всех санитарно-технических и гигиенических требований.

01

▶ ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ

Мы сотрудничаем с проверенными поставщиками сырья, прямые и бесперебойные поставки позволяют поддерживать постоянный неснижаемый товарный запас.

05

▶ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Медицинские перчатки:

- латекс, нитрил, винил, неопрен;
- стерильные/нестерильные;
- текстурированные/гладкие;
- опудренные/неопудренные;
- повышенной прочности.

Продукция из нетканого материала:

- маски лицевые;
- шапочки «Шарлотта».

Продукция из полиэтилена:

- бахилы;
- перчатки.

и другие медицинские изделия.



ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАМИ?

- ✓ **ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛАМ**
Мы 23 года успешно работаем на рынке медицинских товаров
- ✓ **У ВАС ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР**
У нас самый широкий ассортимент перчаток
- ✓ **СКЛАДСКОЙ ЗАПАС**
Регулярное пополнение
- ✓ **ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
У нас работают специалисты высокого уровня
- ✓ **ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ**
Мы нацелены на расширение вашего бизнеса и увеличение его доходности
- ✓ **ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР**
Перчатки соответствующий всем санитарно-гигиеническим требованиям
- ✓ **ПОСТОЯННОЕ РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА**
Мы всегда отслеживаем тенденции рынка
- ✓ **МЫ ДОСТАВИМ ВАШ ТОВАР В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА**



НАШИ КЛИЕНТЫ:



Клиническая инфекционная
больница им. С.П. Боткина



Макдоналдс



Центр чистоты «Альянс Плюс»



Триал Маркет



Комус



Кристина Фицджеральд



Бургер Кинг



Сбарро



Фармацевтическая компания
«Волжская мануфактура»



Мир упаковки



ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ



Гормедтехника



НАЗНАЧЕНИЕ



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ)

Перчатки имеют меньшую длину краги и толщину материала.



ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Перчатки имеют большую толщину, удлиненную крагу, анатомическую форму.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ



НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Срок годности:
5 лет с даты изготовления.



СТЕРИЛЬНЫЕ*

Срок годности:
3 года с момента стерилизации.

** — На фабрике ГК «АРДЕЙЛ» применяется газовый метод стерилизации (обработка окисью этилена).
Повторная стерилизация перчаток не рекомендуется, т.к. снижаются защитные свойства.*

ФОРМА



НЕАНАТОМИЧЕСКАЯ

Перчатки одинаковые для обеих рук удобны для быстрой смены перчаток.



АНАТОМИЧЕСКАЯ

Перчатки различны для правой и левой руки хорошо облегают кисть, обеспечивают максимальный комфорт в течение длительного времени.

ПОВЕРХНОСТЬ



ГЛАДКАЯ

Обеспечивает высокую тактильную чувствительность.



ТЕКСТУРИРОВАННАЯ

Обеспечивает надежный захват и удержание инструмента, препятствует его скольжению в руках в условиях повышенной влажности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЧАТОК



ЛАТЕКС*

- Высокая прочность;
- прекрасная барьерная защита;
- высокая растяжимость;
- высокая эластичность;
- хорошая чувствительность.

* — Людям с аллергией на латекс советуем использовать перчатки из синтетических материалов



НИТРИЛ

- Защита от агрессивных химикатов (альдегидов, спиртов, фенолов и кислот и др.);
- высокая прочность материала;
- идеальное облегание руки;
- не вызывает аллергических реакций.



НИТРИЛ TurboFLEX

- Высокая эластичность;
- легкое надевание;
- максимальный комфорт;
- высокая тактильная чувствительность;
- высокая защита в среде с высоким риском заражения;
- не вызывают аллергических реакций.



ВИНИЛ

- Мягкий состав;
- гипоаллергенность;
- для работы с низким уровнем опасности.



НЕОПРЕН

- Стоек к воздействиям солнечного света;
- защищает от кислот, спиртов, щелочей, детергентов и кетонов;
- высокая эластичность;
- максимальный комфорт;
- не вызывает аллергических реакций.



ПОЛИЭТИЛЕН

- отличается хорошей стойкостью к разрывам;
- прочный и легко выдерживает низкие температуры;
- выдерживает многократное сжатие и растяжение.

НАЛИЧИЕ ВЕЩЕСТВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ НАДЕВАНИЕ ПЕРЧАТОК



ПУДРА*

ОПУДРЕННЫЕ • НЕОПУДРЕННЫЕ

ОПУДРЕННЫЕ (пудра — модифицированный кукурузный крахмал):

- пудра способствует легкому надеванию.

НЕОПУДРЕННЫЕ

- внутренняя поверхность обрабатывается особыми составами или покрывается полимером.

* — Пудра может быть причиной возникновения аллергических реакций



ВНУТРЕННЕЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Внутреннее полимерное покрытие:

- обеспечивает дополнительную защиту от аллергенов латекса;
- облегчает надевание перчаток, в том числе на мокрые руки.



ХЛОРИРОВАНИЕ ОДНОКРАТНОЕ • ДВОЙНОЕ

Хлорирование — промывание перчаток хлорсодержащими растворами:


- снижает содержание аллергенов в латексе;
- обеспечивает легкое надевание.

Однократное хлорирование

Промывание внутренней поверхности перчатки.

Двойное хлорирование

Двустороннее промывание перчатки.

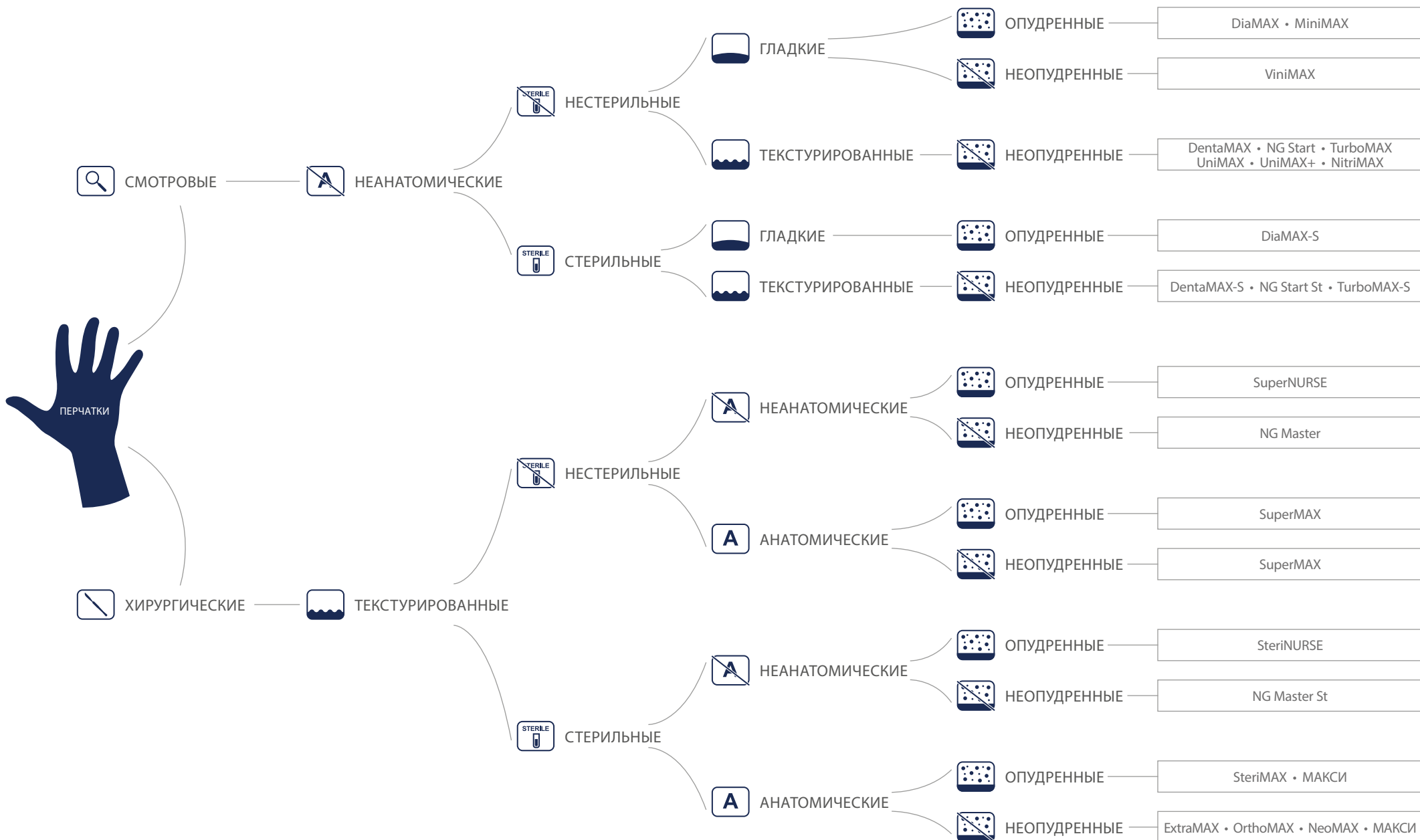

АССОРТИМЕНТ ПЕРЧАТОК

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Наименование	Материал			
Смотровые				
DiaMAX	Латекс	●	○	○
MiniMAX	Латекс	●	○	○
NitriMAX	Нитрил	○	○	●
TurboMAX	Нитрил Turboflex	○	○	●
TurboMAX удлин.	Нитрил Turboflex	○	○	●
ViniMAX	Винил	○	○	○
NG Start од. хл.	Латекс	○	○	●
NG Start дв. хл.	Латекс	○	○	●
NG Start с пол. пок.	Латекс	○	○	●
NG Start дв. хл. с пол. пок.	Латекс	○	○	●
DentaMAX дв. хл.	Латекс	○	○	●
Хирургические				
SuperMAX	Латекс	●○	●	●
SuperNURSE	Латекс	●	○	●
NG Master	Нитрил Turboflex	○	○	●
High Risk (повышенной прочности)				
UniMAX	Латекс	○	○	●
UniMAX+	Латекс	○	○	●

СТЕРИЛЬНЫЕ

Наименование	Материал			
Смотровые				
DiaMAX-S	Латекс	●	○	○
TurboMAX-S	Нитрил Turboflex	○	○	●
TurboMAX-S удлин.	Нитрил Turboflex	○	○	●
NG Start St дв. хл. с пол. пок.	Латекс	○	○	●
NG Start St од. хл.	Латекс	○	○	●
NG Start St пол. пок.	Латекс	○	○	●
DentaMAX-S дв. хл.	Латекс	○	○	●
Хирургические				
ExtraMAX	Латекс	○	●	●
NeoMAX	Неопрен	○	●	●
SteriMAX	Латекс	●	●	●
SteriNURSE	Латекс	●	○	●
NG Master St	Нитрил Turboflex	○	○	●
OrthoMAX	Латекс	○	●	●
МАКСИ	Латекс	●○	●	●

● - Есть ○ - Нет

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК


Определить свой размер диагностических или хирургических перчаток можно по таблице, измерив окружность ладони

СМОТРОВЫЕ

Выпускаются размерами:

XS S M L XL

А (мм)	<170	170-190	190-220	220-250	>250
Размер	XS	S	M	L	XL

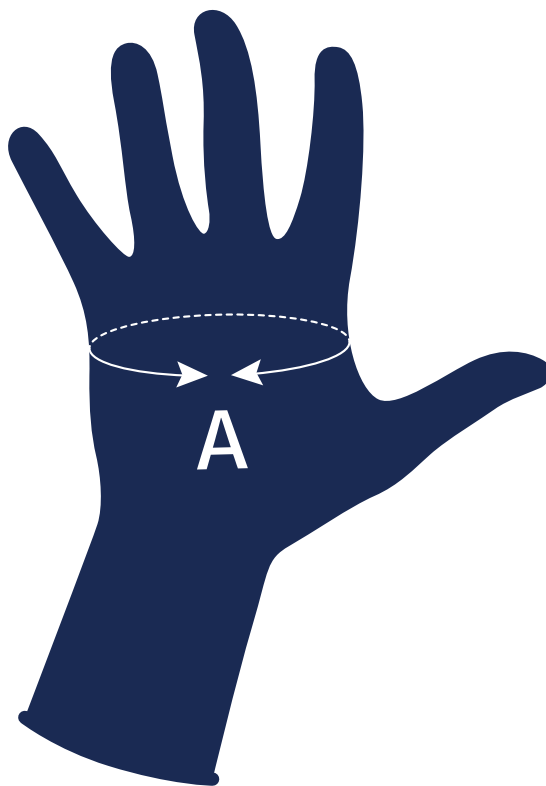

ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Выпускаются размерами:

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

А (мм)	<160	170	180	190	205	220	235	>250
Размер	5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9

СМОТРОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

DiaMAX



Длина:	250 ± 5 мм	Область применения:	медицина, ветеринария, HoReCa, в быту
Толщина:			
манжета	0,08 мм		
ладонь	0,1 мм		
пальцы	0,12 мм		
Вес:	5,3 г		
Цвет:	светло-желтый		
Упаковка:	50 пар в блоке 500 пар в трансп. упак.		
Срок годности:	5 лет		



MiniMAX



Длина:	250 ± 5 мм	Область применения:	медицина, ветеринария, HoReCa, в быту
Толщина:			
манжета	0,8 мм		
ладонь	0,1 мм		
пальцы	0,12 мм		
Вес:	4,77 г		
Цвет:	светло-желтый		
Упаковка:	50 пар в блоке 500 пар в трансп. упак.		
Срок годности:	5 лет		



СМОТРОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Start **NG**
MEDICAL



Длина: 250 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,08 мм
ладонь 0,12 мм
пальцы 0,15 мм






Вес: 5,31 г

Цвет: желтый

Упаковка: 50 пар в блоке
500 пар в тр. уп.

Срок годности: 5 лет

Представлены в вариантах:

-  ОДНОКРАТНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ
-  ДВОЙНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ
-  С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
-  С УВЛАЖНЯЮЩИМ ГЕЛЕМ АЛОЭ ВЕРА
-  ДВОЙНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Область применения:
медицина, ветеринария, HoReCa



DentaMAX



Длина: 245 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,10 мм
ладонь 0,14 мм
пальцы 0,16 мм

Вес: 6,24 г

Цвет: желтый

Упаковка: 50 пар в блоке
500 пар в тр. уп.

Срок годности: 5 лет

Характерные особенности:

-  ДВОЙНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ

Область применения:
медицина, ветеринария, HoReCa



СМОТРОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

UniMAX+



Длина: 300 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,26 мм
ладонь 0,34 мм
пальцы 0,38 мм

Вес: 18,2 г

Цвет: голубой

Упаковка: 25 пар в блоке
250 пар в тр. уп.

Срок годности: 5 лет

Характерные особенности:



Область применения:
стоматология, HoReCa,
клининговые компании, в быту



UniMAX



Длина: 295 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,16 мм
ладонь 0,22 мм
пальцы 0,26 мм

Вес: 13,15 г

Цвет: темно-синий

Упаковка: 25 пар в блоке
250 пар в трансп. упак.

Срок годности: 5 лет

Характерные особенности:



Область применения:
стоматология, HoReCa,
клининговые компании, в быту



СМОТРОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

NitriMAX




Длина:	250 ± 5 мм	Представлены в цветовых вариантах:
Толщина:		
манжета	0,08 мм	ГОЛУБОЙ
ладонь	0,12 мм	РОЗОВЫЙ
пальцы	0,14 мм	СИРЕНЕВЫЙ
		ФИОЛЕТОВЫЙ
		ЧЕРНЫЙ
Вес:	4,97 г	Область применения: стоматология, HoReCa, индустрия красоты
Упаковка:	50 пар в блоке 500 пар в тр. уп.	
Срок годности:	5 лет	



TurboMAX



	<u>стандартные</u>	<u>удлиненные</u>	Характерные особенности:
Длина:	230 ± 5 мм	305 ± 5 мм	
Толщина:			 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ Обладают высокой эластичностью. Перчатки подвергаются 7-кратному промыванию, в результате чего не вызывают раздражения кожи.
манжета	0,06 мм	0,06 мм	
ладонь	0,08 мм	0,08 мм	
пальцы	0,11 мм	0,11 мм	Область применения: стоматология, HoReCa, индустрия красоты
Вес:	3,39 г	4,46 г	
Цвет:	белый, голубой	белый	
Упаковка:	50 пар в блоке 500 пар в тр. уп.	50 пар в блоке 500 пар в тр. уп.	
Срок годности:	5 лет	5 лет	



СМОТРОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

ViniMAX

Длина:	250 ± 5 мм
Толщина:	
манжета	0,04 мм
ладонь	0,06 мм
пальцы	0,09 мм
Вес:	≈ 3,83 г
Цвет:	бесцветный, голубой
Упаковка:	50 пар в блоке 500 пар в тр. уп.
Срок годности:	5 лет

Область применения:
медицина, индустрия красоты,
пищевые производства, HoReCa



СМОТРОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Start St **NG**
MEDICAL



Длина: 250 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,08 мм
ладонь 0,12 мм
пальцы 0,15 мм

Вес: 5,31 г

Цвет: желтый

Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
40 пар в блоке
240 пар в тр. уп.

Срок годности: 3 года

Представлены в вариантах:

C1x1 ОДНОКРАТНОГО
ХЛОРИРОВАНИЯ

С ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории

DentaMAX-S



Длина: 245 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,10 мм
ладонь 0,14 мм
пальцы 0,16 мм

Вес: 6,24 г

Цвет: желтый

Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
40 пар в блоке
240 пар в тр. уп.

Срок годности: 5 лет

Характерные особенности:

C1x2 ДВОЙНОГО
ХЛОРИРОВАНИЯ

Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории



СМОТРОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

DiaMAX-S



Длина: 250 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,08 мм
ладонь 0,1 мм
пальцы 0,12 мм

Вес: 5,3 г

Цвет: светло-желтый

Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
40 пар в блоке
240 пар в тр. уп.

Срок годности: 3 года

Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории



TurboMAX-S



	<u>стандартные</u>	<u>удлиненные</u>
Длина:	230 ± 5 мм	305 ± 5 мм
Толщина:		
манжета	0,06 мм	0,06 мм
ладонь	0,08 мм	0,08 мм
пальцы	0,11 мм	0,11 мм
Вес:	3,39 г	4,46 г
Цвет:	белый	белый
Упаковка:	1 пара в гер. пак. 50 пар в блоке 300 пар в тр. уп.	1 пара в гер. пак. 50 пар в блоке 300 пар в тр. уп.
Срок годности:	3 года	3 года

Характерные особенности:



Обладают высокой эластичностью и обеспечивает комфорт.

Перчатки подвергаются 7-кратному промыванию, в результате чего не вызывают раздражения кожи.

Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

SuperMAX



Длина: 275 ± 5 мм

Толщина:

манжета	0,14 мм
ладонь	0,16 мм
пальцы	0,2 мм

Вес: 8,57 г

Цвет: светло-желтый

Упаковка: 50 пар в блоке
300 пар в тр. уп.

Срок годности: 5 лет

Представлены в вариантах:



Область применения:
медицинские учреждения, лаборатории

SuperNURSE



Длина: 295 ± 5 мм

Толщина:

манжета	0,11 мм
ладонь	0,14 мм
пальцы	0,16 мм

Вес: 7,78 г

Цвет: светло-желтый

Упаковка: 50 пар в блоке
500 пар в тр. уп.

Срок годности: 5 лет

Область применения:
медицинские учреждения, лаборатории



Master ^{NG} MEDICAL



Длина: 295 ± 5 мм

Толщина:

манжета	0,06 мм
ладонь	0,08 мм
пальцы	0,11 мм


Вес: 4,46 г

Цвет: белый

Упаковка: 50 пар в блоке
500 пар в трансп. упак.

Срок годности: 5 лет

Характерные особенности:

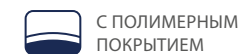

Область применения:
медицинские учреждения, лаборатории



ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

ExtraMAX



Длина: 290 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,12 мм
ладонь 0,16 мм
пальцы 0,18 мм

Вес: 7,9 г

Цвет: светло-желтый, зеленый

Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
40 пар в блоке
240 пар в тр. уп.

Срок годности: 3 года

Характерные особенности:



Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории

SteriMAX



Длина: 285 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,14 мм
ладонь 0,16 мм
пальцы 0,19 мм

Вес: 8,98 г

Цвет: светло-желтый

Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
40 пар в блоке
240 пар в трансп. упак.

Срок годности: 3 года

Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории



ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

SteriNURSE



Длина: 295 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,11 мм
ладонь 0,14 мм
пальцы 0,16 мм

Вес: 7,78 г

Цвет: светло-желтый

Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
40 пар в блоке
240 пар в трансп. упак.

Срок годности: 3 года

Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории



Master St NG MEDICAL



Длина: 295 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,06 мм
ладонь 0,08 мм
пальцы 0,11 мм

Вес: 4,46 г

Цвет: белый

Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
50 пар в блоке
300 пар в трансп. упак.

Срок годности: 3 года

Характерные особенности:



Обладают высокой эластичностью
и обеспечивает комфорт.

Перчатки подвергаются 7-кратному
промыванию, в результате чего не
вызывают раздражения кожи.

Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории



ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

МАКСИ



Длина: 400 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,16 мм
ладонь 0,22 мм
пальцы 0,24 мм

Вес: 16 г

Цвет: светло-желтый

Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
25 пар в блоке
150 пар в трансп. упак.

Срок годности: 3 года

Представлены в вариантах:



Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории

OrthoMAX



Длина: 295 ± 5 мм

Толщина:
манжета 0,22 мм
ладонь 0,28 мм
пальцы 0,3 мм


Вес: 15,6 г

Цвет: коричневый


Упаковка: 1 пара в герметич. пакете
50 пар в блоке

Срок годности: 3 года

Характерные особенности:

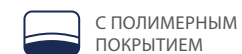

Область применения:
медицинские учреждения,
лаборатории

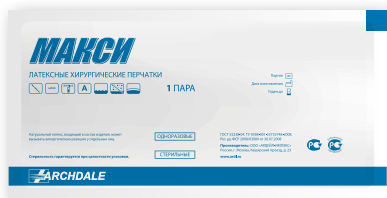

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ

NeoMAX



- Длина: 300 ± 5 мм
- Толщина:
 - манжета 0,12 мм
 - ладонь 0,2 мм
 - пальцы 0,22 мм
- Вес: 10,7 г
- Цвет: желтый, зеленый
- Упаковка:
 - 1 пара в гер. пак.
 - 40 пар в блоке
 - 240 пар в тр. уп.
- Срок годности: 3 года

Область применения:
 медицинские учреждения,
 лаборатории

