

DRENTech™ LINE

DRENTech™ DUNE

ПОЛНОСТЬЮ СУХАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

- ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
- Точный выбор аспирационной терапии с помощью механического клапана
- Поставляется с одноходовым клапаном с механическим уплотнением: вместо водоуплотняющего клапана
- Опционально можно использовать воду в качестве диагностического клапана для контроля утечки воздуха
- Диапазон выбора всасывания от -5 смH₂O до -40 смH₂O
- Окошко с красным поплавком показывает, что система работает правильно при всасывании
- Расход вакуума до 6 л/мин, гарантируется правильная работа даже при очень низком уровне вакуума
- Автоматический клапан сброса избыточного давления



REDAX™

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

- После того, как выбрана желаемая аспирационная терапия, дренажная система оснащена встроенной автоматической системой регулирования вакуума, которая устанавливает идеальный вакуумный поток.
- Благодаря этой технологии персоналу больниц больше не нужно контролировать вакуум с панели.

Скорость расхода до макс. 6 л/мин

- Удобная инструкция по настройке на передней панели

- Камера для сбора 2100 мл с точной шкалой и четкими цифрами жирным шрифтом.


- УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ для ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ

- Полностью МРТ-совместимый



Съемная трубка с полным набором принадлежностей LOCK IN-ФИКСАТОР :

непосредственно на системе улучшает взаимозаменяемость между всеми моделями и обеспечивает гибкость при настройке в операционной

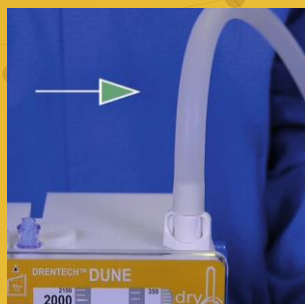

• Конструкция трубки пациента С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГИБА



• РАЗЪЕМ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ, входной разъем для ДОСТУПА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИГЛЫ



• ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С ДВОЙНОЙ ТРУБКОЙ

Вариант с двойной трубкой представляет собой 4-камерную систему с двойной трубкой для выборочного дренирования в две разные камеры для сбора (1100–1000 мл).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Трубка для новорожденных



Одноразовый колпачок-заглушка для системы



Используйте желтый колпачок, содержащийся в упаковке, чтобы закрыть одну из двух трубок после удаления плевральной дренажной трубки.

НАИМЕНОВАНИЕ

Dretech Dune

Упаковка: 4 единицы в коробке

Dretech Dune Double

Упаковка: 4 единицы в коробке

Трубка для новорожденных

Упаковка: 20 единицы в коробке

Колпачок-заглушка

Упаковка: 50 единицы в коробке

КОД

10113

10137

10564

10529



REDAX - Via Galileo Galilei, 18

46025 Poggio Rusco (MN) ITALY

Tel. +39 0386 830582 Fax +39 0386 51898

E-mail: info@redax.it - www.redax.it



www.medtehural.ru

DUNE
video tutorial

